


Panasonic[®]

Operating Instructions HD Camera Control Unit Model No. GP-UH332C

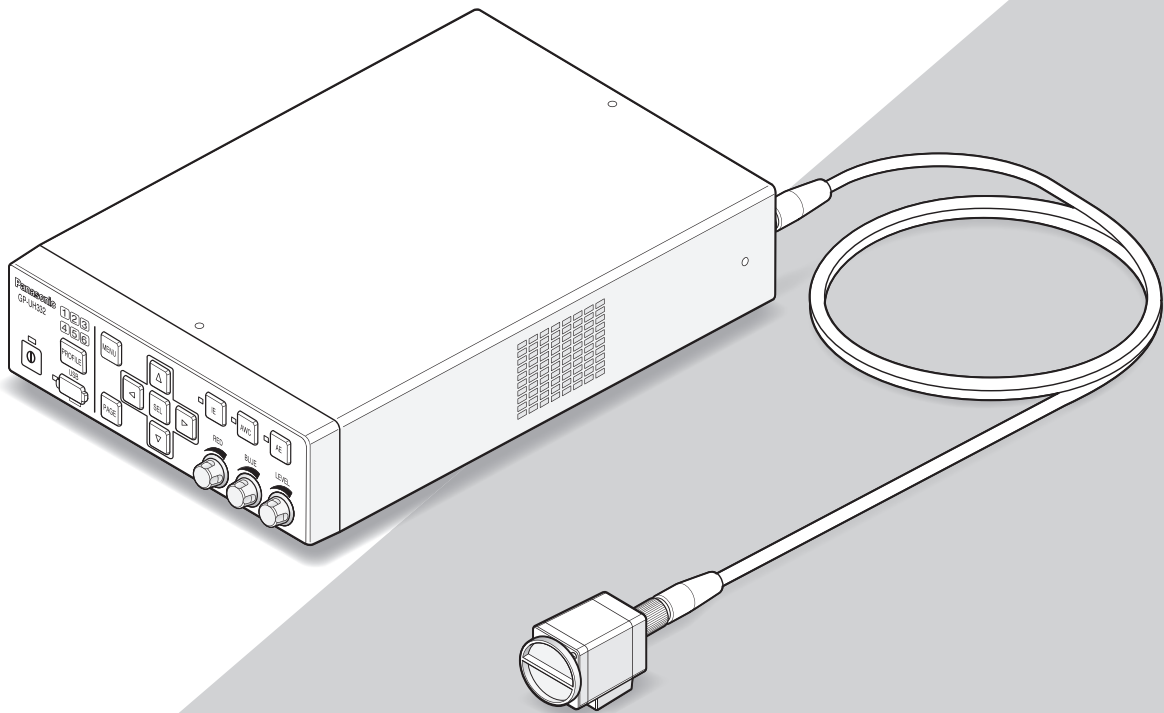

(The camera head and the camera cable are optional.)

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Before attempting to connect or operate this product,
please read these instructions carefully and save this manual for future use.

The model number is abbreviated in some descriptions in this manual.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

РУССКИЙ

日本語

ENGLISH VERSION

WARNING:

- To prevent fire or electric shock hazard, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- The installation shall be carried out in accordance with all applicable installation rules.
- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference.
- All work related to the installation of this product should be made by qualified service personnel or system installers.

CAUTION:

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Power disconnection. Unit with or without ON-OFF switches have power supplied to the unit whenever the power cord is inserted into the power source; however, the unit is operational only when the ON-OFF switch is in the ON position. Unplug the power cord to disconnect the main power for all units.

For U.S.A.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: To assure continued compliance, (example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

For U.S.A.

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

For U.S.A.

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

For U.S.A.

The model number and serial number of this product may be found on the surface of the unit. You should note the model number and serial number of this unit in the space provided and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No. _____

Serial No. _____

For Canada

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

For Europe

We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with the standard or other normative document following the provisions of Directive 2004/108/EC.

Wij verklaren als enige aansprakelijke, dat het product waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende norm of ander normatief document, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2004/108/EC.

Vi erklærer os eneansvarlige for, at dette produkt, som denne deklaration omhandler, er i overensstemmelse med standard eller andre normative dokumenter i følge bestemmelserne i direktiv 2004/108/EC.

Vi deklarerar härmed vårt fulla ansvar för att den produkt till vilken denna deklaration hänvisar är i överensstämmelse med standarddokument eller annat normativt dokument som framställs i direktiv 2004/108/EC.

Ilmoitamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote, jota tämä ilmoitus koskee, noudattaa seuraavaa standardia tai muuta ohjeellista asiakirjaa, jotka noudattavat direktiivin 2004/108/EC säädöksiä.

Vi erklærer oss alene ansvarlige for at produktet som denne erklæringen gjelder for, er i overensstemmelse med følgende norm eller andre normgivende dokumenter som følger bestemmelsene i direktiv 2004/108/EC.



A lithium ion/polymer battery that is recyclable powers the product you have purchased. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.

EMC for using this product in the medical environment

- The description of GP-UH332 represents the camera system using GP-UH332C and GP-UH332H.

WARNING

- Usage of accessories or cables that are not specified in this document may increase electromagnetic radiation to be emitted from GP-UH332 or deteriorate the immunity to the electromagnetic interference.
- If using GP-UH332 by installing next to or stacking on other device, make sure that the CCU works normally in the system.

CAUTION

- To dispose of this product, it is required to comply with the local or national legislation and related hospital policies.

| Policy and declaration by manufacturer - Electromagnetic emission | | |
|--|------------------|--|
| GP-UH332 is intended to be used in the electromagnetic environment specified below. Ensure that this product is used in the following environment. | | |
| Emission test | Compatible level | Electromagnetic environment - Policy |
| Conductive emission of radio frequency CSPR 11 | Group 1 | GP-UH332 uses radio frequency energy for internal functions. Therefore, radio frequency emission is considerably low, and it will not interfere with electronic devices placed nearby. Due to the emission characteristics of GP-UH332, it is suitable for use in the industrial area and hospitals. If this product is to be used in the residential district, it may require taking some measures, relocation of the product for example, since the protection for the radio frequency communication device may not be sufficiently provided in the residential district. |
| Conductive emission of radio frequency CSPR 11 | Class A | |
| Harmonic current emissions IEC 61000-3-2 | Class A | |
| Voltage variation, voltage fluctuations and flicker emission IEC 61000-3-3 | Clause 5 | |

Use the following AC Adapter:

Manufacturer: Sinpro Electronics Co., Ltd.

Part No.: MPU60A-105-P49L10*

Policy and declaration by manufacturer - Electromagnetic emission


GP-UH332 is intended to be used in the electromagnetic environment specified below.
Ensure that this product is used in the following environment.

| Immunity test | IEC 60601 Test level | Compatible level | Electromagnetic environment - Policy |
|--|---|---|--|
| Electrostatic discharge (ESD) immunity IEC 61000-4-2 | ±6 kV, Contact ±8 kV, Air | ±6 kV, Contact ±8 kV, Air | The floor material should be wood, concrete, or ceramic tiles. If the floor material is covered by a synthetic substance, it is provided that the relative humidity is 30 % or more. |
| Power cable/signal cable fast transient Burst immunity IEC 61000-4-4 | ±2 kV for AC power ±1 kV for Signal line | ±2 kV for AC power ±1 kV for Signal line | Use typical, commercially available power or dedicated one for hospital environment. |
| Surge immunity IEC 61000-4-5 | ±1 kV, line to line ±2 kV, line to earth | ±1 kV, line to line ±2 kV, line to earth | Use typical, commercially available power or dedicated one for hospital environment. |
| Immunity to voltage dips/ short interruptions/ voltage fluctuation IEC 61000-4-11 | < 5 % U_T (> 95 % Dip, At U_T) Within 0.5 cycles 40 % U_T (60 % Dip, At U_T) Within 5 cycles 70 % U_T (30 % Dip, At U_T) Within 25 cycles < 5 % U_T (> 95 % Dip, At U_T) 5 seconds | < 5 % U_T (> 95 % Dip, At U_T) Within 0.5 cycles 40 % U_T (60 % Dip, At U_T) Within 5 cycles 70 % U_T (30 % Dip, At U_T) Within 25 cycles < 5 % U_T (> 95 % Dip, At U_T) 5 seconds | Use typical, commercially available power or dedicated one for hospital environment. If using GP-UH332 during power failure, it is recommended to use a uninterruptible power system or batteries to supply power to GP-UH332. |
| Immunity to power frequency magnetic field IEC 61000-4-8 | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | The power frequency magnetic field should maintain the characteristic level measured at a typical, commercially available or hospital environment. |

Note: U_T represents AC power supply voltage before applying the test level.

Policy and declaration by manufacturer - Electromagnetic emission

GP-UH332 is intended to be used in the electromagnetic environment specified below.
Ensure that this product is used in the following environment.

| Immunity test | IEC 60601 Test level | Compatible level | Electromagnetic environment - Policy |
|--|--|-------------------------------|---|
| Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) 150 kHz to 80 MHz | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) | Do not use a portable or mobile type wireless communication device under the condition where the recommended separation distance between any component of GP-UH332 including cables is not ensured. The distance should be calculated based on the formula corresponding to each frequency of the device. Recommended separation distance $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz |
| Immunity to radiated, radio-frequency, electromagnetic field IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) 80 MHz to 2.5 GHz | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) | P represents the rated maximum output of the transmission device and watt (W) is used as a unit. For the separation distance, d meter (m) is used. The strength of the electromagnetic field of the fixed radio frequency device shall be determined by the local inspection*1. However, it should fall below the compatibility in each range of radio frequency*2. Interference may occur in the vicinity of the device with the following symbol.  |

Note 1: In 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range will be applied.

Note 2: The above policy may not be applied to all the cases.


Absorption by buildings, objects, and human body, or reflection affects the propagation of electromagnetic power.

*1 The strength of the electromagnetic field of the fixed radio transmitter, including the ones from wireless telephone base station, land mobile station, amateur radio, AM/FM radio broadcast, and TV broadcast, cannot be correctly assumed. In order to evaluate the electromagnetic environment in relation to the fixed radio transmitter, it is necessary to conduct a local inspection. Check for the normal operation of GP-UH332, if the measured electromagnetic strength for GP-UH332 exceeds the above described compatible level. If any abnormal behavior is observed, relocation of GP-UH332 or other relieving measures is required.

*2 In the frequency range of 150 kHz to 80 MHz, the field strength shall be less than 3 V/m.

Specifications concerning safety in medical environment

- The operational mode is “Continuous operation”.
- Note that this product is CLASS I rated when using with the AC adapter.
- To avoid danger of electric shock, connect this product only to a power source (commercial) equipped with a protective grounding.
- Since all peripheral devices connected to the signal input part or the signal output part are constituted as a medical system, liability and responsibility to make the whole system to fulfill the standards required of IEC60601-1 Clause 16 shall arise. Do not simultaneously touch any of these connectors and a patient.
- Contact your dealer, installer or customer support described in Operating Instructions for installation.
- Do not install this product in a place where it is difficult to pull out the power cord.
- Use “Hospital Grad” mains plug and POWER SUPPLY CORD for compliant with ANSI/AAMI ES60601-1 (for United States)/ CAN/CSA-C22.2 No.60601-1 (for Canada).
- Under some SINGLE FAULT CONDITIONS, the temperate of right side of the CCU enclosure could get hot and there is a possible RISK of a burn if touched.
- When this product has been used for many years, there is possibility that some parts may be deteriorated ,that can cause a malfunction or lead to an accident, depending on the use environment even though there is no defective part in appearance. Check daily if there is any of the following.

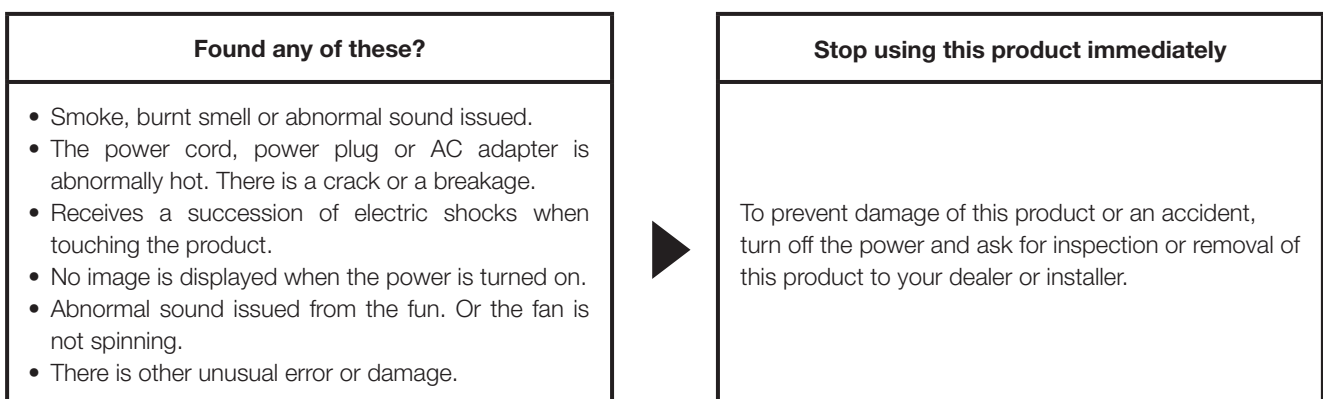

| Descriptions of graphic symbols | |
|---------------------------------|---|
| | This symbol indicates ON/OFF of the power. The ON/OFF state is fixed. |
| | This symbol indicates the equipotential terminal to be used to make each part of the system equipotential. |
| | This symbol indicates an alternating current (AC). |
| | This symbol indicates a direct current (DC). |
| | This symbol indicates a warning symbol could get hot and there is a possible RISK of a burn if touched. |
| | This symbol indicates a UL certification mark in the United States. |
| | This symbol indicates a mandatory conformity marking in the European Economic Area (EEA). |
| | This symbol indicates a waste electrical and electronic equipment (WEEE) marking in the European Economic Area (EEA). |

- Options

3MOS HD Camera Head : GP-UH332H

UHD camera cable : GP-UC532G03 (3 m {9.8 feet})

GP-UC532G06 (6 m {19.7 feet})

GP-UC532G15 (15 m {49.3 feet})

GP-UC532G03A (3 m {9.8 feet}) (Scheduled to be released soon / As of August, 2017)

GP-UC532G06A (6 m {19.7 feet}) (Scheduled to be released soon / As of August, 2017)

GP-UC532G15A (15 m {49.3 feet}) (Scheduled to be released soon / As of August, 2017)

AC Adapter : MPU60A-105-P49L10*

(Sinpro Electronics Co., Ltd.)

Contents

| | |
|--|----|
| EMC for using this product in the medical environment | 3 |
| Specifications concerning safety in medical environment | 6 |
| Important safety instructions | 10 |
| Limitation of liability | 11 |
| Disclaimer of warranty | 11 |
| Preface | 12 |
| Intended Use | 12 |
| Trademarks and registered trademarks | 12 |
| Precautions | 13 |
| Major operating controls and their functions | 15 |
| Camera head (Option) | 15 |
| Camera control unit (CCU) | 16 |
| System configuration | 20 |
| Precautions for installation | 21 |
| How to install | 22 |
| How to mount lens | 23 |
| Setup through the SETUP Menu | 24 |
| SETUP menus | 24 |
| How to display the menu | 26 |
| Basic operation | 27 |
| Restore default | 28 |
| MAINTENANCE MENU | 29 |
| Set up profile | 30 |
| EXPOSURE | 30 |
| ① Set up AE [AE] | 30 |
| ② Set electronic shutter [SHUTTER] | 30 |
| ③ Set up pixel adding [BINNING] | 31 |
| ④ Adjust gain [GAIN] | 31 |
| ⑤ Set the long exposure [LONG EXPOSURE] | 31 |
| ⑥ Set brightness detection area [AREA SELECTION] | 32 |
| ⑦ Set the brightness detection weighting [PEAK/AVE LEVEL] | 33 |
| ⑧ Set head gain [HEAD GAIN] | 33 |
| PICTURE | 33 |
| ⑨ Set white balance [WHITE BAL MODE] | 33 |
| ⑩ Set details [DETAIL BAND] | 34 |
| ⑪ Set digital noise reduction function [DNR LEVEL] | 34 |
| ⑫ Adjust the pedestal level [PEDESTAL LEVEL] | 34 |
| ⑬ Set the flare compensation [FLARE COMP] | 34 |
| ⑭ Adjust the color level [COLOR LEVEL] | 34 |
| ⑮ Adjust the hue [COLOR MATRIX] | 34 |
| CONTRAST | 36 |
| ⑯ Set the gamma correction mode [GAMMA SELECT] | 36 |
| ⑰ Set the gamma correction level [GAMMA VALUE] | 36 |
| ⑱ Set the knee mode [KNEE MODE] | 36 |
| ⑲ Set up the knee point [KNEE POINT] | 36 |
| ⑳ Set the knee slope [KNEE SLOPE] | 36 |
| ㉑ Set the [IE] button [IE FUNCTION SELECT] | 36 |
| ㉒ Set the correction level assigned to the [IE] button [IE FUNCTION LEVEL] | 37 |
| PROFILE | 37 |
| ㉓ Set the user profile ID and label [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL] | 37 |
| ㉔ Set the additional setting for each fluorescent image capture mode [FLUORESCENCE MODE] | 38 |

| | |
|--|----|
| FUNC | 38 |
| ②5 Set the vertical and horizontal flip function [FLIP AND MIRROR] | 38 |
| ②6 Set the display for vertical and horizontal flip status [F+M STATUS DISPLAY]..... | 39 |
| ②7 Display the color bar [COLOR BAR]..... | 39 |
| ②8 Set the foot switches [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]..... | 39 |
| ②9 Save/Load profiles [USER PROFILE SAVE/LOAD]..... | 39 |
| ③0 Set the method of saving to/loading from USB memory [SAVE/LOAD MODE (USB)]..... | 40 |
| ③1 Set the zoom on and off [DIGITAL ZOOM] | 40 |
| ③2 Set the zoom ratio display [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY] | 40 |
| SYSTEM..... | 40 |
| ③3 Set the OSD position of the video output [OSD POSITION] | 40 |
| ③4 Set HDMI output signal [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH] | 40 |
| ③5 Set the synchronizing signal input/output connector [G/L SYNC TERMINAL SETTING] | 40 |
| ③6 Display synchronization state [G/L SYNC STATUS INFO]..... | 41 |
| ③7 Adjust the clock [TIME ADJUSTMENT]..... | 41 |
| ③8 Restore the profile default setting [USER PROFILE RESET]..... | 41 |
| HEAD | 42 |
| ③9 Set the white shading [WHITE SHADING]..... | 42 |
| ④0 Adjust horizontal/vertical position of the screen [H/V PHASE ADJUST]..... | 42 |
| Troubleshooting..... | 43 |
| Specifications | 44 |
| Standard accessories..... | 45 |
| Optional accessories..... | 45 |

Important safety instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Limitation of liability

THIS PUBLICATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT OF THE THIRD PARTY'S RIGHT.

THIS PUBLICATION COULD INCLUDE TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. CHANGES ARE ADDED TO THE INFORMATION HEREIN, AT ANY TIME, FOR THE IMPROVEMENTS OF THIS PUBLICATION AND/OR THE CORRESPONDING PRODUCT (S).

Disclaimer of warranty

IN NO EVENT SHALL Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. BE LIABLE TO ANY PARTY OR ANY PERSON, EXCEPT FOR REPLACEMENT OR REASONABLE MAINTENANCE OF THE PRODUCT, FOR THE CASES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BELOW:

- (1) ANY LOSS OR DAMAGE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DIRECT OR INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY, ARISING OUT OF OR RELATING TO THE PRODUCT;
- (2) ANY INCONVENIENCE, LOSS, OR DAMAGE CAUSED BY INAPPROPRIATE USE OR NEGLIGENT OPERATION OF THE USER;
- (3) UNAUTHORIZED DISASSEMBLE, REPAIR OR MODIFICATION OF THE PRODUCT BY THE USER;
- (4) INCONVENIENCE OR ANY LOSS ARISING WHEN IMAGES ARE NOT DISPLAYED, DUE TO ANY REASON OR CAUSE INCLUDING ANY FAILURE OR PROBLEM OF THE PRODUCT;
- (5) ANY PROBLEM, CONSEQUENTIAL INCONVENIENCE, OR LOSS OR DAMAGE, ARISING OUT OF THE SYSTEM COMBINED BY THE DEVICES OF THIRD PARTY;
- (6) ANY CLAIM OR ACTION FOR DAMAGES, BROUGHT BY ANY PERSON OR ORGANIZATION BEING A PHOTOGENIC SUBJECT, DUE TO VIOLATION OF PRIVACY WITH THE RESULT OF THAT SURVEILLANCE-CAMERA'S PICTURE, INCLUDING SAVED DATA, FOR SOME REASON, BECOMES PUBLIC OR IS USED FOR ANY PURPOSE.

Preface

This system is a compact and light type HD camera control unit (hereafter called CCU), where the camera head is separately mounted, equipped with high image quality and multiple functions introducing digital signal processing.

- GP-UH332C HD Camera Control Unit

This product is used in combination with the optional 3MOS HD Camera Head (hereafter called camera head).

- GP-UH332H 3MOS HD Camera Head
- The multi-format output supporting 1080p, and 1080i is available.
- Signal transmission without signal degradation has been achieved thanks to the HDMI or SDI output connectors.
- The WDR (Wide Dynamic Range) function allows users to shoot even images with a wide range of brightness contrast and facilitate their visibility.

The descriptions in this book are predicated on a system with the camera head.

Intended Use

Panasonic HD head separate type camera GP-UH332 series has acquired high resolution of Full HD (1920×1080), smooth moving picture supporting 60P, and high color reproduction, intended for use as surgical microscopes or slit lamps. This product is not designed to be used for the endoscopy system which could be contacted with patients. It is also not designed to be used for the medical products that its failure may lead to damage to human or loss of life or serious property damage.

This product is compliant with the standards for medical electrical equipment IEC60601-1 and IEC60601-1-2.

For local medical registration information please contact your local Panasonic supplier.

Trademarks and registered trademarks

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
- Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- All other trademarks identified herein are the property of their respective owners.

Precautions

Refer installation work to the dealer.

Installation work requires technique and experiences. Failure to observe this may cause fire, electric shock, injury, or damage to the product.

Be sure to consult the dealer.

Wire properly.

Short circuit or wrong wiring may cause fire or electric shock.

Select an installation area that can support the total weight.

Selecting an inappropriate installation surface may cause the product to fall down or topple over, resulting in injury.

Installation work shall be started after sufficient reinforcement.

Periodic inspections shall be conducted.

Rust on the metal parts or screws may cause a fall of the product resulting in injury or accidents.

Consult the dealer for the inspections.

Turn the power off when cleaning this product.

Failure to observe this may cause an electric shock.

Stop the operation immediately when something is wrong with this product.

When smoke goes up from the product, the smell of smoke comes from the product, or deterioration of the exterior of this product is noticed, continued use will result in fire, injury, or damage to the product.

Turn off the power of this product immediately, and then contact your dealer.

Do not engage in work related to the installation and wiring during the power is on.

Failure to observe this may cause fire or electric shock.

Do not use this product in an inflammable atmosphere.

Failure to observe this may cause an explosion resulting in injury.

Avoid installing this product in the locations where salt damage occurs or corrosive gas is produced.

Failure to observe this may cause deterioration of the mounting portions, and accidents such as a fall of this product may occur.

Do not strike or give a strong shock to this product.

Failure to observe this may cause fire or injury.

Do not insert any foreign objects.

Do not allow any foreign object or liquid such as water, a metallic part, etc. to enter since it may cause fire or electric shock.

If it happens, disconnect the power plug from the electric outlet immediately and contact your dealer.

Do not disassemble nor alter this product.

Failure to observe this may cause fire or electric shock.

Ask your dealer for inspection and repair.

Under the lightning (or during construction work), do not touch this product, power cord, or connected cables.

Failure to observe this may cause an electric shock.

Avoid placing receptacles that contain liquids such as water near this product.

If liquid spills onto this product, it may cause fire or an electric shock.

If it happens, disconnect the power plug from the electric outlet immediately and contact your dealer.

Do not rub the edges of metal parts with your hand.

Failure to observe this may cause injury.

[Precautions for use]

To keep on using with stable performance

Parts of this product may deteriorate and it may shorten the lifetime of this product when using in locations subject to high temperatures and high humidity.


Use this product at temperatures between 0 °C to 40 °C {32 °F to 104 °F}. Failure to observe this may adversely affect the components inside or cause this product to malfunction. Use of this product at temperatures of 30 °C {86 °F} or lower is recommended without direct heat from heaters in consideration of heat release at the product location.

Handle this product with care.

Do not drop this product, nor apply shock or vibration to the product. Failure to observe this may cause trouble.

Do not aim this product at strong light sources.

A light source such as a spot light may cause a blooming (light bleeding).

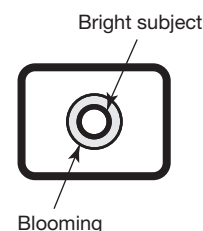

Built-in batteries

Batteries are installed in this product.

Do not leave the batteries in an environment where excessive heat may be generated by sunlight or fire.

Cooling fan alarm

When the cooling fan alarm message is displayed, immediately turn off the power and contact your dealer.

Cleaning

- Turn the power off, and then use a soft cloth to clean this product.
When dust is hard to remove, use a soft cloth that was soaked in diluted detergent and squeezed hard to wipe it.
Then, wipe off the remaining detergent with a dry cloth.
- Do not use strong or abrasive detergents when cleaning the body. Ethanol or isopropyl alcohol can be used for the camera head and CCU. However, they cannot be used for the camera cable.
- When using a chemical cloth for cleaning, read the caution provided with the chemical cloth product.

Indication label

Refer to the indication label on the bottom or top of this product for the equipment classification and power source, etc.


USB memory

- Use the USB memory compatible with USB2.0.
- In order to maintain high-speed reading/writing, perform "ScanDisk" or "CheckDisk" with the PC with the Microsoft® Windows® OS.
- FAT32 is supported. Use a USB memory whose volume is 32 GB or less. A USB with encrypted format is not supported.
- The USB memory cannot be formatted with CCU.

This product is designed for normal uses as a general electronic equipment.
Using the product for special purposes (such as traffic, transportation and medical treatment) without taking the necessary procedures according to the regulations relating to one's country or field on one's own responsibility may be prohibited.

Major operating controls and their functions

Camera head (Option)

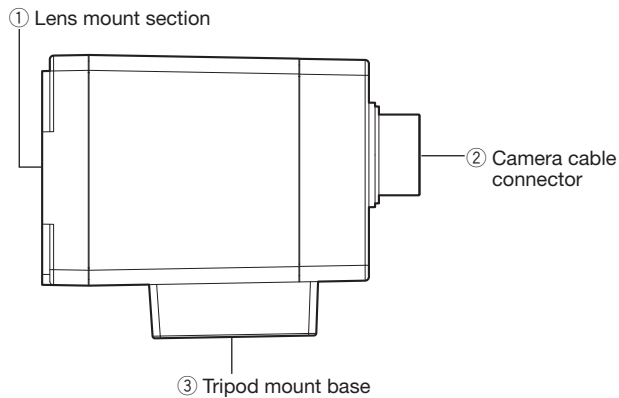

Important:

- Be sure to turn off the power of the CCU before connecting or disconnecting the camera cable.
 - Avoid bending excessively or breaking the camera cable.
 - Use the specific-camera head only.
-

① Lens mount section

A C-mount lens is mounted on this section.

( Page 23)

② Camera cable connector

Connector for the camera cable (option)

<Camera Cable>

GP-UC532G03 (3 m {9.8 feet})

GP-UC532G06 (6 m {19.7 feet})

GP-UC532G15 (15 m {49.3 feet})

GP-UC532G03A (3 m {9.8 feet}) (Scheduled to be released soon / As of August, 2017)

GP-UC532G06A (6 m {19.7 feet}) (Scheduled to be released soon / As of August, 2017)

GP-UC532G15A (15 m {49.3 feet}) (Scheduled to be released soon / As of August, 2017)


③ Tripod mount base

The tripod socket hole is used when the camera head is secured to the tripod.

Tripod socket hole: 1/4-20 UNC

Camera control unit (CCU)


<Front>

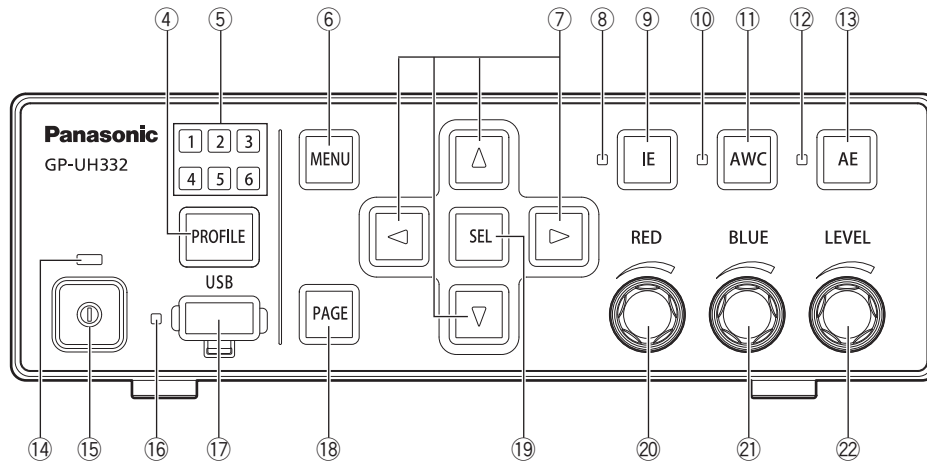

- ④ **Profile selection button [PROFILE]**
Selects a profile from 1 to 6. Each profile should be set up beforehand using the SETUP menu (☞ page 30).
- ⑤ **Profile selection lamp [1/2/3/4/5/6] (Green)**
The selected profile number will be lit in green.
- ⑥ **Menu button [MENU]**
When the button is pressed for more than 1 second, the SETUP menu (ADVANCED MENU) will be displayed. An upper layer of the MENU will be displayed when the button is pressed while the SETUP menu is displayed. The SETUP menu can be hidden by pressing the button for more than 1 second.
Pressing this button except while the SETUP menu is displayed, the screen freeze function will be activated.
- ⑦ **Up/Down/Right/Left buttons [Δ / ∇ / \triangleleft / \triangleright]**
- **Up button [Δ]/Down button [∇]**
Changes the target setting item while the SETUP menu is displayed.
When it is pressed while other than the SETUP menu is displayed, the setting of the “FLIP AND MIRROR” will be switched. (☞ page 38)
 - **Right button [\triangleright]/Left button [\triangleleft]**
Moves the cursor, or changes the content of setting item while the SETUP menu is displayed.
When it is pressed while other than the SETUP menu is displayed, the zoom ratio of the “DIGITAL ZOOM” will be switched. (☞ page 40)
- ⑧ **IE status lamp (Green)**
Indicates the On/Off status of the IE (IMAGE ENHANCEMENT) function.
On: IE function is enabled.
Off: IE function is disabled.
- ⑨ **IE button [IE]**
Switches On/Off of the IE function.
- ⑩ **AWC status lamp (Orange)**
Indicates the status of the AWC (Automatic White balance Control) function.
Off: AWC is deactivated.
Blink: AWC is activated or running.
Blink → Off: AWC success
On: AWC error
- ⑪ **AWC button [AWC]**
If “WHITE BAL MODE” in the SETUP menu is set to “AWC”, AWC will be started up when the button is pressed while the camera images are being displayed.
-
- Important:**
- When the camera head is not connected, the [AWC] button does not function.
-
- ⑫ **AE status lamp (Green)**
Indicates the Auto/Manual mode status of the AE (Automatic Exposure) function.
On: Auto exposure
Off: Manual exposure
- ⑬ **AE button [AE]**
Switches the Auto/Manual mode of the AE function.
- ⑭ **Power status lamp (Green)**
Indicates the On/Off status of the power.
On: Power ON
Off: Power OFF
- ⑮ **Power switch [Switch mark]**
Turns the power of the CCU and camera head on and off.
- ⑯ **USB status lamp (Green)**
Indicates the status of USB.
Blink: Data access
On: Mount
Off: Unmount

- ⑰ **USB connector [USB]**
By inserting the USB memory, SAVE/LOAD of the profile can be performed.
- ⑱ **Page button [PAGE]**
Switches the page while the SETUP menu is displayed. The QUICK MENU will be displayed when the button is pressed while other than SETUP menu is displayed.
- ⑲ **Selection button [SEL]**
Determines the settings while the SETUP menu is displayed.
When the button is pressed while other than SETUP menu is displayed, "SETTING INFORMATION" window will be displayed. When it is pressed once again, the camera images will be restored.
In the "SETTING INFORMATION" window, settings of "IE FUNCTION SELECT", "FOOTSW CONTROL CH1/CH2", "SAVE/LOAD MODE (USB)", and "VIDEO FORMAT (HDMI1/HDMI2/SDI1/SDI5)" are displayed.
- ⑳ **Red volume [RED]**
Adjusts the offset over RED gain of the white balance. The selected item will be changed if the volume is turned while the SETUP menu is displayed.
- ㉑ **Blue volume [BLUE]**
Adjusts the offset over BLUE gain of the white balance.
- ㉒ **Level volume [LEVEL]**
Adjusts the brightness level.
Moves the cursor, or change the content of the selected item while the SETUP menu is displayed.

<Rear panel>

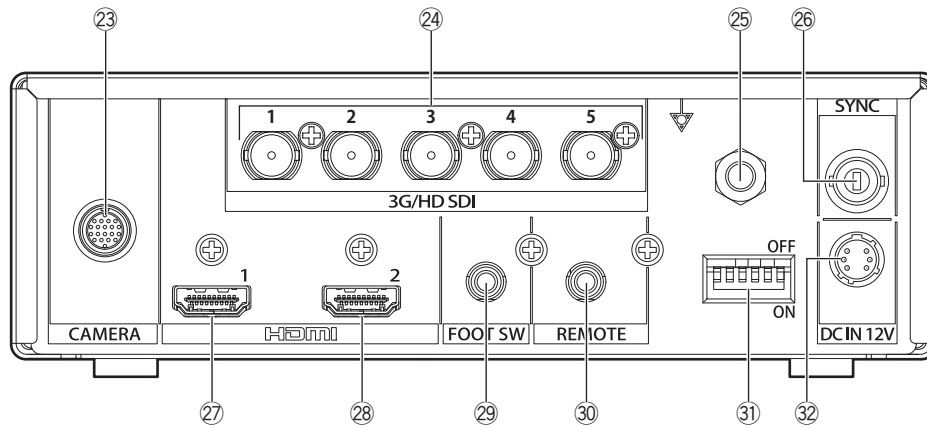

23 **Camera cable connector [CAMERA]**
Connector for the camera cable (option). (Page 45)

24 **SDI output connectors [3G/HD SDI 1/2/3/4/5]**
Connector for 3G-SDI or HD-SDI signal output.

Important:

- Use a high quality cable compatible with 3G-SDI or HD-SDI.

25 **Potential equalization connector [Potential mark]**
Connector for grounding the potential equalization.

26 **Synchronizing signal input/output connector [SYNC]**
Connector for input or output of external synchronizing signal.

27 **HDMI output connector [HDMI 1]**
Used to connect a monitor equipped with an HDMI function.

28 **HDMI output connector [HDMI 2]**
Used to connect a monitor equipped with an HDMI function.


Important:

- It is recommended to use the Panasonic HDMI cables (option).
- Use a monitor on which HDMI logo mark is displayed.

29 **Foot switch connector [FOOT SW]**
Connector for a foot switch.
(ø3.5 stereo mini jack)



30 **Remote connector [REMOTE]**
Connector for the external control.
(ø3.5 stereo mini jack)

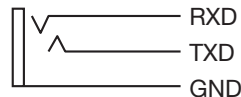

31 **Function setup switches**
Each sets up video output functions.
Switch 1 selects frame frequency of 59.94 Hz/50 Hz.

| Switch | | | | | | SDI output | HDMI output |
|--------|---|---|---|---|---|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ON | - | - | - | - | - | 59.94 Hz | 59.94 Hz |
| OFF | - | - | - | - | - | 50 Hz | 50 Hz |

Switch 2 to 6 selects a video format for SDI output connector and HDMI output connector.

| Switch | | | | | | SDI output | HDMI output |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| *1 | - | ON | ON | OFF | OFF | 1080p | 1080p |
| | - | OFF | OFF | OFF | OFF | 1080i | 1080i |

If other than the above is selected, the format indicated with *1 will be output.

Important:

- Make sure to switch the function setup switch while the power is turned off.

③ **12 V DC power connector [DC IN 12V]**


Connector for the external DC power more than 12 V DC (4 A or more).

Compatible connector (As of August, 2017)

: HR10A-7P-6S(73)


manufactured by HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

**Pin array of the
compatible connector**

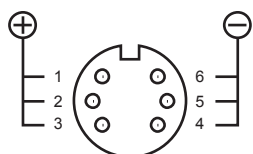

(Connector of the cable)

System configuration

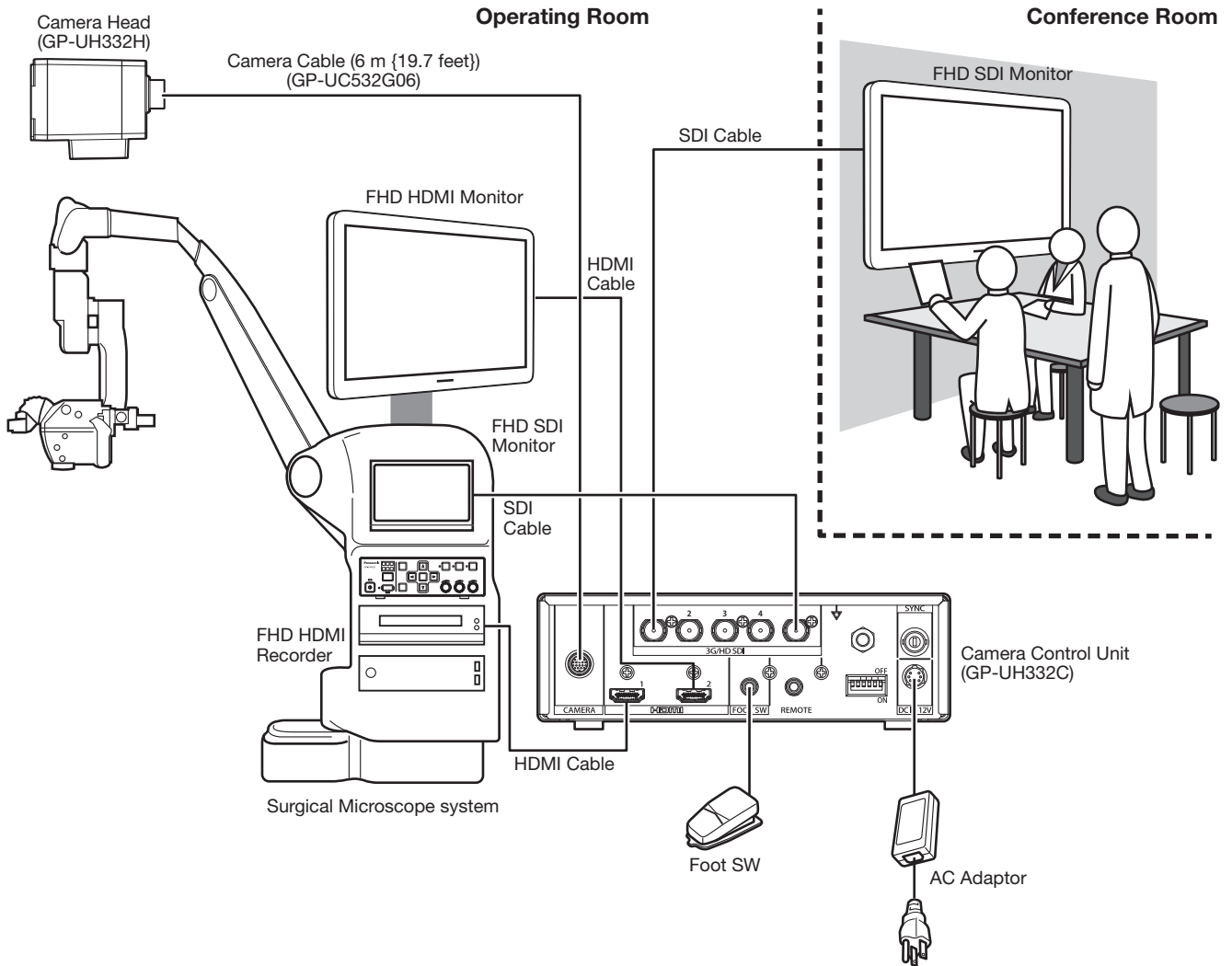

HDMI Cable:

Please use the HDMI cable which HDMI logo is displayed. (Panasonic HDMI cable is recommended.)

SDI Cable:

Please use the SDI cable which supports 3G-SDI and HD-SDI.

Precautions for installation

Cautions:

- ONLY CONNECT 12 V DC CLASS 2 POWER SUPPLY (UL 1310/CSA 223) or LIMITED POWER SOURCE (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

The installation should comply with local electrical code.

This product is designed to be used indoors.

This product is not operable outdoors.

Do not expose this product to direct sunlight for hours and do not install the product near a heater or an air conditioner. It may cause a drop or malfunction. Keep this product away from water and moisture.

Procure a tripod separately.

The tripod to mount the camera head is not supplied. Prepare it according to the area where the camera is to be installed.

Keep the CCU at least 10 cm away from the surrounding wall.

If the CCU is installed contacting the wall, heat release is blocked and it may result in malfunction.

Avoid moist or dusty places to install this system.

Otherwise, lifetime of the internal parts may be shortened.

Avoid installing or using this system in the following locations:

- Locations where it may get wet from rain or water splash
- Locations where a chemical agent is used such as a swimming pool
- Locations subject to humidity, dust, steam and oil smoke
- Locations where a radiation, an X-ray, a strong radio wave or a strong magnetic field is generated
- Locations where corrosive gas is produced
- Locations where the temperature is not within 0 °C to 40 °C {32 °F to 104 °F}
- Locations subject to vibrations (This product is not designed for on-vehicle use.)
- Locations where the temperature may rapidly change such as the peripheral areas of the air outlets of air conditioners or doors facing outside

Radio interference


Images may be distorted near a transmitting antenna for TV or radio broadcasting signals or electric or magnetic fields (for example, caused by a motor and a transformer).

Be sure to remove this product if it is not in use.

How to install

The following shows how to mount the camera on the tripod (locally procured).

<Sample of camera mounting on tripod>

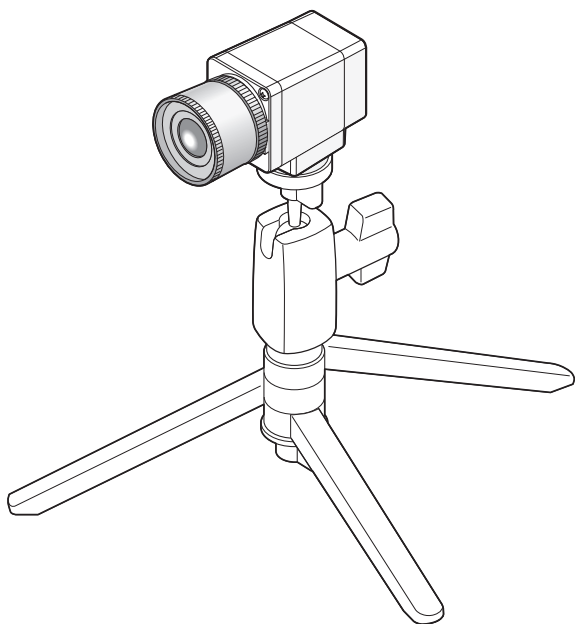


Important:

- The tripod and CCU shall be horizontally placed.
 - The CCU shall be horizontally placed. Do not place the unit in an upright or tilted position.
-

How to mount lens


Important:

- A lens whose projection length of the lens mount section is 4 mm {5/32 inches} or less shall be used.
- The recommended lens aperture ranges from F4.0 to F16. Selection of less than F4.0 of the lens aperture may result in image blurring.
- When a zoom lens is used, focus adjustment method varies with the lens. For further information, refer to the operating instructions for the lens to be used.
- When the lens is removed, be sure to put the cap on the lens mount section of the camera head.

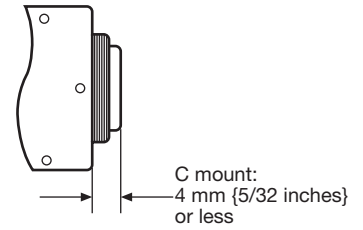


Step 1

Remove the cap from the lens mount section of the camera head.

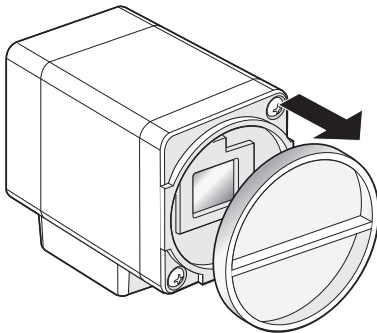

Step 2

Turn a C-mount lens clockwise to engage the lens with the lens mount section.

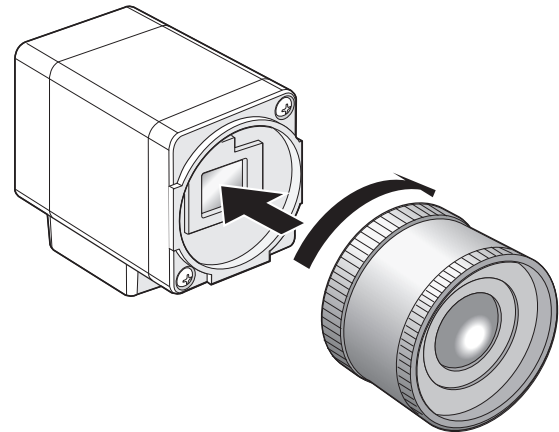

Important:

- Check to see whether the surface of the optical filter is clean before mounting a lens. If the surface is dirty, use a blower brush for general camera to remove dust.

Supported lenses (reference/as of August, 2017)

| Manufacturer | Product name | Model |
|--------------|-----------------------|--|
| FUJIFILM | 3CCD/CMOS Camera Lens | TF2.8DA-8 TF4DA-8 TF8DA-8B TF15DA-8 |

Setup through the SETUP Menu


Set up each item in the SETUP menu in advance to use this unit. Perform the settings in accordance with the conditions of the camera shooting area.

Note:

- In addition to the SETUP menu, this system has a simplified menu (QUICK menu) that is displayed using the [PAGE] button on the front of the CCU. Refer to page 27 for further information about the QUICK menu.

SETUP menus

The setup menus consist of three menus, "QUICK MENU", "ADVANCED MENU", and "MAINTENANCE MENU".

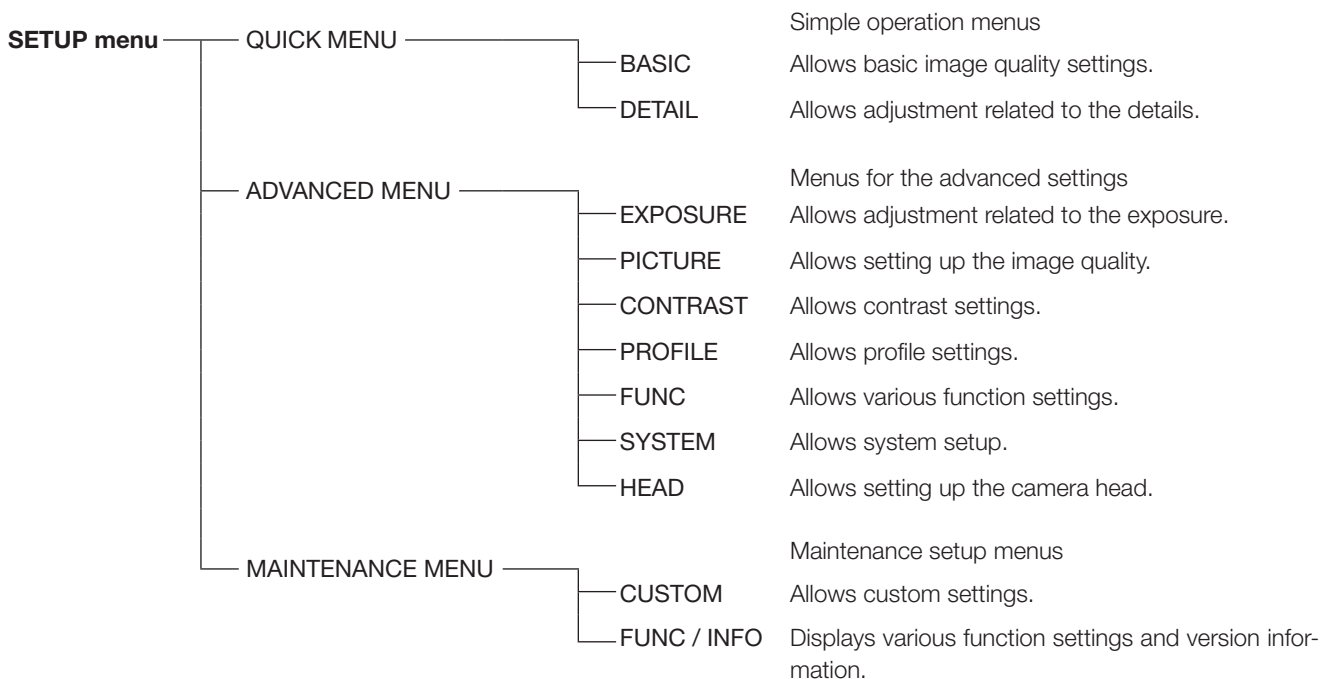

The following items can be set in the ADVANCED MENU.

| Setup item | Description | Page |
|-------------------------|--|------|
| EXPOSURE | | |
| ① AE | Sets up AE (Automatic Exposure). | 30 |
| ② SHUTTER | Sets the electronic shutter speed. | 30 |
| ③ BINNING | Sets the pixel adding mode. | 31 |
| ④ GAIN | Sets the gain. | 31 |
| ⑤ LONG EXPOSURE | Sets the long exposure. | 31 |
| ⑥ AREA SELECTION | Sets the brightness detection area of "AE", "GAIN", and "SHUTTER". | 32 |
| ⑦ PEAK/AVE LEVEL | Sets the weighting for peak and average for the brightness detection processing. | 33 |
| ⑧ HEAD GAIN | Sets the head gain. | 33 |
| PICTURE | | |
| ⑨ WHITE BAL MODE | Sets the white balance. | 33 |
| ⑩ DETAIL BAND | Sets the details. | 34 |
| ⑪ DNR LEVEL | Sets the level of the digital noise reduction. | 34 |
| ⑫ PEDESTAL LEVEL | Adjusts the pedestal level. | 34 |
| ⑬ FLARE COMP | Sets the flare compensation. | 34 |

| Setup item | Description | Page |
|--------------------------------------|---|------|
| ⑭ COLOR LEVEL | Sets the whole color level. | 34 |
| ⑮ COLOR MATRIX | Sets various hue. | 34 |
| CONTRAST | | |
| ⑯ GAMMA SELECT | Sets the gamma correction mode. | 36 |
| ⑰ GAMMA VALUE | Sets the gamma correction level. | 36 |
| ⑱ KNEE MODE | Sets the knee mode. | 36 |
| ⑲ KNEE POINT | Sets the knee point. | 36 |
| ⑳ KNEE SLOPE | Sets the knee slope. | 36 |
| ㉑ IE FUNCTION SELECT | Assigns a function to [IE] (IMAGE ENHANCEMENT) button. | 36 |
| ㉒ IE FUNCTION LEVEL | Sets the correction level selected with IE. | 37 |
| PROFILE | | |
| ㉓ USER PROFILE ID | Sets the camera's ID title. | 37 |
| USER PROFILE LABEL | Sets the label tiles of 1 to 6 profiles to be displayed. | |
| ㉔ FLUORESCENCE MODE | Set the additional setting for each fluorescent image capture mode. | 38 |
| FUNC | | |
| ㉕ FLIP AND MIRROR | Sets vertical and horizontal image flip. | 38 |
| ㉖ F+M STATUS DISPLAY | Sets the display of the vertical and horizontal image flip status. | 39 |
| ㉗ COLOR BAR | Sets the color bar display. | 39 |
| ㉘ FOOTSW CONTROL CH1 | Assigns a function to the foot switch 1. | 39 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | Assigns a function to the foot switch 2. | |
| ㉙ USER PROFILE SAVE / LOAD | Saves profiles to USB memory / Loads profiles from USB memory | 39 |
| ㉚ SAVE / LOAD MODE (USB) | Sets the method of saving to/loading from USB memory. | 40 |
| ㉛ DIGITAL ZOOM | Sets the electronic zoom approval. | 40 |
| ㉜ DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | Sets the display of the electronic zoom ratio. | 40 |
| SYSTEM | | |
| ㉝ OSD POSITION | Sets the OSD position of the video output. | 40 |
| ㉞ HDMI1 COLOR DEPTH | Sets the color depth of HDMI1. | 40 |
| HDMI2 COLOR DEPTH | Sets the color depth of HDMI2. | |
| ㉟ G/L SYNC TERMINAL SETTING | Sets the synchronizing signal input/output connector. | 40 |
| ㊱ G/L SYNC STATUS INFO | Displays the status of the external synchronization connector. | 41 |
| ㊲ TIME ADJUSTMENT | Adjusts the clock. | 41 |
| ㊳ USER PROFILE RESET | Restores the default settings of profile. | 41 |
| HEAD | | |
| ㊴ WHITE SHADING | Sets the white shading. | 42 |
| ㊵ H/V PHASE ADJUST | Sets the horizontal/vertical phases. | 42 |

How to display the menu

The description below explains how to display each SETUP menu on the connected monitor.

QUICK MENU

Turn each [RED], [BLUE], [LEVEL] volume. If the [PAGE] button is pressed for more than 2 seconds, the top page of the QUICK MENU will be displayed.

The QUICK MENU has two pages. To switch the page, press the [PAGE] button.

To switch between six profiles, press the [PROFILE] button.

ADVANCED MENU

If the [MENU] button is pressed for more than 1 second, the top page of the ADVANCED MENU will be displayed.

The ADVANCED MENU has seven pages. To switch the page, press the [PAGE] button, or move the cursor to the tab on the bottom of the page and press the [<] or [>] button.

To switch between six profiles, press the [PROFILE] button.

MAINTENANCE MENU

The top page of the MAINTENANCE MENU will be displayed if the power is turned on while the [MENU] button and [SEL] button are pressed simultaneously.

The MAINTENANCE MENU has two pages. To switch the page, press the [PAGE] button, or move the cursor to the tab on the bottom of the menu and click the [<] or [>] button.

Basic operation


Important:

- The following functions are not available when the camera head is not connected:
 - AWC startup for WHITE BAL MODE
 - FLIP AND MIRROR
 - WHITE SHADING
 - COLOR MATRIX
 - FREEZE
 - H/V PHASE ADJUST
 - DIGITAL ZOOM
- For items of MAINTENANCE MENU, contact your dealer.


The description below explains how to operate the QUICK MENU basically.

QUICK MENU top page


BASIC (WB RED GAIN) page

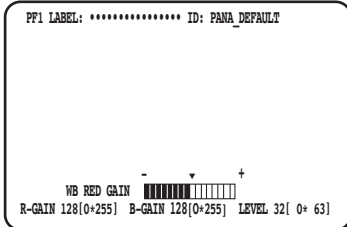


BASIC (WB BLUE GAIN) page

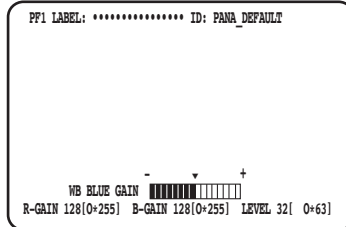

BASIC (AE LEVEL) page

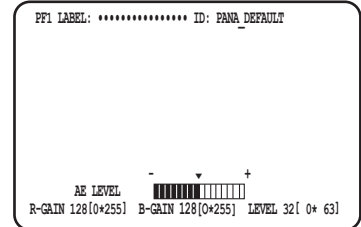

DETAIL page

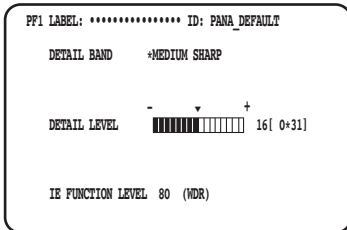

Step 1

BASIC page

Set up each item.

- WB RED GAIN
Turn the [RED] volume to adjust the red level.
- WB BLUE GAIN
Turn the [BLUE] volume to adjust the blue level.
- AE LEVEL
Turn the [LEVEL] volume to adjust the brightness.

DETAIL page

The page will be switched to the DETAIL page when the [PAGE] button is pressed while BASIC page is displayed.

- DETAIL BAND
Turn the [RED] volume to adjust the band of the edge correction.
- DETAIL LEVEL
Turn the [BLUE] volume to adjust the level of the edge correction.
- IE FUNCTION LEVEL
Turn the [LEVEL] volume to adjust the selected IE function level.

Step 2

If operation is stopped for 4 seconds, the setup content will be saved and the camera image will be restored.

The description below explains how to operate the ADVANCED MENU basically.

ADVANCED MENU top page

EXPOSURE page

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          +AUTO   LEVEL  32[ 0+ 63]
SHUTTER     AUTO    ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        +AUTO   LEVEL 12dB[ 3+ 12]
LONG EXPOSURE OFF    ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0+8]
HEAD GAIN    -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

PICTURE page

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE +AWC   R-GAIN 128[ 0+255]
              B-GAIN 128[ 0+255]
DETAIL BAND   +MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0+ 31]
DMR LEVEL     5[ 0+ 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68+ 95]
FLARE COMP    OFF
COLOR LEVEL   160[ 0+255]
COLOR MATRIX  +USER
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

CONTRAST page

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT  S-CURVE
GAMMA VALUE   0.45[0.35+0.55]
KNEE MODE     MANUAL
KNEE POINT    8[0+15]
KNEE SLOPE    3[0+7]

IE FUNCTION SELECT WDR
LEVEL          80[0+255]
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

PROFILE page

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID +OFF
USER PROFILE LABEL +OFF

FLUORESCENCE MODE OFF
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

FUNC page

```

FLIP AND MIRROR OFF
F+H STATUS DISPLAY OFF
COLOR BAR +ON
FOOTSW CONTROL CH1 PROFILE1→2
FOOTSW CONTROL CH2 FREEZE
USER PROFILE SAVE/LOAD +USB-CAMERA(ALL)
SAVE/LOAD MODE (USB) AUTO
DIGITAL ZOOM ON
DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY OFF
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

SYSTEM page

```

OSD POSITION          UPPER LEFT
HDMI1 COLOR DEPTH   YPbPr(422)
HDMI2 COLOR DEPTH   YPbPr(422)
G/L SYNC TERMINAL SETTING OUT
G/L SYNC STATUS INFO INTERNAL

*TIME ADJUSTMENT
*USER PROFILE RESET
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

HEAD page

```

WHITE SHADING      AUTO(SET)
H/V PHASE ADJUST H 0[-20+20]
                   V  0[-11+11]
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Step 1

Set up each item.

- Select the item to be set
Move the cursor by turning the [RED] volume or pressing the [Δ] or [▽] button.
- Change the set item
Turn the [LEVEL] volume or press the [◀] or [▶] button.
- Display advanced setup page
Press the [SEL] button for the item “*” is indicated.
- Return to the upper level setup page
Press the [MENU] button.

Note:

- The cursor is a blinking part.
In this document, it is indicated by “Shaded”.

Step 2

Press the [MENU] button for 1 second or more after saving the setup content to close the setup page and return to the camera image.

The setup content will be maintained even after the power of the CCU is turned off.

Restore default

- To restore each setting in the SETUP MENU to the default, move the cursor to the item to change and hold down the [◀] and the [▶] buttons simultaneously for 1 second or more.
- To restore the initial setting of all the profiles, use “USER PROFILE RESET”. (☞ page 41)
- To restore the initial setting of only the selected profile, press the [PROFILE] button for more than 1 second.
- To restore the initial setting of all the items in each page of “ADVANCED MENU”, move the cursor to the tab on the bottom of the page, and hold down the [◀] and [▶] buttons simultaneously for 1 second or more.

MAINTENANCE MENU

For details and how to operate MAINTENANCE MENU, contact your dealer.

| Setup items | Outline |
|-------------------------------|---|
| CUSTOM | |
| OSD OUTPUT SEL (HDMI) | Sets up the OSD display of the HDMI output. |
| OSD OUTPUT SEL (SDI) | Sets up the OSD display of the SDI output. |
| OSD CHARACTER MODE | Specifies the OSD character format. |
| KEY BIND (MENU) | Assigns a function to [MENU] button. |
| KEY BIND (↑↓) | Assigns a function to [Δ] and [∇] button. |
| KEY BIND (←→) | Assigns a function to [<][>] button. |
| FUNC / INFO | |
| BLEMISH COMP | Sets up the blemish compensation. |
| BLACK BAL | Sets up the black balance. |
| CABLE DIAG MODE | Diagnoses the quality of the camera cable. |
| DIPSW STATUS | Indicates the set status of DIPSW. |
| FPGA STATUS | Displays the temperature of FPGA. |
| ALL RESET | Restores all the default settings. |
| CPU VER. (MAIN / SUB) | Displays the CPU version. |
| FPGA VER. (FRONT/REAR) | Displays the FPGA (CCU) version. |
| HEAD VER. | Displays the FPGA (HEAD) version and camera type. |

Note:

- [ALL RESET] will not initialize the following:
[HEAD GAIN], [WHITE SHADING], [H/V PHASE ADJUST] in the ADVANCED MENU, and [BLEMISH COMP] in the MAINTENANCE MENU.

Set up profile

If details, gamma, hue, etc. are registered as a profile in accordance with an installation site, the user can call the registered contents only by pressing the [PROFILE] button on the front panel of the CCU.

Up to 6 profiles can be registered. The setting appropriate for fluorescent image capturing is preset in PROFILE 5 and PROFILE 6. The registration can be performed on the top page of the ADVANCED MENU. The profile page has four pages. The profile number will be displayed on the top left of the corresponding profile page.

The characters specified at "USER PROFILE LABEL" will be displayed in "LABEL" (☞ Page 37). The initial setup in the PROFILE 1 to 4 is blank.

EXPOSURE page

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO    LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO    LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

PICTURE page

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE *AWC    R-GAIN 128[ 0*255]
              B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND   *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL     5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP    OFF
COLOR LEVEL   160[ 0*255]
COLOR MATRIX  *USER
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

CONTRAST page

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT  S-CURVE
GAMMA VALUE   0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE     MANUAL
KNEE POINT    8[0*15]
KNEE SLOPE    3[0*7]
IE FUNCTION SELECT WDR
              LEVEL 80[0*255]
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

PROFILE page

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF
FLUORESCENCE MODE OFF
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Set up EXPOSURE

① Set up AE [AE]

The brightness of the image will be automatically adjusted if "AUTO" is selected for AE (Automatic Exposure). If "MANUAL" is selected, the brightness of the image can be adjusted manually. The AE level can be set in the advanced setting page.

The AE function adjusts the brightness of the image by controlling "GAIN" and "SHUTTER".

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO    LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO    LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

② Set electronic shutter [SHUTTER]

Select the electronic shutter speed from the following: "AUTO", "MANUAL(FIX)", "MANUAL(VAL)"

If "MANUAL" is selected, the electronic shutter speed can be specified. The following is available for the speed:

When the frame frequency is 59.94 Hz: 1/60 (default), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, *MANU

When the frame frequency is 50 Hz: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, *MANU

When pressing the [SEL] button after selecting "*MANU", the "SHUTTER" page will be displayed and fine adjustment of the shutter speed can be performed.

The adjusting range is from 10/1125 to 1124/1125.

When "MANUAL" is selected for "AE", the electronic shutter speed can be finely adjusted with the [LEVEL] volume by selecting "MANUAL(VAL)".

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO    LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO    LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

```

** SHUTTER **
SHUTTER     MANU
MANU SET     1124/1125
    
```

Note:

- To set up “SHUTTER”, select “MANUAL” for “AE”. (☞ Page 30)
 - If flicker is observed under fluorescent lighting of 50 Hz, selecting “1/100” for the speed can reduce flicker.
-

③ Set up pixel adding [BINNING]

The sensitivity can be improved by adding pixels.

The pixel adding mode can be selectable from the following:

- OFF : Sets the pixel adding off.
- LINE MIX (default) : Adds pixels in the vertical direction. (The vertical resolution will be deteriorated.)
- PIX MIX : Adds pixels in the horizontal direction. (The horizontal resolution will be deteriorated.)
- P/L MIX : Adds pixels in the vertical and horizontal directions.
(The horizontal and vertical resolutions will be deteriorated.)

④ Adjust gain [GAIN]

Select a gain control setting from the following:

- OFF : No gain adjustment
- AUTO (default) : Automatic gain adjustment
The allowable maximum value for the automatic adjustment will be applied.
- MANUAL(FIX) : Manual gain adjustment
The gain will be fixed at the set value.
- MANUAL(VAL) : Adjust the gain with the [LEVEL] volume manually when “MANUAL” is selected for “AE”. It enables finer adjustment than “MANUAL(FIX)”.

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| AE | *AUTO LEVEL 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12db[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

⑤ Set the long exposure [LONG EXPOSURE]

Select the long exposure from “OFF”, “AUTO”, “MANUAL(FIX)”, “FIX(x1)”.

- OFF (default) : Sets the long exposure off.
- AUTO : Automatically controls the long exposure. The maximum value of automatic control will be set as the storage time.
- MANUAL(FIX) : Enables manual adjustment of the long exposure.
The time will be fixed at the set storage time.
The storage time can be selected from “OFF”, “x2”, “x4”, or “x8”.
- FIX(x1) : Disables the long exposure.
It is available when "MANUAL" is selected for AE.

⑥ Set brightness detection area [AREA SELECTION]

If bright light such as a spotlight is present in the background behind a subject, the subject may appear dark. To eliminate this phenomenon, masking bright areas allows users to perform backlight compensation to hide bright areas. Move the cursor to "AREA SELECTION" and use the [◀] or [▶] button to select an area.


| | |
|------------------|--------------------------|
| PF1 LABEL: ***** | ID: PANA DEFAULT |
| AE | *AUTO LEVEL 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | -6dB |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]


The area is selectable from the following:

* The detection areas shown in the drawings below are not displayed.


ALL (default): The detection target is the whole area on the screen.

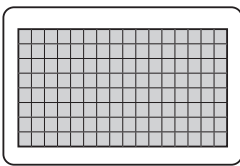


M CIRCLE: The detection target is the medium circle area in the center of the screen.

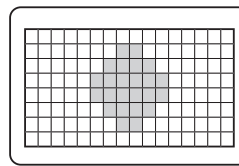

S CIRCLE: The detection target is the small circle area in the center of the screen.

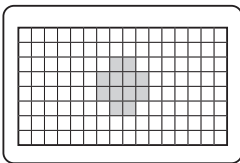

L CIRCLE: The detection target is the large circle area in the center of the screen.

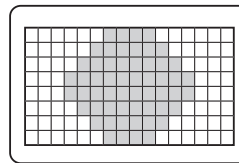


MANU: The detection target is manually specified. (Page 32)

AUTO: Dark areas are automatically masked, and only bright areas are detected.

Manually set the detection area

Manually set the detection area.

Detection area setting screen

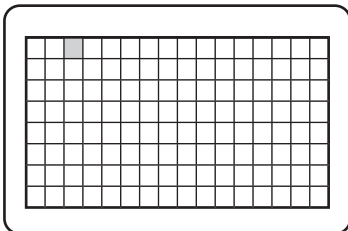

Step 1

Select "MANU" for "AREA SELECTION", and press the [SEL] button.

→ The mask setting screen appears.

Step 2

Move the cursor to the non-detection area using the [Δ], [▽], [◀] or [▶] button and press the [SEL] button.

→ The masked area is displayed in gray.

Note:

- Detection is performed only in the masked areas.
- To cancel a masked area, move the cursor to the area to be canceled and press the [SEL] button. To cancel all the masked areas, hold down the [◀] and [▶] buttons simultaneously for 1 second or more.

Step 3

Press the [MENU] button after area setting is complete.

→ The MENU page will be restored.

⑦ Set the brightness detection weighting [PEAK/AVE LEVEL]

Move the cursor to “PEAK/AVE” and use the [<] or [>] button to adjust the detection level.

When the value is moved in the “0” direction, the peak value (maximum value) will be detected. When the value is moved in the “8” direction, the average value will be detected.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | | | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | | | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

⑧ Set head gain [HEAD GAIN]

The head gain can be selected from -9dB, -6dB, -3dB, OFF(0dB), +3dB, +6dB, or +9dB.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | | | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | | | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

Set up PICTURE

⑨ Set white balance [WHITE BAL MODE]

The white balance adjustment method is selectable from the following:

- AWC (default) : White balance control mode is set. It is suitable for a location where a light source is stable.
When “AWC” is selected, the operation to adjust the white balance is required.
- MANUAL : White balance can be manually adjusted.

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| WHITE BAL MODE | *AWC | R-GAIN | 128[0*255] |
| | | B-GAIN | 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP | LEVEL | 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | | | 5[0* 10] |
| PEDESTAL LEVEL | | | 76[68* 95] |
| FLARE COMP | OFF | | |
| COLOR LEVEL | | | 160[0*255] |
| COLOR MATRIX | *USER | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

When “AWC” is selected, follow the steps below to adjust the white balance.

Step 1

Aim the camera at a white subject. Take an image of the white subject under the light source to be used.

Step 2

Press the [AWC] button in the previous screen.

→ AWC will be started up, and the AWC status lamp blinks. The adjustment is complete when “AWC OK” is displayed and the lamp goes off.

Note:

- Adjustment is available for each profile. (☞ Page 30)
- If the lamp is kept on after “AWC NG” is displayed or the lamp lights up after the profile is changed, retry step 1 and 2.
- If AWC is performed while the setting of “R-GAIN” or “B-GAIN” of “MANUAL” is set to other than the default (128), the white balance may not be set properly.

When “MANUAL” is selected, move the cursor to “R-GAIN” or “B-GAIN” and adjust the white balance with the [<] or [>] button.

⑩ Set details [DETAIL BAND]

The band and level of the edge correction are specified.

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE  +ANC      R-GAIN 128[ 0*255]
                  B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND      +MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL        5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL   76[68* 95]
FLARE COMP       OFF
COLOR LEVEL      160[ 0*255]
COLOR MATRIX     +USER
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
    
```

Step 1

Move the cursor to “DETAIL BAND”, and select a band pattern from the following: “OFF”, “SOFT”, “MEDIUM SHARP”, “SHARP”, or “SHARPEST”.

The contour becomes thicker (low band) when the cursor is moved to the direction of “SHARPEST”, while the contour becomes thinner (high band) in the direction of “SOFT”.

Step 2

Move the cursor to “DETAIL LEVEL” to adjust the intensity level.

When the value is incremented, the image becomes sharper, and when decremented, the image becomes softer.

Note:

- Jaggies may present in the contour of a photographic subject, but it is not an abnormal phenomenon. If this phenomenon is not favorable, decrease “DETAIL BAND” or “DETAIL LEVEL” and adjust the image quality.

⑪ Set digital noise reduction function [DNR LEVEL]

The digital noise reduction function reduces noise. Use the [◀] or [▶] button to adjust the noise reduction level.

⑫ Adjust the pedestal level [PEDESTAL LEVEL]

Adjust the pedestal level (black signal level) by operating the [◀] or [▶] button viewing a waveform monitor or color video monitor.

When the value is incremented, the image becomes brighter, and when decremented, the image becomes darker.

⑬ Set the flare compensation [FLARE COMP]

Select “ON” or “OFF” (default) to determine whether to perform the flare compensation.

When “ON” is selected, flare is reduced.

⑭ Adjust the color level [COLOR LEVEL]

Adjust the color level by operating the [◀] or [▶] button viewing a vector scope or color video monitor.

When the value is incremented, the color becomes deeper, and when decremented, the color becomes lighter.

⑮ Adjust the hue [COLOR MATRIX]

Adjust the hue viewing a vector scope or color video monitor.

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE  +ANC      R-GAIN 128[ 0*255]
                  B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND      +MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL        5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL   76[68* 95]
FLARE COMP       OFF
COLOR LEVEL      160[ 0*255]
COLOR MATRIX     +USER
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
    
```

```

** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B PHASE  ....|.... 0 ( 0 )

B GAIN   ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET(NEW SETTING)
    
```

```

** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B/B-Mg PHASE ....|.... 0 ( 0 )
B PHASE  ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg PHASE ....|.... 0 ( 0 )
B/B-Mg GAIN ....|.... 0 ( 0 )
B GAIN   ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg GAIN ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET(NEW SETTING)
    
```

Step 1

Display the color to be adjusted in the screen center as large as possible.

Step 2

Select the axis close to the target color. The axis is selectable from the following:

USER (default), B-Mg, Mg, Mg-R, R, R-Ye, Ye, Ye-G, G, G-Cy, Cy, Cy-B, B

Step 3

Press the [SEL] button after selecting the axis.
→ The "MATRIX" screen will be displayed.

Step 4

To perform fine adjustment, adjust "PHASE" (hue) and "GAIN" (chroma) with use of the [<] or [>] button.


Step 5

Select "BEFORE" or "AFTER" with "EFFECT SELECT", and check if the effect is applied. To determine the setting, select "SET(NEW SETTING)", and then press the [SEL] button.
To restore the previous setting, select "CANCEL" and then select the [SEL] button.

When the color axis is unclear


When "USER AREA" is selected on the "MATRIX" screen, the axis is automatically displayed by selecting a color on the screen. Color selection is performed on the color detection screen. The black rectangle cursor is blinking to select a target color on the color detection screen.

Color detection screen

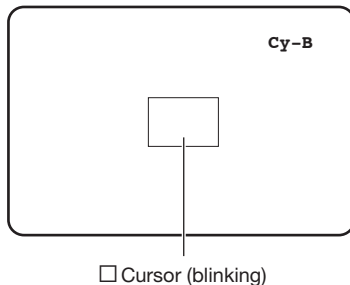

<Color matrix splitting chart>

* This chart is a guideline for displaying the closest axis at adjustment.

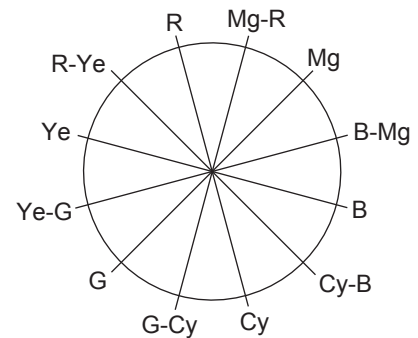

Step 1

Point the camera at the center of the subject with which the color is detected.

If the camera is immovable, move the rectangle cursor to the area with the target color by pressing the [Δ], [∇], [<] and [>] buttons.

Note:

- When the blue volume is rotated counterclockwise, the size of the rectangle cursor changes in the order of large → medium → small. Select a size to meet the subject size.


Step 2

Press the [SEL] button or [MENU] button.
→ The "MATRIX" screen appears again.

Step 3

To perform fine adjustment, adjust "PHASE" (hue) and "GAIN" (chroma).

For example, the adjustment of "PHASE" or "GAIN" of "Cy/Cy-B" on the following screen provides the simultaneous adjustment of "PHASE" or "GAIN" of the adjacent axes "Cy" and "Cy-B" in the color matrix splitting chart.

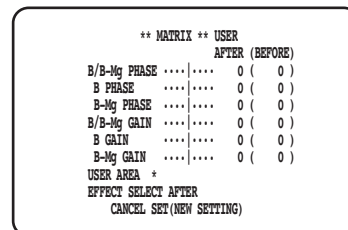

Note:


- When the color on the axis in the color matrix splitting chart is detected, the adjacent axes are not displayed.

Set up CONTRAST

⑩⑥ Set the gamma correction mode [GAMMA SELECT]

The gamma mode can be selectable from the following:

- S-CURVE (default) : By enhancing gamma, noise can be reduced while keeping the contrast.
- NORMAL : A standard gamma characteristic

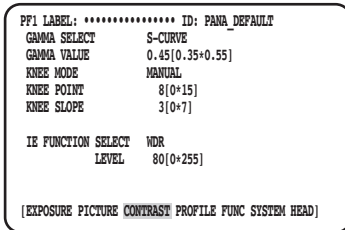

⑩⑦ Set the gamma correction level [GAMMA VALUE]

View a waveform monitor or color video monitor to set the gamma correction level.

Set the gamma correction level between 0.35 and 0.55 (default: 0.45).

The gamma correction level will be set OFF (gamma = 1), if the [<] button is pressed when the gamma correction level is "0.55".

⑩⑧ Set the knee mode [KNEE MODE]

Due to illumination or reflection of the subject, "blown out highlights" may occur in which the bright part of the image may appear flattened. This phenomenon occurs when the luminance signal exceeds the dynamic range of the camera. To set the high luminance input signals within the dynamic range of the camera, compress the gradation using the knee function.

Select the adjustment method from the following:

- MANUAL (default) : Enables manual adjustment of knee point and knee slope.
- AUTO : Adjusts the knee point and knee slope automatically.

⑩⑨ Set up the knee point [KNEE POINT]

Be sure to view the waveform monitor or color video monitor while adjusting the knee point adjustment.

It sets the compression point for the high luminance input signals.

⑩⑩ Set the knee slope [KNEE SLOPE]


Be sure to view the waveform monitor or color video monitor while adjusting the knee slope.

Set the compression level for the high luminance input signals by adjusting the knee slope.

⑩⑪ Set the [IE] button [IE FUNCTION SELECT]

Select a function to be assigned to the [IE] (IMAGE ENHANCEMENT) button from the following:

- WDR : The dynamic range expansion function corrects the dark area brighter while controlling the over exposure.
- DARK AREA CORRECTION : The adaptive black stretch function corrects the dark area brighter.
- OVER EXPOSURE REDUCTION : The exposure correction function controls the over exposure.
- SMOKE CORRECTION : The smoke correction function clears white blur.
- COLOR ENHANCEMENT : The color enhancement function enhances the selected color.

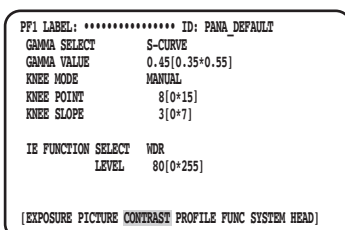


22 Set the correction level assigned to the [IE] button [IE FUNCTION LEVEL]

Adjust the correction level of the function selected with [IE FUNCTION SELECT] by operating the [<] or [>] button viewing a vector scope or color video monitor.

When the value is incremented, the amount of correction increases, and when decremented, the amount of correction decreases.

When "COLOR ENHANCEMENT" is selected, the color of RED, RED&YELLOW, or YELLOW can be selected in addition to the correction level.

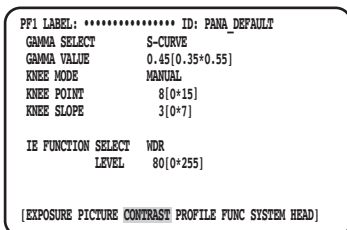


Set up PROFILE


23 Set the user profile ID and label [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]

Set the user profile ID and label. The ID and the label that indicate the camera location or image content can be created and displayed on the screen with use of alphanumeric characters and symbols. Up to 16 characters can be used for the ID and label.

Follow the procedure below to set the ID and label.

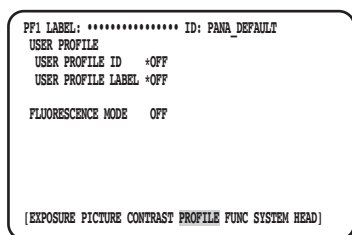


Label creation screen
(When the frame frequency is 59.94 Hz)

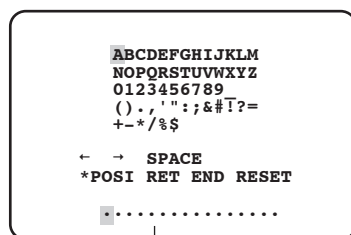


Editing area

Label creation screen
(When the frame frequency is 50 Hz)

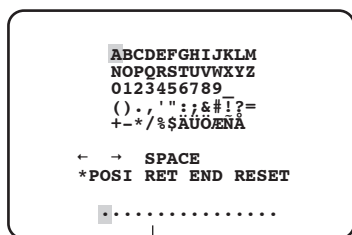

Editing area

Display positioning screen

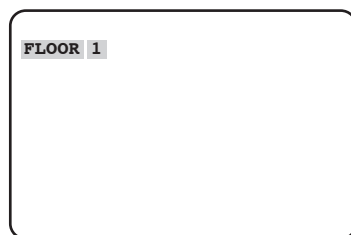

Step 1

Set "USER PROFILE ID" or "USER PROFILE LABEL" to "* ON" and press the [SEL] button.

→ The title creation screen will be displayed.

Important:

- When "* OFF" is selected for "USER PROFILE ID" or "USER PROFILE LABEL", "USER PROFILE" can be set but not displayed.

Note:

- The "* POSI" setting of "USER PROFILE ID" is available only when "* OFF" is selected for "USER PROFILE LABEL". When "* ON" is selected for "USER PROFILE LABEL", a higher priority will be given to the "* POSI" setting of "USER PROFILE LABEL".
- As default, "FLUORESCENCE3" is set for "PROFILE 5"; "FLUORESCENCE1" is set for "PROFILE 6".

Step 2

Move the cursor to the target character using the [Δ], [∇], [\leftarrow] or [\rightarrow] button, and press the [SEL] button.

→ The entered characters will be displayed in the editing area.

<Character entry>

- To revise a character, move the cursor to “←” or “→” and press the [SEL] button. Move the cursor to the character to be revised in the entry range and re-enter a correct character.
- To enter a blank, move the cursor to “SPACE” and press the [SEL] button.
- To delete all the entered characters, move the cursor to “RESET” and press the [SEL] button.

Step 3

After entering the title, move the cursor to “*POSI” and press the [SEL] button.

→ The display positioning screen will be displayed and the entered camera title blinks.

Step 4

Use the [Δ], [∇], [\leftarrow] and [\rightarrow] buttons to set the title position, and press the [MENU] button.



→ The display position is determined and the title creation screen will be restored.

24 Set the additional setting for each fluorescent image capture mode [FLUORESCENCE MODE]

Set the additional setting for each fluorescent image capture mode.

The additional setting can be selectable from the following:

- OFF (default) : Does not perform the additional setting for fluorescent image capturing.
- MODE1 : Performs the additional setting for FLUORESCENCE1.
- MODE2 : Performs the additional setting for FLUORESCENCE2.
- MODE3 : Performs the additional setting for FLUORESCENCE3.

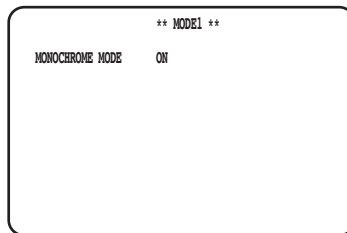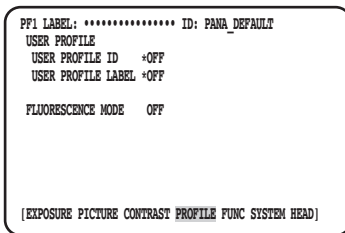

Important:

- The setting for fluorescent imaging is preset in PROFILE 5 and 6.
- When using the fluorescent image capture mode, peripheral devices such as a light source or filter, etc. are required.
- If considering using them, contact your dealer.

Note:


- When “MODE1” is selected, set “MONOCHROME MODE” either “ON” (black and white mode: default) or “OFF” (color mode).
- When other than “OFF” is set, “GAIN” can be set up to 18 dB. (Up to 12 dB when “OFF” is set.)

Set up FUNC

25 Set the vertical and horizontal flip function [FLIP AND MIRROR]

The following is available as the vertical and horizontal flip function:

- OFF (default) : Normal display
- FLIP : Vertically flipped
- MIRROR : Horizontally flipped
- FLIP+MIRROR : Vertically and horizontally flipped. To switch the setting, press [Δ] or [∇] button.

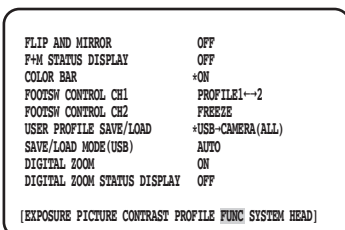

Note:

- The freeze function can be performed at the same time.

26 Set the display for vertical and horizontal flip status [F+M STATUS DISPLAY]

Select "ON" or "OFF" (default) to set whether to display "B" (vertical flip), "F" (horizontal flip), "BF" (vertical and horizontal flip) on the screen when the [Δ] or [∇] button is pressed.

| | |
|--|------------------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | +ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1 \leftrightarrow 2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | +USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

27 Display the color bar [COLOR BAR]

Display the color bar.

The top page will be restored when the [MENU] button is pressed.

Note:

- When the camera head is not connected with the CCU, the color bar will be displayed.

28 Set the foot switches [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]

The following functions can be assigned to CH1 or CH2:

| | |
|----------------------------------|--|
| NONE | : Disable the switch. |
| FREEZE | : Sets ON/OFF of screen freeze. |
| FLIP+MIRROR | : Sets ON/OFF of vertical and horizontal image flip. |
| FLIP | : Sets ON/OFF of vertical image flip. |
| MIRROR | : Sets ON/OFF of horizontal image flip. |
| PROFILE 1 \leftrightarrow 2 | : Switches between profile 1 and 2. |
| PROFILE 1 \leftrightarrow 5 | : Switches between profile 1 and 5. |
| PROFILE 1 \leftrightarrow 6 | : Switches between profile 1 and 6. |
| PROFILE 3 \leftrightarrow 4 | : Switches between profile 3 and 4. |
| PROFILE ALL | : Switches between all the profiles, from 1 to 6 in order. |
| ZOOM IN | : Zooms in the image when "ON(ENABLE)" is selected for "DIGITAL ZOOM". |
| ZOOM OUT | : Zooms out the image when "ON(ENABLE)" is selected for "DIGITAL ZOOM". |
| ZOOM 1.0x \leftrightarrow 2.0x | : Switches between 1.0x and 2.0x when "ON(ENABLE)" is selected for "DIGITAL ZOOM". |

Note:

- The foot switch operation will be disabled while the SETUP menu is displayed.

29 Save/Load profiles [USER PROFILE SAVE/LOAD]

By inserting the USB memory, SAVE (CAMERA \rightarrow USB) or LOAD (USB \rightarrow CAMERA) of the profile can be performed.

Select "ALL" to save or read all of six profiles, and select "SINGLE" to save or read one file.

Do not change the folder and file name to be created in the USB memory. If the names are changed, loading the profile will fail. After saving or loading, the USB memory will be automatically unmounted. To operate the USB memory continuously, disconnect and insert it again.

Important:

- Do not edit the file and folder configuration created by pressing the [SAVE] button. It may result in load failure.

③① Set the method of saving to/loading from USB memory [SAVE/LOAD MODE (USB)]

The following is available as the operation mode when a USB memory is inserted:

- AUTO : A prompt message to ask the operation (read/load/no action) will be automatically displayed.
- MANUAL : No action is made when a USB memory is inserted. Operate in the [USER PROFILE SAVE/LOAD] page.

| | |
|--|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+H STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSH CONTROL CH1 | PROFILE1↔2 |
| FOOTSH CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Note:

- The content of all the items in the QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST", and "PROFILE" in the ADVANCED MENU will be saved or loaded. (Except "HEAD GAIN" of the "EXPOSURE")

③② Set the zoom on and off [DIGITAL ZOOM]

Set the zoom function ON/OFF.

The zoom factor can be set between 1x to 2.5x in steps of 0.1x. To switch the setting, press [◀] or [▶] button.

③③ Set the zoom ratio display [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]

Set whether to display the current zoom ratio on the screen (default: OFF).

Note:

- When 1x is selected, the ratio will not be displayed on the screen.

Set up SYSTEM

③④ Set the OSD position of the video output [OSD POSITION]

Select a OSD position of the video output from the following:

- UPPER LEFT : Displays OSD in the upper left area of the video output angle of view.
- UPPER RIGHT : Displays OSD in the upper right area of the video output angle of view.
- LOWER LEFT : Displays OSD in the lower left area of the video output angle of view.
- LOWER RIGHT : Displays OSD in the lower right area of the video output angle of view.

③⑤ Set HDMI output signal [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]

Set the output signals for HDMI output connector.

The following is available when 1080p or 1080i is selected for HDMI output:

YPbPr (422), YPbPr (444), RGB (LIMITED), RGB (FULL)

When the setting for HDMI output signal or the video format is changed, the HDMI output video may be interrupted for a few seconds.

③⑥ Set the synchronizing signal input/output connector [G/L SYNC TERMINAL SETTING]



Select either "IN" or "OUT (default)".

Important:

- The external synchronization function can be used between this series of control units. Connect the GP-UH332C or GP-UH532C to the synchronizing signal input/output connector. Then, set "OUT" for the master and "IN" for the slave, and apply the same video output format.

36 Display synchronization state [G/L SYNC STATUS INFO]

The internal synchronization state "INTERNAL" or external synchronization state "**EXTERNAL**" will be displayed. When "**EXTERNAL**" is selected, the horizontal phase can be adjusted.

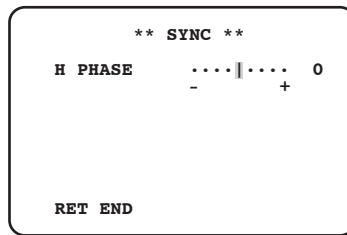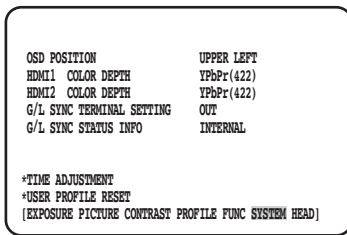

Adjust the horizontal phase

Step 1

Move the cursor to "**EXTERNAL**" and press the [SEL] button.

Step 2

Adjust the "H PHASE".

Note:

- The "**EXTERNAL**" will be displayed when "IN" is selected for "G/L SYNC TERMINAL SETTING" and the external synchronizing signals are input. In other time, "INTERNAL" is displayed.
- When closing the adjustment screen of "H PHASE" (horizontal phase in the external synchronization mode), HDMI video output may be disturbed for approximately 5 seconds.

37 Adjust the clock [TIME ADJUSTMENT]

Set the current time "month/day/year" and "hour/minute".

To determine the setting, move the cursor to "SET" and press the [SEL] button.

When using the USB memory data save function for profiles, make sure to set the time.

38 Restore the profile default setting [USER PROFILE RESET]

Default settings are restored for all the items in the QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST", and "PROFILE" in the ADVANCED MENU.

Step 1

Move the cursor to "USER PROFILE RESET" and press the [SEL] button.

Step 2

The confirmation window "USER PROFILE RESET? YES/NO" will be displayed.

If "YES" is selected, the default setting of the profile will be restored.

Note:


- The "HEAD GAIN" of "EXPOSURE" will not be initialized.

Set up HEAD

39 Set the white shading [WHITE SHADING]

Set either "AUTO(SET)" or "MANUAL" for the white shading.

When setting "AUTO(SET)" for the white shading

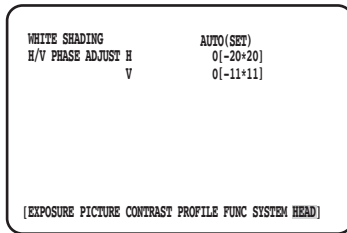

Step 1

Aim the camera at a white subject.

Step 2

Select "AUTO(SET)" and press the [SEL] button.

→ The white shading function will start up, and "AUTO(SET)" indication repeats inverting and blinking. The automatic adjustment is complete when "WHITE SHADING OK" is displayed on the bottom of the MENU.

Note:

- The white shading can be set for each camera head.
 - If "WHITE SHADING NG" is displayed, retry step 1 and 2.
-

When setting "MANUAL" for the white shading

Step 1

Select "MANU" and press the [SEL] button.

→ The manual setup screen for the white shading will be displayed. Adjust each direction of the red/blue component of white shading.

40 Adjust horizontal/vertical position of the screen [H/V PHASE ADJUST]

Adjust the screen phase in the horizontal (right/left) or vertical (up/down) directions.

Note:

- The "H/V PHASE ADJUST" can be set for each camera head.
-

Troubleshooting

Before asking for repairs, check the symptoms with the following table.

Contact your dealer if a problem cannot be solved even after checking and trying the solution in the table or a problem is not described below.

| Symptom | Cause/solution | Reference pages |
|---|--|-----------------|
| No image displayed | <ul style="list-style-type: none"> Is the cable appropriately connected to the HDMI output connector or SDI output connector? Check if the connection is appropriately established. | 18 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Is the video output signal format of each output connector compatible with the video format displayable on the monitor? Check whether the video output signal format is compatible with the video format. | 18, 44 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Is the monitor brightness appropriately adjusted, or is the contrast appropriately adjusted? Check whether the monitor settings are appropriate. | – |
| | <ul style="list-style-type: none"> Check the monitor after restoring the default settings (1:ON/ 2:ON/ 3:ON/ 4:OFF/ 5:OFF/ 6:OFF). | 18 |
| The lamp status is not changed after the [PROFILE] button is pressed | <ul style="list-style-type: none"> Pressing once displays the state. Press the [PROFILE] button repeatedly until your target indicator lights. | 16 |
| The [AE] lamp status is not changed | <ul style="list-style-type: none"> Pressing once displays the state. Press the [AE] button repeatedly until your target indicator lights. | 16 |
| The [IE] lamp status is not changed | <ul style="list-style-type: none"> Pressing once displays the state. Press the [IE] button repeatedly until your target indicator lights. | 16 |
| Only the color bar displayed | <ul style="list-style-type: none"> Is the camera cable appropriately connected at both the connector of the CCU and the connector of the camera head? Check whether the connection is appropriately established. | 15, 18 |
| The hue [COLOR MATRIX] unadjustable in the menu | <ul style="list-style-type: none"> Is the camera cable appropriately connected at both the connector of the CCU and the connector of the camera head? Connection between the camera head and camera cable is required to adjust the image quality. Check whether the connection is appropriately established. | 15, 18 |
| Blurred whole screen | <ul style="list-style-type: none"> Is the lens aperture appropriately adjusted? Check whether the aperture is appropriately adjusted. Use lenses with recommended F number or higher and 3CCD-specific lenses. | 23 |
| Plural edges visible | <ul style="list-style-type: none"> Try to change the setting of “DETAIL BAND”. | 34 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Change the monitor cable. | – |
| “AWC OK” not displayed | <ul style="list-style-type: none"> When the screen is too bright, narrow the lens aperture or set “AE” to “AUTO”. | 23, 30 |
| Black bars at right and left of image | <ul style="list-style-type: none"> This phenomenon depends on the specifications of the monitor. Select the wide and full screen display at the monitor side. | – |
| Vertically longer image | <ul style="list-style-type: none"> This unit provides outputs on the assumption that the screen is 16:9. Select the wide screen display at the monitor side. | – |
| No sound from monitor | <ul style="list-style-type: none"> This unit is not applicable to sound output. | – |
| The “FAN STOPPED” message is displayed | <ul style="list-style-type: none"> The fan is stopped. Turn off the power immediately, and contact your dealer or the operator for the fan replacement. | – |
| The “Unsupported Camera Head” message is displayed. | <ul style="list-style-type: none"> An unsupported camera head is connected. Contact your dealer. | 45 |

Specifications

| | |
|------------------------------------|--|
| Power source: | 12 V DC \pm 10 % |
| Power consumption: | 12 V 3.4 A (including camera head) |
| Pick-up system: | Micro prism system |
| Image sensor: | 1/3 type 3MOS |
| Video output: | HDMI output: HDMI connector x2 |
| | SDI output: BNC connector x5 |
| Video format: | HDMI output: 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50p, 1080/50i |
| | SDI output: 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50p, 1080/50i |
| Required illumination: | 2000 lx {200 footcandle} (3200 K, F16, when "BINNING" is "LINE MIX") |
| S/N: | 54 dB (at output using 1080i) |
| Horizontal resolution: | 1000 TV lines at center (typ. when 1080p output) |
| Color bar: | SMPTE color bar (0 % set-up, at 59.94 Hz) / Full color bar (at 50 Hz) |
| Function: | AE, Gain, Electronic shutter, Long exposure, Head gain, Pixel adding, White balance, Knee, Details, Gamma switching, DNR setting, IE functions (WDR, Adaptive black stretch, Exposure correction, Smoke correction, Color enhancement), Pedestal setting, Flare compensation, Color level adjustment, Hue adjustment, Fluorescent image capture profile, Freezing, Flip, Mirror, Status display, Color bar, Digital zoom, Foot switch setting, Profile setting, HDMI output switching, External synchronization, Clock, White shading correction, H/V phase adjustment |
| Foot switch: | \varnothing 3.5 stereo mini jack |
| External control: | \varnothing 3.5 stereo mini jack (compliant with the RS232C signal level of 3-electrode serial) |
| Ambient operating temperature: | 0 °C to 40 °C {32 °F to 104 °F} |
| Ambient operating humidity: | 30 % to 90 % |
| Ambient operating pressure: | 700 hPa to 1060 hPa |
| Transport and storage temperature: | -10 °C to +60 °C {14 °F to 140°F} |
| Transport and storage humidity: | 10 % to 90 % |
| Transport and storage pressure: | 700 hPa to 1060 hPa |
| Dimensions: | GP-UH332C: 185 mm (W) x 57 mm (H) x 270 mm (D) {7-9/32 inches (W) x 2-1/4 inches (H) x 10-5/8 inches (D)} (excluding rubber feet and projections) |
| | GP-UH332H: 27 mm (W) x 30 mm (H) x 42.5 mm (D) {1-1/16 inches (W) x 1-5/32 inches (H) x 1-21/32 inches (D)} (excluding the tripod mount base and projections) |
| Mass: | GP-UH332C: Approx. 2 kg {4.42 lbs} |
| | GP-UH332H: Approx. 65 g {0.14 lbs} |
| Finish: | Sail white coating |

Disposal of Old Equipment and Batteries
Only for European Union and countries with recycling systems



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries must not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation. By disposing of them correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment. For more information about collection and recycling, please contact your local municipality. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.



Note for the battery symbol (bottom symbol)


This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

Panasonic®

Bedienungsanleitung HD-Kamerasteuerungen

Modell-Nr. **GP-UH332C**

DEUTSCH

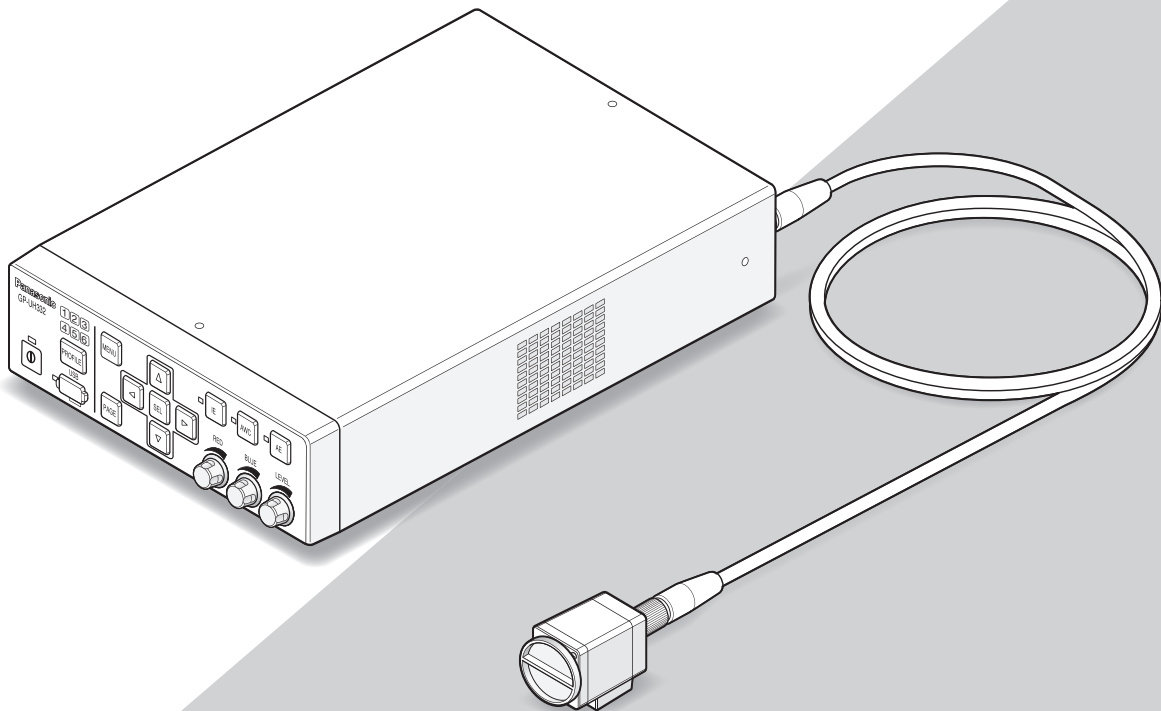

(Der Kamerakopf und das Kamerakabel sind optional.)

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

Die Modellnummer erscheint in diesem Handbuch teilweise in abgekürzter Form.

DEUTSCHE AUSGABE

(GERMAN VERSION)

WARNUNG:

- Das Gerät sollte vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden, um der Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags vorzubeugen.
- Das Gerät sollte vor Tropf- und Spritzwasser geschützt und es sollten keine Flüssigkeiten enthaltende Gefäße wie Vasen darauf abgestellt werden.
- Der Einbau hat nach den einschlägigen Einbauvorschriften zu erfolgen.
- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen hervorrufen, in diesem Fall muss der Anwender möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.
- Dieses Gerät entspricht der Klasse A der CISPR 32. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Gerät Funkstörungen hervorrufen.
- Alle mit der Installation dieses Produkts verbundenen Arbeiten sollten von qualifiziertem Kundendienstpersonal oder Systeminstallateuren vorgenommen werden.

VORSICHT:

- Änderungen und Modifikationen, die an diesem Gerät ohne die ausdrückliche Genehmigung durch den für Konformität Zuständigen vorgenommen wurden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen.

Für Europa

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der folgenden Norm oder normativen Dokument übereinstimmt. Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC.

Unterbrechen der Stromversorgung. Bei Geräten mit oder ohne Netzschalter liegt Spannung am Gerät an, sobald der Netzstecker an der Steckdose angeschlossen wird. Zum Unterbrechen der gesamten Stromversorgung das Netzkabel ziehen.

EMV für die Verwendung dieses Produktes im medizinischen Umfeld

- Die Beschreibung der GP-UH332 stellt das Kamerasystem unter Verwendung der GP-UH332C und des GP-UH332H dar.

WARNUNG

- Die Verwendung von Zubehör oder Kabeln, die in diesem Dokument nicht angegeben sind, kann die elektromagnetische Strahlung, die von der GP-UH332 ausgesendet wird, erhöhen oder die elektromagnetische Verträglichkeit verschlechtern.
- Wenn Sie die GP-UH332 in der Nähe eines anderen Gerätes oder auf einem anderen Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass die CCU normal im System arbeitet.

VORSICHT

- Entsorgen Sie dieses Produkt bei Bedarf in Übereinstimmung mit den örtlichen oder nationalen Rechtsvorschriften und den entsprechenden Krankenhausrichtlinien.

| Grundsatz und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Strahlung | | |
|--|--------------------|--|
| Die GP-UH332 ist dafür ausgelegt, in der nachfolgend angegebenen elektromagnetischen Umgebung verwendet zu werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in der folgenden Umgebung verwendet wird. | | |
| Emissionsprüfung | Kompatibles Niveau | Elektromagnetische Umgebung - Grundsatz |
| Leitende Emission hochfrequenter Strahlung CSPR 11 | Gruppe 1 | Die GP-UH332 verwendet Hochfrequenzenergie für interne Funktionen. Die Emission hochfrequenter Strahlung ist deshalb sehr gering und beeinträchtigt die in der Nähe befindlichen elektronischen Geräte nicht. |
| Leitende Emission hochfrequenter Strahlung CSPR 11 | Klasse A | Aufgrund ihrer Emissionseigenschaften ist die GP-UH332 für die Verwendung in einem Industriegebiet und Krankenhäusern geeignet. Wenn dieses Produkt in einem Wohngebiet verwendet werden soll, sind möglicherweise einige Vorkehrungen zu ergreifen, die Verlegung des Produktes zum Beispiel, da der Schutz von Rundfunk- und Kommunikationsgeräten im Wohngebiet möglicherweise nicht ausreichend gewährleistet ist. |
| Emission von Oberschwingungsströmen IEC 61000-3-2 | Klasse A | |
| Emission von Spannungsänderung, Spannungsschwankungen und Flimmern IEC 61000-3-3 | Ziffer 5 | |

Das folgende Netzteil verwenden:
 Hersteller: Sinpro Electronics Co., Ltd.
 Art.-Nr.: MPU60A-105-P49L10*

Grundsatz und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Strahlung


Die GP-UH332 ist dafür ausgelegt, in der nachfolgend angegebenen elektromagnetischen Umgebung verwendet zu werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in der folgenden Umgebung verwendet wird.

| Störfestigkeitsprüfung | IEC 60601 Teststufe | Kompatibles Niveau | Elektromagnetische Umgebung - Grundsatz |
|---|---|---|---|
| Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2 | ±6 kV, Kontakt ±8 kV, Luft | ±6 kV, Kontakt ±8 kV, Luft | Das Bodenmaterial sollte aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn das Bodenmaterial durch einen Kunststoff abgedeckt ist, wird vorausgesetzt, dass die relative Luftfeuchtigkeit bei 30 % oder höher liegt. |
| Stromkabel/Signalkabel schnell transient Bruchfestigkeit IEC 61000-4-4 | ±2 kV für den Wechselstrom ±1 kV für die Signalleitung | ±2 kV für den Wechselstrom ±1 kV für die Signalleitung | Verwenden Sie typische, handelsübliche Stromkabel oder solche, die für die Krankenhausumgebung ausgelegt sind. |
| Überspannungsfestigkeit IEC 61000-4-5 | ±1 kV, Leitung zu Leitung ±2 kV, Leitung zu Erde | ±1 kV, Leitung zu Leitung ±2 kV, Leitung zu Erde | Verwenden Sie typische, handelsübliche Stromkabel oder solche, die für die Krankenhausumgebung ausgelegt sind. |
| Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen/Spannungsschwankungen IEC 61000-4-11 | < 5 % U_T (> 95 % Dip, bei U_T) Innerhalb von 0,5 Zyklen 40 % U_T (60 % Dip, bei U_T) Innerhalb von 5 Zyklen 70 % U_T (30 % Dip, bei U_T) Innerhalb von 25 Zyklen < 5 % U_T (> 95 % Dip, bei U_T) 5 Sekunden | < 5 % U_T (> 95 % Dip, bei U_T) Innerhalb von 0,5 Zyklen 40 % U_T (60 % Dip, bei U_T) Innerhalb von 5 Zyklen 70 % U_T (30 % Dip, bei U_T) Innerhalb von 25 Zyklen < 5 % U_T (> 95 % Dip, bei U_T) 5 Sekunden | Verwenden Sie typische, handelsübliche Stromkabel oder solche, die für die Krankenhausumgebung ausgelegt sind. Wenn Sie die GP-UH332 während eines Stromausfalls verwenden möchten, empfehlen wir die Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder von Akkus, um die Stromversorgung der GP-UH332 zu gewährleisten. |
| Störfestigkeit gegen das Magnetfeld der Netzfrequenz IEC 61000-4-8 | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | Das Magnetfeld der Netzfrequenz darf das charakteristische Niveau, das in einer typischen, handelsüblichen oder Krankenhausumgebung gemessen wird, nicht übersteigen. |

Anmerkung: U_T ist die Netzspannung der Wechselstromversorgung vor der Anwendung des Prüfpegels.

Grundsatz und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Strahlung

Die GP-UH332 ist dafür ausgelegt, in der nachfolgend angegebenen elektromagnetischen Umgebung verwendet zu werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in der folgenden Umgebung verwendet wird.

| Störfestigkeitsprüfung | IEC 60601 Teststufe | Kompatibles Niveau | Elektromagnetische Umgebung - Grundsatz |
|---|---|-------------------------------|---|
| Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) 150 kHz bis 80 MHz | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) | Verwenden Sie kein tragbares kabelloses Kommunikationsgerät oder Mobiltelefon unter der Bedingung, dass der empfohlene Trennungsabstand zu jeder Komponente der GP-UH332 einschließlich der Kabel nicht sicher eingehalten wird. Der Abstand ist basierend auf der Formel für jede Frequenz des Geräts zu berechnen. Empfohlener Trennungsabstand $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 MHz P ist die maximale Ausgangsnennleistung des Übertragungsgeräts und Watt (W) wird als Einheit verwendet. Für den Trennungsabstand d wird Meter (m) verwendet. Die Stärke des elektromagnetischen Feldes des stationären hochfrequenten Geräts ist durch örtliche Prüfung* ¹ zu ermitteln. Sie muss jedoch innerhalb der Kompatibilität in jedem Hochfrequenzbereich* ² liegen. In der Nähe eines Geräts mit dem folgenden Symbol können Störungen auftreten.  |
| Störfestigkeit gegen ausgestrahlte, hochfrequente elektromagnetische Felder IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) 80 MHz bis 2,5 GHz | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) | |

Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz wird der höhere Frequenzbereich angewendet.

Anmerkung 2: Der obige Grundsatz kann möglicherweise nicht auf alle Fälle angewendet werden.


Die Absorption durch Gebäude, Gegenstände und den menschlichen Körper oder die Reflexion beeinflusst die Ausbreitung der elektromagnetischen Kraft.







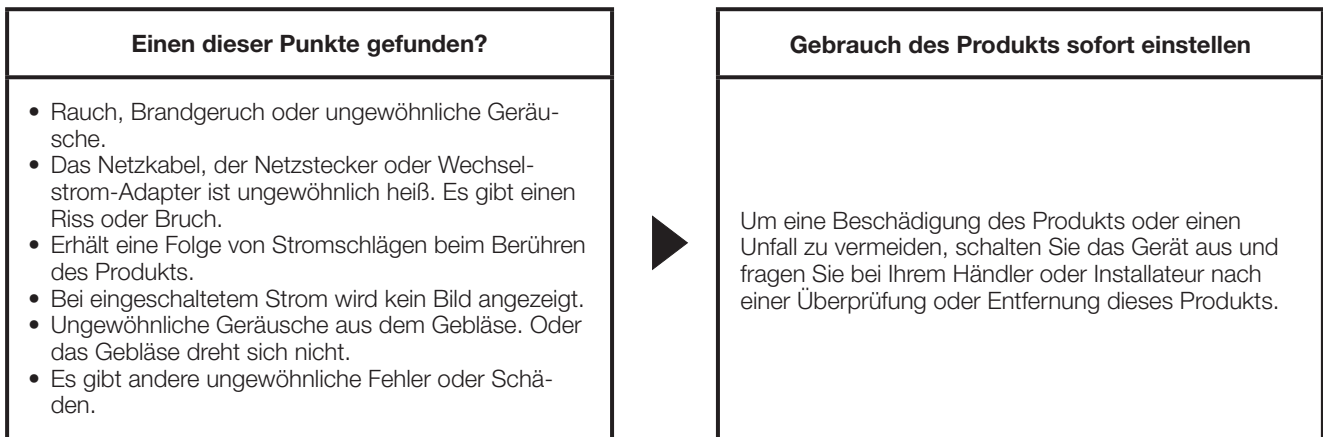

*1 Die Stärke des elektromagnetischen Feldes des stationären Funksenders, inklusive der von Basisstationen von kabellosen Telefonen, Mobiltelefonen, Amateurradios, MW/UKW-Radiogeräten und TV-Geräten kann nicht genau veranschlagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung in Bezug auf einen stationären Funksender zu bewerten, muss eine örtliche Untersuchung durchgeführt werden. Überprüfen Sie den normalen Betrieb der GP-UH332, wenn die gemessene elektromagnetische Kraft für die GP-UH332 das oben beschriebene Kompatibilitätsniveau übersteigt. Wenn Sie ein unnormales Verhalten beobachten, ist eine Verlegung der GP-UH332 oder sind andere Abhilfemaßnahmen erforderlich.

*2 Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz hat die Feldstärke kleiner als 3 V/m zu betragen.

Vorschriften bezüglich der Sicherheit im medizinischen Umfeld

- Der Betriebsmodus ist "Dauerbetrieb".
- Beachten Sie beim Gebrauch mit dem Wechselstrom-Adapter, dass dieses Produkt als KLASSE I eingestuft ist.
- Schließen Sie, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dieses Produkt nur an eine Stromversorgung (handelsüblich) an, die mit einem Schutzleiter ausgestattet ist.
- Da alle Peripheriegeräte, die an den Signaleingang oder den Signalausgang angeschlossen sind, ein medizinisches System darstellen, entsteht eine Haftung und Verantwortung, aufgrund derer das gesamte System die Standards gemäß IEC60601-1 Ziffer 16 erfüllen muss.
Berühren Sie nicht gleichzeitig einen dieser Steckverbinder und einen Patienten.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, Aufsteller oder den Kundendienst, der in der Bedienungsanleitung für die Installation benannt ist.
- Montieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, wo es schwierig ist, das Netzkabel zu ziehen.
- Verwenden Sie Netzstecker der "Krankenhausstufe" und ein NETZKABEL, das mit der ANSI/AAMI ES60601-1 (für die Vereinigten Staaten)/CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1 (für Kanada) konform ist.
- Unter einigen EINZELFEHLERBEDINGUNGEN kann die Temperatur auf der rechten Seite des CCU-Gehäuses sehr heiß werden und es besteht die mögliche GEFAHR einer Verbrennung bei Berührung.
- Wenn dieses Produkt viele Jahre verwendet worden ist, besteht die Möglichkeit, dass einige Teile eine schlechtere Leistung zeigen, was abhängig von der Verwendungsumgebung zu einer Fehlfunktion oder einem Unfall führen kann, obwohl kein defektes Teil ersichtlich ist. Täglich überprüfen, ob einer der folgenden Punkte vorliegt.



| Beschreibungen grafischer Symbole | |
|---|--|
|  | Dieses Symbol zeigt EIN/AUS der Stromversorgung an. Der EIN/AUS-Zustand ist festgelegt. |
|  | Dieses Symbol zeigt den Potenzialausgleichsanschluss, der verwendet werden soll, um jedes Teil des Systems auf ein einheitliches Level zu bringen. |
|  | Dieses Symbol zeigt einen Wechselstrom (AC) an. |
|  | Dieses Symbol zeigt einen Gleichstrom (DC) an. |
|  | Dieses Symbol zeigt ein Warnsymbol an, dass es heiß werden kann und bei Berührung die mögliche GEFAHR einer Verbrennung besteht. |
|  | Dieses Symbol zeigt das UL-Zertifizierungszeichen in den Vereinigten Staaten an. |
|  | Dieses Symbol zeigt das vorgeschriebene Konformitätszeichen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. |
|  | Dieses Symbol zeigt das Zeichen der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEAG) im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. |

- Optionen
 - 3MOS-HD-Kamerakopf : GP-UH332H
 - UHD Kamerakopf : GP-UC532G03 (3 m)
 - GP-UC532G06 (6 m)
 - GP-UC532G15 (15 m)
 - GP-UC532G03A (3 m) (Wird bald veröffentlicht / Stand August 2017)
 - GP-UC532G06A (6 m) (Wird bald veröffentlicht / Stand August 2017)
 - GP-UC532G15A (15 m) (Wird bald veröffentlicht / Stand August 2017)
- Netzteil : MPU60A-105-P49L10*
(Sinpro Electronics Co., Ltd.)

Inhalt

| | |
|--|----|
| EMV für die Verwendung dieses Produktes im medizinischen Umfeld..... | 49 |
| Vorschriften bezüglich der Sicherheit im medizinischen Umfeld | 52 |
| Wichtige Sicherheitsinstruktionen | 56 |
| Beschränkung der Haftung | 57 |
| Haftungsausschluss | 57 |
| Vorwort | 58 |
| Verwendungszweck..... | 58 |
| Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen | 58 |
| Vorsichtsmaßnahmen | 59 |
| Wichtige Bedienelemente und ihre Funktionen..... | 61 |
| Kamerakopf (Option)..... | 61 |
| Kamerabediengerät (CCU)..... | 62 |
| Systemkonfiguration | 66 |
| Vorsichtshinweise zur Installation..... | 67 |
| Installation | 68 |
| Befestigen des Objektivs | 69 |
| Einstellung über das SETUP-Menü..... | 70 |
| SETUP-Menüs | 70 |
| Anzeige des Menüs..... | 72 |
| Allgemeine Bedienungshinweise | 73 |
| Vorgabe wiederherstellen..... | 74 |
| MAINTENANCE MENU | 75 |
| Ein Profil anlegen | 76 |
| EXPOSURE | 76 |
| ① AE einrichten [AE]..... | 76 |
| ② Elektronischen Verschluss festlegen [SHUTTER]..... | 76 |
| ③ Stellt Pixel hinzufügen ein [BINNING]..... | 77 |
| ④ Verstärkung einstellen [GAIN]..... | 77 |
| ⑤ Legt die Langzeitbelichtung fest [LONG EXPOSURE] | 77 |
| ⑥ Helligkeitserfassungsbereich einstellen [AREA SELECTION]..... | 78 |
| ⑦ Die Helligkeitserfassungsgewichtung einstellen [PEAK/AVE LEVEL] | 79 |
| ⑧ Stellen Sie die Kopfverstärkung ein [HEAD GAIN] | 79 |
| PICTURE..... | 79 |
| ⑨ Weißabgleich einstellen [WHITE BAL MODE]..... | 79 |
| ⑩ Details einstellen [DETAIL BAND]..... | 80 |
| ⑪ Digitale Rauschreduzierungsfunktion einstellen [DNR LEVEL]..... | 80 |
| ⑫ Die Schwarzabhebung einstellen [PEDESTAL LEVEL] | 80 |
| ⑬ Die Streulichtkorrektur einstellen [FLARE COMP]..... | 80 |
| ⑭ Den Farbpegel einstellen [COLOR LEVEL]..... | 80 |
| ⑮ Den Farbton einstellen [COLOR MATRIX] | 80 |
| CONTRAST | 82 |
| ⑯ Stellt den Gammakorrekturenmodus ein [GAMMA SELECT]..... | 82 |
| ⑰ Die Gammakorrekturenstufe einstellen [GAMMA VALUE] | 82 |
| ⑱ Stellt den Knie-Modus ein [KNEE MODE] | 82 |
| ⑲ Stellt den Kniepunkt ein [KNEE POINT] | 82 |
| ⑳ Stellt den Knie-Hang ein [KNEE SLOPE]..... | 82 |
| ㉑ Die [IE]-Taste einstellen [IE FUNCTION SELECT]..... | 82 |
| ㉒ Stellt den Korrekturpegel ein, der der [IE]-Taste zugewiesen ist [IE FUNCTION LEVEL] | 83 |
| PROFILE | 83 |
| ㉓ Stellt die Benutzerprofil-ID und -Beschriftung ein [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]..... | 83 |
| ㉔ Legen Sie die zusätzliche Einstellung für jeden fluoreszierenden Bildaufnahmemodus fest [FLUORESCENCE MODE]..... | 84 |

| | |
|--|----|
| FUNC | 84 |
| 25 Die horizontale und vertikale Umdrehfunktion einstellen [FLIP AND MIRROR] | 84 |
| 26 Die Anzeige für den vertikalen und horizontalen Umkehrstatus einstellen [F+M STATUS DISPLAY]..... | 85 |
| 27 Den Farbbalken anzeigen [COLOR BAR] | 85 |
| 28 Die Fußschalter einrichten [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]..... | 85 |
| 29 Profile speichern/laden [USER PROFILE SAVE/LOAD]..... | 85 |
| 30 Die Methode des Speicherns zum/Ladens vom USB-Speicher festlegen [SAVE/LOAD MODE (USB)] | 86 |
| 31 Stellt den Zoom ein und aus [DIGITAL ZOOM]..... | 86 |
| 32 Stellt die Zoom-Verhältnis-Anzeige ein [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]..... | 86 |
| SYSTEM..... | 86 |
| 33 Die OSD-Position der Videoausgabe festlegen [OSD POSITION] | 86 |
| 34 HDMI-Ausgangssignal festlegen [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH] | 86 |
| 35 Legt den Synchronsignaleingabe-/Ausgabe-Steckerverbinder fest [G/L SYNC TERMINAL SETTING] | 86 |
| 36 Synchronisationsverfahren anzeigen [G/L SYNC STATUS INFO]..... | 87 |
| 37 Die Uhr stellen [TIME ADJUSTMENT] | 87 |
| 38 Die Standardeinstellung des Profils wiederherstellen [USER PROFILE RESET]..... | 87 |
| HEAD | 88 |
| 39 Die Weißtönung festlegen [WHITE SHADING] | 88 |
| 40 Die horizontale/vertikale Position des Bildschirms einstellen [H/V PHASE ADJUST]..... | 88 |
| Fehlersuche | 89 |
| Technische Daten | 90 |
| Standardzubehör..... | 91 |
| Sonderzubehör..... | 91 |

Wichtige Sicherheitsinstruktionen

- 1) Bitte lesen Sie diese Instruktionen aufmerksam durch.
- 2) Bewahren Sie die Instruktionen sorgfältig auf.
- 3) Befolgen Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Instruktionen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Instruktionen des Herstellers.
- 8) Installieren Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Apparaten (einschließlich Verstärkern).
- 9) Umgehen Sie niemals die Schutzfunktion des gepolten oder geerdeten Netzsteckers. Ein gepolter Netzstecker weist zwei Kontaktstifte auf, wobei ein Kontaktstift breiter als der andere ist. Ein geerdeter Netzstecker ist mit zwei Kontaktstiften und einem dritten Erdungskontakt versehen. Der breite Stift bzw. der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Netzstecker nicht in Ihre Netzdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, damit dieser die veralterte Netzdose austauschen kann.
- 10) Achten Sie darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten oder dieses besonders an den Steckern, an der Netzdose bzw. am Ausgang aus dem Gerät nicht eingeklemmt wird.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene/s Vorrichtungen/Zubehör.
- 12) Verwenden Sie dieses Gerät nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen oder mit dem Gerät mitgelieferten Wagen, Ständer, Stativ oder Tisch. Bei Verwendung eines Wagens ist Vorsicht beim Transport des Geräts auf dem Wagen geboten, um ein Umkippen und die damit verbundenen möglichen Verletzungen zu vermeiden.



- 13) Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch aus der Netzdose.
- 14) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel bei defektem Netzkabel oder Netzstecker bzw. bei auf das Gerät verschütteten Flüssigkeiten, in das Gerät eingedrungenen Gegenständen, wenn das Gerät Regen oder übermäßiger Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Beschränkung der Haftung

DIE LIEFERUNG DIESER PUBLIKATION ERFOLGT OHNE MÄNGELGEWÄHR, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG ZU BESTIMMTEN ZWECKEN ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER.

DIE PUBLIKATION KÖNNTE TECHNISCHE UNGENAUIGKEITEN ODER DRUCKFEHLER ENTHALTEN. IM LAUFE DER VERBESSERUNG DIESER PUBLIKATION UND/ODER DER ENTSPRECHENDEN PRODUKTE KANN DER INHALT JEDERZEIT KORRIGIERT BZW. ERGÄNZT WERDEN.

Haftungsausschluss

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. IST UNTER ANDEREM IN KEINEM DER UNTEN AUFGEFÜHRTEN FÄLLE GEGENÜBER JURISTISCHEN PERSONEN ODER PERSONEN HAFTBAR, ES SEI DENN ES HANDELT SICH UM DEN ERSATZ ODER DIE ZUMUTBARE WARTUNG DES PRODUKTS:

- (1) VERLUSTE ODER SCHÄDEN JEDLICHER ART, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNGEN UNMITTELBARER, MITTELBARER, ZUSÄTZLICHER, FOLGE- ODER ÜBER DEN VERURSACHTEN SCHADEN HINAUSGEHENDER SCHADENSANSPRÜCHE;
- (2) UNANNEHMLICHKEITEN, VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE AUF DEN UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH ODER DEN FAHRLÄSSIGEN BETRIEB DURCH DEN BENUTZER ZURÜCKZUFÜHREN SIND;
- (3) UNZULÄSSIGES ZERLEGEN, REPARIEREN ODER VERÄNDERN DES PRODUKTS DURCH DEN BENUTZER;
- (4) UNANNEHMLICHKEITEN ODER VERLUSTE, WENN BILDER AUS IRGENDWELCHEN GRÜNDEN ODER URSACHEN NICHT ANGEZEIGT WERDEN, EINSCHLIESSLICH EINES AUSFALLS ODER PROBLEMS DES GERÄTS;
- (5) JEDLICHE STÖRUNGEN, MITTELBARE UNANNEHMLICHKEITEN, ODER VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE SICH AUS DEM ZUSAMMENSCHALTEN DES SYSTEMS MIT GERÄTEN VON FREMDHERSTELLERN ERGEBEN;
- (6) JEDLICHE ANSPRÜCHE ODER KLAGEN AUF SCHADENERSATZ DURCH IRGENDWELCHE PERSONEN ODER ORGANISATIONEN, DIE EIN PHOTOGENES SUBJEKT SIND, HINSICHTLICH EINER VERLETZUNG DES PERSÖNLICHKEITSRECHTES MIT DEM ERGEBNIS, DASS BILDER DER ÜBERWACHUNGSKAMERA EINSCHLIESSLICH ABGESPEICHERTER DATEN AUS IRGEND EINEM GRUND VERÖFFENTLICHT BZW. ZU ANDEREN ZWECKEN VERWENDET WERDEN.

Vorwort

Dieses System besteht aus einer kompakten, leichten HD-Kamerasteuerung (nachfolgend CCU genannt), bei dem der Kamerakopf separat angebracht ist und das mit einer hohen Bildqualität und einer Vielzahl von Funktionen durch die digitale Bildverarbeitung ausgestattet ist.

- GP-UH332C HD-Kamerasteuerungen

Dieses Produkt wird in Kombination mit dem optionalen 3MOS-HD-Kamerakopf (nachfolgend Kamerakopf genannt) verwendet.

- GP-UH332H 3MOS-HD-Kamerakopf
- Bietet die Unterstützung der Multiformatausgabe mit 1080p und 1080i.
- Dank der HDMI- bzw. SDI-Ausgangsklemmen findet keine Signalverschlechterung bei der Übertragung statt.
- Durch WDR (Erweiterung des Dynamikbereichs) können auch Objekte mit stark variierenden Helligkeiten und Kontrasten mit guten Resultaten aufgenommen werden.

Die Hinweise in dieser Anleitung basieren auf einem System, das einen Kamerakopf verwendet.

Verwendungszweck

Die Panasonic-HD-Kamera mit separatem Kopf der GP-UH332-Serie ist hochauflösend mit Full HD (1920×1080) für ruckelfreie Bilder, die 60P unterstützt, und verfügt über die hochwertige Farbwiedergabe zur Verwendung als Operationsmikroskope oder Spaltlampen. Es ist ebenfalls nicht dafür ausgelegt, in medizinischen Produkten verwendet zu werden, da sein Ausfall zu Schäden am Menschen oder zum Verlust des Lebens oder schwerwiegenden Sachschäden führen kann.

Dieses Produkt entspricht den Normen für medizinische elektrische Geräte IEC60601-1 und IEC60601-1-2.

Wenden Sie sich für die örtlichen medizinischen Registrierungsinformationen an Ihren örtlichen Panasonic-Lieferanten.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen

- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder anderen Ländern.
- Andere in dieser Bedienungsanleitung enthaltene Warenzeichen sind Warenzeichen des jeweiligen Eigentümers.

Vorsichtsmaßregeln

Zur Installation an einen Fachhändler wenden.

Installationsarbeiten erfordern Fachkenntnisse und Erfahrung. Andernfalls besteht die Gefahr von Brand, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Schäden an diesem Produkt.

Unbedingt einen Fachhändler konsultieren.

Ordnungsgemäß verkabeln.

Ein Kurzschluss oder eine fehlerhafte Verkabelung kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Eine Einbaustelle wählen, die stark genug ist, um das Gesamtgewicht zu tragen.

Wird eine ungeeignete Einbaustelle gewählt, so kann das Produkt herunterfallen oder umstürzen, was zu Verletzungen führen kann.

Die Einbaustelle vor der Installation ausreichend verstärken.

Regelmäßige Kontrollen müssen durchgeführt werden.

Bei Verwendung von rostigen Metallteilen oder Schrauben kann das Produkt herunterfallen und dabei Verletzungen oder Unfälle verursachen.

Kontrollen durch Fachhändler durchführen lassen.

Vor dem Reinigen des Produkts den Strom ausschalten.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bei Störungen des Produkts den Betrieb sofort einstellen.

Wird das Produkt weiter betrieben, wenn Rauch oder Rauchgeruch austritt oder Sie die Beschädigung des Äußeren dieses Produktes feststellen, kann es zu einem Brand, einer Verletzung oder Beschädigung des Produktes kommen.

Die Stromversorgung dieses Produkts sofort ausschalten und dann Ihren Fachhändler benachrichtigen.

Nicht an der Installation und Verkabelung arbeiten, während die Stromversorgung eingeschaltet ist.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags.

Das Produkt nicht in einer feuergefährlichen Umgebung einsetzen.

Andernfalls besteht die Gefahr einer Explosion, was zu Körperverletzungen führen kann.

Dieses Produkt nicht in Bereichen installieren, wo es Beschädigung durch Salz oder korrosive Gase ausgesetzt ist.

Bei Nichtbeachtung können die Montageteile korrodieren, was zu Unfällen wie das Herunterfallen dieses Produkts führen kann.

Das Produkt keinen Schlägen oder starken Erschütterungen aussetzen.

Andernfalls besteht die Gefahr von Körperverletzungen oder Brand.

Keine Fremdkörper einführen.

Darauf achten, dass kein Fremdkörper oder keine Flüssigkeit wie zum Beispiel Wasser, Metallteile usw. in das Innere gelangen, da dies ein Feuer oder einen Stromschlag auslösen kann.

Wenn dies geschieht, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Ihren Händler benachrichtigen.

Dieses Produkt nicht zerlegen oder verändern.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags.

Ihren Händler um eine Untersuchung und Reparatur bitten.

Bei einem Blitzschlag (oder während der Aufbaumaßnahmen) dieses Produkt, das Netzkabel oder die Verbindungskabel nicht berühren.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Keine Flüssigkeiten wie Wasser enthaltende Behälter in der Nähe des Produkts aufstellen.

Falls Flüssigkeit auf diesem Produkt verschüttet wird, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Wenn dies geschieht, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Ihren Händler benachrichtigen.

Die Kanten von Metallteilen möglichst nicht mit der Hand berühren.

Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

[Zu beachten]

Zur Beibehaltung einer zuverlässigen Leistung

Der Betrieb des Geräts an Orten, wo es hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann zur vorzeitigen Alterung von Teilen führen und seine Lebensdauer verkürzen.


Dieses Produkt bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwenden. Bei Nichtbeachtung kann dies die im Innern befindlichen Komponenten nachteilig beeinflussen oder zu einer Funktionsstörung führen. Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen von weniger als 30 °C zu verwenden, wobei der direkte Wärmebereich eines Heizkörpers zu vermeiden ist, bedingt durch die Wärmeabstrahlung des Produktes.

Das Produkt vorsichtig behandeln.

Das Produkt nicht fallen lassen oder Erschütterungen oder Vibrationen aussetzen. Andernfalls könnten Probleme auftreten.

Dieses Produkt nicht auf starke Lichtquellen richten.

Eine Lichtquelle, wie z. B. eine Punktleuchte, kann zu Lichtfahnen (Ausblutungen) führen.

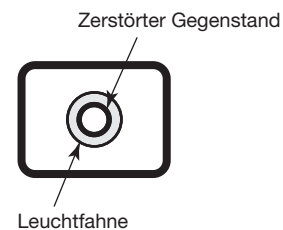

Eingebaute Akkus

In diesem Produkt sind Akkus eingebaut.

Die Akkus nicht einer Umgebung mit übermäßiger Hitze aussetzen, die durch das Sonnenlicht oder ein Feuer verursacht wird.

Kühllüfteralarm

Wenn die Kühllüfteralarmmeldung angezeigt wird, sofort die Stromversorgung ausschalten und Ihren Händler benachrichtigen.

Reinigung

- Das Gerät ausschalten und dann ein weiches Tuch verwenden, um dieses Produkt zu reinigen.
Wenn der Staub schwer zu entfernen ist, ein weiches Tuch verwenden, das mit einem verdünnten Lösungsmittel getränkt ist und stark ausgepresst wurde, um diesen abzuwischen.
Danach das restliche Waschmittel mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Das Gehäuse nicht mit starken oder scheuernden Mitteln reinigen. Für den Kamerakopf und die CCU kann Ethanol oder Isopropylalkohol verwendet werden. Diese können jedoch nicht für das Kamerakabel verwendet werden.
- Bei Verwendung eines chemisch imprägnierten Tuches die diesem beiliegenden Vorsichtshinweise lesen.

Typenschild


Die Typenbezeichnung und Leistungsdaten wie die Stromversorgung usw. sind auf dem Typenschild auf der Unter- oder Oberseite dieses Produktes angegeben.

USB-Speicher

- Einen mit USB2.0 kompatiblen USB-Speicher verwenden.
- Um das Lesen/Schreiben mit hoher Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, "ScanDisk" oder "CheckDisk" ausführen, das in dem PC mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows® enthalten ist.
- FAT32 wird unterstützt. Einen USB-Speicher mit einer Größe von 32 GB oder weniger verwenden. Ein USB-Speichergerät mit Verschlüsselung wird nicht unterstützt.
- Der USB-Speicher kann nicht mit der CCU formatiert werden.

Dieses Produkt ist für die normale Verwendung als allgemeines elektronisches Gerät ausgelegt.
Die Verwendung dieses Produktes für spezielle Anwendungen (wie zum Beispiel, Verkehr, Transport und medizinische Behandlung), ohne die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus den Gesetzen des eigenen Landes oder Gebiets ergeben, erfolgt auf eigene Verantwortung und ist möglicherweise unzulässig.

Kamerakopf (Option)

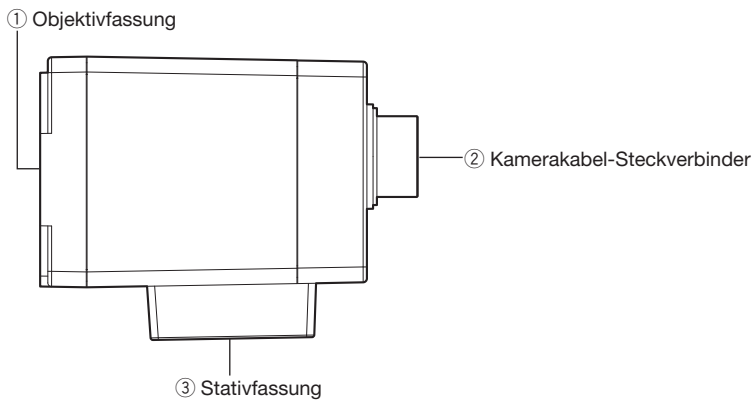

Wichtig:

- Vor Anschluss oder Unterbrechung des Kamerakabels unbedingt das CCU ausschalten.
- Das Kamerakabel nicht stark biegen oder brechen.
- Nur den speziell vorgesehenen Kamerakopf verwenden.

① **Objektivfassung**

Hier wird die C-Fassung angebracht. (☞ Seite 69)

② **Kamerakabel-Steckverbinder**

Steckverbinder für das Kamerakabel (Option)

<Kamerakabel>

GP-UC532G03 (3 m)

GP-UC532G06 (6 m)

GP-UC532G15 (15 m)

GP-UC532G03A (3 m) (Wird bald veröffentlicht / Stand August 2017)

GP-UC532G06A (6 m) (Wird bald veröffentlicht / Stand August 2017)

GP-UC532G15A (15 m) (Wird bald veröffentlicht / Stand August 2017)


③ **Stativfassung**

Bei Verwendung eines Stativs wird der Kamerakopf am Stativgewinde befestigt.

Stativgewinde: 1/4-20 UNC

Kamerabediengerät (CCU)


<Vorderseite>

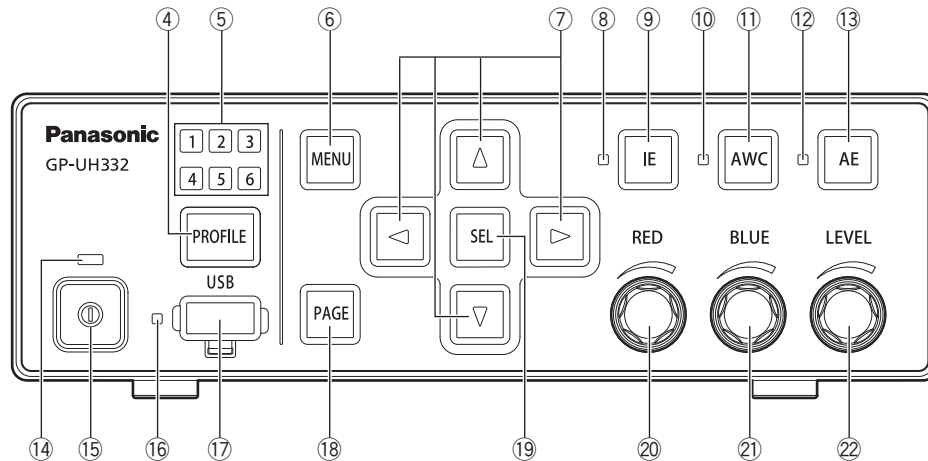

- ④ **Profilauswahl Taste [PROFILE]**
Wählt ein Profil von 1 bis 6 aus. Profile müssen im Voraus über das SETUP-Menü (☞ Seite 76) eingerichtet werden.
- ⑤ **Profilauswahl Lampe [1/2/3/4/5/6] (grün)**
Die ausgewählte Profilvernummer leuchtet in Grün.
- ⑥ **Menütaste [MENU]**
Wenn die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird, wird das SETUP-Menü (ADVANCED MENU) angezeigt. Die oberste Ebene des MENU wird angezeigt, wenn die Taste gedrückt wird, während das SETUP-Menü angezeigt wird. Das SETUP-Menü kann ausgeblendet werden, wenn die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird.
Durch Drücken dieser Schaltfläche, während das SETUP-Menü angezeigt wird, wird die Bildschirm-Einfrierfunktion aktiviert.
- ⑦ **Hoch-/Runter-/Rechts-/Links-Tasten [Δ / ∇ / \triangleleft / \triangleright]**
• **Hoch-Taste [Δ]/Runter-Taste [∇]**
Ändert den Zieleinstellungspunkt, während das SETUP-Menü angezeigt wird.
Wird dies gedrückt, wenn ein anderes als das SETUP-Menü angezeigt wird, wird die Einstellung für "FLIP AND MIRROR" umgeschaltet. (☞ Seite 84)
• **Rechts-Taste [\triangleright]/Links-Taste [\triangleleft]**
Bewegt den Cursor oder ändert den Inhalt des Einstellungspunkts, während das SETUP-Menü angezeigt wird.
Wird dies gedrückt, wenn ein anderes als das SETUP-Menü angezeigt wird, wird das Zoom-Verhältnis des "DIGITAL ZOOM" umgeschaltet. (☞ Seite 86)
- ⑧ **IE-Statuslampe (grün)**
Zeigt den Ein-/Aus-Status der IE-Funktion an (IMAGE ENHANCEMENT).
An: Die IE-Funktion ist aktiviert.
Aus: Die IE-Funktion ist deaktiviert.
- ⑨ **IE-Taste [IE]**
Schaltet die IE-Funktion ein/aus.
- ⑩ **AWC-Statuslampe (orange)**
Zeigt den Status der AWC-Funktion an (automatischer Weißabgleich).
Aus: AWC ist aktiviert.
Blinken: AWC ist aktiviert oder läuft.
Blinken → Aus: AWC erfolgreich
An: AWC-Fehler
- ⑪ **AWC-Taste [AWC]**
Wenn "WHITE BAL MODE" im SETUP-Menü auf "AWC" eingestellt ist, wird die AWC-Funktion gestartet, wenn die Taste gedrückt wird, während Kamerabilder angezeigt werden.
-
- Wichtig:**
- Wenn kein Kamerakopf angeschlossen ist, funktioniert die [AWC]-Taste nicht.
-
- ⑫ **AE-Statuslampe (grün)**
Zeigt den Status des Modus Automatisch/Manuell der AE-Funktion an (automatische Belichtung).
An: Automatische Belichtung
Aus: Manuelle Belichtung
- ⑬ **AE-Taste [AE]**
Schaltet den Modus Automatisch/Manuell der AE-Funktion um.
- ⑭ **Netzstatuslampe (grün)**
Zeigt den Ein-/Aus-Status der Stromversorgung an.
An: Einschalten
Aus: Ausschalten
- ⑮ **Netzschalter [Schaltermarkierung]**
Schaltet die CCU und den Kamerakopf ein und aus.
- ⑯ **USB-Statuslampe (grün)**
Zeigt den Status des USB-Speichers an.
Blinken: Datenzugriff
An: Angemeldet
Aus: Nicht angemeldet
- ⑰ **USB-Steckerverbinder [USB]**
Wenn der USB-Speicher eingesetzt ist, kann SAVE/LOAD des Profils ausgeführt werden.

- ⑱ **Seitentaste [PAGE]**
Schaltet die Seite um, während das SETUP-Menü angezeigt wird.
Das QUICK MENU wird angezeigt, wenn die Taste gedrückt wird, während ein anderes als das SETUP-Menü angezeigt wird.
- ⑲ **Wahltaste [SEL]**
Legt die Einstellungen fest, während das SETUP-Menü angezeigt wird.
Wenn die Taste gedrückt wird, während ein anderes als das SETUP-Menü angezeigt wird, wird das Fenster "SETTING INFORMATION" angezeigt. Wird sie erneut gedrückt, werden die Kamerabilder wiederhergestellt.
Im Fenster "SETTING INFORMATION" werden die Einstellungen von "IE FUNCTION SELECT", "FOOTSW CONTROL CH1/CH2", "SAVE/LOAD MODE (USB)" und "VIDEO FORMAT (HDMI1/HDMI2/SDI1/SDI5)" angezeigt.
- ⑳ **Rotgröße [RED]**
Stellt die Verschiebung der RED-Verstärkung des Weißabgleichs ein.
Der ausgewählte Punkt wird geändert, wenn die Größe eingestellt wird, während das SETUP-Menü angezeigt wird.
- ㉑ **Blaugröße [BLUE]**
Stellt die Verschiebung der BLUE-Verstärkung des Weißabgleichs ein.
- ㉒ **Niveaugröße [LEVEL]**
Stellt die Helligkeitsstufe ein.
Bewegt den Cursor oder ändert den Inhalt des ausgewählten Punkts, während das SETUP-Menü angezeigt wird.

<Rückseite>

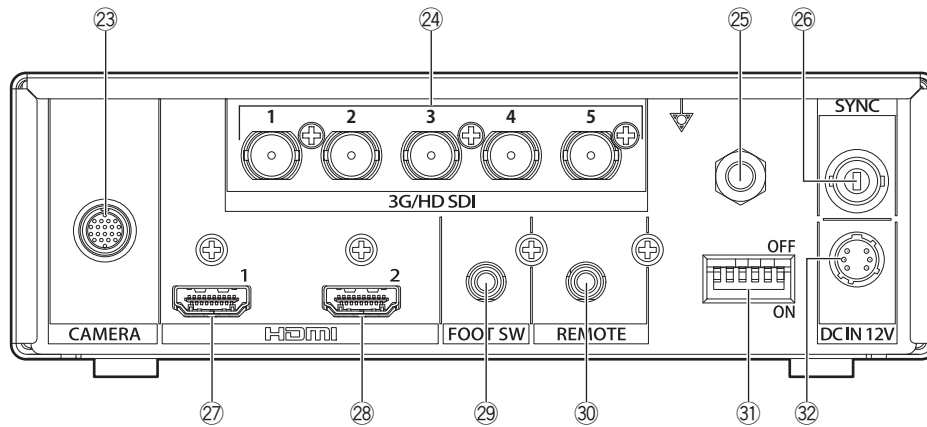

23 **Kamerakabel-Steckverbinder [CAMERA]**
Steckverbinder für das Kamerakabel (Option).
(☞ Seite 91)

24 **SDI-Ausgangsklemmen [3G/HD SDI 1/2/3/4/5]**
Steckverbinder für die 3G-SDI- oder HD-SDI-Signalausgabe.

Wichtig:

- Ein 3G-SDI- oder HD-SDI-kompatibles Kabel hoher Qualität verwenden.

25 **Potenzialausgleich-Steckverbinder [Potenzialmarkierung]**
Steckverbinder für die Erdung des Potenzialausgleichs.

26 **Synchronsignaleingabe-/Ausgabe-Steckverbinder [SYNC]**
Steckverbinder für Eingabe oder Ausgabe des externen Synchronisationssignals.

27 **HDMI-Ausgangsstecker [HDMI 1]**
Wird für den Anschluss eines Monitors mit HDMI-Funktion verwendet.

31 **Funktionsschalter**
Jeder stellt die Videoausgabefunktionen ein.
Der Schalter 1 wählt die Bildfrequenz 59,94 Hz/50 Hz aus.

| Schalter | | | | | | SDI-Ausgang | HDMI-Ausgang |
|----------|---|---|---|---|---|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ON | - | - | - | - | - | 59,94 Hz | 59,94 Hz |
| OFF | - | - | - | - | - | 50 Hz | 50 Hz |

Der Schalter 2 bis 6 wählt ein Videoformat für den SDI- und HDMI-Ausgangssteckverbinder aus.

| | Schalter | | | | | | SDI-Ausgang | HDMI-Ausgang |
|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| *1 | - | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 1080p | 1080p |
| | - | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1080i | 1080i |

Wenn etwas anderes als das oben ausgewählt wird, wird das mit *1 angegebene Format ausgegeben.

Wichtig:


- Darauf achten, den Funktions-Setup-Schalter zu betätigen, während die Stromversorgung ausgeschaltet ist.

28 **HDMI-Ausgangssteckverbinder [HDMI 2]**
Wird für den Anschluss eines Monitors mit HDMI-Funktion verwendet.


Wichtig:

- Wir empfehlen, die Panasonic-HDMI-Kabel (Option) zu verwenden.
- Verwenden Sie einen Monitor, auf dem das HDMI-Logo angezeigt wird.

29 **Fußschalter-Steckverbinder [FOOT SW]**
Steckverbinder für einen Fußschalter.
(ø3,5 Stereo-Minibuchse)

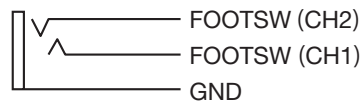


30 **Remote-Steckverbinder [REMOTE]**
Steckverbinder für die externe Steuerung.
(ø3,5-Stereo-Minibuchse)

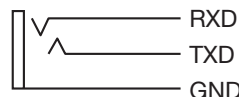


- ③ **12-V-Gleichstrom-Steckerverbinder [DC IN 12V]**
Steckerverbinder für die externe Gleichstromversorgung
mit mehr als 12 V Gleichstrom (4 A oder mehr).
Kompatibler Steckerverbinder (Stand August 2017)
: HR10A-7P-6S(73)
Hersteller HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

**Steckerbelegung des
kompatiblen
Steckerverbinders**

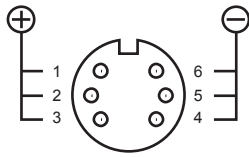

(Steckerverbinder des Kabels)

Systemkonfiguration

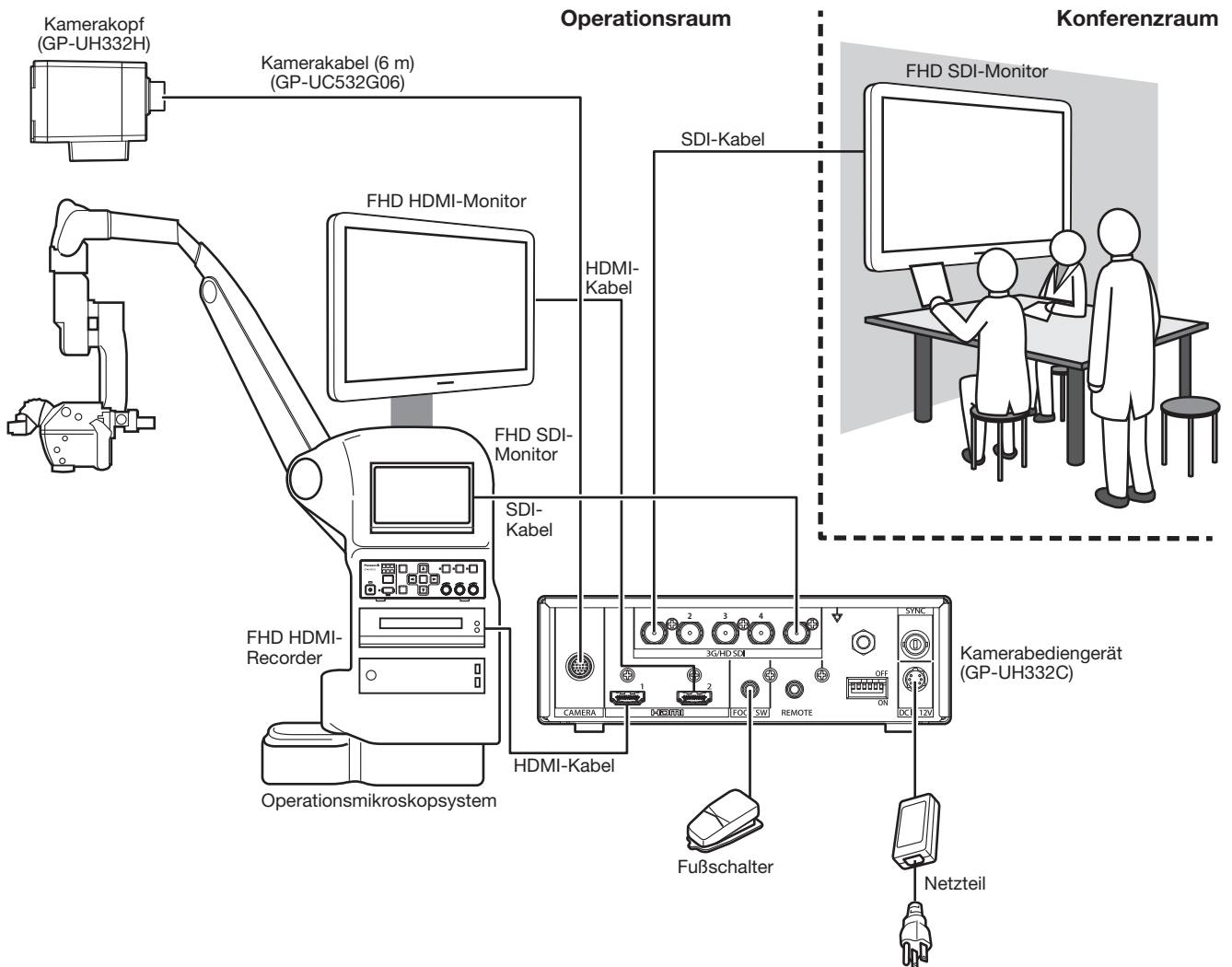

HDMI-Kabel:

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, auf dem das HDMI-Logo angezeigt wird. (Wir empfehlen ein Panasonic-HDMI-Kabel.)

SDI-Kabel:

Bitte verwenden Sie ein SDI-Kabel, das 3G-SDI und HD-SDI unterstützt.

Vorsichtshinweise zur Installation

Vorsichtshinweise:

- NUR AN EINE STROMVERSORGUNG DER KLASSE 2 FÜR 12 V GLEICHSTROM (UL 1310/CSA 223) ODER EINE STROMVERSORGUNG MIT BEGRENZTER EINSCHALTDAUER ANSCHLIESSEN (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Die Installation muss den örtlichen elektrotechnischen Vorschriften entsprechen.

Das Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen bestimmt.

Das Produkt ist nicht für den Einsatz im Freien bestimmt.

Das Produkt nicht an Orten installieren, wo es längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, oder in der Nähe einer Heizung oder Klimaanlage. Eine Funktionsstörung kann die Folge sein. Das Produkt vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.

Ein Stativ bitte selbst beschaffen.

Das Stativ zur Befestigung des Kamerakopfes ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es muss für die Einbaufäche der Kamera geeignet sein.

Belassen Sie einen Abstand der CCU von mindestens 10 cm zur umgebenden Wand.

Wenn die CCU mit Wandkontakt aufgestellt wird, wird die Wärmeabgabe blockiert, was zu einer Fehlfunktion führen kann.

Feuchte und staubige Stellen sind für die Installation dieses Systems zu vermeiden.

Dies könnte die Lebensdauer der internen Bestandteile verkürzen.

Folgende Einbau- oder Verwendungsorte dieses Systems sind zu vermeiden:

- Orte, die Regen oder Sprühwasser ausgesetzt sind
- Orte, die chemischen Stoffen ausgesetzt sind, z.B. in der Nähe eines Schwimmbads
- Orte, wo Feuchtigkeit, Staub, Dampf und ölhaltiger Rauch erzeugt werden
- Orte, wo Strahlung, Röntgenstrahlen, starke elektromagnetische Wellen oder Magnetfelder erzeugt werden
- Bereiche, in denen korrosives Gas erzeugt wird
- Orte, wo die Temperatur nicht im Bereich von 0 °C - 40 °C liegt.
- Vibration ausgesetzte Orte (Das Produkt ist nicht für den Betrieb an Bord eines Fahrzeugs bestimmt.)
- Orte, wo die Temperatur sich schnell ändern kann, wie zum Beispiel die Randbereiche der Luftauslässe von Klimaanlagen oder Türen, die nach außen öffnen

Hochfrequenzstörungen


Die Bilder können in der Nähe von Sendeantennen für TV- oder Radioübertragungssignale oder von elektrischen oder magnetischen Feldern (die zum Beispiel durch einen Motor oder Transformator erzeugt werden) gestört sein.

Bei Nichtgebrauch sollte das Produkt unbedingt weggeräumt werden.

Installation

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie die Kamera auf dem Stativ (selbst zu beschaffen) befestigt wird.

<Beispiel für die Montage auf einem Stativ>

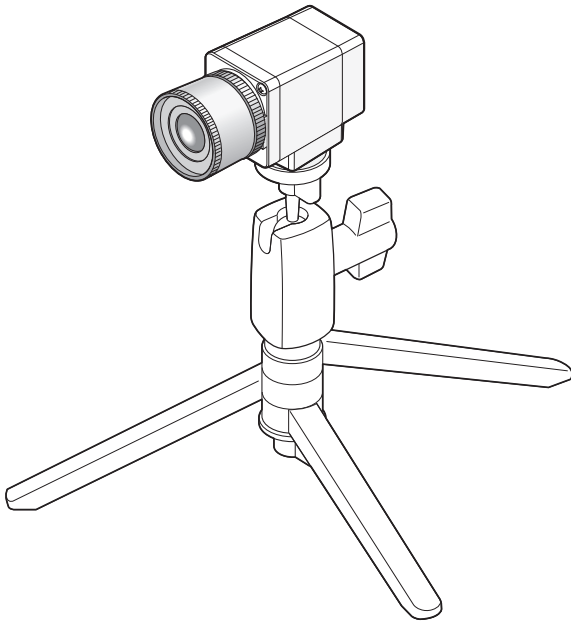


Wichtig:

- Stativ und CCU horizontal ausrichten.
 - CCU horizontal ausrichten. Die CCU nicht vertikal oder schräg positionieren.
-

Befestigen des Objektivs


Wichtig:

- Ein Objektiv mit einem Überhang von max. 4 mm über die Objektivfassung verwenden.
- Als Blendenbereich wird F4,0 bis F16 empfohlen. Bei Wahl einer Blende von F4,0 oder geringer kann Unschärfe auftreten.
- Bei Verwendung eines Zoom-Objektivs bitte beachten, dass die Fokussierung je nach Objektiv unterschiedlich ist. Zu Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des verwendeten Objektivs.
- Wenn kein Objektiv aufsitzt, die Objektivfassung am Kamerakopf immer mit dem Objektivdeckel verschlossen halten.

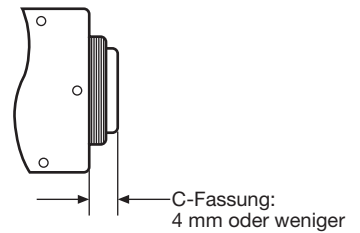


Schritt 1

Den Deckel von der Objektivfassung am Kamerakopf entfernen.

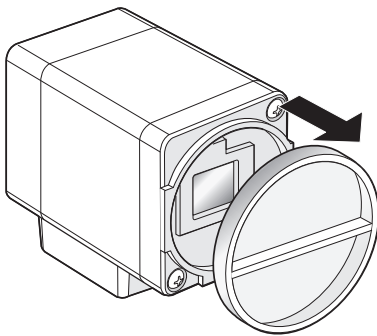

Schritt 2

Ein Objektiv mit C-Fassung durch Drehen im Uhrzeigersinn an der Objektivfassung befestigen.

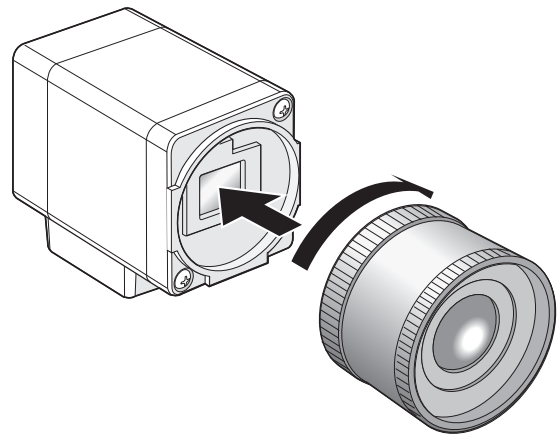

Wichtig:

- Vor Anbringen des Objektivs sicherstellen, dass die Oberfläche des optischen Filters sauber ist. Einen verschmutzten Filter mit einer Gebläsebürste von Staub befreien.

Unterstützte Objektive (Referenz / Stand August 2017)

| Hersteller | Bezeichnung | Modell |
|------------|---------------------------|--|
| FUJIFILM | 3CCD/CMOS-Kamera-Objektiv | TF2.8DA-8 TF4DA-8 TF8DA-8B TF15DA-8 |

Einstellung über das SETUP-Menü


Jeden Punkt im SETUP-Menü vor der Inbetriebnahme des Geräts einstellen. Bei den Einstellungen müssen die Aufnahmebedingungen am Standort der Kamera berücksichtigt werden.

Anmerkung:

- Zusätzlich zum SETUP-Menü verfügt das System über ein vereinfachtes Menü (QUICK-Menü), das mit der [PAGE]-Taste an der Vorderseite der CCU aufgerufen wird. Zu Einzelheiten über das QUICK-Menü siehe Seite 73.

SETUP-Menüs

Die Setupmenüs bestehen aus drei Menüs, "QUICK MENU", "ADVANCED MENU" und "MAINTENANCE MENU".

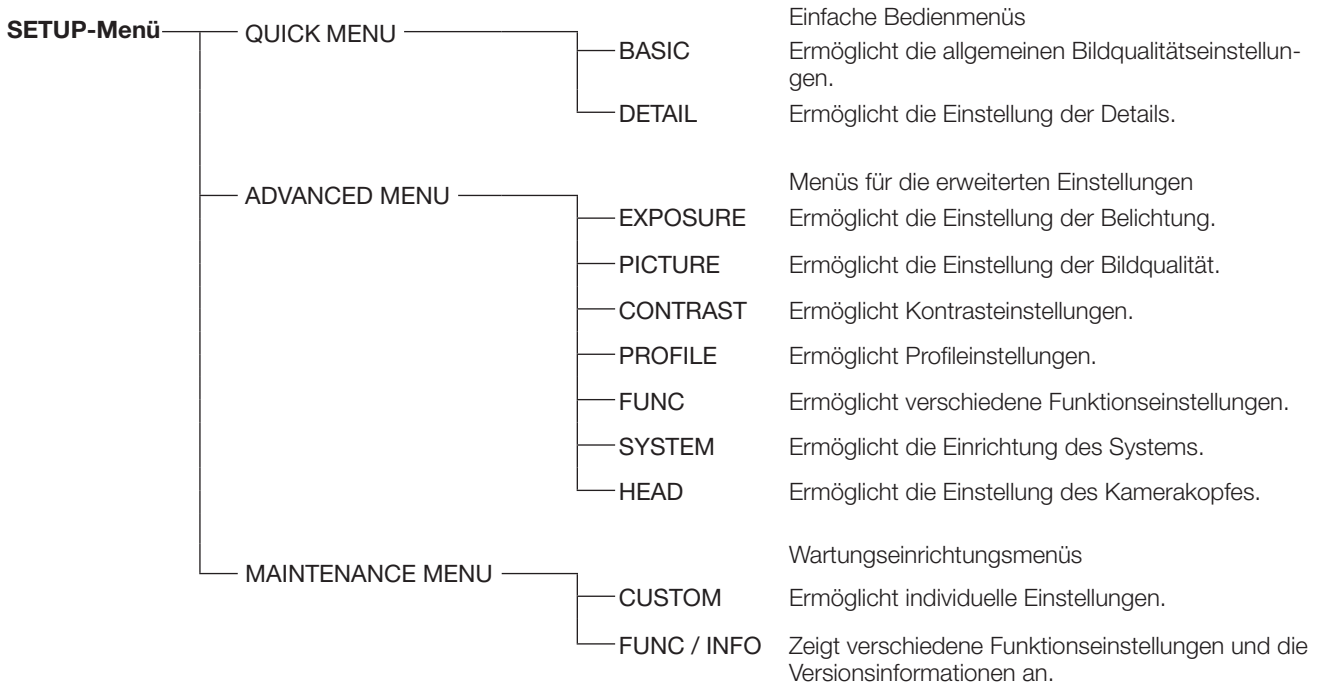

Die folgenden Einstellungen können im ADVANCED MENU erfolgen.

| Einstellposten | Beschreibung | Seite |
|-------------------------|--|-------|
| EXPOSURE | | |
| ① AE | Stellt die AE (automatische Belichtung) ein. | 76 |
| ② SHUTTER | Stellt die elektronische Verschlusszeit ein. | 76 |
| ③ BINNING | Stellt den Modus Pixel hinzufügen ein. | 77 |
| ④ GAIN | Stellt die Verstärkung ein. | 77 |
| ⑤ LONG EXPOSURE | Legt die Langzeitbelichtung fest. | 77 |
| ⑥ AREA SELECTION | Stellt den Helligkeitserfassungsbereich von "AE", "GAIN" und "SHUTTER" ein. | 78 |
| ⑦ PEAK/AVE LEVEL | Stellt die Gewichtung von Peak und Mittelwert für die Verarbeitung der Helligkeitserfassung ein. | 79 |
| ⑧ HEAD GAIN | Stellt die Kopfverstärkung ein. | 79 |
| PICTURE | | |
| ⑨ WHITE BAL MODE | Stellt den Weißabgleich ein. | 79 |
| ⑩ DETAIL BAND | Legt die Details fest. | 80 |
| ⑪ DNR LEVEL | Legt den Wert der digitalen Rauschreduzierung fest. | 80 |
| ⑫ PEDESTAL LEVEL | Legt die Schwarzabhebung fest. | 80 |
| ⑬ FLARE COMP | Legt die Streulichtkorrektur fest. | 80 |

| Einstellposten | Beschreibung | Seite |
|--|--|--------------|
| ⑭ COLOR LEVEL | Legt den Gesamtfarbpegel fest. | 80 |
| ⑮ COLOR MATRIX | Stellt unterschiedliche Farbtöne ein. | 80 |
| CONTRAST | | |
| ⑯ GAMMA SELECT | Stellt den Gammakorrekturmodus ein. | 82 |
| ⑰ GAMMA VALUE | Stellt den Gammakorrekturpegel ein. | 82 |
| ⑱ KNEE MODE | Stellt den Knie-Modus ein. | 82 |
| ⑲ KNEE POINT | Stellt den Kniefunkt ein. | 82 |
| ⑳ KNEE SLOPE | Stellt den Knie-Hang ein. | 82 |
| ㉑ IE FUNCTION SELECT | Weist der [IE]-Taste (IMAGE ENHANCEMENT) eine Funktion zu. | 82 |
| ㉒ IE FUNCTION LEVEL | Stellt den mit IE ausgewählten Korrekturpegel ein. | 83 |
| PROFILE | | |
| ㉓ USER PROFILE ID USER PROFILE LABEL | Legt den ID-Namen der Kamera fest. Legt die Labelbeschriftungen der Profile 1 bis 6, die angezeigt werden sollen, fest. | 83 |
| ㉔ FLUORESCENCE MODE | Legen Sie die zusätzliche Einstellung für jeden fluoreszierenden Bildaufnahmehemodus fest. | 84 |
| FUNC | | |
| ㉕ FLIP AND MIRROR | Stellt die vertikale und horizontale Bildumkehr ein. | 84 |
| ㉖ F+M STATUS DISPLAY | Stellt die Anzeige des vertikalen und horizontalen Bildumkehrstatus ein. | 85 |
| ㉗ COLOR BAR | Stellt die Farbbalkenanzeige ein. | 85 |
| ㉘ FOOTSW CONTROL CH1 FOOTSW CONTROL CH2 | Weist dem Fußschalter 1 eine Funktion zu. Weist dem Fußschalter 2 eine Funktion zu. | 85 |
| ㉙ USER PROFILE SAVE / LOAD | Speichert die Profile zum USB-Speicher/Lädt die Profile vom USB-Speicher | 85 |
| ㉚ SAVE / LOAD MODE (USB) | Legt die Methode des Speicherns zum/Ladens vom USB-Speicher fest. | 86 |
| ㉛ DIGITAL ZOOM | Stellt die Zulassung des elektronischen Zooms ein. | 86 |
| ㉜ DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | Stellt die Anzeige des elektronischen Zoom-Verhältnisses ein. | 86 |
| SYSTEM | | |
| ㉝ OSD POSITION | Legt die OSD-Position der Videoausgabe fest. | 86 |
| ㉞ HDMI1 COLOR DEPTH HDMI2 COLOR DEPTH | Legt die Farbtiefe von HDMI1 fest. Legt die Farbtiefe von HDMI2 fest. | 86 |
| ㉟ G/L SYNC TERMINAL SETTING | Legt den Synchronsignaleingabe-/Ausgabe-Steckerverbinder fest. | 86 |
| ㊱ G/L SYNC STATUS INFO | Zeigt den Status des Steckerverbinders für die externe Synchronisierung an. | 87 |
| ㊲ TIME ADJUSTMENT | Stellt die Uhr. | 87 |
| ㊳ USER PROFILE RESET | Stellt die Standardeinstellungen des Profils wieder her. | 87 |
| HEAD | | |
| ㊴ WHITE SHADING | Stellt die Weißtönung ein. | 88 |
| ㊵ H/V PHASE ADJUST | Stellt die horizontalen/vertikalen Phasen ein. | 88 |

Anzeige des Menüs

Die folgende Beschreibung erläutert, wie jedes SETUP-Menü auf dem angeschlossenen Monitor angezeigt werden kann.

QUICK MENU

Jede Einstellung [RED], [BLUE] und [LEVEL] vornehmen. Wenn die [PAGE]-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, wird die Startseite des QUICK MENU angezeigt.

Das QUICK MENU besteht aus zwei Seiten. Um die Seite umzuschalten, die [PAGE]-Taste drücken.

Um zwischen den sechs Profilen umzuschalten, die [PROFILE]-Taste drücken.

ADVANCED MENU

Wenn die [Menu]-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird, wird die Startseite des ADVANCED MENU angezeigt.

Das ADVANCED MENU besteht aus sieben Seiten. Um die Seite umzuschalten, drücken Sie die [PAGE]-Taste oder bewegen Sie den Cursor zum Tab unten auf der Seite und drücken Sie die Taste [◀] oder [▶].

Um zwischen den sechs Profilen umzuschalten, die [PROFILE]-Taste drücken.

MAINTENANCE MENU

Die Startseite des MAINTENANCE MENU wird angezeigt, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, während die [MENU]-Taste und [SEL]-Taste gleichzeitig gedrückt werden.

Das MAINTENANCE MENU besteht aus zwei Seiten. Um die Seite umzuschalten, die [PAGE]-Taste drücken oder den Cursor zur Registerkarte am unteren Rand des Menüs bewegen und auf die Taste [◀] oder [▶] drücken.

Allgemeine Bedienungshinweise


Wichtig:

- Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung, wenn kein Kamerakopf angeschlossen ist:
 - AWC-Inbetriebsetzung für WHITE BAL MODE
 - COLOR MATRIX
 - FREEZE
 - FLIP AND MIRROR
 - H/V PHASE ADJUST
 - WHITE SHADING
 - DIGITAL ZOOM
- Wenden Sie sich für die Punkte im MAINTENANCE MENU an Ihren Händler.


Die nachfolgende Beschreibung erläutert, wie das QUICK MENU im Allgemeinen funktioniert.

Startseite des QUICK MENU


BASIC (WB RED GAIN)-Seite

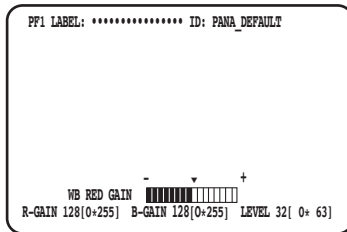


BASIC (WB BLUE GAIN)-Seite

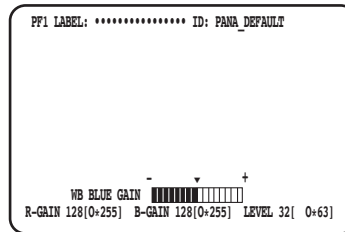

BASIC (AE LEVEL)-Seite

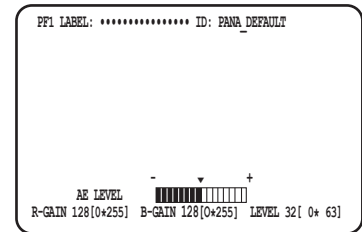

DETAIL-Seite

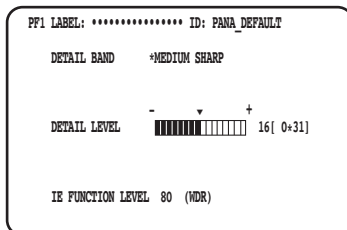

Schritt 1

BASIC-Seite

Jeden Punkt einrichten.

- WB RED GAIN
Die [RED]-Größe drehen, um den Rotanteil einzustellen.
- WB BLUE GAIN
Die [BLUE]-Größe drehen, um den Blauanteil einzustellen.
- AE LEVEL
Die [LEVEL]-Größe drehen, um die Helligkeit einzustellen.

DETAIL-Seite

Diese Seite schaltet auf die DETAIL-Seite um, wenn die [PAGE]-Taste gedrückt wird, während die Seite BASIC angezeigt wird.

- DETAIL BAND
Die [RED]-Größe drehen, um das Band der Kantenkorrektur einzustellen.
- DETAIL LEVEL
Die [BLUE]-Größe drehen, um den Pegel der Kantenkorrektur einzustellen.
- IE FUNCTION LEVEL
Drehen Sie die [LEVEL]-Lautstärke, um den ausgewählten IE-Funktionspegel anzupassen.

Schritt 2

Wenn der Vorgang für 4 Sekunden gestoppt wird, wird der Inhalt der Einrichtung gespeichert und das Kamerabild wiederhergestellt.

Die nachfolgende Beschreibung erläutert, wie das ADVANCED MENU im Allgemeinen funktioniert.

Startseite des ADVANCED MENU

EXPOSURE-Seite

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO   LEVEL  32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO    ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO   LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF   ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN    -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

PICTURE-Seite

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE *AMC   R-GAIN 128[ 0*255]
                                     B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND   *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL     5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP    OFF
COLOR LEVEL   160[ 0*255]
COLOR MATRIX  *USER
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

CONTRAST-Seite

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT  S-CURVE
GAMMA VALUE   0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE     MANUAL
KNEE POINT    8[0*15]
KNEE SLOPE    3[0*7]

IF FUNCTION SELECT WDR
LEVEL          80[0*255]
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

PROFILE-Seite

```

PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF

FLUORESCENCE MODE OFF
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

FUNC-Seite

```

FLIP AND MIRROR OFF
F+M STATUS DISPLAY OFF
COLOR BAR *ON
FOOTSM CONTROL CH1 PROFILE1-->2
FOOTSM CONTROL CH2 FREEZE
USER PROFILE SAVE/LOAD *USB-CAMERA(ALL)
SAVE/LOAD MODE(USB) AUTO
DIGITAL ZOOM ON
DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY OFF
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

SYSTEM-Seite

```

OSD POSITION UPPER LEFT
HDMI1 COLOR DEPTH YPbPr(422)
HDMI2 COLOR DEPTH YPbPr(422)
G/L SYNC TERMINAL SETTING OUT
G/L SYNC STATUS INFO INTERNAL

*TIME ADJUSTMENT
*USER PROFILE RESET
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

HEAD-Seite

```

WHITE SHADING AUTO(SET)
H/V PHASE ADJUST H 0[-20*20]
V 0[-11*11]
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Schritt 1

Jeden Punkt einrichten.

- Den einzustellenden Punkt auswählen
Den Cursor bewegen, indem Sie die [RED]-Größe drehen oder die Taste [Δ] oder [▽] drücken.
- Den Einrichtungspunkt ändern
Die [LEVEL]-Größe drehen oder die Taste [◀] oder [▶] drücken.
- Die erweiterte Einrichtungsseite anzeigen
Die [SEL]-Taste für den Punkt drücken, bei dem “*” angezeigt wird.
- Zur obersten Ebene der Einrichtungsseite zurückkehren
Die [MENU]-Taste drücken.

Anmerkung:

- Der Cursor blinkt.
In diesem Punkt wird dies durch “Schattiert” angezeigt.

Schritt 2

Nach dem Speichern des Einrichtungsinhalts die [MENU]-Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken, um die Einrichtungsseite zu schließen und zum Kamerabild zurückzukehren.
Der Einrichtungsinhalt bleibt erhalten, auch wenn die Stromversorgung der CCU ausgeschaltet wird.

Vorgabe wiederherstellen

- Um jede einzelne Einstellung im SETUP-MENÜ auf den Standardwert zurückzusetzen, verschieben Sie den Cursor zu dem zu ändernden Element und halten Sie die Tasten [◀] und [▶] gleichzeitig mindestens 1 Sekunde lang gedrückt.
- Verwenden Sie [USER PROFILE RESET], um die Anfangseinstellungen aller Profile wiederherzustellen. (Seite 87)
- Um die Anfangseinstellungen nur für das ausgewählte Profil wiederherzustellen, drücken Sie die [PROFILE]-Taste länger als 1 Sekunde.
- Um die Anfangseinstellungen für alle Punkte auf jeder Seite des “ADVANCED MENU” wiederherzustellen, bewegen Sie den Cursor zum Tab unten auf der Seite und halten Sie die Tasten [◀] und [▶] gleichzeitig für 1 Sekunde oder länger gedrückt.

MAINTENANCE MENU

Für die Details im MAINTENANCE MENU und wenden Sie sich an Ihren Händler.

| Einstellposten | Überblick |
|-------------------------------|--|
| CUSTOM | |
| OSD OUTPUT SEL (HDMI) | Richtet die OSD-Anzeige der HDMI-Ausgabe ein. |
| OSD OUTPUT SEL (SDI) | Richtet die OSD-Anzeige der SDI-Ausgabe ein. |
| OSD CHARACTER MODE | Gibt das OSD-Zeichenformat an. |
| KEY BIND (MENU) | Weist der [MENU]-Taste eine Funktion zu. |
| KEY BIND (↑↓) | Weist den Tasten [△] und [▽] jeweils eine Funktion zu. |
| KEY BIND (←→) | Weist der Tasten [◀] und [▶] jeweils eine Funktion zu. |
| FUNC/INFO | |
| BLEMISH COMP | Richtet die Fehlerkompensation ein. |
| BLACK BAL | Richtet den Schwarzabgleich ein. |
| CABLE DIAG MODE | Stellt die Qualität des Kamerakabels fest. |
| DIPSW STATUS | Zeigt den Einstellstatus der DIPSW an. |
| FPGA STATUS | Zeigt die Temperatur von FPGA an. |
| ALL RESET | Stellt alle Standardeinstellungen wieder her. |
| CPU VER. (MAIN / SUB) | Zeigt die CPU-Version an. |
| FPGA VER. (FRONT/REAR) | Zeigt die FPGA-(CCU)-Version an. |
| HEAD VER. | Zeigt die FPGA-(HEAD)-Version und den Kameratyp an. |

Anmerkung:

- [ALL RESET] initialisiert Folgendes nicht:
[HEAD GAIN], [WHITE SHADING], [H/V PHASE ADJUST] im ADVANCED MENU und [BLEMISH COMP] im MAINTENANCE MENU.

Ein Profil anlegen

Wenn die Details, das Gamma, der Farbton usw. dem Standort der Kamera entsprechend als Profil gespeichert sind, kann der Benutzer die registrierten Inhalte einfach aufrufen, indem die [PROFILE]-Taste an der Vorderseite der CCU gedrückt wird. Bis zu 6 Profile können registriert werden. Die geeignete Einstellung zur Aufnahme fluoreszierender Bilder ist in PROFILE 5 und PROFILE 6 voreingestellt. Die Registrierung kann auf der Startseite des ADVANCED MENU durchgeführt werden. Die Profilsseite besteht aus vier Seiten. Die Profildnummer wird oben links auf der entsprechenden Profilsseite angezeigt. Die unter "USER PROFILE LABEL" angegebenen Zeichen werden unter "LABEL" (Seite 83) angezeigt. Die Anfangseinstellung in PROFILE 1 bis 4 ist leer.

EXPOSURE-Seite

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0+ 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0+8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

PICTURE-Seite

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| WHITE BAL MODE | *AWC | R-GAIN | 128[0+255] |
| | | B-GAIN | 128[0+255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP | LEVEL | 16[0+ 31] |
| DMR LEVEL | 5[0+ 10] | | |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68+ 95] | | |
| FLARE COMP | OFF | | |
| COLOR LEVEL | 160[0+255] | | |
| COLOR MATRIX | *USER | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

CONTRAST-Seite

| | |
|--|-----------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35+0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0+15] |
| KNEE SLOPE | 3[0+7] |
| IE FUNCTION SELECT | WDR |
| LEVEL | 80[0+255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

PROFILE-Seite

| | |
|--|------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| USER PROFILE | |
| USER PROFILE ID | *OFF |
| USER PROFILE LABEL | *OFF |
| FLUORESCENCE MODE | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Stellt EXPOSURE ein

① AE einrichten [AE]

Die Helligkeit des Bildes wird automatisch eingestellt, wenn "AUTO" für die AE (automatische Belichtung) eingestellt ist. Wenn "MANUAL" ausgewählt ist, kann die Helligkeit des Bildes manuell eingestellt werden. Der AE-Pegel kann auf der Seite erweiterte Einstellungen eingestellt werden.

Die AE-Funktion stellt die Helligkeit des Bildes durch die Steuerung von "GAIN" und "SHUTTER" ein.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0+ 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0+8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

② Elektronischen Verschluss festlegen [SHUTTER]

Die elektronische Verschlusszeit aus den folgenden Optionen auswählen: "AUTO", "MANUAL(FIX)", "MANUAL(VAL)". Wenn "MANUAL(FIX)" ausgewählt ist, kann die elektronische Verschlusszeit angegeben werden. Die folgenden Verschlussgeschwindigkeiten stehen zur Verfügung:

Wenn die Bildfrequenz 59,94 Hz beträgt: 1/60 (Vorgabe), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, *MANU

Wenn die Bildfrequenz 50 Hz beträgt: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, *MANU

Wenn nach der Auswahl von "*MANU" die [SEL]-Taste gedrückt wird, wird die "SHUTTER"-Seite angezeigt und die Feineinstellung der Verschlusszeit kann erfolgen.

Der Einstellbereich erstreckt sich von 10/1125 bis 1124/1125.

Wenn "MANUAL" für "AE" ausgewählt ist, kann die elektronische Verschlusszeit mit dem [LEVEL]-Regler durch die Auswahl von [MANUAL(VAL)] fein eingestellt werden.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0+ 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0+8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

| | |
|---------------|-----------|
| ** SHUTTER ** | |
| SHUTTER | MANU |
| MANU SET | 1124/1125 |

Anmerkung:

- "MANUAL" für "AE" auswählen, um "SHUTTER" einzurichten. (☞ Seite 76)
 - Wenn unter Fluoreszenzbeleuchtung mit 50 Hz ein Flackern bemerkt wird, kann die Auswahl von "1/100" für die Verschlusszeit das Flackern verringern.
-

③ Stellt Pixel hinzufügen ein [BINNING]

Die Empfindlichkeit kann durch Hinzufügen von Pixeln verbessert werden.

Der Modus Pixel hinzufügen kann aus folgenden Optionen ausgewählt werden:

- OFF : Stellt das Hinzufügen von Pixeln aus.
- LINE MIX (Vorgabe) : Fügt Pixel in vertikaler Richtung hinzu. (Die vertikale Auflösung wird verschlechtert.)
- PIX MIX : Fügt Pixel in horizontaler Richtung hinzu. (Die horizontale Auflösung wird verschlechtert.)
- P/L MIX : Fügt Pixel in vertikaler und horizontaler Richtung hinzu.
(Die horizontale und vertikale Auflösung werden verschlechtert.)

④ Verstärkung einstellen [GAIN]

Eine der nachfolgend gezeigten Verstärkungs-Einstellpositionen wählen:

- OFF : Keine Verstärkungs-Einstellung
- AUTO (Vorgabe) : Automatische Verstärkungseinstellung
Der zulässige Höchstwert für die automatische Einstellung wird verwendet.
- MANUAL(FIX) : Manuelle Verstärkungseinstellung
Die Verstärkung wird auf den Einstellungswert festgelegt.
- MANUAL(VAL) : Die Verstärkung mit dem [LEVEL]-Regler manuell einstellen, wenn "MANUAL" für "AE" ausgewählt ist.
Dies ermöglicht eine feinere Einstellung als "MANUAL(FIX)".

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

⑤ Legt die Langzeitbelichtung fest [LONG EXPOSURE]

Die Langzeitbelichtung aus "OFF", "AUTO", "MANUAL(FIX)", FIX(x1) auswählen.

- OFF (Vorgabe) : Stellt die Langzeitbelichtung auf aus ein.
- AUTO : Steuert die Langzeitbelichtung automatisch.
Der Höchstwert der automatischen Steuerung wird als die Speicherzeit festgelegt.
- MANUAL(FIX) : Aktiviert die manuelle Anpassung der Langzeitbelichtung.
Die Zeit wird auf die festgelegte Speicherzeit festgelegt.
Die Speicherzeit kann aus "OFF", "x2", "x4" oder "x8" ausgewählt werden.
- FIX(x1) : Deaktiviert die Langzeitbelichtung.
Ist verfügbar, wenn "MANUAL" für AE ausgewählt wird.

⑥ Helligkeitserfassungsbereich einstellen [AREA SELECTION]

Wenn hinter dem Aufnahmeobjekt eine helle Lichtquelle vorhanden ist, wie zum Beispiel ein Strahler, kann das Aufnahmeobjekt unter Umständen zu dunkel erscheinen. Gegenlichtkompensation durch Maskieren des hellen Hintergrundbereichs beseitigt diese Erscheinung.

Den Cursor auf "AREA SELECTION" bewegen und mit den Tasten [◀] oder [▶] einen Bereich wählen.


| | | |
|------------------|----------|--------------------|
| PFI LABEL: | | ID: PANA_DEFAULT |
| AE | *AUTO | LEVEL 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | --- |
| BINNING | LINE MIX | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | --- |
| AREA SELECTION | ALL | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | |
| HEAD GAIN | -6dB | |

[EXPOSURE] PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD


Der Bereich kann von den folgenden Einstellungen gewählt werden:

* Die in den untenstehenden Abbildungen dargestellten Erkennungsbereiche werden nicht angezeigt.


ALL (Vorgabe): Der Erkennungsbereich umfasst die gesamte Bildschirmfläche.

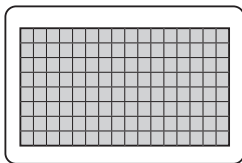


M CIRCLE: Der Erkennungsbereich ist der mittelgroße Kreis in der Mitte des Bildschirms.

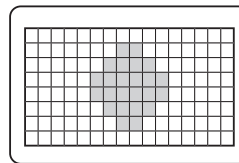

S CIRCLE: Der Erkennungsbereich ist der kleine Kreis in der Mitte des Bildschirms.

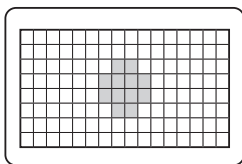

L CIRCLE: Der Erkennungsbereich ist der große Kreis in der Mitte des Bildschirms.

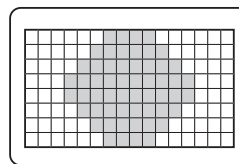


MANU: Der Erkennungsbereich kann manuell festgelegt werden. (☞ Seite 78)

AUTO: Dunkle Bereiche werden automatisch maskiert, und es werden nur helle Bereiche erkannt.

Den Erfassungsbereich manuell einstellen

Den Erfassungsbereich manuell einstellen.

Einstellungsbildschirm des Erfassungsbereichs

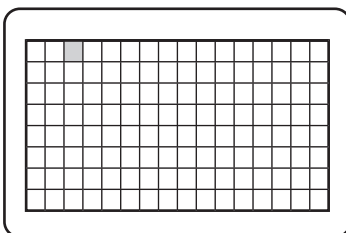

Schritt 1

"MANU" für "AREA SELECTION" auswählen und die [SEL]-Taste drücken.

→ Die Maskierseite erscheint.

Schritt 2

Den Cursor durch Drücken der Taste [Δ], [∇], [◀] oder [▶] auf den Nichterkennungsbereich bewegen und die [SEL]-Taste drücken.

→ Der maskierte Bereich wird in Grau angezeigt.

Anmerkung:

- Die Erfassung erfolgt nur in den maskierten Bereichen.
- Zum Stornieren eines maskierten Bereichs den Cursor auf den betreffenden Bereich bewegen, dann die [SEL]-Taste drücken.

Zum Aufheben aller Masken die Tasten [◀] und [▶] gleichzeitig mindestens 1 Sekunde gedrückt halten.

Schritt 3

Nach der Beendigung der Bereichseinstellung die [MENU]-Taste drücken.

→ Die MENU-Seite wird wiederhergestellt.

⑦ Die Helligkeitserfassungsgewichtung einstellen [PEAK/AVE LEVEL]

Den Cursor auf "PEAK/AVE" bewegen und mit den Tasten [◀] oder [▶] eine Erkennungsempfindlichkeit wählen. Wenn der Wert in die Richtung "0" bewegt wird, wird der Spitzenwert (Maximum) erfasst. Wenn der Cursor in die Richtung "8" bewegt wird, wird der Mittelwert erfasst.

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| AE | *AUTO LEVEL 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

⑧ Stellen Sie die Kopfverstärkung ein [HEAD GAIN]

Die Kopfverstärkung kann aus -9 dB, -6 dB, -3 dB, OFF(0 dB), +3 dB, +6 dB oder +9 dB ausgewählt werden.

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| AE | *AUTO LEVEL 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Stellt PICTURE ein

⑨ Weißabgleich einstellen [WHITE BAL MODE]

Eines der folgenden Einstellungsverfahren für den Weißabgleich wählen:

AWC (Vorgabe) : Der Steuerungsmodus des Weißabgleichs wird eingestellt. Dies ist für Standorte mit einer stabilen Lichtquelle geeignet.

Bei Wahl von "AWC" muss zunächst die Einstellung des Weißabgleichs erfolgen.

MANUAL : Der Weißabgleich kann manuell eingestellt werden.

| | |
|--|--------------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| WHITE BAL MODE | *AWC R-GAIN 128[0*255] |
| | B-GAIN 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP LEVEL 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] |
| FLARE COMP | OFF |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] |
| COLOR MATRIX | *USER |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Bei Wahl von "AWC" den Weißabgleich nach folgendem Verfahren einstellen.

Schritt 1

Die Kamera auf ein weißes Objekt richten. Ein Bild mit einer weißen Fläche unter die verwendete Lichtquelle halten.

Schritt 2

Drücken Sie die [AWC]-Taste im vorherigen Bildschirm.
→ Der AWC wird gestartet und die AWC-Statuslampe blinkt. Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn "AWC OK" angezeigt wird und die Lampe erlischt.

Anmerkung:

- Die Einstellung ist für jedes Profil verfügbar. (☞ Seite 76)
- Den Schritt 1 und 2 wiederholen, wenn die Lampe nach der Anzeige von "AWC NG" leuchtet oder die Lampe nach dem Wechsel des Profils aufleuchtet.
- Wenn der AWC ausgeführt wird, während die Einstellung von "R-GAIN" oder "B-GAIN" von "MANUAL" auf etwas anderes als der Standard (128) steht, kann der Weißabgleich ordnungsgemäß eingestellt werden.

Wenn "MANUAL" ausgewählt ist, den Cursor auf "R-GAIN" oder "B-GAIN" bewegen und den Weißabgleich mit der Taste [◀] oder [▶] einstellen.

10 Details einstellen [DETAIL BAND]

Legt Frequenzband und Pegel der Kantenkorrektur fest.

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE  *ANC      R-GAIN 128[ 0*255]
                *MNC      B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND     *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL       5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL  76[68* 95]
FLARE COMP      OFF
COLOR LEVEL     160[ 0*255]
COLOR MATRIX    *USER

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

Schritt 1

Den Cursor auf "DETAIL BAND" bewegen und ein Bandmuster aus den folgenden Optionen auswählen: "OFF", "SOFT", "MEDIUM SHARP", "SHARP", oder "SHARPEST". Die Kontur wird dicker (niedriges Band), wenn der Cursor in die Richtung "SHARPEST" bewegt wird, während die Kontur dünner wird (hohes Band), wenn der Cursor in die Richtung "SOFT" bewegt wird.

Schritt 2

Den Cursor auf "DETAIL LEVEL" bewegen, um das Intensitätsniveau einzustellen. Wenn der Wert erhöht wird, wird das Bild schärfer, und wenn er verringert wird, wird das Bild weicher.

Anmerkung:

- In der Kontur eines fotografischen Gegenstandes können Treppeneffekte auftreten, das ist aber keine außergewöhnliche Erscheinung. Falls diese Erscheinung stört, "DETAIL BAND" oder "DETAIL LEVEL" niedriger einstellen und die Bildqualität einstellen.

11 Digitale Rauschreduzierungsfunktion einstellen [DNR LEVEL]

Die digitale Rauschreduzierung mindert Bildrauschen. Die Taste [◀] oder [▶] verwenden, um die Stufe der Rauschreduzierung einzustellen.

12 Die Schwarzabhebung einstellen [PEDESTAL LEVEL]

Die Schwarzabhebung (das Niveau des Schwarzsignals) einstellen, indem die Taste [◀] oder [▶] bedient wird, während das Resultat auf einem Wellenform- oder Farbvideomonitor beobachtet wird.

Wenn der Wert erhöht wird, wird das Bild heller, und wenn er verringert wird, wird das Bild dunkler.

13 Die Streulichtkorrektur einstellen [FLARE COMP]

Mit "ON" oder "OFF" die Video-Bewegungsmeldung aktivieren bzw. deaktivieren. Bei Wahl von "ON" wird Lensflare reduziert.

14 Den Farbpegel einstellen [COLOR LEVEL]

Den Farbpegel einstellen, indem die Taste [◀] oder [▶] bedient wird, während das Resultat auf einem Wellenform- oder Farbvideomonitor beobachtet wird.

Wenn der Wert erhöht wird, wird die Farbtiefe erhöht, und wenn er verringert wird, wird die Farbtiefe verringert.

15 Den Farbton einstellen [COLOR MATRIX]

Den Farbton einstellen, während das Resultat auf einem Wellenform- oder Farbvideomonitor beobachtet wird.

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE  *ANC      R-GAIN 128[ 0*255]
                *MNC      B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND     *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL       5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL  76[68* 95]
FLARE COMP      OFF
COLOR LEVEL     160[ 0*255]
COLOR MATRIX    *USER

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

```
      ** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B PHASE  ....|.... 0 ( 0 )
B GAIN   ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET (NEW SETTING)
```

```
      ** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B/B-Mg PHASE ....|.... 0 ( 0 )
B PHASE       ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg PHASE    ....|.... 0 ( 0 )
B/B-Mg GAIN   ....|.... 0 ( 0 )
B GAIN        ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg GAIN     ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET (NEW SETTING)
```


Schritt 1

Die einzustellende Farbe so groß wie möglich in der Mitte des Bildschirms darstellen.

Schritt 2

Die Achse nahe der Zielfarbe auswählen. Eine der folgenden Achsen wählen:

USER (Vorgabe), B-Mg, Mg, Mg-R, R, R-Ye, Ye, Ye-G, G, G-Cy, Cy, Cy-B, B

Schritt 3

Nach Auswahl der Achse die [SEL]-Taste drücken.
→ Der "MATRIX"-Bildschirm wird angezeigt.

Schritt 4

Zum Durchführen der Feineinstellung müssen "PHASE" (Nuance) und "GAIN" (Chroma) mit der [←] oder [→]-Taste eingestellt werden.

Schritt 5


Wählen Sie "BEFORE" oder "AFTER" mit "EFFECT SELECT" und überprüfen Sie, ob der Effekt angewendet wird. Um die Einstellung zu bestätigen, wählen Sie "SET (NEW SETTING)" und drücken Sie dann die [SEL]-Taste. Um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen, wählen Sie "CANCEL" und dann die [SEL]-Taste.

Unschärfe Farbachse

Bei Wahl von "USER AREA" auf der "MATRIX"-Seite und anschließender Wahl einer Farbe erscheint die Achse automatisch. Die Farbe wird auf der Farberkennungsseite gewählt.


Mit dem blinkenden, schwarzen Cursorviereck die gewünschte Farbe auf der Farberkennungsseite wählen.

Farberkennungsseite

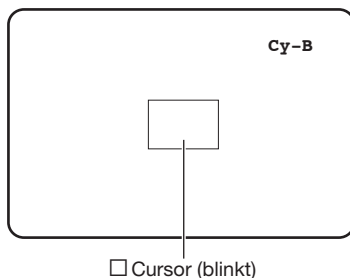

<Farbmatrix-Splitting-Tabelle>

* Diese Tabelle stellt eine Richtlinie zum Anzeigen der am nächsten gelegenen Farbchse dar.

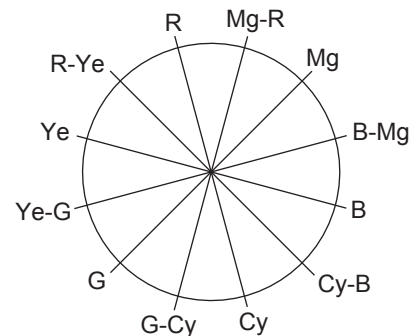

Schritt 1

Die Kamera auf die Mitte des Fotomotivs richten, dessen Farbe erkannt werden soll.

Falls die Kamera nicht beweglich ist, das Cursorviereck durch Drücken der Tasten [△], [▽], [←] und [→] auf den die gewünschte Farbe enthaltenden Bereich bewegen.

Anmerkung:

- Wenn der blaue Regler gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, ändert sich die Größe des Rechteckcursor in der Reihenfolge groß → mittel → klein. Die zur Größe des Fotomotivs passende Größe wählen.


Schritt 2

Die [SEL]- oder [MENU]-Taste drücken.
→ Die "MATRIX"-Seite erscheint wieder.

Schritt 3

Zur Feinabstimmung "PHASE" (Farbphase) und "GAIN" (Farbsättigung) einstellen.

Zum Beispiel bietet die Einstellung von "PHASE" oder "GAIN" bei "Cy/Cy-B" am nachfolgend gezeigten Menü eine gleichzeitige Einstellung von "PHASE" oder "GAIN" der benachbarten Achsen "Cy" und "Cy-B" in der obigen Farbmatrix-Splitting-Tabelle.

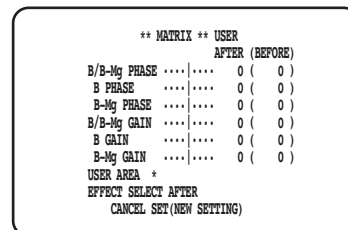

Anmerkung:


- Bei Erkennung der Farbe auf der Farbchse in der Farbmatrix-Splitting-Tabelle werden die anschließenden Achsen nicht dargestellt.

Stellt CONTRAST ein

16 Stellt den Gammakorrekturenmodus ein [GAMMA SELECT]

Der Gammamodus kann aus den folgenden Optionen ausgewählt werden:

- S-CURVE (Vorgabe) : Durch die Gammaverstärkung kann das Bildrauschen verringert werden, während der Kontrast beibehalten wird.
NORMAL : Eine Standard-Gamma-Einstellung

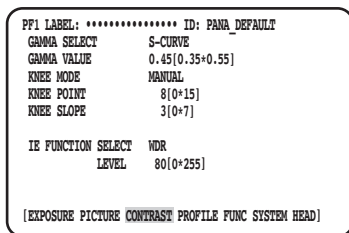

17 Die Gammakorrekturenstufe einstellen [GAMMA VALUE]

Bei der Einstellung der Gammakorrekturenstufe das Resultat auf einem Wellenform- oder Farbvideomonitor beobachten.

Stellt den Gammakorrekturenpegel zwischen 0,35 und 0,55 ein (Vorgabe: 0,45).

Der Gammakorrekturenpegel wird auf OFF eingestellt (Gamma = 1), wenn die [◀]-Taste gedrückt wird, während der Gammakorrekturenpegel "0,55" beträgt.

18 Stellt den Knie-Modus ein [KNEE MODE]

Aufgrund der Beleuchtung oder Spiegelung des Motivs können "Spitzlichter" auftreten, bei denen der helle Teil des Bildes u. u. abgeflacht aussieht. Dieses Phänomen tritt auf, wenn das Luminanz-Signal den Dynamikbereich der Kamera überschreitet. Um die hohen Luminanz-Eingangssignale innerhalb des Dynamikbereichs der Kamera festzulegen, die Abstufung mit der Kniefunktion komprimieren.

Eine der nachfolgenden Einstellmethoden wählen:

- MANUAL (Vorgabe) : Ermöglicht die manuelle Anpassung des Kniefunktion und Kniefunktion.
AUTO : Passt den Kniefunktion und den Kniefunktion automatisch an.

19 Stellt den Kniefunktion ein [KNEE POINT]

Beobachten Sie während der Einstellung des Kniefunktion das Resultat unbedingt auf einem Wellenform- oder Videomonitor.

Stellt den Kompressionspunkt für die hohen Luminanz-Eingangssignale ein.

20 Stellt den Knie-Hang ein [KNEE SLOPE]


Beobachten Sie während der Einstellung des Knie-Hangs das Resultat unbedingt auf einem Wellenform- oder Videomonitor.

Stellen Sie die Kompressionsstufe für die hohen Luminanz-Eingangssignale durch Anpassung des Knie-Hangs ein.

21 Die [IE]-Taste einstellen [IE FUNCTION SELECT]

Wählen Sie eine Funktion, die der [IE]-Taste (Bildverbesserung) zugewiesen wird, aus folgenden Optionen aus:

- WDR : Die Erweiterungsfunktion für den dynamischen Bereich korrigiert den dunklen Bereich heller, während die Überbelichtung kontrolliert wird.
DARK AREA CORRECTION : Die adaptive Schwarzdehnungsfunktion korrigiert den dunklen Bereich heller.
OVER EXPOSURE REDUCTION : Die Überbelichtungskorrektur steuert die Überbelichtung.
SMOKE CORRECTION : Die Rauchkorrektur beseitigt weiße Unschärfe.
COLOR ENHANCEMENT : Die Farbverstärkung verstärkt die ausgewählte Farbe.

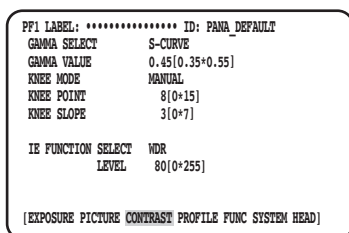

22 Stellt den Korrekturpegel ein, der der [IE]-Taste zugewiesen ist [IE FUNCTION LEVEL]

Passen Sie den Korrekturpegel der mit [IE FUNCTION SELECT] ausgewählten Funktion mit den Tasten [←] oder [→] an, während Sie das Resultat auf einem Wellenform- oder Videomonitor beobachten.

Wird der Wert erhöht, erhöht sich der Umfang der Korrektur und wenn er verringert wird, verringert sich der Umfang der Korrektur.

Wird "COLOR ENHANCEMENT" ausgewählt, können die Farben RED, RED&YELLOW oder YELLOW zusätzlich zum Korrekturpegel ausgewählt werden.

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT      S-CURVE
GAMMA VALUE       0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE         MANUAL
KNEE POINT        8[0*15]
KNEE SLOPE        3[0*7]

IE FUNCTION SELECT HDR
LEVEL             80[0*255]

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

Stellt PROFILE ein

23 Stellt die Benutzerprofil-ID und -Beschriftung ein [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]

Stellt die Benutzerprofil-ID und -Beschriftung ein. Die ID und das Label, die den Kamerastandort oder den Bildinhalt verdeutlichen, können mithilfe alphanumerischer Zeichen und Symbole erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Für die ID und Beschriftung können bis zu 16 alphanumerische Zeichen verwendet werden.

Zum Festlegen der ID und des Labels die nachfolgenden Schritte ausführen.

Label-Erstellungsmenü (Wenn die Bildfrequenz 59,94 Hz beträgt)

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID  *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF

FLUORESCENCE MODE OFF

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

```
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
0123456789
()., ' " : ; & # ! ? =
+ - * / % $ % ¤ ¤ ¤ ¤
← → SPACE
* POSI RET END RESET
█ .....
|
Eingabebereich
```

Label-Erstellungsmenü (Wenn die Bildfrequenz 50 Hz beträgt)

```
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
0123456789
()., ' " : ; & # ! ? =
+ - * / % $ % ¤ ¤ ¤ ¤
← → SPACE
* POSI RET END RESET
█ .....
|
Eingabebereich
```

Anzeigepositionsseite

```
FLOOR 1
```

Schritt 1

"USER PROFILE ID" oder "USER PROFILE LABEL" auf " * ON" setzen und die [SEL]-Taste drücken.

→ Der Namenserstellungsbildschirm wird angezeigt.

Wichtig:

- Wenn " * OFF" für "USER PROFILE ID" oder "USER PROFILE LABEL" ausgewählt ist, kann "USER PROFILE" eingestellt, aber nicht angezeigt werden.

Anmerkung:

- Die Einstellung " * POSI" der "USER PROFILE ID" ist nur verfügbar, wenn " * OFF" für das "USER PROFILE LABEL" ausgewählt ist. Wenn " * ON" für das "USER PROFILE LABEL" ausgewählt ist, hat die Einstellung " * POSI" des "USER PROFILE LABEL" die höhere Priorität.
- Standardmäßig ist "FLUORESCENCE3" für "PROFILE 5" eingestellt; "FLUORESCENCE1" ist für "PROFILE 6" eingestellt.

Schritt 2

Den Cursor durch Drücken der Taste [Δ], [▽], [◀] oder [▶] auf das gewünschte Zeichen bewegen und die [SEL]-Taste drücken.

→ Die eingegebenen Zeichen werden im Bearbeitungsfeld angezeigt.

<Zeicheneingabe>

- Zum Ändern eines Zeichens den Cursor auf “←” oder “→” bewegen und die [SEL]-Taste drücken. Den Cursor auf das zu ändernde Zeichen im Eingabebereich bewegen und ein neues Zeichen eingeben.
- Zum Eingeben einer Leerstelle den Cursor auf “SPACE” bewegen und die [SEL]-Taste drücken.
- Zum Löschen aller eingegebener Zeichen den Cursor auf “RESET” bewegen und die [SEL]-Taste drücken.

Schritt 3

Nach der Eingabe des Namens den Cursor auf “*POS1” bewegen und die [SEL]-Taste drücken.

→ Der Anzeigepositionsbildschirm wird angezeigt und der eingegebene Kameraname blinkt.

Schritt 4

Die Tasten [Δ], [▽], [◀] und [▶] verwenden, um die Position des Namens festzulegen, und die [MENU]-Taste drücken.

→ Die Anzeigeposition ist damit festgelegt und der Namenserstellungsbildschirm wird wiederhergestellt.

24 Legen Sie die zusätzliche Einstellung für jeden fluoreszierenden Bildaufnahmemodus fest [FLUORESCENCE MODE]

Legen Sie die zusätzliche Einstellung für jeden fluoreszierenden Bildaufnahmemodus fest.



Die zusätzliche Einstellung kann aus den folgenden Optionen ausgewählt werden:

OFF (Vorgabe) : Führt keine zusätzliche Einstellung für die fluoreszierende Bildaufnahme aus.

MODE1 : Führt die zusätzliche Einstellung für FLUORESCENCE1 durch.

MODE2 : Führt die zusätzliche Einstellung für FLUORESCENCE2 durch.

MODE3 : Führt die zusätzliche Einstellung für FLUORESCENCE3 durch.

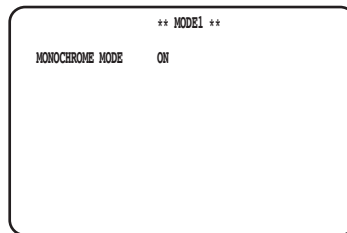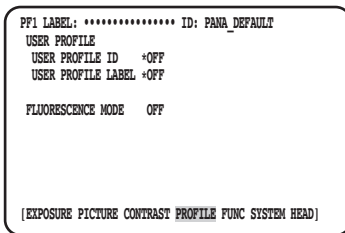

Wichtig:

- Die Einstellung für fluoreszierende Bildgebung ist in PROFILE 5 und 6 voreingestellt.
- Bei Verwendung des fluoreszierenden Bildaufnahmemodus sind Peripheriegeräte wie eine Lichtquelle oder Filter, usw. erforderlich.
- Wenden Sie sich vor der Verwendung bitte an Ihren Händler.

Anmerkung:

- Wenn “MODE1” ausgewählt ist, stellen Sie “MONOCHROME MODE” entweder auf “ON” (Schwarz-Weiß-Modus: Vorgabe) oder auf “OFF” (Farbmodus).
- Bei einer anderen Einstellung als “OFF” kann “GAIN” bis zu 18 dB eingestellt werden. (Bis zu 12 dB, wenn “OFF” eingestellt ist.)

Stellt FUNC ein

25 Die horizontale und vertikale Umdrehfunktion einstellen [FLIP AND MIRROR]


Das Folgende ist als vertikale und horizontale Umkehrfunktion verfügbar:

OFF (Vorgabe) : Normale Anzeige

FLIP : Vertikal gespiegelt

MIRROR : Horizontal gespiegelt

FLIP+MIRROR : Vertikal und horizontal gespiegelt. Drücken Sie zum Umschalten der Einstellung die [Δ] oder [▽]-Taste.

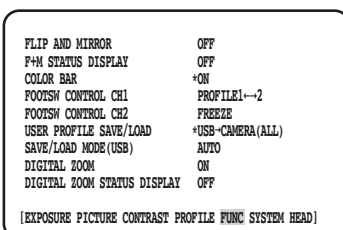

Anmerkung:

- Die Standbildfunktion kann gleichzeitig ausgeführt werden.

26 Die Anzeige für den vertikalen und horizontalen Umkehrstatus einstellen [F+M STATUS DISPLAY]

“ON” oder “OFF” (Voreinstellung) auswählen, um festzulegen, ob “B” (vertikale Spiegelung), “H” (horizontale Spiegelung), “H” (vertikale und horizontale Spiegelung) auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn die Taste [Δ] oder [▽] gedrückt wird.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1↔2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

27 Den Farbbalken anzeigen [COLOR BAR]

Den Farbbalken anzeigen.

Die Startseite wird wiederhergestellt, wenn die [MENU]-Taste gedrückt wird.

Anmerkung:

- Wenn der Kamerakopf nicht mit der CCU verbunden ist, wird der Farbbalken angezeigt.

28 Die Fußschalter einrichten [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]

Die folgenden Funktionen können CH1 oder CH2 zugewiesen werden:

| | |
|----------------|--|
| NONE | : Den Schalter deaktivieren. |
| FREEZE | : Das Standbild des Bildschirms auf ON/OFF festlegen. |
| FLIP+MIRROR | : Die vertikale und horizontale Bildumkehr auf ON/OFF festlegen. |
| FLIP | : Die vertikale Bildumkehr auf ON/OFF festlegen. |
| MIRROR | : Die horizontale Bildumkehr auf ON/OFF festlegen. |
| PROFILE 1↔2 | : Schaltet zwischen Profil 1 und 2 um. |
| PROFILE 1↔5 | : Schaltet zwischen Profil 1 und 5 um. |
| PROFILE 1↔6 | : Schaltet zwischen Profil 1 und 6 um. |
| PROFILE 3↔4 | : Schaltet zwischen Profil 3 und 4 um. |
| PROFILE ALL | : Schaltet zwischen allen Profilen um, von 1 bis 6 der Reihe nach. |
| ZOOM IN | : Vergrößert das Bild, wenn “ON(ENABLE)” für “DIGITAL ZOOM” ausgewählt ist. |
| ZOOM OUT | : Verkleinert das Bild, wenn “ON(ENABLE)” für “DIGITAL ZOOM” ausgewählt ist. |
| ZOOM 1.0x↔2.0x | : Schaltet zwischen 1,0x und 2,0x um, wenn “ON(ENABLE)” für “DIGITAL ZOOM” ausgewählt ist. |

Anmerkung:

- Der Fußschalterbetrieb wird deaktiviert, wenn das SETUP-Menü angezeigt wird.

29 Profile speichern/laden [USER PROFILE SAVE/LOAD]

Wenn der USB-Speicher eingesetzt wird, kann SAVE (CAMERA→USB) oder LOAD (USB→CAMERA) des Profils ausgeführt werden.

Wählen Sie “ALL” aus, um alle sechs Profile zu speichern oder auszulesen und wählen Sie “SINGLE” aus, um eine Datei zu speichern oder auszulesen.

Den Ordner und Dateinamen nicht ändern, der im USB-Speicher erstellt wird. Wenn die Namen geändert werden, wird das Laden des Profils fehlschlagen. Nach dem Speichern oder Laden wird der USB-Speicher automatisch ausgeworfen. Um den USB-Speicher durchgehend zu verwenden, diesen abziehen und wieder einsetzen.

Wichtig:

- Bearbeiten Sie die Datei und Ordnerstruktur nicht, die durch Drücken der [SAVE]-Taste erstellt wurde. Dies kann zu einem Fehler beim Laden führen.

30 Die Methode des Speicherns zum/Ladens vom USB-Speicher festlegen [SAVE/LOAD MODE (USB)]

Die folgenden Betriebsmodi sind verfügbar, wenn der USB-Speicher eingesetzt ist:

- AUTO : Eine Eingabeaufforderung wird automatisch angezeigt, die die gewünschte Aktion (Lesen/Laden/keine Aktion) erfragt.
MANUAL : Wenn ein USB-Speicher eingesetzt wird, wird keine Aktion ausgeführt. Die [USER PROFILE SAVE/LOAD]-Seite bedienen.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSH CONTROL CH1 | PROFILE1→2 |
| FOOTSH CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Anmerkung:

- Der Inhalt aller Punkte in QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST" und "PROFILE" im ADVANCED MENU werden gespeichert oder geladen. (Außer "HEAD GAIN" von "EXPOSURE")

31 Stellt den Zoom ein und aus [DIGITAL ZOOM]

Stellt die Zoomfunktion ON/OFF.

Der Zoomfaktor kann zwischen 1x bis 2,5x in Schritten von 0,1x eingestellt werden. Drücken Sie zum Umschalten der Einstellung die [◀] oder [▶]-Taste.

32 Stellt die Zoom-Verhältnis-Anzeige ein [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]

Stellt ein, ob das aktuelle Zoom-Verhältnis auf dem Bildschirm angezeigt wird (Vorgabe: OFF).

Anmerkung:

- Ist 1x ausgewählt, wird das Verhältnis nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Stellt SYSTEM ein

33 Die OSD-Position der Videoausgabe festlegen [OSD POSITION]

Eine OSD-Position der Videoausgabe aus den folgenden Optionen auswählen:

- UPPER LEFT : Zeigt das OSD im Bereich oben links des Blickwinkels der Videoausgabe an.
UPPER RIGHT : Zeigt das OSD im Bereich oben rechts des Blickwinkels der Videoausgabe an.
LOWER LEFT : Zeigt das OSD im Bereich unten links des Blickwinkels der Videoausgabe an.
LOWER RIGHT : Zeigt das OSD im Bereich unten rechts des Blickwinkels der Videoausgabe an.

34 HDMI-Ausgangssignal festlegen [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]

Legt die Ausgangssignale für den HDMI-Ausgangssteckerverbinder fest.

Das Folgende ist verfügbar, wenn 1080p oder 1080i für die HDMI-Ausgabe ausgewählt ist:

YPbPr (422), YPbPr (444), RGB (LIMITED), RGB (FULL)

Wenn die Einstellung für das HDMI-Ausgangssignal oder das Videoformat gewechselt wird, kann das HDMI-Ausgangsvideo einige Sekunden lang unterbrochen werden.

35 Legt den Synchronsignaleingabe-/Ausgabe-Steckerverbinder fest [G/L SYNC TERMINAL SETTING]



Entweder "IN" oder "OUT (Vorgabe)" auswählen.

Wichtig:

- Die externe Synchronisationsfunktion kann für diese Reihe von Steuergeräten verwendet werden. GP-UH332C oder GP-UH532C an den Synchronsignaleingabe-/Ausgabe-Steckerverbinder anschließen. Anschließend "OUT" für Master und "IN" für SLAVE festlegen und das gleiche Videoausgabeformat anwenden.

36 Synchronisationsverfahren anzeigen [G/L SYNC STATUS INFO]

Der interne Synchronisationszustand "INTERNAL" oder externe Synchronisationszustand "**EXTERNAL" wird angezeigt. Wenn "**EXTERNAL" ausgewählt ist, kann die horizontale Phase angepasst werden.

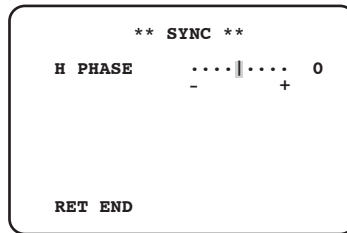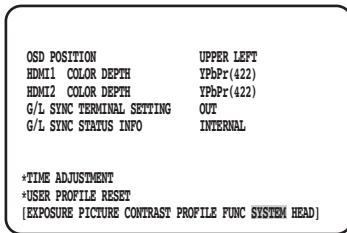

Horizontale Phase anpassen

Schritt 1

Den Cursor auf "**EXTERNAL" bewegen und die [SEL]-Taste drücken.

Schritt 2

"H PHASE" anpassen.

Anmerkung:

- "**EXTERNAL" wird angezeigt, wenn "IN" für "G/L SYNC TERMINAL SETTING" ausgewählt wird und die externen Synchronsignale eingegeben werden. Zu einem anderen Zeitpunkt wird "INTERNAL" angezeigt.
- Wenn der Einstellbildschirm von "H PHASE" geschlossen wird (horizontale Phase im externen Synchronisationsmodus), ist die HDMI-Videoausgabe etwa 5 Sekunden lang gestört.

37 Die Uhr stellen [TIME ADJUSTMENT]

Die aktuelle Uhrzeit "Monat/Tag/Jahr" und "Stunde/Minute" einstellen.

Zum Festlegen der Einstellung den Cursor auf "SET" und die [SEL]-Taste drücken.

Wenn die Datenspeicherfunktion des USB-Speichers für die Profile verwendet wird, ist stets die Uhr zu stellen.

38 Die Standardeinstellung des Profils wiederherstellen [USER PROFILE RESET]

Für alle Punkte in QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST" und "PROFILE" im ADVANCED MENU werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

Schritt 1

Den Cursor auf "USER PROFILE RESET" bewegen und die [SEL]-Taste drücken.

Schritt 2

Das Bestätigungsfenster "USER PROFILE RESET? YES/NO" wird angezeigt.

Wenn "YES" ausgewählt wird, wird die Standardeinstellung des Profils wiederhergestellt.

Anmerkung:


- Die "HEAD GAIN" der "EXPOSURE" wird nicht initialisiert.

Stellt HEAD ein

39 Die Weißtönung festlegen [WHITE SHADING]

Für die Weißtönung entweder "AUTO(SET)" oder "MANUAL" festlegen.

Wenn die Einstellung "AUTO(SET)" für die Weißtönung festgelegt ist

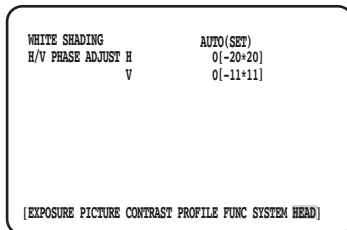

Schritt 1

Die Kamera auf ein weißes Objekt richten.

Schritt 2

"AUTO(SET)" wählen und die [SEL]-Taste drücken.

→ Die Weißtönungsfunktion startet und die Anzeige "AUTO(SET)" invertiert und blinkt abwechselnd. Die automatische Einstellung ist beendet, wenn "WHITE SHADING OK" am unteren Rand des MENU angezeigt wird.

Anmerkung:

- Die Weißtönung kann für jeden Kamerakopf festgelegt werden.
 - Wenn "WHITE SHADING NG" angezeigt wird, den Schritt 1 und 2 wiederholen.
-

Wenn die Einstellung "MANUAL" für die Weißtönung festgelegt ist

Schritt 1

"MANU" wählen und die [SEL]-Taste drücken.

→ Der manuelle Einrichtungsbildschirm für die Weißtönung wird angezeigt. Jede Richtung der roten/blauen Komponente der Weißtönung einstellen.

40 Die horizontale/vertikale Position des Bildschirms einstellen [H/V PHASE ADJUST]

Den Bildschirm in den horizontalen (rechts/links) oder vertikalen (oben/unten) Richtungen einstellen.

Anmerkung:

- Die "H/V PHASE ADJUST" kann für jeden Kamerakopf eingestellt werden.
-

Bitte überprüfen Sie das Gerät auf folgende Symptome, bevor Sie es in Service geben.

Falls sich ein Problem durch die hier vorgeschlagenen Kontrollen und Abhilfen nicht beheben lässt oder hier nicht behandelt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

| Symptom | Ursache/Abhilfe | Seitenverweis |
|--|---|---------------|
| Keine Bildgabe | <ul style="list-style-type: none"> Ist das Kabel ordnungsgemäß an den HDMI-Ausgangssteckerverbinder oder SDI-Ausgangssteckerverbinder angeschlossen? Den Anschluss auf Richtigkeit überprüfen. | 64 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ist das Format des an jedem Ausgangsanschluss anliegenden Video-Ausgangssignals mit dem am Monitor angezeigten VideofORMAT kompatibel? Sich vergewissern, dass das Format des Video-Ausgangssignals mit dem Videoformat kompatibel ist. | 64, 90 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Sind die Helligkeit und der Kontrast des Monitors korrekt eingestellt? Die Monitoreinstellungen auf Richtigkeit überprüfen. | – |
| | <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den Monitor nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen (1:ON/2:ON/3:ON/4:OFF/5:OFF/6:OFF). | 64 |
| Der Lampenstatus wird nicht geändert, nachdem die Taste [PROFILE] gedrückt wird | <ul style="list-style-type: none"> Einmaliges Drücken zeigt den Status an. Die [PROFILE]-Taste wiederholt drücken, bis der Indikator aufleuchtet. | 62 |
| Der Lampenstatus [AE] wird nicht geändert | <ul style="list-style-type: none"> Einmaliges Drücken zeigt den Status an. Die [AE]-Taste wiederholt drücken, bis der Indikator aufleuchtet. | 62 |
| Der Lampenstatus [IE] wird nicht geändert | <ul style="list-style-type: none"> Einmaliges Drücken zeigt den Status an. Die [IE]-Taste wiederholt drücken, bis der Indikator aufleuchtet. | 62 |
| Nur der Farbbalken wird angezeigt | <ul style="list-style-type: none"> Ist das Kamerakabel vorschriftsmäßig zwischen dem CCU und dem Kamerakopf angeschlossen? Den Anschluss auf Richtigkeit überprüfen. | 61, 64 |
| Farbmatrix [COLOR MATRIX] ist im Menü nicht einstellbar | <ul style="list-style-type: none"> Ist das Kamerakabel vorschriftsmäßig zwischen dem CCU und dem Kamerakopf angeschlossen? Die Bearbeitung der Bildqualität erfordert den Anschluss des Kamerakabels an den Kamerakopf. Den Anschluss auf Richtigkeit überprüfen. | 61, 64 |
| Gesamte Anzeige verschwommen | <ul style="list-style-type: none"> Ist die Blende richtig gewählt? Prüfen, ob die Blende passend eingestellt ist. Speziell für CCD-Kameras bestimmte Objektive mit der empfohlenen Blende verwenden. | 69 |
| Mehrere Kanten sichtbar | <ul style="list-style-type: none"> Die Einstellung für "DETAIL BAND" ändern. | 80 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Ein anderes Monitorkabel verwenden. | – |
| "AWC OK" erscheint nicht | <ul style="list-style-type: none"> Falls das Bild zu hell ist, eine kleinere Blende wählen oder "AE" auf "AUTO" setzen. | 69, 76 |
| Schwarze Streifen am rechten und linken Bildrand | <ul style="list-style-type: none"> Diese Erscheinung ist auf die technischen Daten des Monitorbildschirms zurückzuführen. Das Bild im Vollbildformat über die gesamte Bildschirmbreite anzeigen. | – |
| Bildhöhe ist größer als Bildbreite | <ul style="list-style-type: none"> Die Bildgabe des Geräts ist für ein Bildseitenverhältnis von 16:9 ausgelegt. Das Bild im Vollbildformat über die gesamte Bildschirmbreite anzeigen. | – |
| Monitor gibt keinen Ton ab | <ul style="list-style-type: none"> Dieses Gerät ist nicht für die Tonausgabe ausgelegt. | – |
| Die Meldung "FAN STOPPED" wird angezeigt | <ul style="list-style-type: none"> Der Lüfter ist angehalten. Die Stromversorgung sofort ausschalten und Ihren Händler oder Betreiber um den Ersatz des Lüfters bitten. | – |
| "Unsupported Camera Head" wird angezeigt. | <ul style="list-style-type: none"> Ein nicht unterstützter Kamerakopf ist angeschlossen. Beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler. | 91 |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Stromversorgung: | 12 V Gleichstrom $\pm 10\%$ |
| Leistungsaufnahme: | 12 V 3,4 A (einschließlich Kamerakopf) |
| Aufnahmeelement: | Mikroprisma |
| Bildaufnahmeelement: | 1/3-Typ-3MOS |
| Videoausgang: | HDMI-Ausgang: HDMI-Stecker x2 |
| | SDI-Ausgang: BNC-Stecker x5 |
| Videoformat: | HDMI-Ausgang: 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i |
| | SDI-Ausgang: 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i |
| Erforderliche Mindestbeleuchtung: | 2000 lx (3200 K, F16, wenn "BINNIG" "LINE MIX" ist.) |
| S/N: | 54 dB (bei Ausgang für 1080i) |
| Horizontale Auflösung: | 1000 TV-Zeilen in der Mitte (typ. bei 1080p-Ausgabe) |
| Farbbalken: | SMPT-E-Farbbalken (0 % Einrichtung, bei 59,94 Hz)/Vollfarbbalken (bei 50 Hz) |
| Funktion: | AE, Verstärkung, Elektronischer Verschluss, Langzeitbelichtung, Kopfverstärkung, Pixel hinzufügen, Weißabgleich, Knie, Details, Gamma-Umschalten, DNR-Einstellung, IE-Funktionen (WDR, Adaptive Schwarzdehnung, Belichtungs Korrektur, Rauchkorrektur, Farbverstärkung), Sockel-Einstellung, Streulichtkorrektur, Farbstufenanpassung, Farbtonanpassung, Profil für Fluoreszierende Bildaufnahme, Einfrieren, Umdrehen, Spiegel, Statusanzeige, Farbbalken, Digitaler Zoom, Fuß-Schaltereinstellung, Profileinstellung, HDMI-Ausgabewechsel, Externe Synchronisation, Uhr, Weißschatten-Korrektur, H/V-Phaseinstellung |
| Fußschalter: | $\varnothing 3,5$ Stereo-Minibuchse |
| Externe Steuerung: | $\varnothing 3,5$ -Stereo-Minibuchse (mit dem RS232C-Signalniveau der seriellen 3-Elektrode kompatibel) |
| Betriebsumgebungstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Betriebsumgebungs-Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 90 % |
| Betriebsluftdruck: | 700 hPa bis 1.060 hPa |
| Transport- und Lagertemperatur: | -10 °C bis +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit des Transports und der Lagerung: | 10 % bis 90 % |
| Luftdruck bei Transport und Lagerung: | 700 hPa bis 1.060 hPa |
| Abmessungen: | GP-UH332C: 185 mm (B) x 57 mm (H) x 270 mm (T) (ausgenommen Gummifüße und Auskragungen) |
| | GP-UH332H: 27 mm (B) x 30 mm (H) x 42,5 mm (T) (ausgenommen Stativfassung und Vorsprünge) |
| Masse: | GP-UH332C: Ca. 2 kg |
| | GP-UH332H: Ca. 65 g |
| Lackierung: | Segelweiße Beschichtung |

Entsorgung von Altgeräten und Batterien

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet.

Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.



Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten)


Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.

Panasonic®

Manuel d'utilisation

Contrôleur de caméra HD

N° de modèle **GP-UH332C**

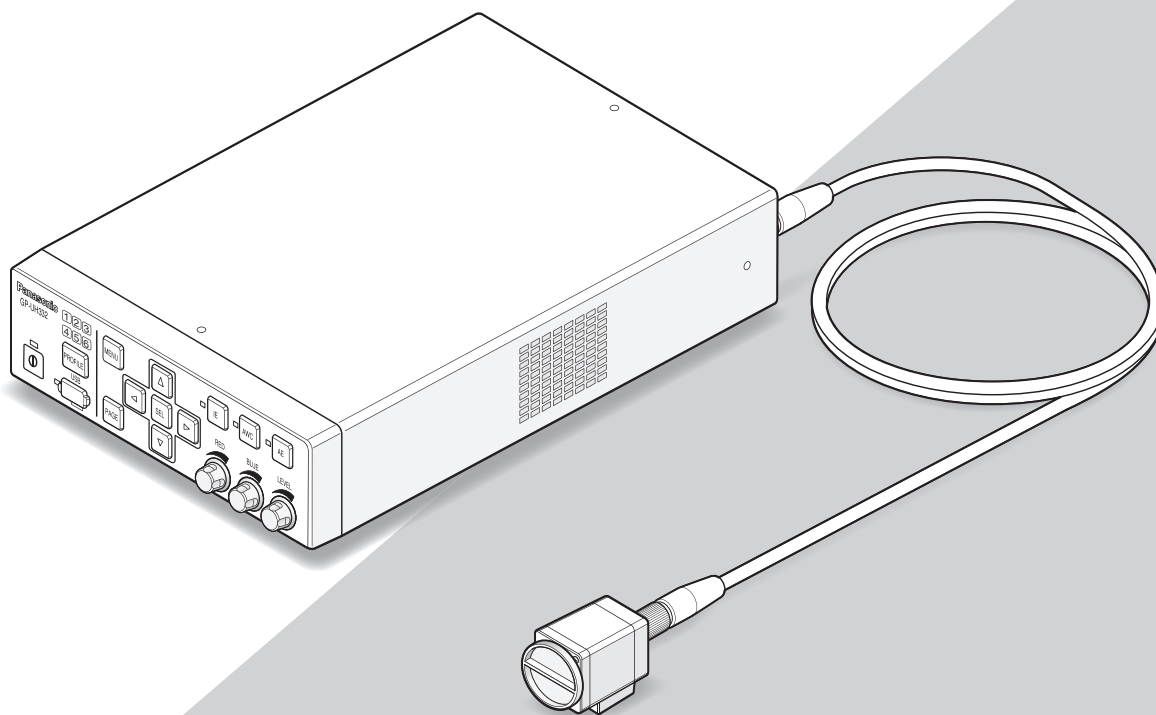

(La tête de caméra vidéo et le câble de caméra vidéo sont optionnels.)

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou d'utiliser cet appareil et de conserver précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

Le numéro de modèle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.

FRANÇAIS

VERSION FRANÇAISE

(FRENCH VERSION)

AVERTISSEMENT:

- Afin d'éviter tout risque de déclaration d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- L'appareil ne devrait pas être exposé à des éclaboussures ou des projections d'eau et aucun récipient rempli de liquide tels que des vases ne devraient être posés sur l'appareil.
- L'installation sera effectuée selon toutes les règles applicables d'installation.
- Ceci est un produit de Classe A. Dans un environnement privé, ce produit risque de créer des interférences radio auquel cas des mesures correctives adéquates peuvent être nécessaires et doivent être prises par l'utilisateur.
- Ce matériel est conforme à la Classe A de CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, ce matériel risque de créer des interférences radio.
- Tous les travaux d'installation de ce produit devraient être confiés à des techniciens et dépanneurs professionnels ou des installateurs de système.

ATTENTION:

- Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Coupure de l'alimentation. Les appareils équipés ou non équipés d'interrupteurs d'alimentation à positions marche-arrêt (ON-OFF) sont alimentés dès que le cordon d'alimentation secteur est raccordé à la source d'alimentation; cependant, il faut savoir que l'appareil n'est alimenté que dans la mesure où l'interrupteur d'alimentation à positions marche-arrêt se trouve en position marche (ON). Débrancher le cordon d'alimentation afin de couper l'alimentation générale de tous les appareils.

Pour U.S.A.

Remarque: Cet équipement a été testé et s'avère respecter les limites imposées pour un périphérique numérique de classe A, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, lorsque l'appareil fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Avertissement de FCC: Pour assurer une conformité continue, (par exemple - n'utiliser que des câbles blindés lors de la connexion aux ordinateurs ou appareils périphériques). Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Pour U.S.A.

Ce produit contient une pile au lithium CR contenant elle-même du perchlorate - ceci peut impliquer une manipulation spéciale.
Consulter le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/



Une pile ion/polymère lithium qui est recyclable alimente le produit vous avez acheté. Veuillez appeler le 1-800-8-BATTERY pour obtenir les informations nécessaires sur la façon dont réutiliser cette pile.

Pour U.S.A.

Le numéro de modèle et numéro de série de ce produit se trouve sur l'appareil.

Nous vous conseillons de relever le numéro de modèle et numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé ci-dessous et de conserver précieusement votre notice d'instructions en tant que justificatif d'achat aux fins d'identification en cas de vol.

No. de modèle _____

No. de série _____

Pour Canada

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Pour l'Europe

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit auquel se réfère la présente déclaration est conforme à la norme spécifiée ou à tout autre document normatif conformément aux dispositions de la directive 2004/108/CE.

EMC pour l'usage de ce produit dans un milieu médical

- La description du GP-UH332 représente le système de caméra vidéo utilisant le GP-UH332C et le GP-UH332H.

AVERTISSEMENT

- L'utilisation d'accessoires ou de câbles qui ne sont pas spécifiés dans ce document peut augmenter le rayonnement électromagnétique à émettre à partir du GP-UH332 ou détériorer l'immunité à la perturbation électromagnétique.
- Si l'utilisation du GP-UH332 est faite par une installation à côté ou placée dessus l'autre appareil, s'assurer que le CCU fonctionne normalement dans le système.

ATTENTION

- Pour mettre ce produit au rebut, une conformité à la législation locale ou nationale et aux politiques associées d'hôpital est exigée.

| Politique et déclaration par le fabricant - Émission électromagnétique | | |
|---|-------------------|---|
| Le GP-UH332 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. S'assurer que ce produit est utilisé dans l'environnement suivant. | | |
| Test d'émission | Niveau compatible | Environnement électromagnétique - Politique |
| Émission conductrice de radiofréquence CSPR 11 | Groupe 1 | Le GP-UH332 utilise l'énergie de radiofréquence pour des fonctions internes. Par conséquent, l'émission de radiofréquence est considérablement faible, et elle n'interférera pas avec les appareils électroniques se trouvant à proximité. |
| Émission conductrice de radiofréquence CSPR 11 | Classe A | En raison des caractéristiques d'émission du GP-UH332, il est adapté à un usage dans les secteurs industriels et les hôpitaux. Si ce produit doit être utilisé dans un secteur résidentiel, il peut s'avérer nécessaire de prendre certaines mesures, une relocalisation du produit par exemple, étant donné que la protection pour l'appareil de communication de radiofréquence ne peut être suffisamment assurée dans un district résidentiel. |
| Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2 | Classe A | |
| Variation de tension, fluctuations de tension et émission papillotement IEC 61000-3-3 | Clause 5 | |

Utiliser l'adaptateur d'alimentation secteur:
Fabricant: Sinpro Electronics Co., Ltd.
No. de pièce: MPU60A-105-P49L10*

Politique et déclaration par le fabricant - Émission électromagnétique


Le GP-UH332 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
S'assurer que ce produit est utilisé dans l'environnement suivant.

| Test d'immunité | IEC 60601 Niveau de test | Niveau compatible | Environnement électromagnétique - Politique |
|---|--|--|---|
| Immunité de décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2 | ±6 kV, contact ±8 kV, air | ±6 kV, contact ±8 kV, air | Le sol doit être en bois, en béton ou en carrelage. Si le revêtement de sol est recouvert d'un matériau synthétique, l'hygrométrie relative doit être d'au moins 30 %. |
| Transitoires électriques rapides de câble d'alimentation/câble de signal Immunité contre salve de puissance IEC 61000-4-4 | ±2 kV, pour une alimentation à C.A. ±1 kV, pour une ligne de signal | ±2 kV, pour une alimentation à C.A. ±1 kV, pour une ligne de signal | Utiliser une alimentation électrique typique et disponible dans le commerce ou consacrée à un environnement hospitalier. |
| Immunité contre onde de choc IEC 61000-4-5 | ±1 kV, de ligne à ligne ±2 kV, de ligne à la terre | ±1 kV, de ligne à ligne ±2 kV, de ligne à la terre | Utiliser une alimentation électrique typique et disponible dans le commerce ou consacrée à un environnement hospitalier. |
| Immunité contre les chutes de tension/ interruptions courtes/ fluctuation de tension IEC 61000-4-11 | < 5 % U_T (> 95 % de chute, à U_T) À moins de 0,5 cycles 40 % U_T (60 % de chute, à U_T) À moins de 5 cycles 70 % U_T (30 % de chute, à U_T) À moins de 25 cycles < 5 % U_T (> 95 % de chute, à U_T) 5 secondes | < 5 % U_T (> 95 % de chute, à U_T) À moins de 0,5 cycles 40 % U_T (60 % de chute, à U_T) À moins de 5 cycles 70 % U_T (30 % de chute, à U_T) À moins de 25 cycles < 5 % U_T (> 95 % de chute, à U_T) 5 secondes | Utiliser une alimentation électrique typique et disponible dans le commerce ou consacrée à un environnement hospitalier. Si toutefois une utilisation du GP-UH332 est faite pendant une coupure d'alimentation, il est recommandé d'utiliser un système ou des batteries d'alimentation non interruptible pour fournir l'alimentation électrique au GP-UH332. |
| Immunité aux champs magnétiques de la fréquence du secteur IEC 61000-4-8 | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | Les niveaux des champs magnétiques de la fréquence du secteur doivent maintenir un niveau caractéristique d'un lieu typique, disponible dans un environnement commercial ou hospitalier. |

Remarque: U_T représente la tension d'alimentation à courant alternatif avant d'appliquer le niveau de test.

Politique et déclaration par le fabricant - Émission électromagnétique

Le GP-UH332 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
S'assurer que ce produit est utilisé dans l'environnement suivant.

| Test d'immunité | IEC 60601 Niveau de test | Niveau compatible | Environnement électromagnétique - Politique |
|---|---|-------------------------------|--|
| Immunité contre des interférences conduites, induites par champs de radiofréquence IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) 150 kHz à 80 MHz | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) | Ne pas utiliser un appareil de communication sans fil de type portatif ou mobile dans des conditions où la distance de séparation recommandée entre tout composant du GP-UH332 comprenant les câbles n'est pas assurée. La distance devrait être calculée basée sur la formule correspondant à chaque fréquence de l'appareil. Distance de séparation recommandée $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz |
| Immunité contre de l'énergie radiofréquence, champ électromagnétique irradiés IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) 80 MHz à 2,5 GHz | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) | P représente la puissance de sortie nominale maximale de l'appareil de transmission et le nombre de watts (W) utilisé comme unité. Pour la distance de séparation, d mètre (m) est utilisé. La force du champ électromagnétique de l'appareil de radiofréquence fixe sera déterminée par l'inspection locale*1. Cependant, elle devrait tomber en-dessous de la compatibilité dans chaque plage de radiofréquence*2. Une interférence risque de se produire à proximité de l'appareil avec le symbole suivant.  |

Remarque 1: En 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée sera appliquée.

Remarque 2: La politique susmentionnée risque de ne pas être appliquée à tous les cas.

L'absorption par les édifices, les objets et les corps humains ou la réflexion affecte la propagation de la puissance électromagnétique.

*1 La force du champ électromagnétique de l'émetteur radio fixe, y compris celui de la station de base de téléphone sans fil, station mobile terrestre, radioamateur, diffusion radio AM/FM, et émission de télévision, ne peut pas être correctement assumée. Afin d'évaluer l'environnement électromagnétique par rapport à l'émetteur radio fixe, il est nécessaire de procéder à une inspection locale. Vérifier le fonctionnement normal du GP-UH332, si la puissance électromagnétique mesurée pour le GP-UH332 dépasse le niveau compatible décrit ci-dessus. Si toutefois un comportement anormal est observé, relocaliser le GP-UH332 ou d'autres mesures d'atténuation sont exigées.

*2 Dans la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité de champ doit être inférieure à 3 V/m.

Spécifications au sujet de la sécurité dans un environnement médical

- Le mode de fonctionnement est "Fonctionnement continu".
- Il convient de noter que ce produit est évalué à la norme CLASS I lors de l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation secteur.
- Pour éviter tout danger de décharge électrique, connecter ce produit essentiellement à une source d'alimentation (commerciale) équipée d'une mise à la terre de protection.
- Étant donné que tous les dispositifs périphériques connectés à la section d'entrée de signal ou à la section de sortie de signal sont constitués en tant que système médical, il y a obligation et responsabilité à rendre l'ensemble du système compatible et conforme aux conditions imposées par la norme de système de IEC60601-1 Clause 16.
Ne pas toucher simultanément l'un quelconque de ces connecteurs et un patient.
- Entrer en contact avec votre distributeur, l'installateur ou l'assistance technique client, comme décrit dans le manuel d'utilisation, pour effectuer l'installation.
- Ne pas installer ce produit dans un emplacement où il est difficile de retirer le cordon d'alimentation.
- Utiliser la prise d'alimentation "Niveau d'hôpital" et CORDON D'ALIMENTATION pour assurer la conformité avec ANSI/AAMI ES60601-1 (pour les États-Unis) /CAN/CSA-C22.2 No.60601-1 (pour le Canada).
- Sous certaines CONDITIONS DE PANNE UNIQUE, il est possible que le flanc du côté droit du logement de CCU devienne chaud et il y a un RISQUE possible de brûlure en cas de contact.
- Quand ce produit a été utilisé pendant de nombreuses années, il existe une possibilité que certaines pièces se soient détériorées, ce qui peut entraîner une panne ou mener à un accident, selon l'environnement d'utilisation, même s'il n'y a aucune pièce défectueuse apparente. Contrôler quotidiennement si l'un des cas suivants se produit.

Constat de l'un de ces phénomènes ?

- Fumée, odeur de brûlé dégagée ou son anormal émis.
- Le cordon d'alimentation, la prise d'alimentation électrique ou l'adaptateur d'alimentation secteur est anormalement chaud. Il existe une fissure ou une coupure.
- Réception d'une succession de décharges électriques en touchant le produit.
- Aucune image n'est affichée quand le courant est appliqué.
- Son anormal produit par le ventilateur. Ou bien le ventilateur ne tourne pas.
- Il existe d'autres erreurs ou des dégâts inhabituels.

Cesser immédiatement d'utiliser ce produit

Pour prévenir tout dégât de ce produit ou d'un accident, couper l'alimentation et demander à ce qu'une inspection ou le retrait de ce produit soit exécuté à votre distributeur ou votre installateur.

Descriptions des symboles graphiques



Ce symbole indique l'application/la coupure (ON/OFF) de l'alimentation électrique. L'état ON/OFF est fixé.



Ce symbole indique la borne équipotentielle à utiliser pour rendre chaque partie du système équipotentielle.



Ce symbole indique un courant alternatif (C.A.).



Ce symbole indique un courant continu (C.C.).



Ce symbole indique un symbole d'avertissement que ceci pourrait être chaud et qu'il y a un RISQUE possible de brûlure en cas de contact.



Ce symbole indique une marque de certification UL aux États-Unis.



Ce symbole indique une inscription obligatoire de conformité dans l'Espace économique européen (EEE).



Ce symbole indique une inscription relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans l'Espace économique européen (EEE).

- Options
 - Tête de caméra 3MOS HD : GP-UH332H
 - Câble de caméra UHD : GP-UC532G03 (3 m {9,8 feet})
 - GP-UC532G06 (6 m {19,7 feet})
 - GP-UC532G15 (15 m {49,3 feet})
 - GP-UC532G03A (3 m {9,8 feet})
 - (Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)
 - GP-UC532G06A (6 m {19,7 feet})
 - (Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)
 - GP-UC532G15A (15 m {49,3 feet})
 - (Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)
 - Adaptateur d'alimentation secteur : MPU60A-105-P49L10*
 - (Sinpro Electronics Co., Ltd.)

Table des matières

| | |
|---|-----|
| EMC pour l'usage de ce produit dans un milieu médical..... | 95 |
| Spécifications au sujet de la sécurité dans un environnement médical..... | 98 |
| Instructions de sécurité importantes..... | 102 |
| Limitation de responsabilité | 103 |
| Déni de la garantie | 103 |
| Préface | 104 |
| Utilisation prévue..... | 104 |
| Marques commerciales et marques commerciales déposées..... | 104 |
| Mesures de précaution..... | 105 |
| Principaux organes de commande et fonctions..... | 107 |
| Tête de caméra (option) | 107 |
| Unité de commande de caméra vidéo HD (CCU)..... | 108 |
| Configuration de système | 112 |
| Précautions d'installation | 113 |
| Procédure d'installation..... | 114 |
| Comment monter l'objectif | 115 |
| Configuration réalisée par l'intermédiaire du menu SETUP | 116 |
| Menus SETUP..... | 116 |
| Comment afficher le menu..... | 118 |
| Opération de base | 119 |
| Restauration de paramétrage par réglage implicite..... | 120 |
| MAINTENANCE MENU | 121 |
| Configurer le profil..... | 122 |
| EXPOSURE | 122 |
| ① Configuration AE [AE]..... | 122 |
| ② Régler l'obturateur électronique [SHUTTER]..... | 122 |
| ③ Configurer le mode d'addition de pixel [BINNING] | 123 |
| ④ Ajuste le gain [GAIN]..... | 123 |
| ⑤ Paramètre l'exposition longue durée [LONG EXPOSURE]..... | 123 |
| ⑥ Paramétrer le secteur de détection de luminosité [AREA SELECTION]..... | 123 |
| ⑦ Paramétrer la pondération de détection de luminosité [PEAK/AVE LEVEL]..... | 125 |
| ⑧ Paramétrer le gain de tête [HEAD GAIN] | 125 |
| PICTURE..... | 125 |
| ⑨ Paramétrer la balance des blancs [WHITE BAL MODE]..... | 125 |
| ⑩ Paramétrer les détails [DETAIL BAND] | 126 |
| ⑪ Paramétrer la fonction de réduction de bruit numérique [DNR LEVEL] | 126 |
| ⑫ Ajuster le niveau de tension constante de signal [PEDESTAL LEVEL]..... | 126 |
| ⑬ Paramétrer la compensation de phénomène de tache lumineuse [FLARE COMP] | 126 |
| ⑭ Ajuster le niveau de couleur [COLOR LEVEL] | 126 |
| ⑮ Ajuster la teinte [COLOR MATRIX]..... | 126 |
| CONTRAST | 128 |
| ⑯ Paramétrer le mode de correction de gamma [GAMMA SELECT]..... | 128 |
| ⑰ Paramétrer le niveau de correction de gamma [GAMMA VALUE]..... | 128 |
| ⑱ Paramétrer le mode de coude [KNEE MODE]..... | 128 |
| ⑲ Paramétrer le point coude [KNEE POINT] | 128 |
| ⑳ Paramétrer la pente de coude [KNEE SLOPE]..... | 128 |
| ㉑ Paramétrer le bouton [IE] [IE FUNCTION SELECT] | 128 |
| ㉒ Paramétrer le niveau de correction assigné au bouton [IE] [IE FUNCTION LEVEL]..... | 129 |
| PROFILE | 129 |
| ㉓ Paramétrer l'identification de profil d'utilisateur et l'étiquette [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL] | 129 |
| ㉔ Paramétrer le paramétrage supplémentaire pour chaque mode de capture d'image fluorescente [FLUORESCENCE MODE] | 130 |

| | |
|---|-----|
| FUNC | 130 |
| ②5 Paramétrer la fonction de retournement vertical et horizontal [FLIP AND MIRROR] | 130 |
| ②6 Paramétrer l'affichage pour l'état de retournement vertical et horizontal [F+M STATUS DISPLAY] | 131 |
| ②7 Afficher la barre de couleur [COLOR BAR]..... | 131 |
| ②8 Paramétrer les commutateurs de commande au pied [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]..... | 131 |
| ②9 Sauvegarder/charger les profils [USER PROFILE SAVE/LOAD]..... | 131 |
| ③0 Paramétrer la méthode de sauvegarde à /de chargement de la mémoire USB [SAVE/LOAD MODE (USB)] | 132 |
| ③1 Paramétrer l'activation ou la désactivation du zoom [DIGITAL ZOOM] | 132 |
| ③2 Paramétrer l'affichage de rapport de zoom [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]..... | 132 |
| SYSTEM..... | 132 |
| ③3 Paramétrer la position OSD de la sortie vidéo [OSD POSITION] | 132 |
| ③4 Paramétrer le signal de sortie HDMI [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]..... | 132 |
| ③5 Paramétrer le connecteur d'entrée/sortie de signal de synchronisation [G/L SYSNC TERMINAL SETTING] | 132 |
| ③6 Afficher l'état de synchronisation [G/L SYNC STATUS INFO] | 133 |
| ③7 Régler l'horloge [TIME ADJUSTMENT] | 133 |
| ③8 Restaurer le paramétrage par réglage implicite de profil [USER PROFILE RESET]..... | 133 |
| HEAD | 134 |
| ③9 Paramétrer l'ombrage de blanc [WHITE SHADING]..... | 134 |
| ④0 Ajuster la position horizontale/verticale de l'écran [H/V PHASE ADJUST] | 134 |
| Dépannage..... | 135 |
| Caractéristiques techniques..... | 136 |
| Accessoires standard | 137 |
| Accessoires optionnels | 137 |

Instructions de sécurité importantes

- 1) Veiller à lire ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Tenir compte de tous les avertissements.
- 4) Se conformer à toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil près de lieux en présence d'eau.
- 6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obturer aucune des ouvertures d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chauffage, des appareils de chauffage ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne pas asservir l'objectif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre possède deux lames ainsi qu'un troisième élément, un ergot de mise à la terre. La lame qui est large ou le troisième élément, l'ergot, sont installés pour assurer votre sécurité. Si la prise fournie ne s'engage pas correctement dans votre prise, veuillez consulter un électricien pour qu'il effectue le remplacement de l'ancienne prise de sortie secteur.
- 10) Protéger le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse marcher dessus ni ne soit pincé, notamment près des prises, les prises pratiques et les points de sortie de l'appareil.
- 11) Utiliser uniquement les fixations ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utiliser uniquement le chariot, le support, le trépied, la platine de fixation ou la tablette spécifiée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, prendre toutes les précautions nécessaires lors du déplacement de la combinaison chariot-appareil afin que le tout ne se renverse pas.



- 13) Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou s'il n'est pas utilisé sur de longues périodes de temps.
- 14) Toute réparation ou dépannage doit être confié à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple, lorsque le cordon d'alimentation électrique ou la prise ont été endommagés, quand du liquide s'est répandu dessus ou si des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il a fait une chute.

Limitation de responsabilité

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "COMME TEL" SANS GARANTIE DE TOUTE SORTIE, EXPRÈS OU IMPLICITE, ÉTANT INCLUSE MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES IMPLICITES DE LA VALEUR MARCHANDE, ADAPTATION POUR TOUT BUT PARTICULIER OU NON-INFRACTION DES DROITS D'UN TIERS.

CETTE PUBLICATION A PU INCLURE DES INEXACTITUDES TECHNIQUES OU DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES. DES CHANGEMENTS SONT AJOUTÉS AUX INFORMATION CI-DESSUS, À TOUT MOMENT, AUX FINS D'AMÉLIORATION DE CETTE PUBLICATION ET/OU DU PRODUIT CORRESPONDANT(S).

Déni de la garantie

EN AUCUN CAS Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. NE SERA TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUTE PARTIE OU TOUTE PERSONNE, À L'EXCEPTION DU REMPLACEMENT OU D'UNE MAINTENANCE RAISONNABLE DE CE PRODUIT POUR LES CAS CITÉS, INCLUS MAIS NON LIMITÉS À CE QUI SUIT:

- (1) TOUTE PERTE OU ENDOMMAGEMENT, Y COMPRIS SANS LIMITATION, DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL, IMPORTANT OU EXEMPLAIRE, SURVENANT OU CONCERNANT LE PRODUIT;
- (2) TOUTE INCOMMODITÉ, PERTE OU ENDOMMAGEMENT CAUSÉ PAR UN USAGE NON APPROPRIÉ OU UNE UTILISATION NÉGLIGENTE DE L'UTILISATEUR;
- (3) DÉMONTAGE, RÉPARATION OU MODIFICATION NON AUTORISÉS DU PRODUIT EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR;
- (4) INCOMMODITÉ OU TOUTE PERTE SURVENANT LORSQUE LES IMAGES NE SONT PAS AFFICHÉES DÙ À TOUTE RAISON OU CAUSE Y COMPRIS TOUTE PANNE OU PROBLÈME DU PRODUIT;
- (5) TOUT PROBLÈME, INCOMMODITÉ IMPORTANTE OU PERTE OU ENDOMMAGEMENT, SURVENANT DU SYSTÈME COMBINÉ PAR LES APPAREILS DE TIERS;
- (6) TOUTE RÉCLAMATION OU ACTION ENTREPRISE POUR DES DOMMAGES, APPORTÉE PAR TOUTE PERSONNE OU ORGANISATION ÉTANT UN SUJET PHOTOGÈNE, DÙ A LA VIOLATION DE L'INTIMITÉ AVEC POUR RÉSULTAT DES IMAGES DE SURVEILLANCE DE CAMERA VIDÉO, Y COMPRIS DES DONNÉES SAUVEGARDÉES, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, EST DIFFUSÉE PUBLIQUEMENT OU EST EMPLOYÉE DANS N'IMPORTE QUEL BUT.

Préface

Ce système est un contrôleur de caméra vidéo HD à la fois compact et léger (ultérieurement appelé CCU), où la tête de caméra vidéo est séparément installée, équipée de fonctions produisant une qualité d'image élevée et de fonctions multiples introduisant le traitement des signaux numériques.

- GP-UH332C Contrôleur de caméra HD

Ce produit est utilisé en combinaison avec la tête de caméra vidéo 3MOS HD optionnelle (ultérieurement appelée tête de caméra vidéo).

- GP-UH332H Tête de caméra 3MOS HD
- La sortie multi-format prenant en charge 1080p et 1080i est disponible.
- La transmission de signal sans dégradation de signal a été réalisée grâce aux connecteurs de sortie HDMI ou SDI.
- La fonction WDR (plage dynamique étendue) permet aux utilisateurs de capter même des images avec une plage étendue de contraste et de luminosité et de faciliter leur visibilité.

Les descriptions dans cette documentation s'appuient sur un système équipé de la tête de caméra vidéo.

Utilisation prévue

Les séries de caméra vidéo à tête HD séparée GP-UH332 Panasonic ont acquises une haute résolution de Full HD (1920×1080), permettant de saisir des images mobiles de précision prenant en charge 60P et assurant une reproduction élevée des couleurs, destinées à être utilisées comme microscopes chirurgicaux ou lampes à fente. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé pour un système d'endoscopie qui pourrait entrer en contact avec des patients. Il n'est également pas conçu pour être utilisé avec des produits médicaux dont l'échec d'utilisation peut provoquer des dommages humains voire entraîner la perte de la vie ou des dommages matériels graves.

Ce produit est conforme aux normes pour l'équipement électrique médical IEC60601-1 et IEC60601-1-2.

Pour obtenir des informations d'enregistrement médical, veuillez contacter votre fournisseur local Panasonic.

Marques commerciales et marques commerciales déposées

- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft et Windows sont ou des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de la firme Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Toutes autres marques commerciales identifiées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Mesures de précaution

Confier les travaux d'installation au distributeur.

Les travaux d'installation exigent des connaissances techniques et de l'expérience. Le fait de ne pas observer ceci peut engendrer un incendie, provoquer une décharge électrique, des blessures voire endommager ce produit. Faire en sorte de consulter le distributeur.

Câbler correctement.

Des courts-circuits ou un câblage incorrect peuvent engendrer une déclaration d'incendie voire une décharge électrique.

Sélectionner un secteur d'installation capable de supporter le poids total.

Le fait de sélectionner une surface inadéquate pour l'installation peut faire tomber ce produit ou le renverser, ceci ayant pour résultat de blesser quelqu'un. Les travaux d'installation ne doivent commencer qu'après le renforcement suffisant de la surface d'accueil.

Des inspections périodiques doivent être effectuées.

Une formation de rouille sur les parties métalliques ou sur les vis peut engendrer une chute du produit ou provoquer des accidents. Se mettre en rapport avec le distributeur en ce qui concerne les inspections à faire.

Couper l'alimentation lors nettoyage de ce produit.

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque de provoquer une électrocution.

Arrêter immédiatement l'utilisation quand quelque chose est erroné avec ce produit.

Quand de la fumée se dégage du produit, qu'une odeur de fumée sort du produit, ou qu'une détérioration de l'extérieur de ce produit est notée, une utilisation continue aura comme conséquence une déclaration d'incendie, des blessures ou des dégâts du produit. Couper immédiatement l'alimentation de ce produit et prendre contact avec votre distributeur.

Ne pas entreprendre des travaux associés à l'installation et au câblage pendant que le courant d'alimentation électrique est appliqué.

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque de provoquer un incendie voire une électrocution.

Ne pas exposer ce produit à dans une atmosphère en présence de produit inflammable.

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque de provoquer une explosion et de blesser quelqu'un.

Éviter d'installer ce produit dans des emplacements où des dégâts par le sel se produisent ou du gaz corrosif est produit.

Le manque à observer ceci peut entraîner une détérioration des parties servant à l'installation sans compter que des accidents tels qu'une chute de ce produit peuvent se produire.

Ne pas frapper ni soumettre ce produit à des chocs violents.

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d'aboutir à des blessures voire de créer un incendie.

Ne pas introduire d'objets étrangers dans le produit.

Ne laisser aucuns corps étrangers ou liquide tel que de l'eau, une pièce métallique, etc. pénétrer dedans étant donné que cela peut déclencher un incendie ou provoquer une décharge électrique. Si cela se produit, débrancher immédiatement la prise d'alimentation électrique de la prise de sortie secteur et contacter votre distributeur.

Ne jamais démonter ni modifier ce produit.

Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque de provoquer un incendie voire une électrocution. Demander à votre distributeur de faire l'inspection et de le réparer.

Sous la foudre (ou pendant des travaux de construction), ne pas toucher ce produit, le cordon d'alimentation ou les câbles connectés.

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque de provoquer une électrocution.

Éviter de poser des récipients contenant des liquides tels contenant de l'eau à proximité de ce produit.

Si du liquide se renverse sur ce produit, cela risque de provoquer un incendie voire une électrocution. Si cela se produit, débrancher immédiatement la prise d'alimentation électrique de la prise de sortie secteur et contacter votre distributeur.

Ne jamais frotter le bord des parties métalliques à mains nues.

Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d'aboutir à des blessures.

[Précautions lors de l'installation]

Pour avoir l'assurance de l'utiliser en permanence avec des performances stables


Certaines parties de cet appareil risquent une détérioration et ceci peut écourter la durée de service utile de l'appareil s'il est utilisé dans des emplacements à hautes températures et humidité élevée. Cet appareil doit être mis en service dans des limites de température comprises entre 0 °C à 40 °C {32 °F to 104 °F}. Le fait de ne pas observer cette recommandation peut affecter les composants internes ou provoquer un dysfonctionnement du appareil. L'utilisation de ce produit à des températures de 30 °C {86 °F} ou inférieures est recommandée sans chaleur directe provenant de chaufferettes et en considération de la chaleur dégagée à l'emplacement du produit.

Manipuler ce produit délicatement.

Ne pas faire tomber ce produit ni le soumettre à des chocs ou des vibrations. Le fait de ne pas respecter cette recommandation peut-être une source de panne.

Ne pas diriger ce produit vers de puissantes sources d'éclairage.

Une source d'éclairage telle que la lumière d'un projecteur d'éclairage peut entraîner un éblouissement (léger saignement).

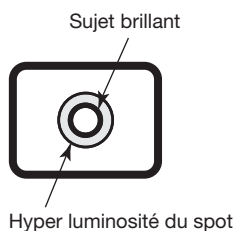

Batteries Incorporées

Des batteries sont installées dans ce produit.

Ne pas laisser les batteries exposées dans un environnement où une chaleur excessive peut résulter de la lumière du soleil ou d'un feu.

Alarme de ventilateur de refroidissement

Quand le message d'alarme de ventilateur de refroidissement est affiché, couper immédiatement le courant et contacter votre distributeur.

Nettoyage

- Couper l'alimentation puis se servir d'un tissu souple pour nettoyer ce produit. Quand il est difficile de retirer de la poussière accumulée, utiliser un tissu souple qui a été imbibé dans un détergent neutre dilué et bien essoré pour l'essuyer. Retirer ce qui reste de produit détergent avec un morceau de tissu sec.
- Ne jamais se servir de produits détergents forts ou abrasifs pour nettoyer le coffret extérieur de l'appareil. L'alcool d'éthanol ou d'isopropyle peut être utilisé pour la tête de caméra vidéo et le CCU. Cependant, ils ne peuvent pas être utilisés pour le câble de caméra vidéo.
- Quand un tissu traité chimiquement pour faire le nettoyage est utilisé, lire attentivement les précautions indiquées qui accompagnent le tissu traité chimiquement.

Étiquette d'instructions


Se référer à l'étiquette d'instructions collée en-dessous ou sur le produit quant aux instructions de classification de l'équipement et de source d'alimentation, etc.

Mémoire USB

- Utiliser la mémoire USB compatible avec USB2.0.
- Afin de maintenir une lecture/écriture à grande vitesse, exécuter "Scandisk" ou "CheckDisk" avec l'ordinateur personnel avec le système d'exploitation Microsoft® Windows®.
- FAT32 est pris en charge. Utiliser une mémoire USB dont le volume est de 32 GB ou moins. Une clé USB avec un format encrypté n'est pas pris en charge.
- La mémoire USB ne peut pas être formatée avec le CCU.

Ce produit est conçu pour des usages normaux comme tout matériel électronique à usage général. Le fait d'utiliser ce produit à des fins d'utilisation spéciales (tels que pour le trafic, le transport et le traitement médical) sans effectuer les procédures nécessaires conformes aux règlements connexes en vigueur dans son pays ou sur site de sa propre responsabilité peut être interdit.

Tête de caméra (option)

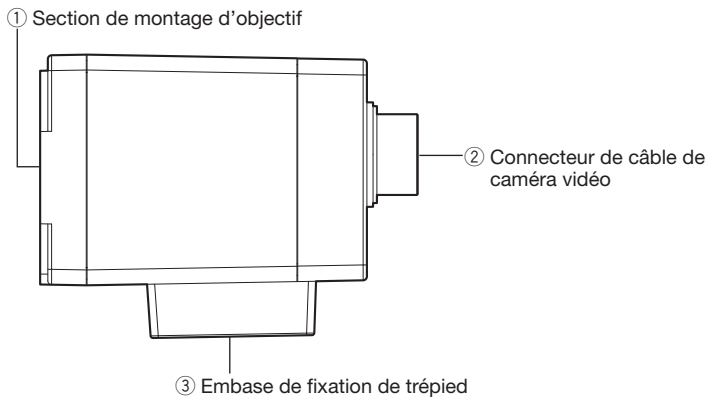

IMPORTANT:

- Couper systématiquement le courant du CCU avant de connecter ou de débrancher le câble de caméra vidéo.
- Éviter de plier excessivement sinon le câble de caméra vidéo peut se briser.
- Utiliser uniquement la tête de caméra vidéo spécifique.

① Section de montage d'objectif

Un objectif à monture de type C est monté sur cette section. (☞ Page 115)

② Connecteur de câble de caméra vidéo

Connecteur pour le câble de caméra vidéo (option)

<Câble de caméra>

GP-UC532G03 (3 m {9,8 feet})

GP-UC532G06 (6 m {19,7 feet})

GP-UC532G15 (15 m {49,3 feet})

GP-UC532G03A (3 m {9,8 feet}) (Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)

GP-UC532G06A (6 m {19,7 feet}) (Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)

GP-UC532G15A (15 m {49,3 feet}) (Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)

③ Embase de fixation de trépied


Le trou fileté de trépied est utilisé quand la tête de caméra vidéo est fixée au trépied.

Orifice de douille fileté de fixation de trépied:

1/4-20 UNC

Unité de commande de caméra vidéo HD (CCU)


<Avant>

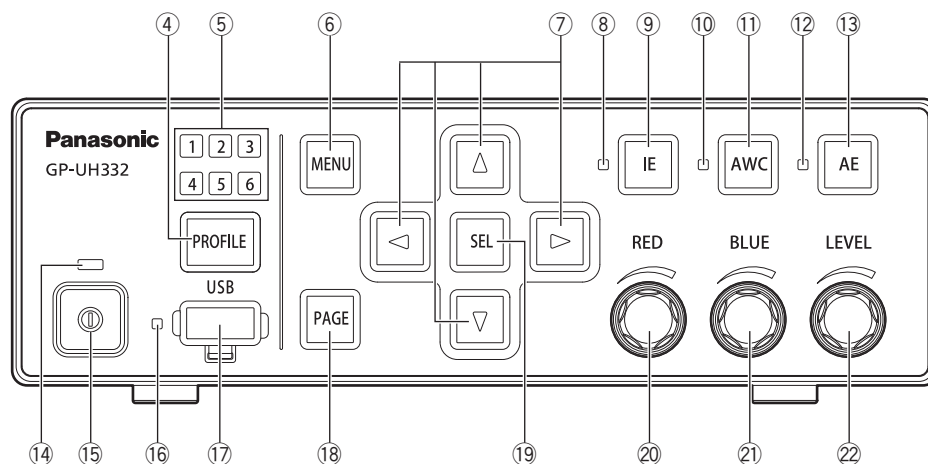

- ④ **Bouton de sélection de profil [PROFILE]**
Sélectionne un profil de 1 à 6. Chaque profil doit être paramétré à l'avance en utilisant le menu SETUP (☞ page 122).
- ⑤ **Lampe témoin de sélection de profil [1/2/3/4/5/6] (verte)**
Le numéro de profil sélectionné sera allumé en vert.
- ⑥ **Bouton de menu [MENU]**
Quand le bouton est pressé pendant plus de 1 seconde, le menu SETUP (ADVANCED MENU) sera affiché.
Une couche supérieure du MENU sera affichée quand le bouton est pressé alors que le menu SETUP est affiché. Le menu SETUP peut être caché en appuyant sur le bouton pendant plus de 1 seconde.
Le fait d'appuyer sur ce bouton, sauf quand le menu SETUP est affiché, fait que la fonction de gel d'écran sera activée.
- ⑦ **Boutons de commande de curseur vers le haut/vers le bas/vers la gauche/vers la droite [Δ/▽/◀/▶]**
- **Bouton de commande vers le haut [Δ]/ Bouton de commande vers le bas [▽]**
Change la rubrique de paramétrage ciblée pendant que le menu SETUP est affiché.
Une fois pressé alors qu'un menu autre que le menu SETUP est affiché, le paramétrage de "FLIP AND MIRROR" sera commuté. (☞ Page 130)
 - **Bouton de commande vers la droite [▶]/Bouton de commande vers la gauche [◀]**
Déplace le curseur ou change le contenu de la rubrique de paramétrage pendant que le menu SETUP est affiché.
Une fois pressé alors qu'un menu autre que le menu SETUP est affiché, le rapport zoom de "DIGITAL ZOOM" sera commuté. (☞ Page 132)
- ⑧ **Lampe témoin d'état IE (verte)**
Indique l'état Activé/Arrêt de la fonction IE (IMAGE ENHANCEMENT).
Activé: La fonction IE est validée.
Arrêt: La fonction IE est invalidée.
- ⑨ **Bouton IE [IE]**
Commute sur Activé/Arrêt de la fonction IE.
- ⑩ **Lampe témoin d'état AWC (orange)**
Indique l'état de la fonction AWC (commande de balance des blancs automatique).
Arrêt: AWC est désactivée.
Clignote: AWC est activée ou en phase d'utilisation.
Clignote → Arrêt: AWC succès
Activé: AWC erreur
- ⑪ **Bouton AWC [AWC]**
Si "WHITE BAL MODE" dans le menu SETUP est réglé sur "AWC", AWC sera démarré quand le bouton est pressé alors que les images de caméra vidéo sont affichées.
-
- IMPORTANT:**
- Quand la tête de caméra vidéo n'est pas connectée, le bouton [AWC] ne lance aucune opération.
-
- ⑫ **Lampe témoin d'état AE (verte)**
Indique l'état de mode Automatique/Manuel de la fonction AE (exposition automatique).
Activé: Exposition automatique
Arrêt: Exposition manuelle
- ⑬ **Bouton AE [AE]**
Commute la fonction AE en mode automatique/manuel.
- ⑭ **Lampe témoin d'alimentation (verte)**
Indique l'état Activé/Arrêt de l'alimentation.
Activé: Mise sous tension
Arrêt: Mise hors tension
- ⑮ **Interrupteur d'alimentation [repère de commutateur]**
Ce commutateur permet de couper et d'établir alternativement l'alimentation électrique de CCU et de la tête de caméra vidéo.
- ⑯ **Lampe témoin d'état USB (verte)**
Indique l'état de la clé USB.
Clignote: Accès aux données
Activé: Monté
Arrêt: Retiré
- ⑰ **Connecteur USB [USB]**
En insérant la mémoire USB, SAVE/LOAD du profil peut être exécuté.

- ⑱ **Bouton Page [PAGE]**
Commute la page pendant que le menu SETUP est affiché.
QUICK MENU sera affiché quand le bouton est pressé tandis qu'un menu autre que le menu SETUP est affiché.
- ⑲ **Bouton de sélection [SEL]**
Détermine les paramètres pendant que le menu SETUP est affiché.
Quand le bouton est pressé alors qu'un menu autre que le menu SETUP est affiché, la fenêtre "SETTING INFORMATION" sera affichée. Quand il est pressé encore une fois, les images de caméra vidéo seront restaurées.
Dans la fenêtre "SETTING INFORMATION", les paramètres de "IE FUNCTION SELECT", "FOOTSW CONTROL CH1/CH2", "SAVE/LOAD MODE (USB)" et "VIDEO FORMAT (HDMI1/HDMI2/SDI1/SDI5)" sont affichés.
- ⑳ **Molette de réglage de volume du rouge [RED]**
Ajuste le décalage de gain RED de la balance des blancs.
La rubrique sélectionnée sera changée si la molette de réglage de volume est tournée tandis que le menu SETUP est affiché.
- ㉑ **Molette de réglage de volume du bleu [BLUE]**
Ajuste le décalage de gain BLUE de la balance des blancs.
- ㉒ **Molette de réglage de volume [LEVEL]**
Ajuste le niveau de la luminosité.
Déplace le curseur ou change le contenu de la rubrique sélectionnée pendant que le menu SETUP est affiché.

<Panneau arrière>

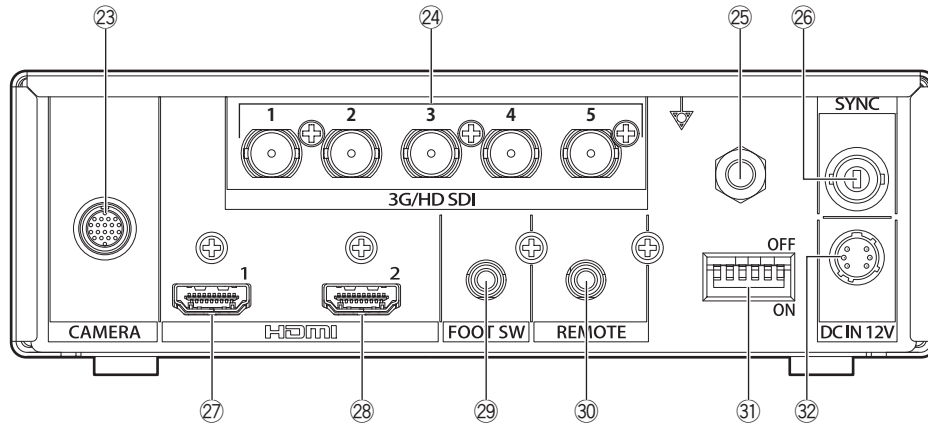

23 Connecteur de câble de caméra vidéo [CAMERA]

Connecteur pour le câble de caméra vidéo (option).
(Page 137)

24 Connecteurs de sortie SDI [3G/HD SDI 1/2/3/4/5]

Connecteur pour le signal de sortie 3G-SDI ou HD-SDI.

IMPORTANT:

- Utiliser un câble de haute qualité compatible avec 3G-SDI ou HD-SDI.

25 Connecteur de potentiel d'égalisation [Repère de potentiel]

Connecteur pour mise à la terre de l'égalisation potentielle.

26 Connecteur d'entrée/sortie de signal de synchronisation [SYNC]

Connecteur pour l'entrée ou la sortie de signal de synchronisation externe.

27 Connecteur de sortie HDMI [HDMI 1]

Utilisé pour connecter un moniteur équipé d'une fonction HDMI.

31 Commutateurs de configuration de fonction

Chacune configure les fonctions de sortie vidéo.
Le commutateur 1 sélectionne la fréquence de trame de 59,94 Hz/50 Hz.

| Commutateur | | | | | | Sortie SDI | Sortie HDMI |
|-------------|---|---|---|---|---|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ON | - | - | - | - | - | 59,94 Hz | 59,94 Hz |
| OFF | - | - | - | - | - | 50 Hz | 50 Hz |

Le commutateur 2 à 6 sélectionne un format vidéo pour le connecteur de sortie SDI et le connecteur de sortie HDMI.

| Commutateur | | | | | | Sortie SDI | Sortie HDMI |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| *1 | - | ON | ON | OFF | OFF | 1080p | 1080p |
| | - | OFF | OFF | OFF | OFF | 1080i | 1080i |

Si une sélection est faite autre que ce qui précède, le format indiqué avec *1 sera délivré.

IMPORTANT:

- Faire en sorte de commuter la configuration de fonction alors que l'alimentation est coupée.

28 Connecteur de sortie HDMI [HDMI 2]

Utilisé pour connecter un moniteur équipé d'une fonction HDMI.

IMPORTANT:

- Il est recommandé d'utiliser les câbles HDMI Panasonic (option).
- Utiliser un moniteur vidéo sur lequel le signe logo HDMI est affiché.


29 Connecteur de commutateur de commande au pied [FOOT SW]

Connecteur pour un commutateur de commande au pied.
(Mini-fiche stéréo de ø3,5)




30 Connecteur de commande à distance [REMOTE]

Connecteur pour une commande externe.
(Mini-fiche stéréo de ø3,5)

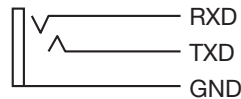


- ③ **Connecteur d'alimentation 12 V c.c. [DC IN 12V]**
Connecteur pour l'alimentation à courant continu externe de plus de 12 V (4 A ou plus).
Connecteur compatible (En date d'août 2017)
: HR10A-7P-6S(73)
fabriqué par la firme HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

Réseau de broches en grille du connecteur compatible

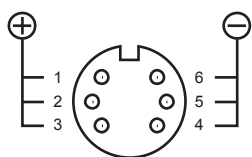

(Connecteur du câble)

Configuration de système

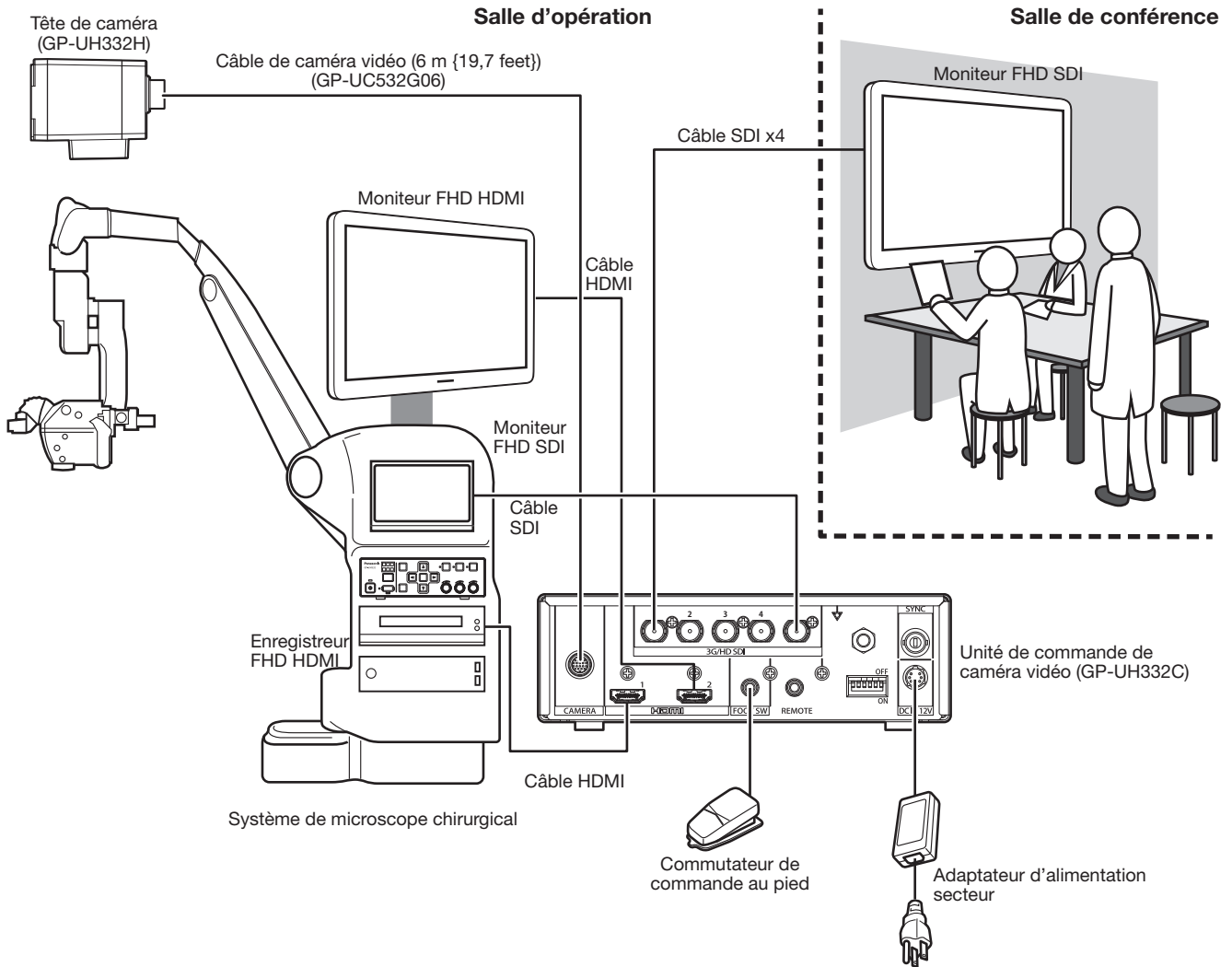

Câble HDMI:

Veillez utiliser le câble HDMI dont le logo HDMI est affiché. (Le câble HDMI Panasonic est recommandé.)

Câble SDI:

Veillez utiliser le câble SDI prenant en charge 3G-SDI et HD-SDI.

Précautions d'installation

Attention:

- RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 12 V DE COURANT CONTINU DE CLASSE 2 (UL 1310/CSA 223) OU À UNE SOURCE D'ALIMENTATION LIMITÉE (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

L'installation doit être conforme au code électrique local.

Ce produit est conçu pour être installé à l'intérieur.

Ce produit ne peut pas être mis en service à l'extérieur.

Ce produit ne doit pas être exposé directement au soleil pendant des heures ni ne doit être installé près d'un appareil de chauffage ou d'un système d'air conditionné. Sinon, il risque de tomber et de ne pas fonctionner normalement. Conserver ce produit loin de l'eau et de l'humidité.

Se procurer un trépied séparément.

Le trépied prévu pour l'installation sur la tête de caméra vidéo n'est pas fourni. Se le procurer en fonction du secteur où la caméra vidéo est appelée à être installée.

Maintenir le CCU à au moins 10 cm du mur environnant.

Si le CCU est installée tout en entrant en contact avec le mur, le dégagement de la chaleur produite est bloqué et cela peut avoir comme conséquence de provoquer une panne.

Éviter les emplacements humides ou poussiéreux pour installer ce système.

Sinon, la durée de vie des pièces internes risque d'être sérieusement écourtée.

Éviter toute installation ou utilisation de ce système dans les emplacements suivants:

- Emplacements où l'appareil risque d'être atteint par la pluie ou des éclaboussures d'eau
- Emplacements où un agent chimique est utilisé comme dans le cas d'une piscine
- Endroits en présence d'humidité, de poussière, de vapeur d'eau et d'huile
- Emplacements où un rayonnement, des rayons X, des puissantes ondes radio ou un champ magnétique intense est produit
- Emplacements où il existe des gaz corrosifs
- Emplacements où la température ambiante ne se situe pas entre 0 °C à 40 °C {32 °F à 104 °F}
- Emplacements soumis à des vibrations (Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans un véhicule.)
- Emplacements où la température risque de changer rapidement comme cela se produit dans les zones périphériques des prises de refoulement d'air de climatiseurs ou des portes dirigées vers l'extérieur

Interférence radio


Les images risquent d'être déformées près d'une antenne de transmission de TV ou à proximité de signaux de radiodiffusion ou de champs électriques ou magnétiques (par exemple, créés par un moteur et un transformateur).

Retirer sans faute ce produit s'il n'est pas utilisé.

Procédure d'installation

Ce qui suit montre comment installer la caméra vidéo sur le trépied (à se procurer localement).

<Exemple d'installation de la caméra vidéo sur un trépied>

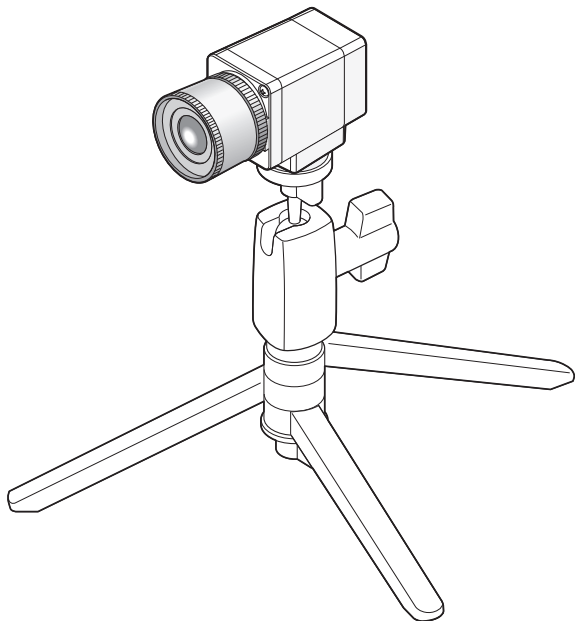


IMPORTANT:

- Le trépied et le CCU seront installés horizontalement.
 - Le CCU doit être placé horizontalement. Ne pas placer l'appareil en position debout ni en position inclinée.
-

Comment monter l'objectif


IMPORTANT:

- Un objectif dont la longueur saillante de la section de montage de l'objectif est de 4 mm {5/32 pouces} ou moins doit être utilisé.
- Les gammes d'ouverture recommandée de l'objectif s'échelonnent de F4,0 à F16. La sélection de moins de F4,0 de l'ouverture de l'objectif peut avoir comme conséquence un flou d'image.
- Quand un objectif zoom est utilisé, la méthode de réglage de mise au point varie selon l'objectif. Pour obtenir de plus amples renseignements, se référer au manuel d'utilisation de l'objectif à utiliser.
- Quand l'objectif est retiré, s'assurer de remettre le bouchon d'objectif sur la section de montage d'objectif de la tête de caméra vidéo.

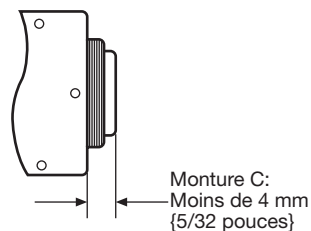


Étape 1

Retirer le bouchon d'objectif de la section de montage d'objectif de la tête de caméra vidéo.

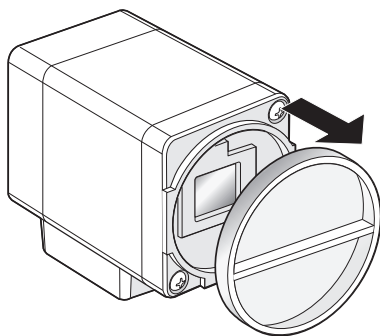

Étape 2

Tourner l'objectif à monture C dans le sens des aiguilles d'une montre pour engager l'objectif sur la section de montage d'objectif.

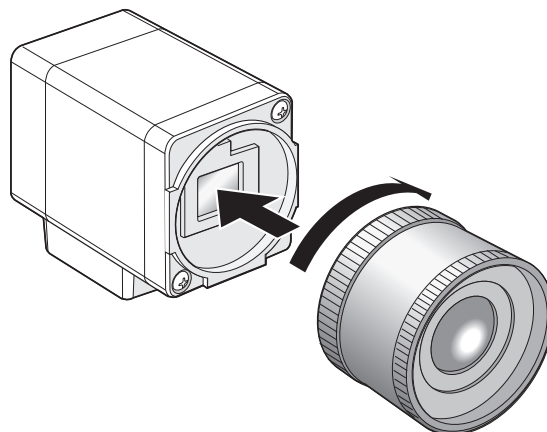

IMPORTANT:

- Vérifier si la surface du filtre optique est propre avant de monter un objectif. Si la surface est sale, se servir d'une brosse à poire généralement utilisée pour les appareils photo pour enlever la poussière.

Objectifs pris en charge (référence/en date d'août 2017)

| Fabricant | Nom de produit | Modèle |
|-----------|------------------------------------|--|
| FUJIFILM | Objectif de caméra vidéo 3CCD/CMOS | TF2.8DA-8 TF4DA-8 TF8DA-8B TF15DA-8 |

Configuration réalisée par l'intermédiaire du menu SETUP


L'exécution de chaque rubrique de configuration dans le menu SETUP doit être faite à l'avance pour pouvoir utiliser l'appareil. Exécuter les paramètres en fonction des conditions présentées par le secteur d'observation de la caméra vidéo.

Remarque:

- En marge du menu SETUP, ce système a un menu simplifié (menu QUICK) qui est affiché à l'aide du bouton [PAGE] implanté en façade du CCU. Pour obtenir de plus amples informations sur le menu QUICK, se référer à la page 119.

Menus SETUP

Les menus de configuration se composent de trois menus, "QUICK MENU", "ADVANCED MENU" et "MAINTENANCE MENU".

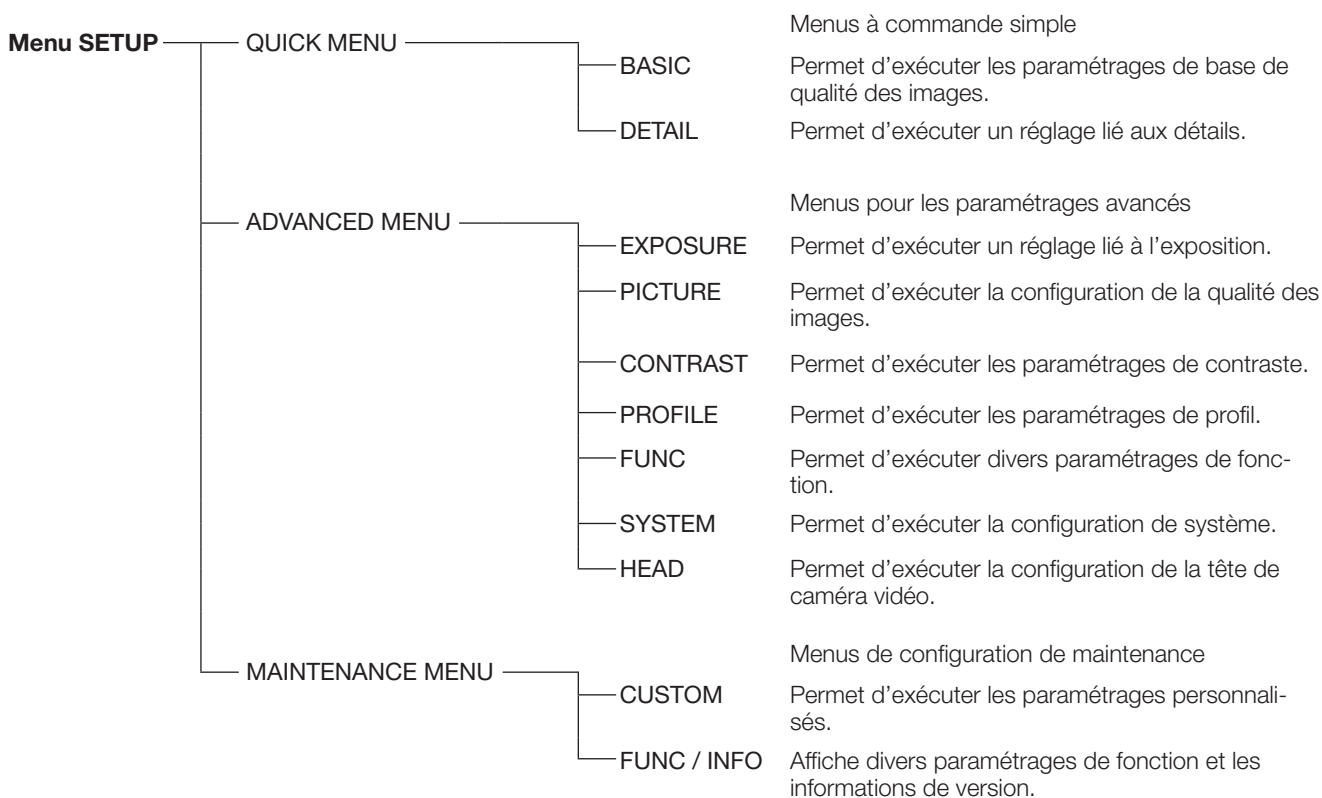

Les rubriques suivantes peuvent être paramétrées dans ADVANCED MENU.

| Rubrique de configuration | Description | Page |
|---------------------------|--|------|
| EXPOSURE | | |
| ① AE | Configure AE (Exposition automatique). | 122 |
| ② SHUTTER | Paramètre la vitesse d'obturation électronique. | 122 |
| ③ BINNING | Paramètre le mode d'addition de pixel. | 123 |
| ④ GAIN | Paramètre le gain. | 123 |
| ⑤ LONG EXPOSURE | Paramètre l'exposition longue durée. | 123 |
| ⑥ AREA SELECTION | Paramètre le secteur de détection de luminosité de "AE", "GAIN" et "SHUTTER". | 123 |
| ⑦ PEAK/AVE LEVEL | Paramètre la pondération pour la valeur maximale et la valeur moyenne pour le traitement de détection de luminosité. | 125 |
| ⑧ HEAD GAIN | Paramètre le gain de tête. | 125 |
| PICTURE | | |
| ⑨ WHITE BAL MODE | Paramètre la balance des blancs. | 125 |
| ⑩ DETAIL BAND | Paramètre les détails. | 126 |
| ⑪ DNR LEVEL | Paramètre le niveau de la réduction de bruit numérique. | 126 |
| ⑫ PEDESTAL LEVEL | Ajuste le niveau de décollement du noir. | 126 |

| Rubrique de configuration | Description | Page |
|--|---|------|
| ⑬ FLARE COMP | Paramètre la compensation de tache lumineuse. | 126 |
| ⑭ COLOR LEVEL | Paramètre le niveau de couleur total. | 126 |
| ⑮ COLOR MATRIX | Paramètre diverse teinte. | 126 |
| CONTRAST | | |
| ⑯ GAMMA SELECT | Paramètre le mode de correction de gamma. | 128 |
| ⑰ GAMMA VALUE | Paramètre le niveau de correction de gamma. | 128 |
| ⑱ KNEE MODE | Paramètre le mode de coude. | 128 |
| ⑲ KNEE POINT | Paramètre le point de coude. | 128 |
| ⑳ KNEE SLOPE | Paramètre la pente de coude. | 128 |
| ㉑ IE FUNCTION SELECT | Assigne une fonction au bouton [IE] (IMAGE ENHANCEMENT). | 128 |
| ㉒ IE FUNCTION LEVEL | Paramètre le niveau de correction sélectionné avec IE. | 129 |
| PROFILE | | |
| ㉓ USER PROFILE ID USER PROFILE LABEL | Paramètre le titre de l'identification de la caméra vidéo. Paramètre les titres d'étiquette de 1 à 6 profils à afficher. | 129 |
| ㉔ FLUORESCENCE MODE | Paramétrer le paramétrage supplémentaire pour chaque mode de capture d'image fluorescente. | 130 |
| FUNC | | |
| ㉕ FLIP AND MIRROR | Paramètre le retournement d'image vertical et horizontal. | 130 |
| ㉖ F+M STATUS DISPLAY | Paramètre l'affichage d'état de retournement d'image vertical et horizontal. | 131 |
| ㉗ COLOR BAR | Paramètre l'affichage de barre de couleur. | 131 |
| ㉘ FOOTSW CONTROL CH1 FOOTSW CONTROL CH2 | Assigne une fonction au commutateur de commande au pied 1. Assigne une fonction au commutateur de commande au pied 2. | 131 |
| ㉙ USER PROFILE SAVE / LOAD | Sauvegarde les profils à la mémoire USB / charge les profils de mémoire USB | 131 |
| ㉚ SAVE / LOAD MODE (USB) | Paramètre la méthode de sauvegarde à ou de chargement à la mémoire USB. | 132 |
| ㉛ DIGITAL ZOOM | Paramètre l'approbation zoom électronique. | 132 |
| ㉜ DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | Paramètre l'affichage de pourcentage de réglage de zoom électronique. | 132 |
| SYSTEM | | |
| ㉝ OSD POSITION | Paramètre la position OSD de la sortie vidéo. | 132 |
| ㉞ HDMI1 COLOR DEPTH HDMI2 COLOR DEPTH | Paramètre la profondeur de couleur de HDMI1. Paramètre la profondeur de couleur de HDMI2. | 132 |
| ㉟ G/L SYNC TERMINAL SETTING | Paramètre le connecteur d'entrée/sortie de signal de synchronisation. | 132 |
| ㊱ G/L SYNC STATUS INFO | Affiche l'état du connecteur de synchronisation externe. | 133 |
| ㊲ TIME ADJUSTMENT | Règle l'horloge. | 133 |
| ㊳ USER PROFILE RESET | Restaure les paramètres par réglage implicite de profil. | 133 |
| HEAD | | |
| ㊴ WHITE SHADING | Paramètre l'ombrage blanc. | 134 |
| ㊵ H/V PHASE ADJUST | Paramètre les phases horizontales/verticales. | 134 |

Comment afficher le menu

La description ci-dessous explique comment afficher chaque menu SETUP sur le moniteur vidéo connecté.

QUICK MENU

Régler chaque volume [RED], [BLUE], [LEVEL]. Si le bouton [PAGE] est pressé pendant plus de 2 secondes, la page d'ouverture du menu QUICK MENU sera affichée.

QUICK MENU a deux pages. Pour changer de page, appuyer sur le bouton [PAGE].

Pour commuter entre six profils, appuyer sur le bouton [PROFILE].

ADVANCED MENU

Si le bouton [MENU] est pressé pendant plus de 1 seconde, la page d'ouverture du menu ADVANCED MENU sera affichée.

ADVANCED MENU a sept pages. Pour commuter la page, appuyer sur le bouton [PAGE] ou déplacer le curseur jusqu'à l'onglet se trouvant en bas de la page et appuyer sur le bouton [◀] ou [▶].

Pour commuter entre six profils, appuyer sur le bouton [PROFILE].

MAINTENANCE MENU

La page d'ouverture de MAINTENANCE MENU sera affiché si le courant est appliqué alors que le bouton [MENU] et le bouton [SEL] sont pressés simultanément.

MAINTENANCE MENU a deux pages. Pour commuter la page, appuyer sur le bouton [PAGE] ou déplacer le curseur jusqu'à l'onglet se trouvant en bas du menu et cliquer sur le bouton [◀] ou [▶].

Opération de base


IMPORTANT:

- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles quand la tête de caméra vidéo n'est pas connectée:
 - Démarrage AWC pour WHITE BAL MODE
 - FLIP AND MIRROR
 - WHITE SHADING
 - COLOR MATRIX
 - FREEZE
 - H/V PHASE ADJUST
 - DIGITAL ZOOM
- Pour les rubriques de MAINTENANCE MENU, contacter votre distributeur.


Les descriptions suivantes expliquent comment utiliser fondamentalement QUICK MENU.

Page d'ouverture de QUICK MENU


Page BASIC (WB RED GAIN)

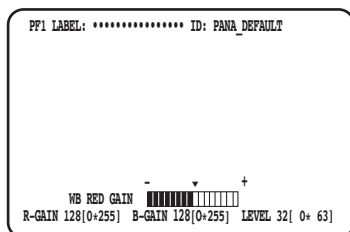


Page BASIC (WB BLUE GAIN)

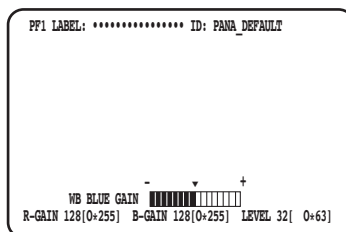

Page BASIC (AE LEVEL)

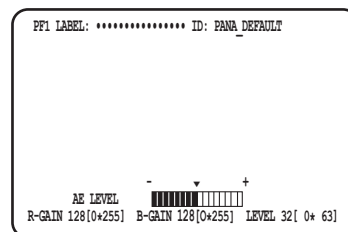

Page DETAIL

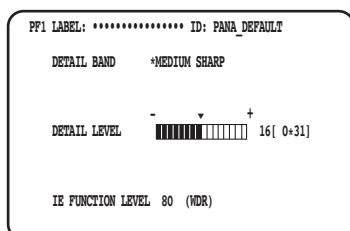

Étape 1

Page BASIC

Configurer chaque rubrique.

- WB RED GAIN
Régler le volume [RED] pour ajuster le niveau du rouge.
- WB BLUE GAIN
Régler le volume [BLUE] pour ajuster le niveau du bleu.
- AE LEVEL
Régler le volume [LEVEL] pour ajuster la luminosité.

Page DETAIL

La page sera commutée à la page DETAIL quand le bouton [PAGE] est pressé pendant que la page BASIC est affichée.

- DETAIL BAND
Régler le volume [RED] pour ajuster la bande de la correction de bordure.
- DETAIL LEVEL
Régler le volume [BLUE] pour ajuster la bande de la correction de bordure.
- IE FUNCTION LEVEL
Tourner le volume [LEVEL] pour ajuster le niveau sélectionné de la fonction IE.

Étape 2

Si l'opération est arrêtée pendant 4 secondes, le contenu de la configuration sera sauvegardé et l'image de caméra vidéo sera rétablie.

Les descriptions suivantes expliquent comment utiliser fondamentalement ADVANCED MENU.

Page d'ouverture de ADVANCED MENU Page EXPOSURE

| | |
|--|--------------------------|
| PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| AE | *AUTO LEVEL 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Page PICTURE

| | |
|--|--------------------------------|
| PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| WHITE BAL MODE | *AWC R-GAIN 128[0*255] |
| | B-GAIN 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP LEVEL 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] |
| FLARE COMP | OFF |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] |
| COLOR MATRIX | *USER |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Page CONTRAST

| | |
|--|-----------------|
| PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35*0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0*15] |
| KNEE SLOPE | 3[0*7] |
| IF FUNCTION SELECT | WDR |
| | LEVEL 80[0*255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Page PROFILE

| | |
|--|------|
| PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| USER PROFILE | |
| USER PROFILE ID | *OFF |
| USER PROFILE LABEL | *OFF |
| FLUORESCENCE MODE | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Page FUNC

| | |
|--|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSM CONTROL CH1 | PROFILE1-->2 |
| FOOTSM CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Page SYSTEM

| | |
|--|------------|
| OSD POSITION | UPPER LEFT |
| HDMI1 COLOR DEPTH | YbPr(422) |
| HDMI2 COLOR DEPTH | YbPr(422) |
| G/L SYNC TERMINAL SETTING | OUT |
| G/L SYNC STATUS INFO | INTERNAL |
| *TIME ADJUSTMENT | |
| *USER PROFILE RESET | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Page HEAD

| | |
|--|-----------|
| WHITE SHADING | AUTO(SET) |
| H/V PHASE ADJUST H | 0[-20*20] |
| V | 0[-11*11] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Étape 1

Configurer chaque rubrique.

- Sélectionner la rubrique à paramétrer
Déplacer le curseur en tournant le réglage de volume [RED] ou en appuyant sur le bouton [Δ] ou [∇].
- Changer la rubrique de paramétrage
Tourner le volume [LEVEL] ou appuyer sur le bouton [◀] ou [▶].
- Affiche la page de configuration avancée
Appuyer sur le bouton [SEL] pour que la rubrique “*” soit indiquée.
- Retourne à la page de configuration de niveau supérieur
Appuyer sur le bouton [MENU].

Remarque:

- Le curseur est une partie clignotante.
Dans ce document, cela est indiqué par “Ombre”.

Étape 2

Appuyer sur le bouton [MENU] pendant 1 seconde ou plus après avoir sauvegardé le contenu de configuration pour fermer la page de configuration et retourne à l'image de caméra vidéo.

Le contenu de la configuration peut être sauvegardé même si le courant du CCU est coupé.

Restauration de paramétrage par réglage implicite

- Pour restaurer chaque paramétrage dans SETUP MENU sur le réglage part défaut, déplacer le curseur jusqu'à la rubrique à modifier et maintenir les boutons pressés [◀] et [▶] simultanément pendant 1 seconde ou plus longtemps.
- Pour restaurer le paramétrage initial de tous les profils, utiliser [USER PROFILE RESET]. (☞ Page 133)
- Pour restaurer le paramétrage initial du seul profil sélectionné, appuyer sur le bouton [PROFILE] pendant plus de 1 seconde.
- Pour restaurer le paramétrage initial de toutes les rubriques dans chaque page de “ADVANCED MENU”, déplacer le curseur jusqu'à l'onglet se trouvant en bas de page et maintenir enfoncés les boutons [◀] et [▶] simultanément pendant 1 seconde ou plus longtemps.

MAINTENANCE MENU

Pour obtenir de plus amples détails et savoir comment commander MAINTENANCE MENU, contacter votre distributeur.

| Rubriques de configuration | Description générale |
|-------------------------------|---|
| CUSTOM | |
| OSD OUTPUT SEL (HDMI) | Configure l'affichage OSD de la sortie HDMI. |
| OSD OUTPUT SEL (SDI) | Configure l'affichage OSD de la sortie SDI. |
| OSD CHARACTER MODE | Spécifie le format de caractère OSD. |
| KEY BIND (MENU) | Assigne une fonction au bouton [MENU]. |
| KEY BIND (↑↓) | Assigne les fonctions aux boutons [Δ] et [▽]. |
| KEY BIND (←→) | Assigne les fonctions aux boutons [◀] et [▶]. |
| FUNC / INFO | |
| BLEMISH COMP | Configure la compensation de tacheture. |
| BLACK BAL | Configure la balance du noir. |
| CABLE DIAG MODE | Diagnostique la qualité du câble de caméra vidéo. |
| DIPSW STATUS | Affiche l'état paramétré de DIPSW. |
| FPGA STATUS | Affiche la température de FPGA. |
| ALL RESET | Restaure tous les paramètres sur leur valeur par réglage implicite. |
| CPU VER. (MAIN / SUB) | Affiche la version de l'unité centrale. |
| FPGA VER. (FRONT/REAR) | Affiche la version FPGA (CCU). |
| HEAD VER. | Affiche la version FPGA (HEAD) et le type de caméra vidéo. |

Remarque:

- [ALL RESET] n'initialisera pas ce qui suit : [HEAD GAIN], [WHITE SHADING], [H/V PHASE ADJUST] dans ADVANCED MENU et [BLEMISH COMP] dans MAINTENANCE MENU.

Configurer le profil

Si des détails, de gamma, de la teinte, etc. sont enregistrés en tant que profil selon un site d'installation, l'utilisateur peut rappeler le contenu enregistré en appuyant seulement sur le bouton [PROFILE] implanté en façade du CCU.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 6 profils. Le paramétrage approprié pour la capture d'image fluorescente est préprogrammé dans PROFILE 5 et PROFILE 6.

L'enregistrement peut être exécuté à la page d'ouverture de ADVANCED MENU. La page de profil a quatre pages. Le numéro de profil sera affiché dans la partie supérieure gauche de la page de profil correspondante.

Les caractères spécifiés à "USER PROFILE LABEL" seront affichés dans "LABEL" (☞ page 129). La configuration initiale dans PROFILE 1 à 4 est vide.

Page EXPOSURE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          +AUTO      LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        +AUTO      LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Page PICTURE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE +AWC      R-GAIN 128[ 0*255]
              B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND    +MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL     5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP    OFF
COLOR LEVEL   160[ 0*255]
COLOR MATRIX  +USER
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Page CONTRAST

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMA SELECT   S-CURVE
GAMA VALUE    0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE     MANUAL
KNEE POINT    8[0*15]
KNEE SLOPE    3[0*7]

IE FUNCTION SELECT WDR
                LEVEL 80[0*255]
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Page PROFILE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF

FLUORESCENCE MODE OFF
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Configurer EXPOSURE

① Configuration AE [AE]

La luminosité de l'image sera automatiquement ajustée si "AUTO" est sélectionné pour AE (exposition automatique). Si "MANUAL" est sélectionné, la luminosité de l'image peut être ajustée manuellement. Le niveau AE peut être paramétré dans la page de paramétrage avancé.

La fonction AE ajuste la luminosité de l'image en contrôlant "GAIN" et "SHUTTER".

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          +AUTO      LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        +AUTO      LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

② Régler l'obturateur électronique [SHUTTER]

Sélectionner une vitesse d'obturation électronique parmi les options suivantes: "AUTO", "MANUAL(FIX)", "MANUAL(VAL)"

Si "MANUAL(FIX)" est sélectionné, la vitesse d'obturation électronique peut être spécifiée. Ce qui suit est disponible pour la vitesse d'obturation:

Quand la fréquence de trame est de 59,94 Hz: 1/60 (réglage implicite), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, *MANU

Quand la fréquence de trame est de 50 Hz: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, *MANU

En appuyant sur le bouton [SEL] après avoir sélectionné "*MANU", la page "SHUTTER" sera affichée et le réglage précis de la vitesse d'obturation peut être exécuté.

Les limites de réglage se situent entre 10/1125 à 1124/1125.

Quand "MANUAL" est sélectionné pour "AE", la vitesse d'obturation électronique peut être ajustée avec précision à l'aide du réglage de volume [LEVEL] en sélectionnant [MANUAL(VAL)].

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          +AUTO      LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        +AUTO      LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

```

** SHUTTER **
SHUTTER      MANU
MANU SET     1124/1125
    
```

Remarque:

- Pour configurer "SHUTTER", sélectionner "MANUAL" pour "AE". (Page 122)
- Si un scintillement est observé sous un éclairage fluorescent de 50 Hz, la sélection de "1/100" comme vitesse permet d'atténuer le scintillement.

③ Configurer le mode d'addition de pixel [BINNING]

La sensibilité peut être améliorée en ajoutant des pixels.

Le mode d'addition de pixel peut être sélectionné parmi les options suivantes:

- OFF : Paramètre le mode d'addition de pixel sur désactivé.
- LINE MIX (réglage implicite) : Ajoute des pixels dans la direction verticale. (La résolution verticale sera détériorée.)
- PIX MIX : Ajoute des pixels dans la direction horizontale. (La résolution horizontale sera détériorée.)
- P/L MIX : Ajoute des pixels dans les directions verticale et horizontale. (Les résolutions horizontale et verticale seront détériorées.)

④ Ajuste le gain [GAIN]

Sélectionner un paramétrage de contrôle de gain parmi les propositions suivantes:

- OFF : Aucun réglage de gain
- AUTO (réglage implicite) : Réglage de gain automatique
Les valeurs maximales tolérables pour le réglage automatique seront appliquées.
- MANUAL(FIX) : Réglage de gain manuel
Le gain sera fixé sur la valeur de paramétrage.
- MANUAL(VAL) : Ajuster le gain avec le réglage de volume [LEVEL] manuellement quand "MANUAL" est sélectionné pour "AE". Il permet un réglage plus précis que "MANUAL(FIX)".

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | +AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | --- | --- |
| BINNING | LINE MIX | --- | --- |
| GAIN | +AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | --- | --- |
| AREA SELECTION | ALL | --- | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | --- | --- |
| HEAD GAIN | -6dB | --- | --- |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

⑤ Paramètre l'exposition longue durée [LONG EXPOSURE]

Sélectionner l'exposition longue durée parmi les options "OFF", "AUTO", "MANUAL(FIX)", "FIX(x1)".

- OFF (réglage implicite) : Paramètre l'exposition longue durée sur arrêt.
- AUTO : Contrôle automatiquement l'exposition longue durée. La valeur maximale pour le contrôle de réglage automatique sera paramétrée en tant que durée de stockage.
- MANUAL(FIX) : Permet un réglage manuel d'exposition longue durée.
La durée sera fixée sur la durée de stockage paramétrée.
La durée de stockage peut être sélectionnée parmi les options "OFF", "x2", "x4" ou "x8".
- FIX(x1) : Invalide l'exposition longue durée.
Ce paramétrage est disponible quand "MANUAL" est sélectionné pour AE.

⑥ Paramétrer le secteur de détection de luminosité [AREA SELECTION]

Si une source lumineuse telle que celle d'un projecteur d'éclairage est présente en arrière-plan derrière le sujet, le sujet risque d'apparaître sombre. Pour éliminer ce phénomène, un masquage des secteurs lumineux permet aux utilisateurs d'exécuter une compensation d'éclairage à contre-jour pour cacher les secteurs lumineux.


Déplacer le curseur jusqu'à "AREA SELECTION" et utiliser le bouton [<] ou [>] pour sélectionner le secteur.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | +AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | --- | --- |
| BINNING | LINE MIX | --- | --- |
| GAIN | +AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | --- | --- |
| AREA SELECTION | ALL | --- | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | --- | --- |
| HEAD GAIN | -6dB | --- | --- |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |


La zone peut être sélectionnée parmi les options suivantes:

* Les zones de détection indiquées dans les schémas ci-dessous ne sont pas affichées.


ALL (par réglage implicite): La cible de détection est la zone totale sur l'écran.

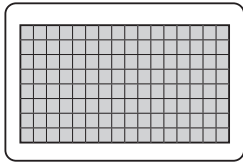


S CIRCLE: La cible de détection est la petite zone en forme de cercle au centre de l'écran.

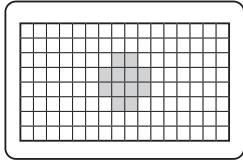

M CIRCLE: La cible de détection est la zone de dimension moyenne en forme de cercle au centre de l'écran.

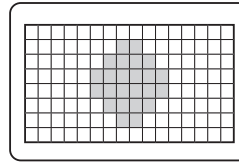

L CIRCLE: La cible de détection est la grande zone en forme de cercle au centre de l'écran.

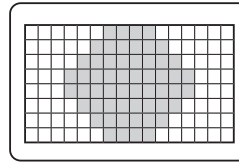


MANU: La cible de détection est spécifiée manuellement. (☞ Page 124)

AUTO: Les zones sombres sont automatiquement masquées et seules les zones lumineuses sont détectées.

Paramétrer manuellement le secteur de détection

Paramétrer manuellement le secteur de détection.

Écran de paramétrage de secteur de détection

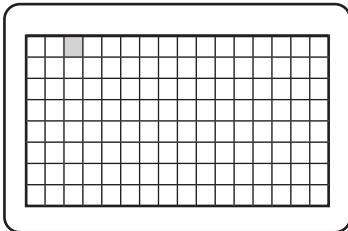

Étape 1

Sélectionner "MANU" pour "AREA SELECTION" et appuyer sur le bouton [SEL].

→ L'écran de paramétrage de masque apparaît.

Étape 2

Amener le curseur jusqu'au secteur de non détection en utilisant le bouton [Δ], [∇], [◀] ou [▶] et appuyer sur le bouton [SET].

→ La zone masquée est affichée en gris.

Remarque:

- La détection est exécutée seulement dans les secteurs masqués.
- Pour annuler le masquage de zone, déplacer le curseur jusqu'à la zone à annuler puis appuyer sur le bouton [SEL].
Pour annuler tous les secteurs masqués, appuyer et immobiliser simultanément les boutons [◀] et [▶] pendant au moins 1 seconde.

Étape 3

Appuyer sur le bouton [MENU] pour conclure le paramétrage de secteur.

→ La page MENU sera restaurée.

⑦ Paramétrer la pondération de détection de luminosité [PEAK/AVE LEVEL]

Déplacer le curseur jusqu'à "PEAK/AVE" et utiliser le bouton [◀] ou [▶] pour régler le niveau de détection.

Lorsque la valeur est déplacée dans la direction "0", la valeur de crête (valeur maximum) est détectée. Lorsque la valeur est déplacée dans la direction "8", la valeur moyenne est détectée.

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| AE | *AUTO LÉVEL 32[0+ 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0+8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

⑧ Paramétrer le gain de tête [HEAD GAIN]

Le gain de tête peut être sélectionné parmi les options -9dB, -6dB, -3dB, OFF (0dB), +3dB, +6dB ou +9dB.

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| AE | *AUTO LÉVEL 32[0+ 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0+8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Configurer PICTURE

⑨ Paramétrer la balance des blancs [WHITE BAL MODE]

La méthode de réglage de balance des blancs peut être sélectionnée parmi les options suivantes:

AWC (réglage implicite) : Le mode de contrôle de balance des blancs est paramétré. Il est approprié pour un emplacement où la source d'éclairage est stable.

Lorsque "AWC" est sélectionné, une opération pour ajuster la balance des blancs est nécessaire.

MANUAL

: La balance des blancs peut être ajustée manuellement.

| | |
|--|--------------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| WHITE BAL MODE | *AWC R-GAIN 128[0+255] |
| | B-GAIN 128[0+255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP LEVEL 16[0+ 31] |
| DNR LEVEL | 5[0+ 10] |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68+ 95] |
| FLARE COMP | OFF |
| COLOR LEVEL | 160[0+255] |
| COLOR MATRIX | *USER |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Lorsque "AWC" est sélectionné, suivre les étapes indiquées ci-dessous pour ajuster la balance des blancs.

Étape 1

Diriger la caméra vidéo vers un sujet blanc. Prendre une image de sujet blanc sous la source d'éclairage à utiliser.

Étape 2

Appuyer sur le bouton [AWC] dans l'écran précédent.

→ AWC sera démarré et la lampe témoin d'état AWC clignote. Le réglage est terminé quand "AWC OK" est affiché et que la lampe témoin s'éteint.

Remarque:

- Le réglage est disponible pour chaque profil. (☞ Page 122)
- Si la lampe témoin reste allumée après que "AWC NG" soit affiché ou si la lampe témoin s'allume après que le profil soit changé, réessayer les étapes 1 et 2.
- Si AWC est exécuté alors que le paramétrage de "R-GAIN" ou "B-GAIN" de "MANUAL" est réglé sur une autre valeur que celle par réglage implicite (128), la balance des blancs ne peut pas être paramétrée correctement.

Quand "MANUAL" est sélectionné, déplacer le curseur sur "R-GAIN" ou "B-GAIN" et ajuster la balance des blancs avec le bouton [◀] ou [▶].

⑩ Paramétrer les détails [DETAIL BAND]

La bande et le niveau de la correction de bordure sont indiqués.

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE  +AMC      R-GAIN 128[ 0*255]
                  B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND     +MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL      5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP     OFF
COLOR LEVEL    160[ 0*255]
COLOR MATRIX   +USER
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

```

Étape 1

Déplacer le curseur jusqu'à "DETAIL BAND" et sélectionner un modèle de bande parmi ce qui suit: "OFF", "SOFT", "MEDIUM SHARP", "SHARP", ou "SHARPEST".

Le contour devient plus épais (bande basse) quand le curseur est déplacé dans la direction de "SHARPEST", tandis que le contour devient plus mince (bande haute) dans la direction de "SOFT".

Étape 2

Déplacer le curseur jusqu'à "DETAIL LEVEL" pour ajuster le niveau d'intensité.

Quand la valeur est augmentée, l'image devient plus nette et une fois réduite, l'image devient plus enveloppée.

Remarque:

- Un crénelage risque d'apparaître sur le contour d'un sujet photographique, mais ce phénomène n'est pas anormal. Si ce phénomène n'est pas favorable, réduire "DETAIL BAND" ou "DETAIL LEVEL" et régler la qualité d'image.

⑪ Paramétrer la fonction de réduction de bruit numérique [DNR LEVEL]

La fonction de réduction de bruit numérique réduit le bruit. Utiliser le bouton [◀] ou [▶] pour ajuster le niveau de réduction du bruit.

⑫ Ajuster le niveau de tension constante de signal [PEDESTAL LEVEL]

Ajuster le niveau de tension constante de signal (niveau de signal du noir) en actionnant le bouton [◀] ou [▶] tout en visionnant la forme d'onde sur un moniteur de forme d'onde ou un moniteur vidéo couleur.

Quand la valeur est augmentée, l'image devient plus lumineuse et une fois réduite, l'image devient plus sombre.

⑬ Paramétrer la compensation de phénomène de tache lumineuse [FLARE COMP]

Sélectionner "ON" ou "OFF" (réglage implicite) pour déterminer s'il faut exécuter ou non la compensation de phénomène de tache lumineuse.

Lorsque "ON" est sélectionné, la lumière parasite est atténuée.

⑭ Ajuster le niveau de couleur [COLOR LEVEL]

Ajuster le niveau de couleur en actionnant le bouton [◀] ou [▶] tout en visionnant sur un vecteurscope couleur ou un moniteur vidéo couleur.

Quand la valeur est augmentée, la couleur devient plus intense et une fois réduite, la couleur devient plus claire.

⑮ Ajuster la teinte [COLOR MATRIX]

Ajuster la teinte en visionnant sur un vecteurscope couleur ou un moniteur vidéo couleur.

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE  +AMC      R-GAIN 128[ 0*255]
                  B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND     +MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL      5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP     OFF
COLOR LEVEL    160[ 0*255]
COLOR MATRIX   +USER
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

```

```

** MATRIX ** USER
          AFTER (BEFORE)
B PHASE  ....|.... 0 ( 0 )

B GAIN   ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET(NEW SETTING)

```

```

** MATRIX ** USER
          AFTER (BEFORE)
B/B-Mg PHASE ....|.... 0 ( 0 )
B PHASE      ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg PHASE   ....|.... 0 ( 0 )
B/B-Mg GAIN  ....|.... 0 ( 0 )
B GAIN       ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg GAIN    ....|.... 0 ( 0 )
USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET(NEW SETTING)

```

Étape 1

Affiche la couleur à ajuster au centre de l'écran aussi grand que possible.

Étape 2

Sélectionner l'axe près de la couleur cible. L'axe peut être sélectionné parmi les options suivantes:

USER (réglage implicite), B-Mg, Mg, Mg-R, R, R-Ye, Ye, Ye-G, G, G-Cy, Cy, Cy-B, B

Étape 3

Appuyer sur le bouton [SEL] une fois la sélection de l'axe terminée.

→ L'écran "MATRIX" sera affiché.

Étape 4

Pour exécuter un réglage précis, ajuster "PHASE" (teinte) et "GAIN" (chrominance) en utilisant le bouton [<] ou [>].

Étape 5

Sélectionner "BEFORE" ou "AFTER" avec "EFFECT SELECT" et vérifier si l'effet est appliqué. Pour déterminer le paramétrage, sélectionner "SET(NEW SETTING)" puis appuyer sur le bouton [SEL].

Pour restaurer le paramétrage précédent, sélectionner "CANCEL" puis appuyer sur le bouton [SEL].


Lorsque l'axe de couleur n'est pas net

Quand "USER AREA" est sélectionné sur l'écran "MATRIX", l'axe est automatiquement affiché en sélectionnant une couleur sur l'écran.

La sélection des couleurs est exécutée sur l'écran de détection de couleur.

Le curseur rectangulaire noir clignote pour sélectionner une couleur cible sur l'écran de détection de couleur.


Écran de détection de couleur

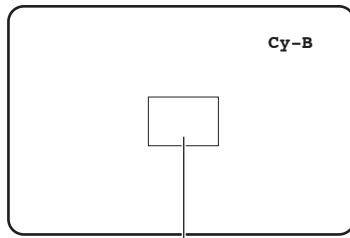

□ Curseur (clignotant)

<Graphique de séparation de matrice de couleur>

* Ce graphique est une directive pour afficher l'axe le plus proche au réglage.

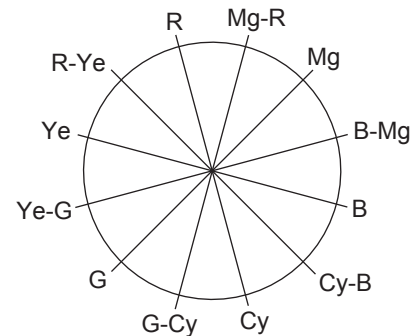

Étape 1

Diriger la caméra vidéo vers la partie centrale du sujet avec laquelle la couleur est détectée.

Si la caméra vidéo ne peut être déplacée, déplacer le curseur rectangulaire jusqu'à la zone comportant la couleur cible en utilisant les boutons [Δ], [∇], [<] et [>].

Remarque:

- Lorsque le volume du bleu est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la taille du curseur rectangulaire change dans l'ordre grande → moyenne → petite. Sélectionner une taille correspondant à la taille du sujet.

Étape 2


Appuyer sur le bouton [SEL] ou [MENU].

→ L'écran "MATRIX" réapparaît.

Étape 3

Pour exécuter un réglage précis, ajuster "PHASE" (teinte) et "GAIN" (chrominance).

Par exemple, le réglage de "PHASE" ou de "GAIN" de "Cy/Cy-B" sur l'écran suivant assure le réglage simultané de "PHASE" ou "GAIN" des axes adjacents "Cy" et "Cy-B" dans le graphique de division de matrice de couleur ci-dessus.

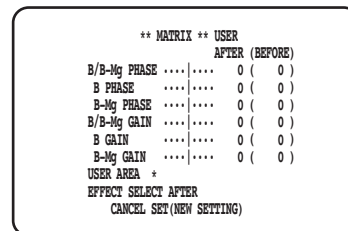

Remarque:


- Quand la couleur sur l'axe dans le graphique de division de matrice de couleur est détectée, les axes adjacents ne sont pas affichés.

Configurer CONTRAST

⑩ Paramétrer le mode de correction de gamma [GAMMA SELECT]

Le mode de gamma peut être sélectionné parmi les options suivantes:

- S-CURVE (réglage implicite) : En accroissant le gamma, le bruit peut être réduit tout en conservant le contraste.
- NORMAL : Une caractéristique standard de gamma

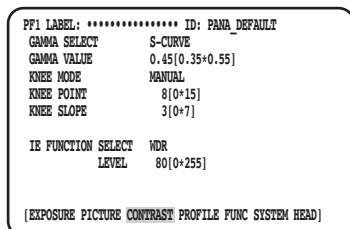

⑪ Paramétrer le niveau de correction de gamma [GAMMA VALUE]

Visualiser un moniteur de forme d'onde ou un moniteur de vidéo couleur pour paramétrer le niveau de correction de gamma.

Paramétrer le niveau de correction de gamma entre 0,35 et 0,55 (réglage implicite: 0,45).

Le niveau de correction de gamma sera réglé sur OFF (gamma = 1), si le bouton [◀] est pressé quand le niveau de correction de gamma est de "0,55".

⑫ Paramétrer le mode de coude [KNEE MODE]

En raison de l'éclairage et de la réflexion sur le sujet, "des hyperluminosités" peuvent se produire dans lequel les parties lumineuses de l'image peuvent apparaître aplaties. Ce phénomène se produit lorsque le signal de luminance dépasse la plage dynamique de la caméra vidéo. Pour paramétrer les signaux d'entrée haute luminance dans la plage dynamique de la caméra vidéo, compresser la gradation en utilisant la fonction coude.

Sélectionner la méthode de réglage parmi les options suivantes:

- MANUAL (réglage implicite) : Permet un réglage manuel du point coude et de la pente coude.
- AUTO : Ajuste automatiquement le point coude et la pente coude.

⑬ Paramétrer le point coude [KNEE POINT]

Faire en sorte d'observer un moniteur de forme d'onde ou un moniteur vidéo couleur au moment de faire le réglage de point de coude.

Paramètre le point de compression pour les signaux d'entrée haute luminance.

⑭ Paramétrer la pente de coude [KNEE SLOPE]


Faire en sorte d'observer un moniteur de forme d'onde ou un moniteur vidéo couleur au moment de faire le réglage de la pente de coude.

Paramétrer le niveau de compression pour les signaux d'entrée haute luminance en réglant la pente de coude.

⑮ Paramétrer le bouton [IE] [IE FUNCTION SELECT]

Sélectionner une fonction à assigner au bouton [IE] (IMAGE ENHANCEMENT) parmi les options suivantes:

- WDR : La fonction d'expansion de la gamme dynamique corrige la zone foncée rendue plus lumineuse tout en contrôlant la surexposition.
- DARK AREA CORRECTION : La fonction d'extension noire adaptative corrige la zone foncée rendue plus lumineuse.
- OVER EXPOSURE REDUCTION : La fonction de correction d'exposition contrôle la surexposition.
- SMOKE CORRECTION : La fonction de correction de fumée efface le flou blanc.
- COLOR ENHANCEMENT : La fonction de rehaussement de couleur améliore la couleur sélectionnée.

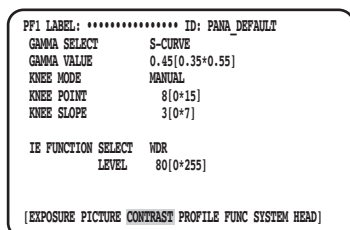


22 Paramétrer le niveau de correction assigné au bouton [IE] [IE FUNCTION LEVEL]

Ajuster le niveau de correction de la fonction sélectionnée avec [IE FUNCTION SELECT] en actionnant le bouton [<] ou [>] tout en observant un vecteurscope couleur ou un moniteur vidéo couleur.

Quand la valeur est augmentée progressivement, le taux de correction augmente et une fois diminuée progressivement, le taux de correction diminue.

Quand "COLOR ENHANCEMENT" est sélectionné, la couleur de RED, RED&YELLOW ou YELLOW peut être sélectionnée en plus du niveau de correction.

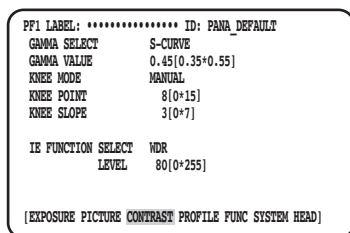

Configurer PROFILE



23 Paramétrer l'identification de profil d'utilisateur et l'étiquette [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]

Paramétrer l'identification de profil d'utilisateur et l'étiquette. L'identification et l'étiquette qui indiquent l'emplacement de la caméra vidéo et le contenu d'image peuvent être créées et affichées sur l'écran avec l'utilisation de caractères alphanumériques et de symboles. Jusqu'à 16 caractères peuvent être utilisés pour l'identification et l'étiquette.

Suivre la procédure indiquée ci-dessous pour paramétrer l'identification et l'étiquette.

Écran de création d'étiquette

(Quand la fréquence de trame est de 59,94 Hz)

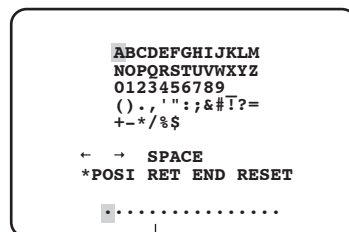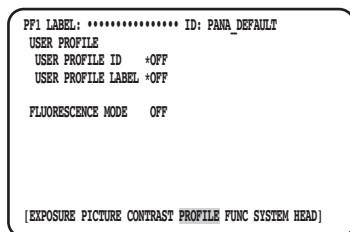


Zone de modification


Écran de création d'étiquette

(Quand la fréquence de trame est de 50 Hz)

Écran de positionnement d'affichage

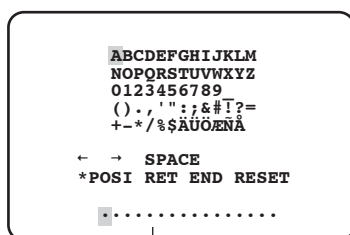

Zone de modification

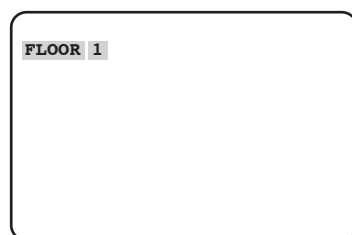

Étape 1

Paramétrer "USER PROFILE ID" ou "USER PROFILE LABEL" sur "*ON" et appuyer sur le bouton [SEL].

→ L'écran de création de titre sera affiché.

IMPORTANT:

- Lorsque "*OFF" est sélectionné pour "USER PROFILE ID" ou "USER PROFILE LABEL", "USER PROFILE" peut être paramétré mais non affiché.

Remarque:

- Le paramétrage "*POSI" de "USER PROFILE ID" est disponible seulement quand "*OFF" est sélectionné pour "USER PROFILE LABEL". Quand "*ON" est sélectionné pour "USER PROFILE LABEL", une priorité supérieure sera attribuée au paramétrage "*POSI" de "USER PROFILE LABEL".
- Par défaut, "FLUORESCENCE3" est paramétré pour "PROFILE 5", "FLUORESCENCE1" est paramétré pour "PROFILE 6".

Étape 2

Déplacer le curseur jusqu'au caractère ciblé en utilisant les boutons [Δ], [∇], [◀] ou [▶] et appuyer sur le bouton [SEL].

→ Les caractères saisis seront affichés dans le secteur d'édition.

<Saisie de caractère>

- Pour réviser un caractère, déplacer le curseur jusqu'à "←" ou "→" et appuyer sur le bouton [SEL]. Déplacer le curseur jusque sur le caractère à réviser dans la zone de saisie et réintroduire un caractère correct.
- Pour introduire un espace, déplacer le curseur jusqu'à "SPACE" et appuyer sur le bouton [SEL].
- Pour supprimer tous les caractères saisis, déplacer le curseur jusqu'à "RESET" et appuyer sur le bouton [SEL].

Étape 3

Pour introduire un titre, déplacer le curseur jusqu'à "*POSI" et appuyer sur le bouton [SEL].

→ L'affichage de l'écran de positionnement apparaîtra et le titre de caméra vidéo saisi clignote.

Étape 4

Utiliser les boutons [Δ], [∇], [◀] et [▶] pour déterminer la position du titre et appuyer sur le bouton [MENU].

→ La position d'affichage est déterminée et l'écran de création de titre réapparaîtra.

24 Paramétrer le paramétrage supplémentaire pour chaque mode de capture d'image fluorescente [FLUORESCENCE MODE]

Paramétrer le paramétrage supplémentaire pour chaque mode de capture d'image fluorescente.

Le paramétrage supplémentaire peut être sélectionné parmi les options suivantes:

- OFF (réglage implicite) : N'exécute pas le paramétrage supplémentaire pour la capture d'image fluorescente.
- MODE1 : Exécute le paramétrage supplémentaire pour FLUORESCENCE1.
- MODE2 : Exécute le paramétrage supplémentaire pour FLUORESCENCE2.
- MODE3 : Exécute le paramétrage supplémentaire pour FLUORESCENCE3.

```
PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF
FLUORESCENCE MODE OFF
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

```
** MODE1 **
MONOCHROME MODE ON
```

IMPORTANT:

- Le paramétrage pour la formation d'image fluorescente est préprogrammé dans PROFILE 5 et 6.
- Lors de l'utilisation du mode de capture d'image fluorescente, les dispositifs périphériques tels qu'une source lumineuse ou un filtre, etc. sont exigés.
- Pour obtenir de plus amples détails et savoir comment commander MAINTENANCE MENU, contacter votre distributeur.

Remarque:

- Lorsque "MODE1" est sélectionné, régler "MONOCHROME MODE" soit sur "ON" (mode noir et blanc: réglage implicite) ou soit sur "OFF" (mode couleur).
- Lorsque une autre option que "OFF" est paramétrée, "GAIN" peut être configuré sur 18 dB. (Jusqu'à 12 dB lorsque "OFF" est paramétré.)

Configurer FUNC

25 Paramétrer la fonction de retournement vertical et horizontal [FLIP AND MIRROR]

Ce qui suit est disponible en tant que fonction de bascule verticale et horizontale:

- OFF (réglage implicite) : Affichage normal
- FLIP : Verticalement retournée
- MIRROR : Horizontalement retournée
- FLIP+MIRROR : Verticalement et horizontalement retournée. Pour commuter le paramétrage, appuyer sur le bouton [Δ] ou [∇].

```
FLIP AND MIRROR OFF
F+H STATUS DISPLAY OFF
COLOR BAR *ON
FOOTEN CONTROL CH1 PROFILE1--2
FOOTEN CONTROL CH2 FREEZE
USER PROFILE SAVE/LOAD *USB-CAMERA(ALL)
SAVE/LOAD MODE(USB) AUTO
DIGITAL ZOOM ON
DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY OFF
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

Remarque:

- La fonction de gel peut être exécutée en même temps.

②6 Paramétrer l’affichage pour l’état de retournement vertical et horizontal [F+M STATUS DISPLAY]

Sélectionner “ON” ou “OFF” (réglage implicite) pour paramétrer s’il faut afficher “B” (retournement vertical), “H” (retournement horizontal), “BH” (retournement vertical et horizontal) sur l’écran quand le bouton [Δ] ou [▽] est pressé.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1↔2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

②7 Afficher la barre de couleur [COLOR BAR]

Afficher la barre de couleur.

La page d’ouverture sera rétablie lorsque le bouton [MENU] est pressé.

Remarque:

- Quand la tête de caméra vidéo n’est pas connectée au CCU, la barre de couleur sera affichée.

②8 Paramétrer les commutateurs de commande au pied [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]

Les fonctions suivantes peuvent être assignées à CH1 ou CH2:

| | |
|----------------|--|
| NONE | : Désactive le commutateur. |
| FREEZE | : Paramètre sur ON/OFF du gel d’écran. |
| FLIP+MIRROR | : Paramètre sur ON/OFF le retournement d’image vertical et horizontal. |
| FLIP | : Paramètre sur ON/OFF le retournement d’image vertical. |
| MIRROR | : Paramètre sur ON/OFF le retournement d’image horizontal. |
| PROFILE 1↔2 | : Commute entre les profils 1 et 2. |
| PROFILE 1↔5 | : Commute entre les profils 1 et 5. |
| PROFILE 1↔6 | : Commute entre les profils 1 et 6. |
| PROFILE 3↔4 | : Commute entre les profils 3 et 4. |
| PROFILE ALL | : Commute entre tous les profils, de 1 à 6 dans l’ordre. |
| ZOOM IN | : Opère un zooming en rapprochement dans l’image lorsque “ON(ENABLE)” est sélectionné pour “DIGITAL ZOOM”. |
| ZOOM OUT | : Opère un zooming en éloignement dans l’image lorsque “ON(ENABLE)” est sélectionné pour “DIGITAL ZOOM”. |
| ZOOM 1.0x↔2.0x | : Commute entre 1.0x et 2.0x quand “ON(ENABLE)” est sélectionné pour “DIGITAL ZOOM”. |

Remarque:

- La commande sur le commutateur de commande au sera invalidée alors que le menu SETUP est affiché.

②9 Sauvegarder/charger les profils [USER PROFILE SAVE/LOAD]

En insérant la mémoire USB, SAVE (CAMERA→USB) ou LOAD (USB→CAMERA) du profil peut être exécuté.

Sélectionner “ALL” pour sauvegarder ou lire tous les six profils et sélectionner “SINGLE” pour sauvegarder ou lire un fichier.

Ne pas changer le dossier et le nom de fichier à créer dans la mémoire USB. Si les noms sont changés, le chargement du profil échouera. Après la sauvegarde ou le chargement, la mémoire USB sera automatiquement désinstallée. Pour commander la mémoire USB continuellement, la déconnecter et l’insérer de nouveau.

IMPORTANT:

- Ne pas éditer la configuration du fichier et du dossier créée en appuyant sur le bouton [SAVE]. Ceci peut avoir comme conséquence un échec de chargement.

③⑩ Paramétrer la méthode de sauvegarde à /de chargement de la mémoire USB [SAVE/LOAD MODE (USB)]

Ce qui suit est disponible comme mode de commande quand une mémoire USB est insérée:

- AUTO : Un message d'incitation pour demander une commande (lecture/chargement/aucune action) sera automatiquement affiché.
- MANUAL : Aucune action n'est faite quand une mémoire USB est insérée. Exécuter dans la page [USER PROFILE SAVE/LOAD].

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | +ON |
| FOOTSN CONTROL CH1 | PROFILE1→2 |
| FOOTSN CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | +USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Remarque:

- Le contenu de toutes les rubriques dans QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE" "CONTRAST", et "PROFILE" dans ADVANCED MENU sera sauvegardé ou chargé. (À l'exception de "HEAD GAIN" de "EXPOSURE")

③⑪ Paramétrer l'activation ou la désactivation du zoom [DIGITAL ZOOM]

Paramétrer ON/OFF de la fonction du zoom.

Le facteur de zoom peut être paramétré entre 1x à 2,5x par pas de 0,1x. Pour commuter le paramétrage, appuyer sur le bouton [◀] ou [▶].

③⑫ Paramétrer l'affichage de rapport de zoom [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]

Paramétrer s'il faut afficher ou non le rapport de zoom actuel sur l'écran (réglage implicite: OFF).

Remarque:

- Lorsque 1x est sélectionné, le rapport ne sera pas affiché sur l'écran.

Configurer SYSTEM

③⑬ Paramétrer la position OSD de la sortie vidéo [OSD POSITION]

Sélectionner une position OSD de la sortie vidéo parmi les options suivantes :

- UPPER LEFT : Affiche OSD dans le secteur supérieur gauche de l'angle d'observation de sortie vidéo.
- UPPER RIGHT : Affiche OSD dans le secteur supérieur droit de l'angle d'observation de sortie vidéo.
- LOWER LEFT : Affiche OSD dans le secteur inférieur gauche de l'angle d'observation de sortie vidéo.
- LOWER RIGHT : Affiche OSD dans le secteur inférieur droit de l'angle d'observation de sortie vidéo.

③⑭ Paramétrer le signal de sortie HDMI [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]

Paramétrer les signaux de sortie pour le connecteur de sortie HDMI.

Ce qui suit est disponible quand 1080p ou 1080i est sélectionné pour la sortie HDMI:

YPbPr (422), YPbPr (444), RGB (LIMITED), RGB (FULL)

Quand le paramétrage pour le signal de sortie HDMI ou le format vidéo est changé, la vidéo de sortie HDMI peut être interrompue pendant quelques secondes.

③⑮ Paramétrer le connecteur d'entrée/sortie de signal de synchronisation [G/L SYSNC TERMINAL SETTING]



Sélectionner soit "IN" soit "OUT (réglage implicite)".

IMPORTANT:

- La fonction de synchronisation externe peut être utilisée entre les séries des unités de commande. Connecter la GP-UH332C ou la GP-UH532C au connecteur d'entrée/sortie de signal de synchronisation. Ensuite, paramétrer "OUT" pour l'appareil principal et "IN" pour l'appareil asservi et appliquer le même format de sortie vidéo.

36 Afficher l'état de synchronisation [G/L SYNC STATUS INFO]

L'état de synchronisation interne "INTERNAL" ou l'état de synchronisation externe "EXTERNAL" sera affiché. Lorsque "EXTERNAL" est sélectionné, la phase horizontale peut être ajustée.

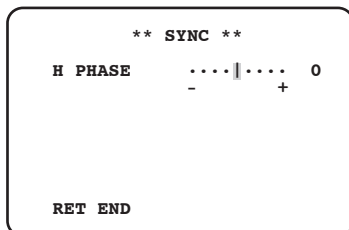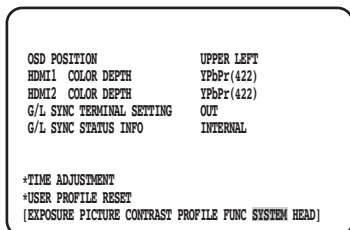

Ajuster la phase horizontale

Étape 1

Déplacer le curseur jusqu'à "**EXTERNAL" et appuyer sur le bouton [SEL].

Étape 2

Ajuster la "H PHASE".

Remarque:

- "**EXTERNAL" sera affiché quand "IN" est sélectionné pour "G/L SYNC TERMINAL SETTING" et les signaux de synchronisation externe sont appliqués. À d'autres moments, "INTERNAL" est affiché.
- Lors de la fermeture de l'écran de réglage de "H PHASE" (phase horizontale dans le mode de synchronisation externe), la sortie vidéo HDMI risque d'être perturbée pendant environ 5 secondes.

37 Régler l'horloge [TIME ADJUSTMENT]

Régler l'heure actuelle "mois/jour/année" et "heure/minute".

Pour déterminer le paramétrage, déplacer le curseur jusqu'à "SET" et appuyer sur le bouton [SET].

En utilisant la fonction de sauvegarde des données de mémoire USB pour des profils, veiller à régler l'heure.

38 Restaurer le paramétrage par réglage implicite de profil [USER PROFILE RESET]

Les paramétrages par réglage implicite sont restaurés pour toutes les rubriques dans QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE" "CONTRAST", et "PROFILE" dans ADVANCED MENU.

Étape 1

Déplacer le curseur jusqu'à "USER PROFILE RESET" et appuyer sur le bouton [SEL].

Étape 2

La fenêtre de confirmation "USER PROFILE RESET? YES/NO" sera affichée.

Si "YES" est sélectionné, le paramétrage par réglage implicite du profil sera restauré.

Remarque:


- "HEAD GAIN" de "EXPOSURE" ne sera pas initialisé.

Configurer HEAD

③⑨ Paramétrer l'ombrage de blanc [WHITE SHADING]

Paramétrer indifféremment "AUTO(SET)" ou "MANUAL" pour l'ombrage de blanc.

Lorsque le paramétrage "AUTO(SET)" est fait pour l'ombrage de blanc

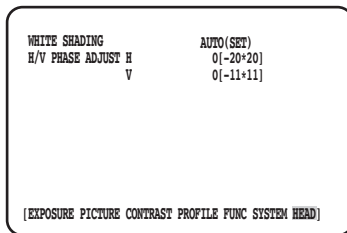

Étape 1

Diriger la caméra vidéo vers un sujet blanc.

Étape 2

Sélectionner "AUTO(SET)" et appuyer sur le bouton [SEL].

→ La fonction d'ombrage de blanc démarrera et l'indication "AUTO(SET)" répètera l'inversion et le clignotement. Le réglage automatique est terminé quand "WHITE SHADING OK" est affiché en bas du MENU.

Remarque:

- L'ombrage de blanc peut être paramétré pour chaque tête de caméra vidéo.
 - Si "WHITE SHADING NG" est affiché, réessayer les étapes 1 et 2.
-

Lorsque le paramétrage "MANUAL" est fait pour l'ombrage de blanc

Étape 1

Sélectionner "MANU" et appuyer sur le bouton [SET].

→ L'écran de configuration manuelle pour l'ombrage de blanc sera affiché. Régler chaque direction de composant de rouge/bleu de l'ombrage de blanc.

④⑩ Ajuster la position horizontale/verticale de l'écran [H/V PHASE ADJUST]

Ajuster la phase d'écran dans les directions horizontale (haut/bas) ou verticales (droit/à gauche).

Remarque:

- "H/V PHASE ADJUST" peut être paramétré pour chaque tête de caméra vidéo.
-

Avant de faire une demande de réparation, veuillez vérifier les symptômes mentionnés dans le tableau suivant.

Si une panne ne peut pas être corrigée même après avoir vérifié et essayer d'y remédier ou si un problème n'est pas décrit ci-dessous ou en cas de problème d'installation, contacter le distributeur.

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|--|--------------------|
| Aucune image n'est affichée | <ul style="list-style-type: none"> Le câble est-il convenablement connecté au connecteur de sortie HDMI ou au connecteur de sortie SDI ? Vérifier si la connexion est réalisée de façon appropriée. | 110 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Le format du signal de sortie vidéo de chaque connecteur de sortie est-il compatible avec le format affichable sur le moniteur? Vérifier si le format du signal de sortie vidéo est compatible avec le format vidéo. | 110, 136 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Le réglage de luminosité du moniteur vidéo est-il réglé correctement ou le contraste est-il réglé correctement ? Vérifier si les paramètres du moniteur vidéo sont corrects. | – |
| | <ul style="list-style-type: none"> Vérifier le moniteur vidéo après la restauration des paramètres sur leurs valeurs par défaut (1:ON/ 2:ON/ 3:ON/ 4:OFF/ 5:OFF/ 6:OFF). | 110 |
| L'état du témoin ne change pas après que le bouton [PROFILE] ait été pressé | <ul style="list-style-type: none"> Le fait d'appuyer une fois affiche l'état. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton [PROFILE] jusqu'à ce que l'indicateur cible s'allume. | 108 |
| L'état du témoin [AE] ne change pas | <ul style="list-style-type: none"> Le fait d'appuyer une fois affiche l'état. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton [AE] jusqu'à ce que l'indicateur cible s'allume. | 108 |
| L'état du témoin [IE] ne change pas | <ul style="list-style-type: none"> Le fait d'appuyer une fois affiche l'état. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton [IE] jusqu'à ce que l'indicateur cible s'allume. | 108 |
| Seule la barre de couleur est affichée | <ul style="list-style-type: none"> Le câble de caméra vidéo est-il convenablement connecté au connecteur du CCU et au connecteur de la tête de caméra vidéo? Vérifier si la connexion est correctement établie. | 107, 110 |
| La teinte [COLOR MATRIX] non réglable dans le menu | <ul style="list-style-type: none"> Le câble de caméra vidéo est-il convenablement connecté au connecteur du CCU et au connecteur de la tête de caméra vidéo? La connexion entre la tête de caméra vidéo et le câble de caméra vidéo est exigée pour régler la qualité d'image. Vérifier si la connexion est correctement établie. | 107, 110 |
| Écran entièrement brouillé | <ul style="list-style-type: none"> L'ouverture de l'objectif est-elle convenablement réglée? Vérifier si l'ouverture est réglée correctement. Utiliser des objectifs avec une valeur d'ouverture de diaphragme recommandée ou supérieure et les objectifs 3-CCD spécifiques. | 115 |
| Bordures multiples visibles | <ul style="list-style-type: none"> Essayer de changer le paramétrage de "DETAIL BAND". | 126 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Changer le câble de moniteur. | – |
| "AWC OK" non affiché | <ul style="list-style-type: none"> Quand l'écran est trop lumineux, fermer un peu plus l'ouverture de l'objectif ou régler "AE" sur "AUTO". | 115, 122 |
| Barres noires à droite et à gauche de l'image | <ul style="list-style-type: none"> Ce phénomène dépend des caractéristiques du moniteur. Sélectionner l'affichage large et plein écran sur le moniteur. | – |
| Image verticalement plus longue | <ul style="list-style-type: none"> Cet appareil fournit des sorties sur la supposition que l'écran est de 16:9. Sélectionner l'affichage écran large sur le moniteur. | – |
| Aucun son n'est délivré par le moniteur vidéo | <ul style="list-style-type: none"> Cet appareil n'est pas applicable à la sortie son. | – |
| Le message "FAN STOPPED" est affiché | <ul style="list-style-type: none"> Le ventilateur est en arrêt. Couper l'alimentation immédiatement et prendre contact avec votre distributeur ou l'opérateur pour effectuer le remplacement du ventilateur. | – |
| "Unsupported Camera Head" (Tête de caméra vidéo non prise en charge) est affiché. | <ul style="list-style-type: none"> Une tête de caméra vidéo non prise en charge est connectée. Prendre contact avec votre distributeur. | 137 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Source d'alimentation: | 12 V c.c. ±10 % |
| Puissance consommée: | 12 V 3,4 A (tête de caméra vidéo comprise) |
| Capteur d'image: | Système à microprisme |
| Capteur d'image: | 3MOS de type 1/3 |
| Sortie vidéo: | Sortie HDMI: Connecteur HDMI x2 |
| | Sortie SDI: Connecteur BNC x5 |
| Format vidéo: | Sortie HDMI: 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i |
| | Sortie SDI: 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i |
| Éclairage requis: | 2000 lx {200 candéla-pied} (3200 K, F16, lorsque "BINNIG" est "LINE MIX".) |
| S/N: | 54 dB (à la sortie en utilisant 1080i) |
| Résolution horizontale: | 1000 lignes de télévision mesurées au centre (caract. avec une sortie 1080p) |
| Barre de couleur: | Barre de couleur SMPTE (configuration 0 % , à 59,94 Hz) / Barre couleur totale (à 50 Hz) |
| Fonction: | AE, Gain, Obturateur électronique, Exposition longue durée, Gain de tête, Ajout de pixel, Balance des blancs, Coude, Détails, Commutation de gamma, Paramétrage DNR, Fonctions IE (WDR, extension noire adaptative, correction d'exposition, correction de fumée, Rehaussement de couleur), Paramétrage de décollement du noir, Compensation de tache lumineuse, Réglage de niveau de couleur, Réglage de teinte, Profil de capture d'image fluorescente, Gel, Retournement, Miroir, Affichage d'état, Barre de couleurs, Zoom numérique, paramétrage de commutateur de commande au pied, Paramétrage de profil, Commutation de sortie HDMI, Synchronisation externe, Horloge, Correction d'ombrage de blanc, Réglage de phase H/V |
| Commutateur de commande au pied: | Mini-fiche stéréo de ø3,5 |
| Commande externe: | Mini-fiche stéréo de ø3,5 (conforme avec le niveau de signal RS232C de l'interface série 3 électrodes) |
| Température ambiante en service: | 0 °C à 40 °C {32 °F à 104 °F} |
| Humidité ambiante en service: | 30 % à 90 % |
| Pression ambiante en service: | 700 hPa à 1060 hPa |
| Température de transport et de stockage: | -10 °C à +60 °C {14 °F à 140°F} |
| Hygrométrie de transport et de stockage: | 10 % à 90 % |
| Pression de transport et de stockage: | 700 hPa à 1060 hPa |
| Dimensions: | GP-UH332C: 185 mm (L) x 57 mm (H) x 270 mm (P) {7-9/32 pouces (L) x 2-1/4 pouces (H) x 10-5/8 pouces (P)} (à l'exception des pieds en caoutchouc et des parties saillantes) |
| | GP-UH332H: 27 mm (L) x 30 mm (H) x 42,5 mm (P) {1-1/16 pouces (L) x 1-5/32 pouces (H) x 1-21/32 pouces (P)} (à l'exception de l'embase de trépied et des parties saillantes) |
| Masse: | GP-UH332C: Environ 2 kg {4,42 lbs} |
| | GP-UH332H: Environ 65 g {0,14 lbs} |
| Finition: | Blanc voile |

Accessoires standard

Manuel d'utilisation (la présente documentation) 1 él.
Carte de garantie (uniquement le secteur des États-Unis) 1 él.

Accessoires optionnels

Tête de caméra 3MOS HD.....GP-UH332H
Câble de caméraGP-UC532G03 (3 m {9,8 feet})
GP-UC532G06 (6 m {19,7 feet})
GP-UC532G15 (15 m {49,3 feet})
GP-UC532G03A (3 m {9,8 feet})
(Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)
GP-UC532G06A (6 m {19,7 feet})
(Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)
GP-UC532G15A (15 m {49,3 feet})
(Programmés pour être bientôt publiés / En date d'août 2017)

L'élimination des équipements et des batteries usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales. Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas)


Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Panasonic®

Manual de instrucciones

Unidad de control de cámaras HD

N.º de modelo **GP-UH332C**

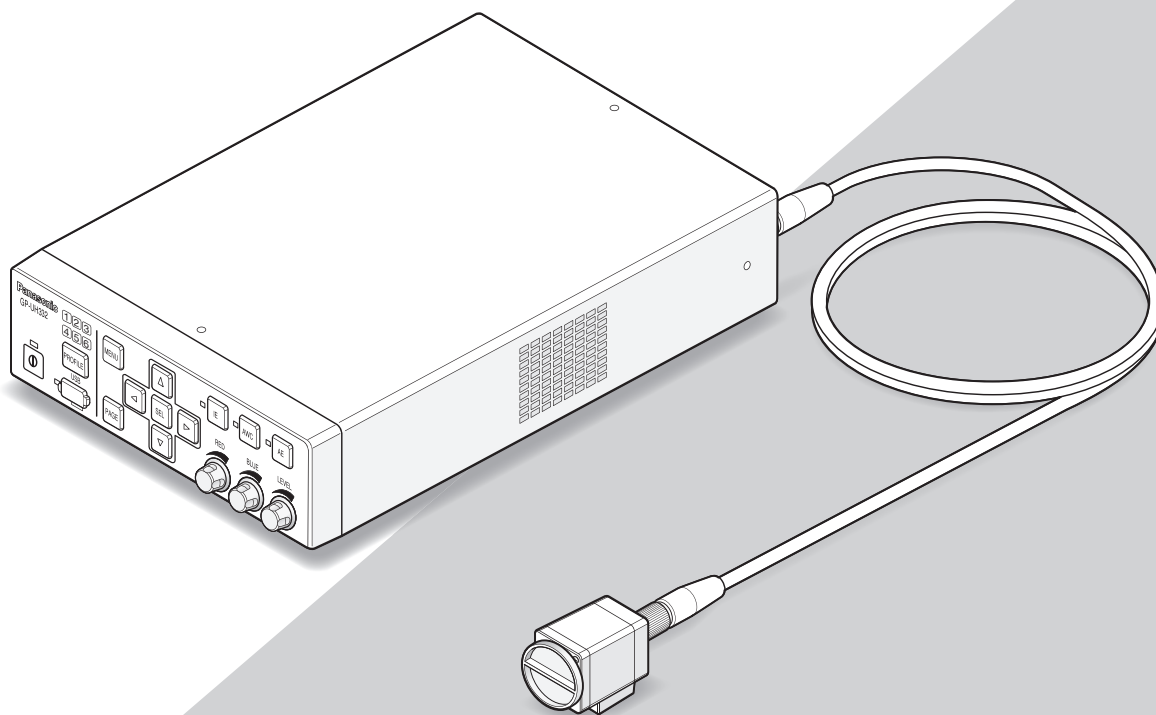

(El cabezal de la cámara y el cable de la cámara son opcionales.)

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Antes de conectar o de poner en funcionamiento este producto, lea atentamente estas instrucciones y guarde este manual para poder consultarlo en el futuro.

En este manual se ha abreviado el número de modelo en algunas descripciones.

ESPAÑOL

VERSION ESPAÑOLA

(SPANISH VERSION)

ADVERTENCIA:

- Para evitar el peligro de incendios o sacudidas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- El aparato no deberá exponerse a goteo ni salpicaduras y no deberá ponerse ningún objeto lleno de líquido, como puedan ser jarrones, encima del aparato.
- La instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con todas las reglas de instalación aplicables.
- Éste es un producto de clase A. En la instalación en una vivienda, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso puede resultar necesario que el usuario deba tomar las medidas pertinentes.
- Este equipo es compatible con la Clase A de CISPR 32. Este equipo puede ocasionar interferencias de radio en un entorno residencial.
- Solicite todo el trabajo de instalación de este aparato a personal de servicio técnico cualificado o a los instaladores del sistema.

PRECAUCIÓN:

- Todos los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento establecido pueden ser causa de cancelación de la autoridad del usuario para operar el equipo.

Desconexión de la alimentación. En las unidades provistas de interruptor de alimentación ON/OFF y en las unidades desprovistas del mismo, la alimentación se suministra a la unidad siempre que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de corriente. Adicionalmente, las unidades con interruptor de alimentación ON/OFF podrán funcionar sólo cuando el interruptor esté en la posición ON. Desenchufe el cable de alimentación para desconectar la alimentación principal de todas las unidades.

Para Europa

Nosotros declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto a que hace referencia esta declaración está conforme con la norma u otro documento normativo siguiendo las estipulaciones de la directiva 2004/108/CE.

EMC para el empleo de este producto en entornos médicos

- La descripción de la GP-UH332 representa el sistema de cámara que emplea la GP-UH332C y la GP-UH332H.

ADVERTENCIA

- El empleo de accesorios y cables que no sean los que se especifican en este documento puede incrementar la radiación electromagnética emitida por la GP-UH332 o deteriorar la inmunidad a la interferencia electromagnética.
- Si emplea la GP-UH332 instalada al lado o encima de otro dispositivo, deberá cerciorarse de que la CCU funcione con normalidad dentro del sistema.

PRECAUCIÓN

- Para deshacerse de este producto es necesario cumplir con la legislación local o nacional y con las políticas hospitalarias relacionadas.

| Política y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas | | |
|---|-----------------------|--|
| La GP-UH332 está destinada a ser utilizada en el entorno electromagnético especificado a continuación. Asegúrese de que este producto se utilice en el entorno siguiente. | | |
| Prueba de emisiones | Nivel de cumplimiento | Entorno electromagnético - Política |
| Emisiones conducidas de radiofrecuencia CSPR 11 | Grupo 1 | La GP-UH332 utiliza energía de radiofrecuencia para funciones internas. Por lo tanto, la emisión de radiofrecuencia es considerablemente baja y no interferirá con los dispositivos electrónicos que se encuentren cerca. |
| Emisiones conducidas de radiofrecuencia CSPR 11 | Clase A | Debido a las características de las emisiones de la GP-UH332, resulta adecuada para su empleo en zonas industriales y hospitales. Si este producto debe utilizarse en un barrio residencial, puede resultar necesario tomar algunas medidas, como la reubicación del producto, por ejemplo, ya que es posible que no se proporcione suficientemente protección para dispositivos de comunicación por radiofrecuencia en un barrio residencial. |
| Emisiones de corriente armónica IEC 61000-3-2 | Clase 1 | |
| Variación de tensión y emisiones de fluctuaciones y parpadeo de tensión IEC 61000-3-3 | Cláusula 5 | |

Emplee el siguiente adaptador de CA:
Fabricante: Sinpro Electronics Co., Ltd.
N.º de pieza: MPU60A-105-P49L10*

Política y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas


La GP-UH332 está destinada a ser utilizada en el entorno electromagnético especificado a continuación. Asegúrese de que este producto se utilice en el entorno siguiente.

| Prueba de inmunidad | IEC 60601 Nivel de prueba | Nivel de cumplimiento | Entorno electromagnético - Política |
|---|---|---|--|
| Inmunidad a las descargas electrostáticas (ESD) IEC 61000-4-2 | ±6 kV, Contacto ±8 kV, Aire | ±6 kV, Contacto ±8 kV, Aire | El material del suelo debe ser de madera, hormigón o de baldosas de cerámica. Si el material de suelo está cubierto por una sustancia sintética, está previsto que la humedad relativa sea del 30 % o más. |
| Transitorios rápidos del cable de alimentación/cable de señal Inmunidad a las ráfagas IEC 61000-4-4 | ±2 kV para alimentación de CA ±1 kV para línea de señal | ±2 kV para alimentación de CA ±1 kV para línea de señal | Utilice la energía típica disponible en el mercado o una que sea exclusiva para entornos hospitalarios. |
| Inmunidad a las sobretensiones IEC 61000-4-5 | ±1 kV, línea a línea ±2 kV, línea a tierra | ±1 kV, línea a línea ±2 kV, línea a tierra | Utilice la energía típica disponible en el mercado o una que sea exclusiva para entornos hospitalarios. |
| Inmunidad a los huecos de tensión/interrupciones cortas/fluctuación de tensión IEC 61000-4-11 | < 5 % U_T (> 95 % Caída en U_T) Dentro de 0,5 ciclos 40 % U_T (60 % Caída en U_T) Dentro de 5 ciclos 70 % U_T (30 % Caída en U_T) Dentro de 25 ciclos < 5 % U_T (> 95 % Caída en U_T) 5 segundos | < 5 % U_T (> 95 % Caída en U_T) Dentro de 0,5 ciclos 40 % U_T (60 % Caída en U_T) Dentro de 5 ciclos 70 % U_T (30 % Caída en U_T) Dentro de 25 ciclos < 5 % U_T (> 95 % Caída en U_T) 5 segundos | Utilice la energía típica disponible en el mercado o una que sea exclusiva para entornos hospitalarios. Para emplear la GP-UH332 durante un corte eléctrico se recomienda utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida o baterías para suministrar energía a la GP-UH332. |
| Inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia de la red IEC 61000-4-8 | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | El campo magnético a la frecuencia de la red debe mantener el nivel característico medido en un entorno típico, disponible comercialmente o en el hospital. |

Nota: U_T representa la tensión de alimentación de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Política y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas

La GP-UH332 está destinada a ser utilizada en el entorno electromagnético especificado a continuación. Asegúrese de que este producto se utilice en el entorno siguiente.

| Prueba de inmunidad | IEC 60601 Nivel de prueba | Nivel de cumplimiento | Entorno electromagnético - Política |
|---|---|-------------------------------|--|
| Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) 150 kHz a 80 MHz | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) | No utilice un dispositivo de comunicaciones inalámbricas del tipo portátil o móvil bajo la condición de que no se garantiza la distancia de separación recomendada entre cualquiera de los componentes de la GP-UH332 incluidos los cables. La distancia debe calcularse de acuerdo con la fórmula correspondiente a cada frecuencia del dispositivo. Distancia de separación recomendada $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz |
| Inmunidad a la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) 80 MHz a 2,5 GHz | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) | P representa la salida máxima nominal del dispositivo de transmisión y se utilizan los vatios (W) como unidad. Para la distancia de separación se emplea d en metros (m). La potencia del campo electromagnético del dispositivo de radiofrecuencia fija se determinará mediante la inspección local*1. Sin embargo, debe caer por debajo de la compatibilidad en cada gama de radiofrecuencias*2. Se pueden producir interferencias en las proximidades del dispositivo marcado con el siguiente símbolo.  |

Nota 1: En 80 MHz y 800 MHz, se aplicará la gama de frecuencias más altas.

Nota 2: Las indicaciones mencionadas pueden no aplicarse en todos los casos.

La absorción o la reflexión de edificios, objetos y personas afecta a la propagación de la energía electromagnética.

*1 La intensidad del campo electromagnético de los transmisores de radio fijos, incluidos los de las estaciones base de teléfonos inalámbricos, las estaciones terrestres móviles, radioaficionados, emisoras de radio de AM/FM y emisoras de TV, no se puede predecir con precisión. Con el fin de evaluar el entorno electromagnético en relación con transmisores de radio fijos, es necesario llevar a cabo una inspección del sitio. Si la potencia electromagnética medida para la GP-UH332 excede el nivel de cumplimiento descrito anteriormente, compruebe si es normal el funcionamiento de la GP-UH332. Si se observa algún comportamiento anormal, será necesario reubicar la GP-UH332 o tomar otras medidas de alivio.

*2 En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo deberá ser inferior a 3 V/m.

Especificaciones relacionadas con la seguridad en el entorno médico

- El modo de operación es "Operación continua".
- Tenga en cuenta que este producto está clasificado como de CLASE I cuando se utiliza con el adaptador de CA.
- Para evitar el peligro de descargas eléctricas, conecte este producto solamente a una fuente de energía (comercial) equipada con una toma de tierra de protección.
- Puesto que todos los dispositivos periféricos conectados a la parte de entrada de señal o a la parte de salida de señal constituyen un sistema médico, surgirá la obligación y la responsabilidad de hacer que todo el sistema cumpla con los requisitos establecidos en la norma IEC60601-1 Cláusula 16.
No toque nunca ninguno de estos conectores mientras esté tocando a un paciente.
- Para llevar a cabo la instalación, póngase en contacto con su distribuidor, instalador o centro de atención al cliente indicado en el Manual de instrucciones.
- No instale este producto en lugares en los que resulte difícil desenchufar el cable de alimentación.
- Use un enchufe de la red eléctrica y un cable de alimentación eléctrica de "Grado de hospital" que cumplan las normas ANSI/AAMI ES60601-1 (para los Estados Unidos)/CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1 (para Canadá).
- En algunas CONDICIONES DE PRIMER DEFECTO, la temperatura del lado derecho del alojamiento de la CCU podría ponerse caliente y existe un RIESGO posible de sufrir quemaduras si se toca.
- Cuando este producto se ha utilizado durante muchos años, existe la posibilidad de que algunas partes se hayan deteriorado, que puedan causar mal funcionamiento o que den lugar a un accidente, dependiendo todo ello del entorno donde se emplea a pesar de que en apariencia no haya ninguna pieza defectuosa. Compruebe cada día si se produce algo de lo siguiente.

¿Ha encontrado alguno de los siguientes indicios?

- Humo, olor a quemado o emisión de sonido anormal.
- El cable de alimentación, la clavija del cable de alimentación o el adaptador de CA están anormalmente calientes. Hay una grieta o una rotura.
- Se recibe una sucesión de descargas eléctricas al tocar el producto.
- No se visualiza ninguna imagen cuando se conecta la alimentación.
- El ventilador emite un sonido anormal. O no gira el ventilador.
- Hay algún otro error o daño inusual.



Deje de utilizar inmediatamente este producto

Para evitar daños de este producto y accidentes, desconecte la alimentación y solicite la inspección o eliminación de este producto a su distribuidor o instalador.

Descripciones de los símbolos gráficos



Este símbolo indica la conexión/desconexión de la alimentación. El estado de conexión/desconexión es fijo.



Este símbolo indica el terminal equipotencial que debe ser utilizado para que cada parte del sistema sea equipotencial.



Este símbolo indica una corriente alterna (CA).



Este símbolo indica una corriente continua (CC).



Este símbolo indica una señal de advertencia de que puede calentarse y de un RIESGO posible de sufrir quemaduras si se toca.



Este símbolo indica una marca de homologación UL en los Estados Unidos.



Este símbolo indica una marca de conformidad obligatoria en el Espacio Económico Europeo (EEE).



Este símbolo indica una marca de la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) en el Espacio Económico Europeo (EEE).

- Opciones
 - Cabezal de cámara 3MOS HD : GP-UH332H
 - Cable de la cámara UHD : GP-UC532G03 (3 m)
 - GP-UC532G06 (6 m)
 - GP-UC532G15 (15 m)
 - GP-UC532G03A (3 m)
 - (Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)
 - GP-UC532G06A (6 m)
 - (Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)
 - GP-UC532G15A (15 m)
 - (Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)
- Adaptador de CA : MPU60A-105-P49L10*
- (Sinpro Electronics Co., Ltd.)

Índice

| | |
|--|-----|
| EMC para el empleo de este producto en entornos médicos | 141 |
| Especificaciones relacionadas con la seguridad en el entorno médico | 144 |
| Instrucciones importantes de seguridad..... | 148 |
| Limitación de responsabilidades..... | 149 |
| Renuncia de la garantía..... | 149 |
| Prefacio | 150 |
| Empleo previsto..... | 150 |
| Marcas comerciales y marcas comerciales registradas..... | 150 |
| Precauciones..... | 151 |
| Controles principales de operación y sus funciones | 153 |
| Cabezal de cámara (opcional) | 153 |
| Unidad de control de cámaras (CCU)..... | 154 |
| Configuración del sistema..... | 158 |
| Precauciones para la instalación..... | 159 |
| Modo de instalación..... | 160 |
| Montaje del objetivo..... | 161 |
| Efectúe la configuración con el menú SETUP..... | 162 |
| Menús SETUP..... | 162 |
| Cómo visualizar el menú..... | 164 |
| Operación básica..... | 165 |
| Reponer los ajustes predeterminados | 166 |
| MAINTENANCE MENU | 167 |
| Configuración del perfil..... | 168 |
| EXPOSURE | 168 |
| ① Configuración de AE [AE] | 168 |
| ② Ajuste del obturador electrónico [SHUTTER]..... | 168 |
| ③ Ajuste la adición de píxeles [BINNING] | 169 |
| ④ Ajuste de la ganancia [GAIN]..... | 169 |
| ⑤ Ajuste la exposición larga [LONG EXPOSURE]..... | 169 |
| ⑥ Ajuste del área de detección de la luminosidad [AREA SELECTION]..... | 169 |
| ⑦ Ajuste la ponderación de la detección de la luminosidad [PEAK/AVE LEVEL] | 171 |
| ⑧ Ajuste la ganancia del cabezal [HEAD GAIN]..... | 171 |
| PICTURE..... | 171 |
| ⑨ Ajuste del equilibrio del blanco [WHITE BAL MODE]..... | 171 |
| ⑩ Ajuste de los detalles [DETAIL BAND]..... | 172 |
| ⑪ Ajuste de la función de reducción de ruido digital [DNR LEVEL] | 172 |
| ⑫ Ajuste del nivel de pedestal [PEDESTAL LEVEL] | 172 |
| ⑬ Ajuste de la compensación de reflejos [FLARE COMP]..... | 172 |
| ⑭ Ajuste del nivel del color [COLOR LEVEL] | 172 |
| ⑮ Ajuste del matiz [COLOR MATRIX]..... | 172 |
| CONTRAST | 174 |
| ⑯ Ajuste el modo de corrección de gamma [GAMMA SELECT] | 174 |
| ⑰ Ajuste del nivel de corrección de gamma [GAMMA VALUE]..... | 174 |
| ⑱ Ajuste el modo Knee [KNEE MODE] | 174 |
| ⑲ Ajuste el punto de Knee [KNEE POINT] | 174 |
| ⑳ Ajuste la pendiente de Knee [KNEE SLOPE]..... | 174 |
| ㉑ Ajuste el botón [IE] [IE FUNCTION SELECT] | 174 |
| ㉒ Ajuste el nivel de corrección asignado al botón [IE] [IE FUNCTION LEVEL]..... | 175 |
| PROFILE | 175 |
| ㉓ Ajuste el ID y la etiqueta del perfil de usuario [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL] | 175 |
| ㉔ Efectúe el ajuste adicional para cada modo de captura de imagen fluorescente [FLUORESCENCE MODE] | 176 |

| | |
|---|-----|
| FUNC | 176 |
| ②5 Ajuste de la función de desplazamiento vertical y horizontal [FLIP AND MIRROR]..... | 176 |
| ②6 Ajuste de la visualización del estado de desplazamiento vertical y horizontal [F+M STATUS DISPLAY] | 177 |
| ②7 Visualización de la barra de colores [COLOR BAR] | 177 |
| ②8 Ajuste de los interruptores de pedal [FOOTSW CONTROL CH1/CH2] | 177 |
| ②9 Almacenamiento/Carga de perfiles [USER PROFILE SAVE/LOAD] | 177 |
| ③0 Ajuste del método de almacenamiento/carga desde la memoria USB [SAVE/LOAD MODE (USB)] | 178 |
| ③1 Active y desactive el zoom [DIGITAL ZOOM]..... | 178 |
| ③2 Ajuste la visualización de la relación de zoom [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]..... | 178 |
| SYSTEM..... | 178 |
| ③3 Ajuste la posición de OSD de la salida de vídeo [OSD POSITION] | 178 |
| ③4 Ajuste de la señal de salida HDMI [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]..... | 178 |
| ③5 Ajuste el conector de entrada/salida de la señal de sincronización [G/L SYNC TERMINAL SETTING] | 178 |
| ③6 Estado de sincronización de la visualización [G/L SYNC STATUS INFO] | 179 |
| ③7 Ajuste del reloj [TIME ADJUSTMENT] | 179 |
| ③8 Reposición del ajuste predeterminado del perfil [USER PROFILE RESET] | 179 |
| HEAD | 180 |
| ③9 Ajuste del sombreado del blanco [WHITE SHADING]..... | 180 |
| ④0 Ajuste de la posición horizontal/vertical de la pantalla [H/V PHASE ADJUST]..... | 180 |
| Solución de problemas | 181 |
| Especificaciones | 182 |
| Accesorios estándar..... | 183 |
| Accesorios opcionales | 183 |

Instrucciones importantes de seguridad

- 1) Lea este manual de instrucciones.
- 2) Guarde este manual de instrucciones.
- 3) Observe todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No emplee este aparato cerca del agua.
- 6) Límpielo sólo con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como puedan ser radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo de toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo de toma de tierra tiene dos cuchillas y un tercer saliente para toma de tierra. La cuchilla ancha o el tercer saliente se incorporan para su seguridad. Si la clavija suministrada no se acopla a la toma de corriente, solicite a un electricista que le reemplace la toma de corriente anticuada.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no pueda ser pisado ni pellizcado, especialmente por la parte de las clavijas, por los enchufes de extensión y por el punto por donde salen del aparato.
- 11) Utilice sólo los acopladores/accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Empléelo solo en el carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se emplee un carrito, tenga cuidado cuando mueva la combinación del carrito con el aparato para evitar heridas debidas a caídas del aparato.



- 13) Desenchufe el aparato durante tormentas con rayos o cuando se proponga dejarlo sin utilizar durante períodos prolongados de tiempo.
- 14) Solicite todo tipo de servicio a personal de servicio cualificado. Será necesario realizar el servicio técnico cuando se haya dañado de algún modo el aparato, como cuando se haya dañado el cable o la clavija de alimentación, se haya derramado algún líquido o se hayan introducido objetos en el interior del aparato, se haya expuesto el aparato a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione con normalidad, o cuando se haya caído al suelo.

Limitación de responsabilidades

ESTA PUBLICACIÓN SE SUMINISTRA "TAL Y COMO ESTÁ", SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA CUALQUIER APLICACIÓN EN PARTICULAR, Y SIN INFRINGIR LOS DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS.

ES POSIBLE QUE ESTA PUBLICACIÓN CONTenga IMPRECISIONES TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS. ESTA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A LA ADICIÓN DE CAMBIOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR MOTIVOS DE MEJORA DE ESTA PUBLICACIÓN Y/O DEL (DE LOS) PRODUCTO(S) CORRESPONDIENTE(S).

Renuncia de la garantía

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAS LEGALES O FÍSICAS, A EXCEPCIÓN DEL REEMPLAZO O MANTENIMIENTO RAZONABLE DEL PRODUCTO, PARA LOS CASOS INCLUIDOS A CONTINUACIÓN, PERO SIN LIMITARSE A ELLOS:

- (1) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LOS DIRECTOS O INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS, QUE PUEDAN SURGIR O ESTAR RELACIONADOS CON EL PRODUCTO;
- (2) CUALQUIER INCONVENIENCIA, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR EL EMPLEO INADECUADO O LA OPERACIÓN NEGLIGENTE DEL USUARIO;
- (3) DESMONTAJE, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS DEL PRODUCTO POR EL USUARIO;
- (4) INCONVENIENCIAS O CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDA DEBIDO A QUE NO SE VISUALIZAN LAS IMÁGENES, POR CUALQUIER MOTIVO O CAUSA, INCLUYENDO CUALQUIER FALLA O PROBLEMA DEL PRODUCTO;
- (5) NINGÚN PROBLEMA, INCONVENIENCIA CONSECUENTE, PÉRDIDAS NI DAÑOS QUE PUEDAN SURGIR POR HABER COMBINADO EL SISTEMA CON DISPOSITIVOS DE OTRAS MARCAS;
- (6) CUALQUIER ACCIÓN O SOLICITUD DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS, PRESENTADA POR CUALQUIER PERSONA U ORGANIZACIÓN QUE HAYA SIDO FOTOGRAFIADA, DEBIDO A LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD PORQUE UNA IMAGEN DE LA CÁMARA DE VIGILANCIA, INCLUYENDO LOS DATOS ALMACENADOS, SE HA HECHO PÚBLICA O SE EMPLEA PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

Prefacio

Este sistema es una unidad de control de cámaras HD del tipo compacto y ligero (denominado CCU a partir de aquí), en el que el cabezal de la cámara está montado por separado, que ofrece alta calidad de imagen y múltiples funciones de introducción del proceso de la señal digital.

- GP-UH332C Unidad de control de cámaras HD

Este producto se emplea en combinación con el cabezal de cámara 3MOS HD opcional (denominado el cabezal de cámara de aquí en adelante).

- GP-UH332H Cabezal de cámara 3MOS HD
- Está disponible la salida de formatos múltiples compatible con 1080p y 1080i.
- Se ha conseguido la transmisión de la señal sin degradación de señal gracias a los conectores de salida HDMI y SDI.
- La función WDR (amplia gama dinámica) permite al usuario filmar incluso imágenes con una amplia gama de contraste de brillo y facilitar su visibilidad.

Las descripciones de este manual están preparadas para un sistema provisto del cabezal de cámara.

Empleo previsto

La cámara del tipo de cabezal separado HD Panasonic de la serie GP-UH332 ha adquirido la alta resolución de Full HD (1920×1080), imágenes en movimiento uniforme con compatibilidad con 60P y reproducción de los colores de alta densidad para aplicaciones en microscopios quirúrgicos o lámparas de hendidura. Este producto no está diseñado para ser utilizado para un sistema de endoscopia que puede ponerse en contacto con los pacientes. Tampoco está diseñado para ser utilizado para productos médicos con los que un fallo de la unidad pueda dar lugar a daños para la salud humana, ocasionar la muerte o producir daños materiales graves.

Este producto cumple con las normas de aparatos eléctricos para aplicaciones médicas IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2.

Para obtener información sobre los registros médicos locales, póngase en contacto con su distribuidor local de Panasonic.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Todas las otras marcas comerciales aquí identificadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Precauciones

Solicite el trabajo de instalación al distribuidor.

Es necesario poseer técnica y experiencia para realizar el trabajo de instalación. Si no lo hace así, pueden ocasionarse incendios, descargas eléctricas, heridas, o daños en el producto.

Consúltelo sin falta al distribuidor.

Conecte correctamente los cables.

Los cortocircuitos o las conexiones incorrectas pueden ser causa de incendios o de descargas eléctricas.

Seleccione un lugar de instalación que pueda soportar el peso total.

La selección de una superficie de instalación inadecuada puede causar la caída o el desprendimiento del producto, pudiendo ocasionar lesiones.

El trabajo de instalación deberá comenzarse después de haber reforzado suficientemente la superficie.

Deberán llevarse a cabo inspecciones periódicas.

La corrosión de las partes metálicas o de los tornillos puede ocasionar la caída del producto y el riesgo de sufrir heridas o accidentes.

Consulte a su distribuidor para las inspecciones.

Antes de limpiar este producto desconecte la alimentación.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de descargas eléctricas.

Detenga inmediatamente la operación cuando note que hay algo de este producto que no funciona bien.

Cuando salga humo del producto, se perciba algún olor a humo procedente del producto, o se aprecia deterioro en el exterior de este producto, correrá peligro de incendio, lesiones, o daños del producto si sigue utilizándolo.

Desconecte inmediatamente la alimentación de este producto y póngase en contacto con su distribuidor.

No lleve a cabo ningún trabajo relacionado con la instalación y las conexiones mientras la alimentación esté conectada.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de incendios o de descargas eléctricas.

No emplee ese producto en lugares con agentes inflamables en el aire.

Si no lo hace así, puede ocasionarse una explosión con peligro de heridas.

No instale este producto en lugares propicios a daños producidos por el salitre ni en los que se produzcan gases corrosivos.

Si no lo hace así, puede producirse deterioro de las partes de montaje y podrían ocurrir accidentes tales como la caída del producto.

No golpee este producto y procure que no reciba otros golpes fuertes.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de incendios o heridas.

No inserte ningún objeto extraño.

No permita la entrada de ningún objeto extraño, de líquido, como pueda ser el agua, de objetos metálicos, etc. porque podrían ocasionar un incendio o descargas eléctricas.

En caso de penetración, desenchufe inmediatamente la clavija del cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor.

No desmonte ni modifique este producto.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de incendios o de descargas eléctricas.

Solicite la inspección y las reparaciones a su distribuidor.

Durante una tormenta con rayos (y durante el trabajo de construcción), no toque este producto, el cable de alimentación ni los cables conectados.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de descargas eléctricas.

Cerca de este producto no ponga recipientes que contengan líquidos tales como agua.

Si se derraman líquidos sobre este producto, puede producirse un incendio o descargas eléctricas.

En caso de penetración, desenchufe inmediatamente la clavija del cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor.

No frote los bordes de las partes metálicas con las manos.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de heridas.

[Precauciones para la utilización]

Para poder seguir utilizándolo con un funcionamiento estable


Si se utiliza el aparato en lugares sometidos a altas temperaturas y alta humedad, se correrá el peligro de deterioro de partes del aparato y de reducción de su vida útil de servicio. Emplee este producto a temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si no lo hace así, los componentes del interior pueden verse adversamente afectados o puede ocasionarse mal funcionamiento en el aparato. Se recomienda emplear este aparato a temperaturas de 30 °C o inferiores sin quedar expuesto al calor directo de estufas teniendo en cuenta la disipación térmica del lugar del aparato.

Manipule este producto con cuidado.

No permita que el producto se caiga, y no lo someta a golpes ni a vibraciones. Si no se sigue esta indicación, pueden producirse problemas.

No oriente el aparato a fuentes de iluminación potente.

Las luces potentes, como la de un foco, pueden causar floración (dispersión de la luz).

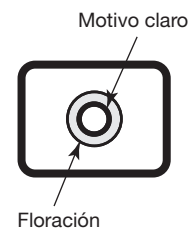

Baterías incorporadas

Las baterías están instaladas en este producto. No deje las baterías en entornos en los que pueda generarse calor excesivo debido a la luz directa del sol o al fuego.

Alarma del ventilador de enfriamiento

Cuando aparezca el mensaje de alarma del ventilador de enfriamiento, desconecte inmediatamente la alimentación y póngase en contacto con su distribuidor.

Limpieza

- Desconecte la alimentación y limpie entonces este producto con un paño suave. Cuando el polvo sea difícil de quitar, utilice un paño suave empapado en detergente diluido y exprímalo bien antes de usarlo para la limpieza. Luego, limpie quitando el detergente que haya quedado con un paño seco.
- No emplee detergentes fuertes ni abrasivos para limpiar el cuerpo. Podrá utilizar etanol o alcohol isopropílico para el cabezal de la cámara y la CCU. Sin embargo, no deberá utilizarlos para el cable de la cámara.
- Cuando emplee un paño químicamente tratado para la limpieza, lea las precauciones adjuntas al producto químicamente tratado.

Etiqueta de indicación

Mire la etiqueta de identificación de la parte inferior o superior del producto para ver la clasificación del equipo y los valores de alimentación, etc.


Memoria USB

- Emplee una memoria USB que sea compatible con USB2.0.
- Con el fin de mantener una alta velocidad de lectura/escritura, ejecute "ScanDisk" o "CheckDisk" en un ordenador con el sistema operativo Microsoft® Windows®.
- Compatible con FAT32. Emplee una memoria USB con una capacidad máxima de 32 GB. Las memorias USB con formato encriptado no son compatibles.
- La memoria USB no puede formatearse con la CCU.

Este producto ha sido diseñado para su utilización normal como equipo electrónico general.

La utilización de este producto para aplicaciones especiales (tales como control del tráfico, transporte y tratamiento médico) puede estar prohibida si no se toman las precauciones necesarias designadas por las regulaciones pertinentes del país o alcance de las responsabilidades personales.

Cabezal de cámara (opcional)

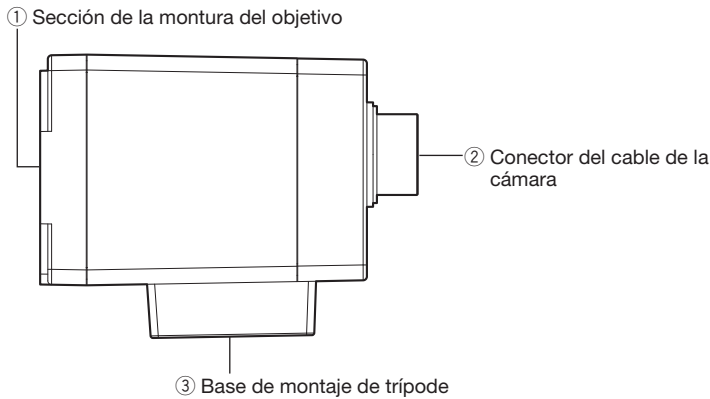

Importante:

- No se olvide de desconectar la alimentación de la CCU antes de conectar o desconectar el cable de la cámara.
- No doble excesivamente ni rompa el cable de la cámara.
- Utilice solamente el cabezal de cámara específico.

① Sección de la montura del objetivo

En esta sección se monta un objetivo con montura C.
(Página 161)

② Conector del cable de la cámara

Conector para el cable de la cámara (opcional)

<Cable de la cámara>

GP-UC532G03 (3 m)

GP-UC532G06 (6 m)

GP-UC532G15 (15 m)

GP-UC532G03A (3 m) (Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)

GP-UC532G06A (6 m) (Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)


GP-UC532G15A (15 m) (Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)

③ Base de montaje de trípode

El orificio roscado para trípode se emplea para fijar el cabezal de la cámara a un trípode.
Orificio roscado para trípode: 1/4-20 UNC

Unidad de control de cámaras (CCU)


<Parte frontal>

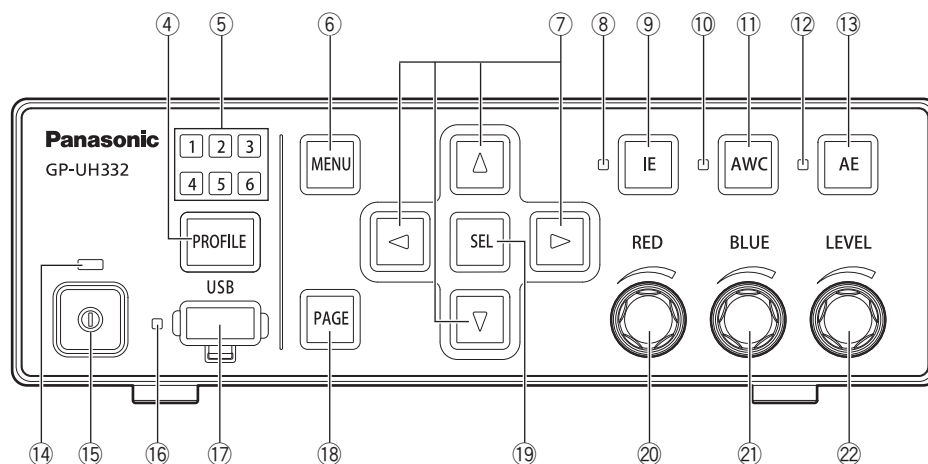

- ④ **Botón de selección del perfil [PROFILE]**
 Selecciona uno de los perfiles del 1 al 6. Cada perfil debe configurarse de antemano empleando el menú de configuración SETUP (☞ página 168).
- ⑤ **Luz de selección del perfil [1/2/3/4/5/6] (verde)**
 El número del perfil seleccionado se encenderá en verde.
- ⑥ **Botón del menú [MENU]**
 Cuando se tenga presionado el botón durante más de 1 segundo, aparecerá el menú de configuración SETUP (ADVANCED MENU).
 Cuando se presione el botón mientras se visualiza el menú de configuración SETUP, aparecerá una capa superior del menú. El menú SETUP podrá ocultarse manteniendo presionado el botón durante más de 1 segundo.
 Si se presiona este botón cuando no se visualiza el menú SETUP, se activa la función de congelación de pantalla.
- ⑦ **Botones de movimiento a arriba/abajo/izquierda/derecha [Δ / ∇ / \triangleleft / \triangleright]**
 • **Botón de arriba [Δ]/Botón de abajo [∇]**
 Cambia el elemento de ajuste propuesto mientras se visualiza el menú SETUP.
 Cuando se presione mientras se esté visualizando un menú que no sea el de SETUP, se conmutará el ajuste de "FLIP AND MIRROR". (☞ Página 176)
 • **Botón de derecha [\triangleright]/Botón de izquierda [\triangleleft]**
 Mueve el cursor o cambia el contenido del elemento de ajuste propuesto mientras se visualiza el menú SETUP.
 Cuando se presione mientras se esté visualizando un menú que no sea el de SETUP, se conmutará la relación de zoom del "DIGITAL ZOOM". (☞ Página 178)
- ⑧ **Luz del estado de IE (verde)**
 Indica el estado de activación/desactivación de la función IE (IMAGE ENHANCEMENT).
 Encendida: La función IE está activada.
 Apagada: La función IE está desactivada.
- ⑨ **Botón IE [IE]**
 Cambia entre la activación/desactivación de la función IE.
- ⑩ **Luz del estado de AWC (naranja)**
 Indica el estado de la función AWC (control automático del equilibrio del blanco).
 Apagada: La función AWC está desactivada.
 Parpadeando: La función AWC está activada o en ejecución.
 Parpadeando → Apagada: AWC con éxito
 Encendida: Error de AWC
- ⑪ **Botón AWC [AWC]**
 Si "WHITE BAL MODE" del menú SETUP se ajusta en "AWC", el control AWC se iniciará cuando se presione el botón mientras se estén visualizando las imágenes de la cámara.
-
- Importante:**
- Cuando el cabezal de la cámara no esté conectado, no funcionará el botón [AWC].
-
- ⑫ **Luz del estado de AE (verde)**
 Indica el estado del modo Automático/Manual de la función AE (exposición automática).
 Encendida: Exposición automática
 Apagada: Exposición manual
- ⑬ **Botón AE [AE]**
 Cambia entre el modo automático y manual de la función AE.
- ⑭ **Luz del estado de la alimentación (verde)**
 Indica el estado de la alimentación conectada/desconectada.
 Encendida: Alimentación conectada
 Apagada: Alimentación desconectada
- ⑮ **Interruptor de la alimentación [marca del interruptor]**
 Conecta y desconecta la alimentación de la CCU y del cabezal de la cámara.
- ⑯ **Luz del estado de USB (verde)**
 Indica el estado de USB.
 Parpadeando: Acceso a datos
 Encendida: Montada
 Apagada: Desmontada

- ⑰ **Conector USB [USB]**
Puede efectuarse el almacenamiento/descarga (SAVE/LOAD) del perfil insertando la memoria USB.
- ⑱ **Botón de página [PAGE]**
Cambia la página mientras se visualiza el menú SETUP.
El menú QUICK MENU se visualiza al presionar el botón mientras se está visualizando otro menú que no sea el de SETUP.
- ⑲ **Botón de selección [SEL]**
Determina los ajustes mientras se visualiza el menú SETUP.
Cuando se presione el botón mientras se esté visualizando un menú que no sea el de SETUP, se visualizará la ventana "SETTING INFORMATION". Cuando se presione otra vez, se restaurarán las imágenes de la cámara.
En la ventana "SETTING INFORMATION", se visualizan los ajustes de "IE FUNCTION SELECT", "FOOTSW CONTROL CH1/CH2", "SAVE/LOAD MODE (USB)", y "VIDEO FORMAT (HDMI1/HDMI2/SDI1/SDI5)".
- ⑳ **Control del rojo [RED]**
Ajusta el desplazamiento sobre la ganancia del rojo (RED) del equilibrio del blanco.
El elemento seleccionado cambiará si se gira el control mientras se está visualizando el menú SETUP.
- ㉑ **Control del azul [BLUE]**
Ajusta el desplazamiento sobre la ganancia del azul (BLUE) del equilibrio del blanco.
- ㉒ **Control del nivel [LEVEL]**
Ajusta el nivel del brillo.
Mueve el cursor o cambia el contenido del elemento seleccionado mientras se visualiza el menú SETUP.

<Panel posterior>

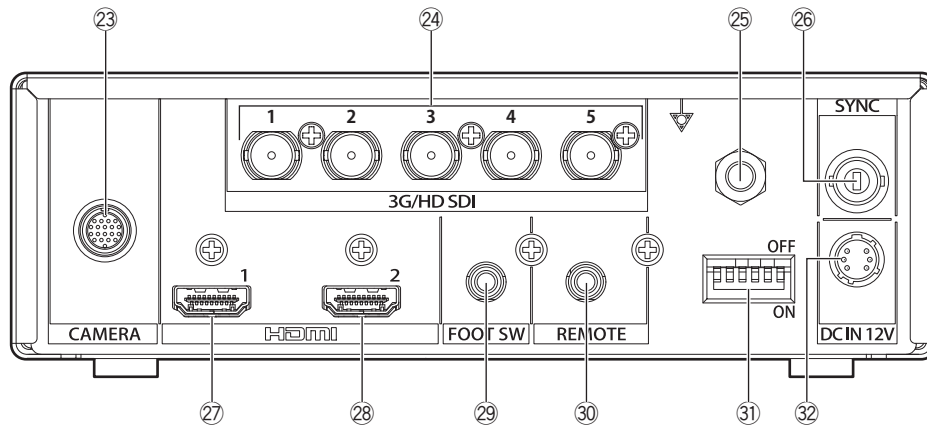

23 Conector del cable de la cámara [CAMERA]

Conector para el cable de la cámara (opcional).
(Página 183)

24 Conectores de salida SDI [3G/HD SDI 1/2/3/4/5]

Conector para salida de señal 3G-SDI o HD-SDI.

Importante:

- Emplee un cable de alta calidad que sea compatible con 3G-SDI o HD-SDI.

25 Conector de equalización de potencial [Marca de potencial]

Conector para toma de tierra de la equalización de potencial.

26 Conector de entrada/salida de señal de sincronización [SYNC]

Conector para entrada o salida de señal de sincronización externa.

27 Conector de salida HDMI [HDMI 1]

Se emplea para conectar un monitor equipado con función HDMI.

28 Conector de salida HDMI [HDMI 2]


Se emplea para conectar un monitor equipado con función HDMI.

Importante:

- Se recomienda emplear cables HDMI Panasonic (opcional).
- Emplee un monitor que tenga la marca del logotipo de HDMI.


29 Conector del interruptor de pedal [FOOT SW]

Conector para un interruptor de pedal.
(Minitoma estéreo de $\varnothing 3,5$ de diámetro)

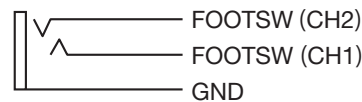

30 Conector de control remoto [REMOTE]

Conector para el control externo.
(Minitoma estéreo de $\varnothing 3,5$ de diámetro)

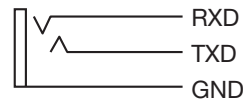

31 Interruptores de configuración de funciones

Cada uno sirve para ajustar las funciones de salida de vídeo.
El interruptor 1 selecciona la frecuencia de fotogramas de 59,94 Hz/50 Hz.

| Interruptor | | | | | | Salida de SDI | Salida de HDMI |
|-------------|---|---|---|---|---|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ON | - | - | - | - | - | 59,94 Hz | 59,94 Hz |
| OFF | - | - | - | - | - | 50 Hz | 50 Hz |

Los interruptores 2 al 6 sirven para seleccionar un formato de vídeo para el conector de salida SDI y conector de salida HDMI.

| | Interruptor | | | | | | Salida de SDI | Salida de HDMI |
|----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| *1 | - | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 1080p | 1080p |
| | - | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1080i | 1080i |


Si se selecciona uno distinto a los de arriba, se emitirá el formato indicado con *1.

Importante:

- Asegúrese de cambiar el interruptor de configuración de la función mientras la alimentación esté desconectada.


- ③③ **Conector de alimentación de 12 V CC [DC IN 12V]**
Conector para alimentación exterior de CC de más de 12 V CC (4 A o más).
Conector compatible (En agosto de 2017):
: HR10A-7P-6S(73)
fabricado por HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

**Disposición de patillas
del conector compatible**

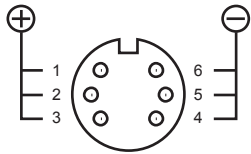

(Conector del cable)

Configuración del sistema

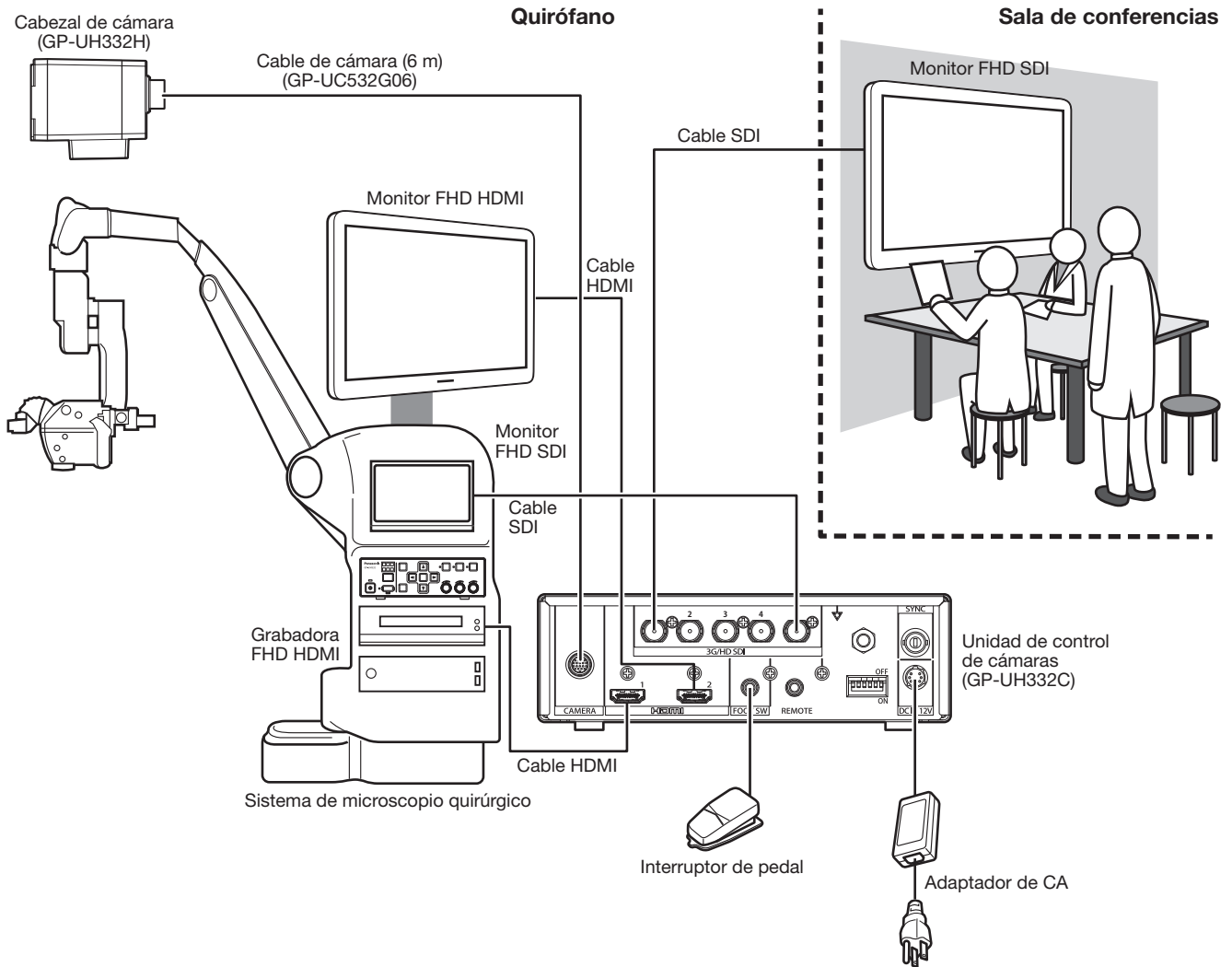

Cable HDMI:

Utilice un cable HDMI que lleve marcado el logotipo de HDMI. (Se recomienda un cable HDMI Panasonic.)

Cable SDI:

Emplee un cable SDI que sea compatible con 3G-SDI e HD-SDI.

Precauciones para la instalación

Precauciones:

- CONECTAR SÓLO UNA TOMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 V CC DE CLASE 2 (UL 1310/CSA 223) O UNA TOMA DE ALIMENTACIÓN LIMITADA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

La instalación deberá cumplir las regulaciones locales sobre electricidad.

Este producto ha sido diseñado para su utilización en interiores.

Este producto no puede funcionar al aire libre.

No exponga el producto a la luz directa del sol durante mucho tiempo y no la instale cerca de una estufa o acondicionador de aire. Podría reducirse su rendimiento o mostrar mal funcionamiento. Mantenga este producto alejado del agua y de la humedad.

Adquiera un trípode por separado.

El trípode para el montaje del cabezal de la cámara no se suministra. Prepárelo de acuerdo con el lugar donde deba instalarse la cámara.

Mantenga la CCU apartada 10 cm como mínimo de las paredes.

Si se deja instalada la CCU en contacto con la pared, se obstruirá la salida del calor y puede producirse mal funcionamiento.

Evite los lugares húmedos y polvorientos para la instalación de este sistema.

De lo contrario, se acortaría la vida útil de servicio de las partes internas.

No efectúe la instalación ni utilice este sistema en los lugares siguientes:

- Lugares en los que pueda mojarse con la lluvia o agua salpicada
- Lugares en los que se empleen productos químicos como en las piscinas
- Lugares expuestos a la humedad, polvo, vapor y humo de aceite
- Lugares donde se genere radiación, rayos X, ondas de radio potentes o campos magnéticos fuertes
- Lugares en los que se produzcan gases corrosivos
- Lugares en los que la temperatura no esté dentro del margen de 0 °C a 40 °C
- Lugares sujetos a vibraciones (Este producto no está diseñado para ser empleado en vehículos.)
- Lugares en los que la temperatura pueda cambiar rápidamente como en los lugares periféricos de las salidas de acondicionadores de aire o de puertas orientadas al exterior

Interferencias de radio


Las imágenes pueden distorsionarse en lugares cercanos a una antena de transmisión de señales de difusión de TV o radio o de campos eléctricos o magnéticos (por ejemplo, los causados por un motor y un transformador).

Asegúrese de desmontar el producto si no lo utiliza.

Modo de instalación

A continuación se muestra la forma de montar la cámara en el trípode (adquirido en un establecimiento del ramo).

<Muestra de montaje de la cámara en el trípode>

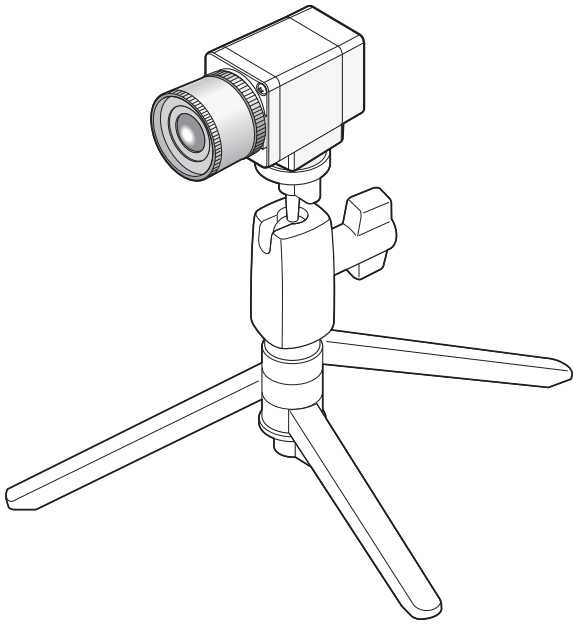


Importante:

- El trípode y la CCU deben ponerse horizontalmente.
 - La CCU debe ponerse horizontalmente. No ponga la unidad en posición vertical ni inclinada.
-

Montaje del objetivo


Importante:

- Deberá utilizarse un objetivo cuya longitud de la parte saliente de la sección de la montura del objetivo sea de 4 mm o menos.
- La abertura recomendada del objetivo es de F4,0 a F16. La selección de objetivos con una abertura diafragmática de menos de F4,0 puede ocasionar imágenes borrosas.
- Cuando se emplea un objetivo zoom, el método de ajuste del enfoque varía según el objetivo. Para encontrar más información, consulte el manual de instrucciones del objetivo que se proponga utilizar.
- Cuando extraiga el objetivo, no se olvide de colocar la tapa en la sección de la montura del objetivo del cabezal de la cámara.

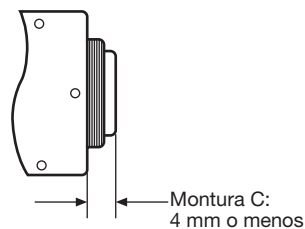


Paso 1

Extraiga la tapa de la sección de la montura del objetivo del cabezal de la cámara.

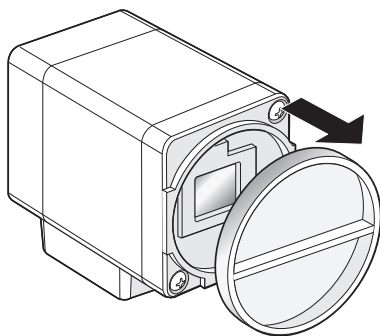

Paso 2

Gire hacia la derecha el objetivo de montura C para acoplar el objetivo en la sección de la montura del objetivo.

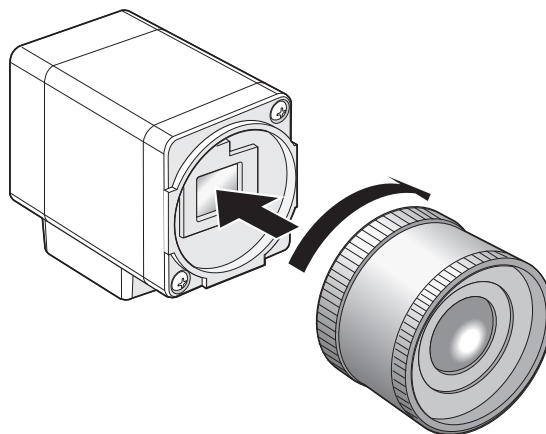

Importante:

- Compruebe que la superficie del filtro óptico esté limpia antes de montar el objetivo. Si la superficie está sucia, emplee un cepillo soplador de aplicaciones fotográficas para sacar el polvo.

Objetivos compatibles (referencia/en agosto de 2017)

| Fabricante | Nombre del producto | Modelo |
|------------|------------------------------|--|
| FUJIFILM | Objetivo de cámara 3CCD/CMOS | TF2.8DA-8 TF4DA-8 TF8DA-8B TF15DA-8 |

Efectúe la configuración con el menú SETUP


Configure cada uno de los elementos del menú SETUP antes de emplear esta unidad. Efectúe los ajustes de acuerdo con las condiciones del área de filmación de la cámara.

Nota:

- Además del menú SETUP, este sistema tiene un menú simplificado (menú QUICK) que se visualiza empleando el botón [PAGE] del panel frontal de la CCU. Para más información sobre el menú QUICK, consulte la página 165.

Menús SETUP

Los menús de configuración constan de tres menús, que son “QUICK MENU”, “ADVANCED MENU”, y “MAINTENANCE MENU”.

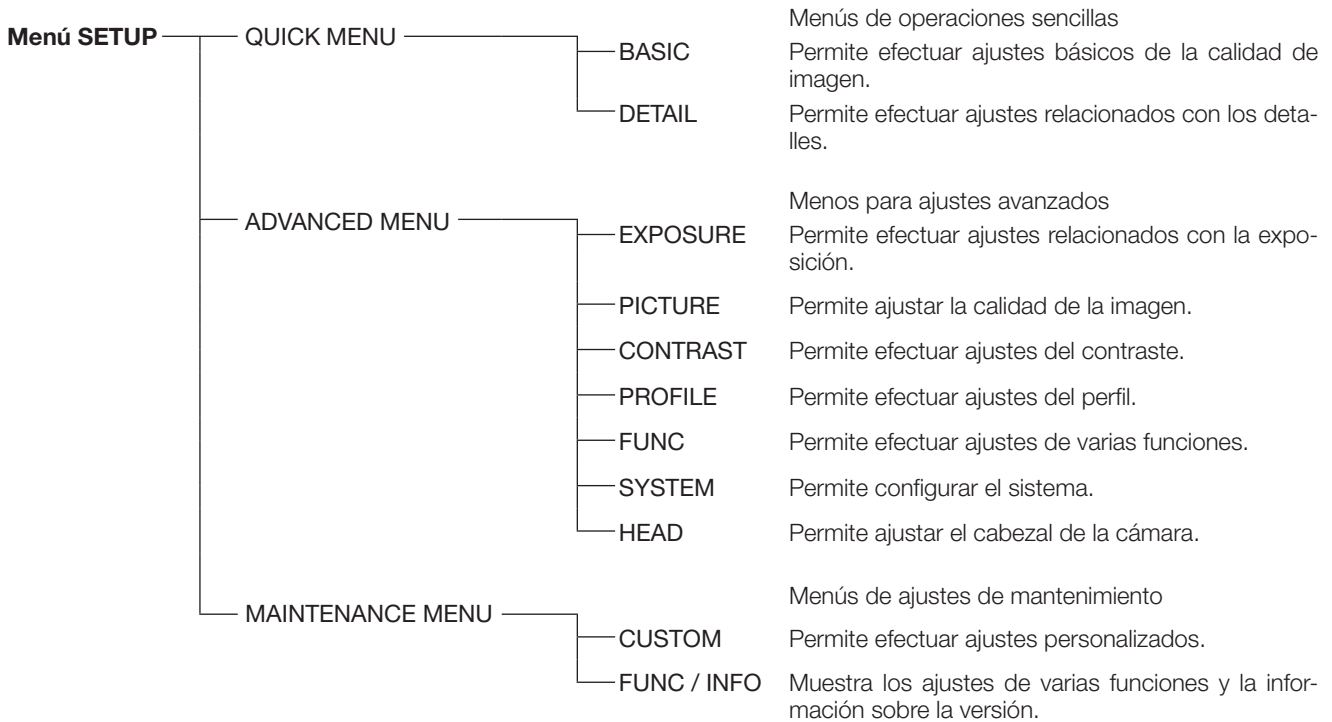

En el menú ADVANCED MENU podrán ajustarse los elementos siguientes.

| Elementos de configuración | Descripción | Página |
|----------------------------|--|--------|
| EXPOSURE | | |
| ① AE | Configura la AE (exposición automática). | 168 |
| ② SHUTTER | Ajusta la velocidad del obturador electrónico. | 168 |
| ③ BINNING | Ajusta el modo de adición de píxeles. | 169 |
| ④ GAIN | Ajusta la ganancia. | 169 |
| ⑤ LONG EXPOSURE | Ajusta la exposición larga. | 169 |
| ⑥ AREA SELECTION | Ajusta el área de detección de la luminosidad de “AE”, “GAIN”, y “SHUTTER”. | 169 |
| ⑦ PEAK/AVE LEVEL | Establece la ponderación de pico y de promedio para el procesamiento de detección de la luminosidad. | 171 |
| ⑧ HEAD GAIN | Ajusta la ganancia del cabezal. | 171 |
| PICTURE | | |
| ⑨ WHITE BAL MODE | Ajusta el equilibrio del blanco. | 171 |
| ⑩ DETAIL BAND | Ajusta los detalles. | 172 |
| ⑪ DNR LEVEL | Ajusta el nivel de la reducción de ruido digital. | 172 |
| ⑫ PEDESTAL LEVEL | Ajusta el nivel del pedestal. | 172 |
| ⑬ FLARE COMP | Ajusta la compensación de reflejos. | 172 |

| Elementos de configuración | Descripción | Página |
|--|---|--------|
| ⑭ COLOR LEVEL | Ajusta el nivel de todo el color. | 172 |
| ⑮ COLOR MATRIX | Ajusta diversos matices. | 172 |
| CONTRAST | | |
| ⑯ GAMMA SELECT | Ajusta el modo de corrección de gamma. | 174 |
| ⑰ GAMMA VALUE | Ajusta el nivel de corrección de gamma. | 174 |
| ⑱ KNEE MODE | Ajusta el modo Knee. | 174 |
| ⑲ KNEE POINT | Ajusta del punto de Knee. | 174 |
| ⑳ KNEE SLOPE | Ajusta la pendiente de Knee. | 174 |
| ㉑ IE FUNCTION SELECT | Asigna una función al botón [IE] (IMAGE ENHANCEMENT). | 174 |
| ㉒ IE FUNCTION LEVEL | Ajusta el nivel de corrección seleccionado con IE. | 175 |
| PROFILE | | |
| ㉓ USER PROFILE ID USER PROFILE LABEL | Ajusta el título de ID de la cámara. Ajusta los títulos de etiqueta de los perfiles 1 al 6 a visualizarse. | 175 |
| ㉔ FLUORESCENCE MODE | Efectúe el ajuste adicional para cada modo de captura de imagen fluorescente. | 176 |
| FUNC | | |
| ㉕ FLIP AND MIRROR | Ajusta el desplazamiento vertical y horizontal de la imagen. | 176 |
| ㉖ F+M STATUS DISPLAY | Ajusta la visualización del estado del desplazamiento vertical y horizontal de la imagen. | 177 |
| ㉗ COLOR BAR | Ajusta la visualización de la barra de colores. | 177 |
| ㉘ FOOTSW CONTROL CH1 FOOTSW CONTROL CH2 | Asigna una función al interruptor de pedal 1. Asigna una función al interruptor de pedal 2. | 177 |
| ㉙ USER PROFILE SAVE / LOAD | Guarda los perfiles en la memoria USB/Carga los perfiles de la memoria USB | 177 |
| ㉚ SAVE / LOAD MODE (USB) | Ajusta el método para guardar/cargar para la memoria USB. | 178 |
| ㉛ DIGITAL ZOOM | Ajusta la aprobación del zoom electrónico. | 178 |
| ㉜ DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | Ajusta la visualización de la relación del zoom electrónico. | 178 |
| SYSTEM | | |
| ㉝ OSD POSITION | Ajusta la posición de OSD de la salida de vídeo. | 178 |
| ㉞ HDMI1 COLOR DEPTH HDMI2 COLOR DEPTH | Ajusta la profundidad del color de HDMI1. Ajusta la profundidad del color de HDMI2. | 178 |
| ㉟ G/L SYNC TERMINAL SETTING | Ajusta el conector de entrada/salida de la señal de sincronización. | 178 |
| ㊱ G/L SYNC STATUS INFO | Muestra el estado del conector de sincronización externa. | 179 |
| ㊲ TIME ADJUSTMENT | Ajusta el reloj. | 179 |
| ㊳ USER PROFILE RESET | Repone los ajustes predeterminados del perfil. | 179 |
| HEAD | | |
| ㊴ WHITE SHADING | Ajusta el sombreado del blanco. | 180 |
| ㊵ H/V PHASE ADJUST | Ajusta las fases horizontales/verticales. | 180 |

Cómo visualizar el menú

La descripción siguiente explica la forma de visualizar cada menú SETUP en el monitor conectado.

QUICK MENU

Gire cada uno de los controles [RED], [BLUE], y [LEVEL]. Si se tiene presionado el botón [PAGE] durante más de 2 segundos, aparecerá la página inicial del menú QUICK MENU.

El menú QUICK MENU tiene dos páginas. Para cambiar de página, presione el botón [PAGE].

Para cambiar entre los seis perfiles, presione el botón [PROFILE].

ADVANCED MENU

Si se tiene presionado el botón [MENU] durante más de 1 segundo, aparecerá la página inicial del menú ADVANCED MENU.

El menú ADVANCED MENU tiene siete páginas. Para cambiar de página, presione el botón [PAGE] o mueva el cursor a la ficha de la parte inferior de la página y presione el botón [◀] o [▶].

Para cambiar entre los seis perfiles, presione el botón [PROFILE].

MAINTENANCE MENU

Si se conecta la alimentación mientras se presionan simultáneamente los botones [MENU] y [SEL] se visualizará la página inicial del menú MAINTENANCE MENU.

El menú MAINTENANCE MENU tiene dos páginas. Para cambiar de página, presione el botón [PAGE] o mueva el cursor a la ficha de la parte inferior del menú y haga presione el botón [◀] o [▶].

Operación básica


Importante:

- Las funciones siguientes no están disponibles cuando no se ha conectado el cabezal de la cámara:
 - Inicio de AWC para WHITE BAL MODE
 - FLIP AND MIRROR
 - WHITE SHADING
 - COLOR MATRIX
 - FREEZE
 - H/V PHASE ADJUST
 - DIGITAL ZOOM
- Para conocer los elementos del MAINTENANCE MENU, póngase en contacto con su distribuidor.


La descripción siguiente explica básicamente el modo de operación del menú QUICK MENU.

Página inicial del menú QUICK MENU


Página BASIC (WB RED GAIN)

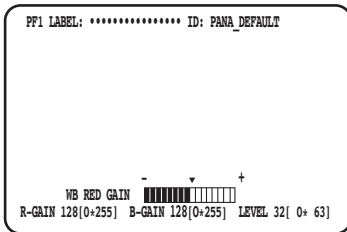


Página BASIC (WB BLUE GAIN)

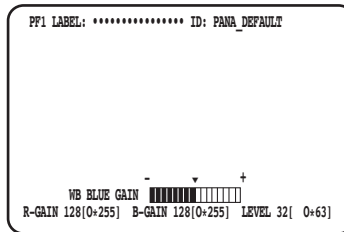

Página BASIC (AE LEVEL)

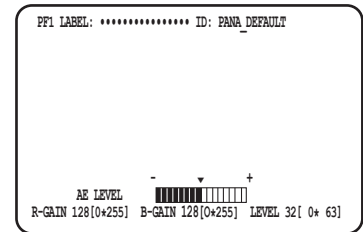

Página DETAIL

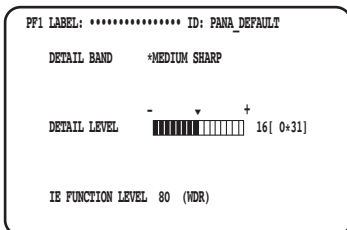

Paso 1

Página BASIC

Configure cada elemento.

- WB RED GAIN
Gire el control [RED] para ajustar el nivel del rojo.
- WB BLUE GAIN
Gire el control [BLUE] para ajustar el nivel del azul.
- AE LEVEL
Gire el control [LEVEL] para ajustar la luminosidad.

Página DETAIL

La página se cambiará a la página de DETAIL cuando se pulse el botón [PAGE] mientras se visualiza la página BASIC.

- DETAIL BAND
Gire el control [RED] para ajustar la banda de corrección de bordes.
- DETAIL LEVEL
Gire el control [BLUE] para ajustar el nivel de corrección de bordes.
- IE FUNCTION LEVEL
Gire el control [LEVEL] para ajustar el nivel de la función IE seleccionada.

Paso 2

Si se detiene la operación durante 4 segundos, el contenido de la configuración se guardará y la imagen de la cámara se restaurará.

La descripción siguiente explica básicamente el modo de operación del menú ADVANCED MENU.

Página inicial del menú ADVANCED MENU

Página EXPOSURE

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

PICTURE page

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| WHITE BAL MODE | *AWC | R-GAIN | 128[0*255] |
| | | B-GAIN | 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM | SHARP LEVEL | 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] | | |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] | | |
| FLARE COMP | OFF | | |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] | | |
| COLOR MATRIX | *USER | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

Página CONTRAST

| | |
|--|-----------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35*0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0*15] |
| KNEE SLOPE | 3[0*7] |
| IE FUNCTION SELECT | WDR |
| | LEVEL 80[0*255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Página PROFILE

| | |
|--|------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| USER PROFILE | |
| USER PROFILE ID | *OFF |
| USER PROFILE LABEL | *OFF |
| FLUORESCENCE MODE | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Página FUNC

| | |
|--|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+H STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1--2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Página SYSTEM

| | |
|--|------------|
| OSD POSITION | UPPER LEFT |
| HDMI1 COLOR DEPTH | YbPr(422) |
| HDMI2 COLOR DEPTH | YbPr(422) |
| G/L SYNC TERMINAL SETTING | OUT |
| G/L SYNC STATUS INFO | INTERNAL |
| *TIME ADJUSTMENT | |
| *USER PROFILE RESET | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Página HEAD

| | |
|--|-----------|
| WHITE SHADING | AUTO(SET) |
| H/V PHASE ADJUST H | 0[-20*20] |
| V | 0[-11*11] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Paso 1

Configure cada elemento.

- Seleccione el elemento que desee ajustar.
Mueva el cursor girando el control [RED] o presionando el botón [Δ] o [∇].
- Cambie el elemento que desee ajustar.
Gire el control [LEVEL] o presione el botón [<] o [>].
- Visualice la página de configuración avanzada.
Presione el botón [SEL] para el elemento indicado con “*”.
- Vuelva a la página de configuración del nivel superior.
Presione el botón [MENU].

Nota:

- El cursor es una parte que parpadea.
En este documento se indica con “Sombreado”.

Paso 2

Presione el botón [MENU] durante 1 segundo o más después de haber guardado el contenido de configuración para cerrar la página de configuración y volver a la imagen de la cámara.

El contenido de la configuración se conservará aunque se haya desconectado la alimentación de la CCU.

Reponer los ajustes predeterminados

- Para reponer cada uno de los ajustes del menú SETUP MENU a sus ajustes predeterminados, mueva el cursor al elemento que deba cambiar y mantenga presionados simultáneamente los botones [<] y [>] durante 1 segundo o más.
- Para restaurar la configuración inicial de todos los perfiles, utilice [USER PROFILE RESET]. (página 179)
- Para restaurar la configuración inicial sólo del perfil seleccionado, presione el botón [PROFILE] durante más de 1 segundo.
- Para restaurar la configuración inicial de todos los elementos de la página “ADVANCED MENU”, mueva el cursor a la ficha de la parte inferior de la página y mantenga presionados simultáneamente los botones [<] y [>] durante 1 segundo o más.

MAINTENANCE MENU

En cuanto a los detalles y al modo de operar el menú MAINTENANCE MENU, póngase en contacto con su distribuidor.

| Elementos de configuración | Descripción general |
|-------------------------------|--|
| CUSTOM | |
| OSD OUTPUT SEL (HDMI) | Configura la visualización de OSD de la salida HDMI. |
| OSD OUTPUT SEL (SDI) | Configura la visualización de OSD de la salida SDI. |
| OSD CHARACTER MODE | Especifica el formato de caracteres de OSD. |
| KEY BIND (MENU) | Asigna una función al botón [MENU]. |
| KEY BIND (↑↓) | Asigna una función a los botones [Δ] y [▽]. |
| KEY BIND (←→) | Asigna una función al botón [◀][▶]. |
| FUNC / INFO | |
| BLEMISH COMP | Ajusta la compensación de defectos. |
| BLACK BAL | Configura el equilibrio del blanco. |
| CABLE DIAG MODE | Diagnostica la calidad del cable de la cámara. |
| DIPSW STATUS | Indica el estado de ajuste de DIPSW. |
| FPGA STATUS | Muestra la temperatura de FPGA. |
| ALL RESET | Repone todos los ajustes predeterminados. |
| CPU VER. (MAIN / SUB) | Muestra la versión de la CPU. |
| FPGA VER. (FRONT/REAR) | Muestra la versión de la FPGA (CCU). |
| HEAD VER. | Muestra la versión de FPGA (HEAD) y el tipo de cámara. |

Nota:

- [ALL RESET] no inicializará lo siguiente:
[HEAD GAIN], [WHITE SHADING], [H/V PHASE ADJUST] en el menú ADVANCED MENU, y [BLEMISH COMP] en el menú MAINTENANCE MENU.

Configuración del perfil

Si se registran los detalles, gamma, matiz, etc. como un perfil de acuerdo con el lugar de instalación, el usuario podrá llamar el contenido registrado presionando solamente el botón [PROFILE] del panel frontal de la CCU.

Pueden registrarse hasta 6 perfiles. El ajuste apropiado para la captura de imágenes fluorescentes está preajustado en PROFILE 5 y PROFILE 6.

El registro puede efectuarse en la página inicial del menú ADVANCED MENU. La página del perfil tiene cuatro páginas. El número de perfil se mostrará en la parte superior izquierda de la página de perfil correspondiente.

Los caracteres especificados en "USER PROFILE LABEL" se visualizarán en "LABEL" (Página 175). La configuración inicial en PROFILE 1 a 4 está en blanco.

Página EXPOSURE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          +AUTO   LEVEL 32[ 0+ 63]
SHUTTER     AUTO   ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        +AUTO   LEVEL 12dB[ 3+ 12]
LONG EXPOSURE OFF   ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0+8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Página PICTURE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE +AWC   R-GAIN 128[ 0+255]
              B-GAIN 128[ 0+255]
DETAIL BAND   +MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0+ 31]
DNR LEVEL     5[ 0+ 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68+ 95]
FLARE COMP    OFF
COLOR LEVEL   160[ 0+255]
COLOR MATRIX  +USER
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Página CONTRAST

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT  S-CURVE
GAMMA VALUE   0.45[0.35+0.55]
KNEE MODE     MANUAL
KNEE POINT    8[0+15]
KNEE SLOPE    3[0+7]

IE FUNCTION SELECT WDR
                LEVEL 80[0+255]
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Página PROFILE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID +OFF
USER PROFILE LABEL +OFF

FLUORESCENCE MODE OFF
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Configuración de EXPOSURE

① Configuración de AE [AE]

La luminosidad de la imagen se ajustará automáticamente si se selecciona "AUTO" para AE (exposición automática). Si se selecciona "MANUAL", la luminosidad de la imagen se podrá ajustar manualmente. El nivel de AE se puede ajustar en la página de configuración avanzada.

La función AE ajusta la luminosidad de la imagen mediante el control de "GAIN" y "SHUTTER".

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          +AUTO   LEVEL 32[ 0+ 63]
SHUTTER     AUTO   ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        +AUTO   LEVEL 12dB[ 3+ 12]
LONG EXPOSURE OFF   ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0+8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

② Ajuste del obturador electrónico [SHUTTER]

Seleccione una de las siguientes velocidades del obturador electrónico: "AUTO", "MANUAL(FIX)", "MANUAL(VAL)"

Si se selecciona "MANUAL(FIX)", podrá especificarse la velocidad del obturador electrónico. Para ajustar la velocidad dispondrá de los ajustes siguientes:

Quando la frecuencia de fotogramas es de 59,94 Hz: 1/60 (ajuste predeterminado), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, * MANU

Quando la frecuencia de fotogramas es de 50 Hz: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, * MANU
Al presionar el botón [SEL] después de seleccionar "* MANU", se mostrará la página "SHUTTER" y se podrá realizar ajuste preciso de la velocidad del obturador.

El margen de ajuste es de 10/1125 a 1124/1125.

Quando se selecciona "MANUAL" para "AE", podrá ajustarse con precisión la velocidad del obturador electrónico con el control [LEVEL] seleccionando [MANUAL(VAL)].

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          +AUTO   LEVEL 32[ 0+ 63]
SHUTTER     AUTO   ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        +AUTO   LEVEL 12dB[ 3+ 12]
LONG EXPOSURE OFF   ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0+8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

```

** SHUTTER **

SHUTTER     MANU
MANU SET    1124/1125
    
```


Nota:

- Para configurar "SHUTTER", seleccione "MANUAL" para "AE". (Página 168)
- Si se observan fluctuaciones bajo iluminación de lámparas fluorescentes de 50 Hz, la selección de la velocidad "1/100" puede reducir las fluctuaciones.

③ Ajuste la adición de píxeles [BINNING]

La sensibilidad se puede mejorar añadiendo píxeles.

El modo de adición de píxeles puede seleccionarse entre los siguientes:

- OFF : Desactiva la adición de píxeles.
- LINE MIX (ajuste predeterminado) : Añade píxeles en la dirección vertical. (La resolución vertical se deteriorará.)
- PIX MIX : Añade píxeles en la dirección horizontal. (La resolución horizontal se deteriorará.)
- P/L MIX : Añade píxeles en las direcciones vertical y horizontal. (Las resoluciones horizontal y vertical se deteriorarán.)

④ Ajuste de la ganancia [GAIN]

Seleccione un ajuste de control de la ganancia entre los siguientes:

- OFF : Sin ajuste de la ganancia
- AUTO (ajuste predeterminado) : Ajuste automático de la ganancia
Se aplicará el valor máximo permitido para el ajuste automático.
- MANUAL(FIX) : Ajuste manual de la ganancia
La ganancia se fijará al valor de ajuste.
- MANUAL(VAL) : Ajuste manualmente el control [LEVEL] cuando haya seleccionado "MANUAL" para "AE".
Permite realizar ajustes más precisos que "MANUAL(FIX)".

| |
|--|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT |
| AE +AUTO LEVEL 32[0+ 63] |
| SHUTTER AUTO --- |
| BINNING LINE MIX |
| GAIN +AUTO LEVEL 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE OFF --- |
| AREA SELECTION ALL |
| PEAK/AVE LEVEL 8[0+8] |
| HEAD GAIN -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] |

⑤ Ajuste la exposición larga [LONG EXPOSURE]

Seleccione la exposición larga entre "OFF", "AUTO", "MANUAL(FIX)", y FIX(x1).

- OFF (ajuste predeterminado) : Desactiva la exposición larga.
- AUTO : Controla automáticamente la exposición larga.
El valor máximo del control automático se ajustará como el tiempo de almacenamiento.
- MANUAL(FIX) : Habilita el ajuste manual de la exposición larga.
El tiempo se fijará al tiempo de almacenamiento.
Puede seleccionarse el tiempo de almacenamiento entre "OFF", "x2", "x4", o "x8".
- FIX(x1) : Inhabilita la exposición larga.
Está disponible cuando se selecciona "MANUAL" para AE.

⑥ Ajuste del área de detección de la luminosidad [AREA SELECTION]

Si hay una luz potente, como pueda ser un foco, en el fondo detrás del motivo, es posible que el motivo aparezca oscurecido. Para eliminar este fenómeno, el enmascaramiento de las áreas más iluminadas permite al usuario efectuar la compensación de contraluz ocultando las áreas más iluminadas.


Mueva el cursor a "AREA SELECTION" y emplee el botón [◀] o [▶] para seleccionar un área.

| |
|--|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT |
| AE +AUTO LEVEL 32[0+ 63] |
| SHUTTER AUTO --- |
| BINNING LINE MIX |
| GAIN +AUTO LEVEL 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE OFF --- |
| AREA SELECTION ALL |
| PEAK/AVE LEVEL 8[0+8] |
| HEAD GAIN -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] |


Podrá seleccionar una de las siguientes áreas:

* Las áreas de detección mostradas en las ilustraciones de abajo no se visualizan.


ALL (ajuste predeterminado): El objeto de detección es toda el área de la pantalla.

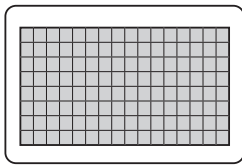


S CIRCLE: El objeto de detección es el área del círculo pequeño que hay en el centro de la pantalla.

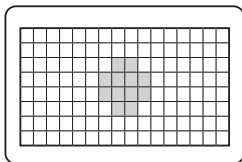

M CIRCLE: El objeto de detección es el área del círculo mediano que hay en el centro de la pantalla.

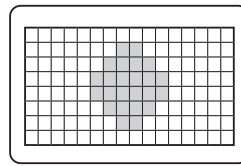

L CIRCLE: El objeto de detección es el área del círculo grande que hay en el centro de la pantalla.

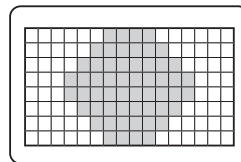


MANU: El objeto de detección se especifica manualmente. (☞ Página 170)

AUTO: Las áreas oscuras se enmascaran automáticamente y sólo se detectan las áreas claras.

Ajuste manualmente el área de detección

Ajuste manualmente el área de detección.

Pantalla de ajuste del área de detección

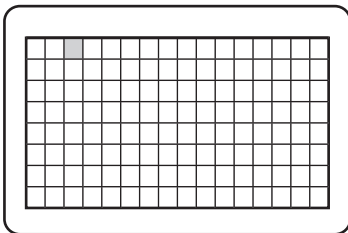

Paso 1

Seleccione "MANU" para "AREA SELECTION", y presione el botón [SEL].

→ Aparecerá la pantalla de ajuste de máscaras.

Paso 2

Mueva el cursor al área en la que no hay detección empleando el botón [Δ], [∇], [◀], o [▶] y presione el botón [SET].

→ El área enmascarada se visualizará en gris.

Nota:

- La detección sólo se efectúa en las áreas enmascaradas.
- Para cancelar un área enmascarada, mueva el cursor al área que desee cancelar y presione el botón [SEL]. Para cancelar todas las áreas enmascaradas, mantenga presionados simultáneamente los botones [◀] y [▶] durante 1 segundo o más.

Paso 3

Presione el botón [MENU] después de haber finalizado el ajuste del área.

→ Se repondrá la página MENU.

7 Ajuste la ponderación de la detección de la luminosidad [PEAK/AVE LEVEL]

Mueva el cursor a "PEAK/AVE" y emplee el botón [\leftarrow] o [\rightarrow] para ajustar el nivel de detección.

Cuando el valor se mueve en la dirección de "0", se detecta el valor pico (valor máximo). Cuando el valor se mueve en la dirección de "8", se detecta el valor medio.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| AE | +AUTO | LÉVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | +AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

8 Ajuste la ganancia del cabezal [HEAD GAIN]

La ganancia del cabezal puede seleccionarse entre -9dB, -6dB, -3dB, OFF(0dB), +3dB, +6dB, o +9dB.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| AE | +AUTO | LÉVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | +AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

Configuración de PICTURE

9 Ajuste del equilibrio del blanco [WHITE BAL MODE]

Podrá seleccionar uno de los siguientes métodos de ajuste del equilibrio del blanco:

AWC (ajuste predeterminado) : Se ajusta el modo de control del equilibrio del blanco. Es adecuado para lugares en los que la iluminación es estable.

Cuando se seleccione "AWC", será necesario efectuar la operación de ajuste del equilibrio del blanco.

MANUAL : El equilibrio del blanco puede ajustarse manualmente.

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| WHITE BAL MODE | +AWC | R-GAIN | 128[0*255] |
| | | B-GAIN | 128[0*255] |
| DETAIL BAND | +MEDIUM SHARP | LEVEL | 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] | | |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] | | |
| FLARE COMP | OFF | | |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] | | |
| COLOR MATRIX | +USER | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

Cuando se seleccione "AWC", siga los pasos siguientes para ajustar el equilibrio del blanco.

Paso 1

Orienté la cámara a un objeto blanco. Tome una imagen del objeto blanco bajo la fuente de iluminación que se utilizará.

Paso 2

Presione el botón [AWC] en la pantalla anterior.

→ Se iniciará AWC y parpadeará la luz del estado de AWC. El ajuste finalizará cuando aparezca "AWC OK" y se apague la luz.

Nota:

- El ajuste esta disponible para cada perfil. (☞ Página 168)
- Si la luz se mantiene encendida después de aparecer "AWC NG" o la luz se enciende después de haber cambiado el perfil, vuelva a intentar los pasos 1 y 2.
- Si se efectúa el AWC mientras el ajuste de "R-GAIN" o "B-GAIN" de "MANUAL" está ajustado en uno que no es el predeterminado (128), es posible que el equilibrio del blanco no pueda ajustarse correctamente.

Cuando seleccione "MANUAL", mueva el cursor a "R-GAIN" o "B-GAIN" y ajuste el equilibrio del blanco con el botón [\leftarrow] o [\rightarrow].

10 Ajuste de los detalles [DETAIL BAND]

Se especifican la banda y el nivel de corrección de los bordes.

```
PP1 LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT
WHITE BAL MODE  *AMC      R-GAIN 128[ 0*255]
                  B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND      *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL        5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL   76[68* 95]
FLARE COMP       OFF
COLOR LEVEL      160[ 0*255]
COLOR MATRIX     *USER

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

Paso 1

Mueva el cursor a "DETAIL BAND" y seleccione uno de los siguientes patrones de banda: "OFF", "SOFT", "MEDIUM SHARP", "SHARP", o "SHARPEST".

El contorno se vuelve más grueso (banda baja) cuando se mueve el cursor en la dirección de "SHARPEST", mientras que el contorno se vuelve más fino (banda alta) en la dirección de "SOFT".

Paso 2

Mueva el cursor a "DETAIL LEVEL" para ajustar el nivel de intensidad.

Cuando se incrementa el valor, la imagen se vuelve más nítida, y cuando se reduce, la imagen se vuelve más atenuada.

Nota:

- Es posible que aparezcan artefactos en el contorno de un motivo fotográfico, pero no se trata de un fenómeno anormal. Si este fenómeno no es agradable, reduzca el valor de "DETAIL BAND" o "DETAIL LEVEL" y ajuste la calidad de la imagen.

11 Ajuste de la función de reducción de ruido digital [DNR LEVEL]

La función de reducción de ruido digital reduce el ruido. Emplee el botón [◀] o [▶] para ajustar el nivel de reducción de ruido.

12 Ajuste del nivel de pedestal [PEDESTAL LEVEL]

Ajuste del nivel de pedestal (nivel de la señal del negro) presionando el botón [◀] o [▶] observando un monitor de forma de onda o monitor de vídeo en color.

Cuando se incrementa el valor, la imagen se vuelve más clara, y cuando se reduce, la imagen se vuelve más oscura.

13 Ajuste de la compensación de reflejos [FLARE COMP]

Seleccione "ON" u "OFF" (ajuste predeterminado) para determinar si debe efectuarse la compensación de reflejos.

Cuando se seleccione "ON", se reducirán los reflejos.

14 Ajuste del nivel del color [COLOR LEVEL]

Ajuste del nivel del color presionando el botón [◀] o [▶] observando un vectorscopio o monitor de vídeo en color.

Cuando se incrementa el valor, el color se vuelve más intenso, y cuando se reduce, el color se vuelve más claro.

15 Ajuste del matiz [COLOR MATRIX]

Ajuste el matiz observando un vectorscopio o monitor de vídeo en color.

```
PP1 LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT
WHITE BAL MODE  *AMC      R-GAIN 128[ 0*255]
                  B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND      *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL        5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL   76[68* 95]
FLARE COMP       OFF
COLOR LEVEL      160[ 0*255]
COLOR MATRIX     *USER

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

```
** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B PHASE  ....|.... 0 ( 0 )

B GAIN   ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET (NEW SETTING)
```

```
** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B/B-Mg PHASE ....|.... 0 ( 0 )
B PHASE      ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg PHASE   ....|.... 0 ( 0 )
B/B-Mg GAIN  ....|.... 0 ( 0 )
B GAIN       ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg GAIN    ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET (NEW SETTING)
```

Paso 1

Visualice el color que desee ajustar en el centro de la pantalla con el mayor tamaño posible.

Paso 2

Seleccione el eje cercad al color propuesto. Podrá seleccionar uno de los ejes siguientes:

USER (ajuste predeterminado), B-Mg, Mg, Mg-R, R, R-Ye, Ye, Ye-G, G, G-Cy, Cy, Cy-B, B

Paso 3

Presione el botón [SEL] después de haber seleccionado el eje.

→ Se visualizará la ventana "MATRIX".

Paso 4

Para efectuar el ajuste preciso, ajuste "PHASE" (matiz) y "GAIN" (crominancia) empleando el botón [<] o [>].

Paso 5

Seleccione "BEFORE" o "AFTER" con "EFFECT SELECT" y compruebe si se ha aplicado el efecto. Para determinar el ajuste, seleccione "SET(NEW SETTING)" y luego presione el botón [SEL].

Para restaurar el ajuste anterior, seleccione "CANCEL" y luego seleccione el botón [SEL].


Cuando el eje del color no sea claro

Cuando se seleccione "USER AREA" en la pantalla "MATRIX", el eje se visualiza automáticamente al seleccionar un color en la pantalla.

La selección del color se efectúa en la pantalla de detección de color.


El cursor negro rectangular parpadea para seleccionar el color deseado en la pantalla de detección de color.

Pantalla de detección de colores

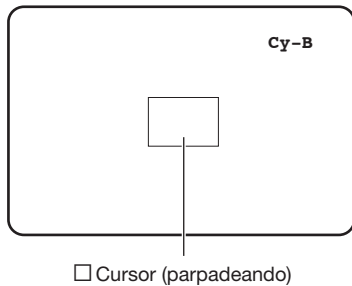

<Gráfica de división de la matriz de colores>

* Esta gráfica sirve de guía para visualizar el eje más cercano al realizar el ajuste.

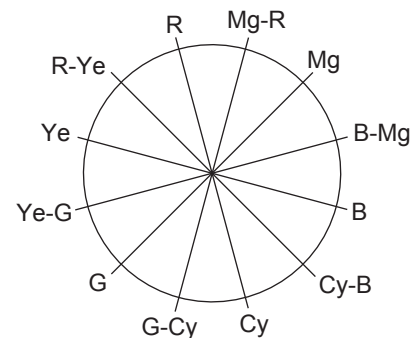

Paso 1

Orienté la cámara al centro del motivo en el que se detecta el color.

Si la cámara no puede moverse, mueva el cursor rectangular al área del color deseado presionando los botones [Δ], [∇], [<] y [>].

Nota:

- Cuando se gire el control azul hacia la izquierda, cambiará el tamaño del cursor rectangular en el orden de grande → medio → pequeño. Seleccione el tamaño que corresponda al tamaño del motivo.

Paso 2


Presione el botón [SEL] o el botón [MENU].

→ Aparecerá de nuevo la pantalla "MATRIX".

Paso 3

Para efectuar el ajuste preciso, ajuste "PHASE" (matiz) y "GAIN" (crominancia).

Por ejemplo, el ajuste de "PHASE" o "GAIN" de "Cy/Cy-B" en la pantalla siguiente proporciona el ajuste simultáneo de "PHASE" o "GAIN" de los ejes adyacentes "Cy" y "Cy-B" en la gráfica de división de la matriz de colores de arriba.

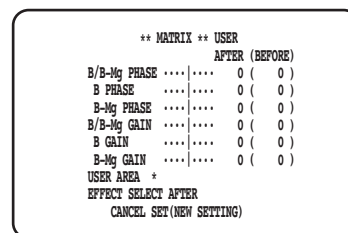

Nota:


- Cuando se detecta el color en el eje de la gráfica de división de la matriz de colores, no se visualizan los ejes adyacentes.

Configuración de CONTRAST

16 Ajuste el modo de corrección de gamma [GAMMA SELECT]

El modo de gamma puede seleccionarse entre los siguientes:

- S-CURVE (ajuste predeterminado) : Con la mejora de gamma puede reducirse el ruido mientras se conserva el contraste.
- NORMAL : Una característica de gamma estándar

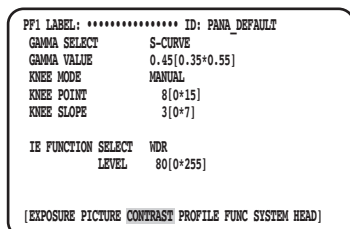

17 Ajuste del nivel de corrección de gamma [GAMMA VALUE]

Para ajustar el nivel de corrección de gamma, observe un monitor de forma de onda o monitor de vídeo en color.

Ajuste el nivel de corrección de gamma entre 0,35 y 0,55 (ajuste predeterminado: 0,45).

El nivel de corrección de gamma se desactivará (OFF) (gamma = 1) si se presiona el botón [\leftarrow] cuando el nivel de corrección de gamma es "0,55".

18 Ajuste el modo Knee [KNEE MODE]

Debido a la iluminación o al reflejo del objeto, puede ocurrir "deslumbramiento" en el que la parte brillante de la imagen puede tener un aspecto aplanado. Este fenómeno se produce cuando la señal de luminancia excede la gama dinámica de la cámara. Para ajustar las señales de entrada de alta luminancia dentro de la gama dinámica de la cámara, comprima la gradación utilizando la función de la Knee.

Seleccione uno de los siguientes métodos de ajuste:

- MANUAL (ajuste predeterminado) : Habilita el ajuste manual del punto de Knee y de la pendiente de Knee.
- AUTO : Ajusta automáticamente el punto de Knee y la pendiente de Knee.

19 Ajuste el punto de Knee [KNEE POINT]

Mientras efectúa el ajuste del punto de Knee, observe sin falta el monitor de forma de onda o monitor de vídeo en color. Establece el punto de compresión para las señales de entrada de alta luminancia.

20 Ajuste la pendiente de Knee [KNEE SLOPE]


Mientras ajusta la pendiente de Knee, observe sin falta el monitor de forma de onda o monitor de vídeo en color.

Ajuste el nivel de compresión para las señales de entrada de alta luminancia mediante el ajuste de la pendiente de Knee.

21 Ajuste el botón [IE] [IE FUNCTION SELECT]

Seleccione una de las siguientes funciones para asignarla al botón [IE] (IMAGE ENHANCEMENT):

- WDR : La función de expansión de la gama dinámica corrige el área oscura haciéndola más clara mientras controla la sobreexposición.
- DARK AREA CORRECTION : La función de expansión de negro adaptable corrige el área oscura haciéndola más clara.
- OVER EXPOSURE REDUCTION : La función de corrección de la exposición controla la sobreexposición.
- SMOKE CORRECTION : La función de corrección de humo despeja la borrosidad blanca.
- COLOR ENHANCEMENT : La función de mejora del color mejora el color seleccionado.

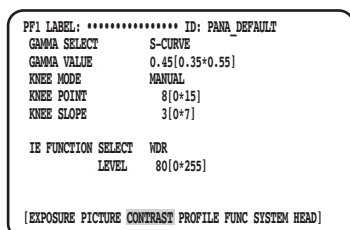


22 Ajuste el nivel de corrección asignado al botón [IE] [IE FUNCTION LEVEL]

Ajuste el nivel de corrección de la función seleccionada con [IE FUNCTION SELECT] operando el botón [◀] o [▶] observando un vectorscopio o monitor de vídeo en color.

Cuando se incrementa el valor aumenta la cantidad de corrección, y cuando se reduce el valor, disminuye la cantidad de corrección.

Cuando se selecciona "COLOR ENHANCEMENT", puede seleccionarse el color de RED, RED&YELLOW, o YELLOW además del nivel de corrección.

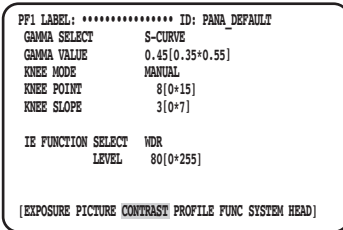



Configuración de PROFILE

23 Ajuste el ID y la etiqueta del perfil de usuario [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]

Ajusta el ID y la etiqueta del perfil de usuario. El ID y la etiqueta que indican la ubicación de la cámara o el contenido de la imagen se pueden crear y visualizar en la pantalla empleando caracteres alfanuméricos y símbolos. Pueden usarse hasta 16 caracteres para el ID y la etiqueta.


Siga el procedimiento siguiente para ajustar el ID y la etiqueta.

Pantalla de creación de la etiqueta (Cuando la frecuencia de fotogramas es de 59,94 Hz)

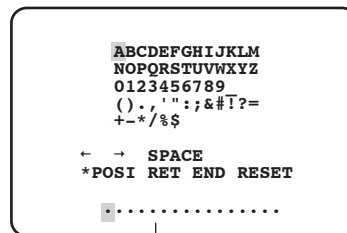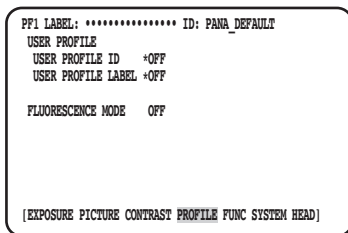


Área de edición

Pantalla de creación de la etiqueta (Cuando la frecuencia de fotogramas es de 50 Hz)

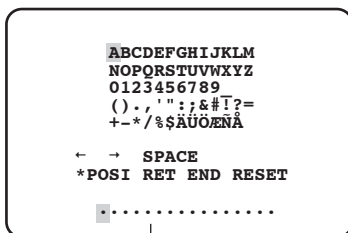

Área de edición

Pantalla de situación de la visualización

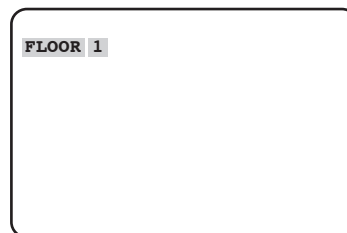

Paso 1

Ajuste "USER PROFILE ID" o "USER PROFILE LABEL" en "* ON" y presione el botón [SEL].

→ Se visualizará la pantalla de creación del título.

Importante:

- Cuando seleccione "* OFF" para "USER PROFILE ID" o "USER PROFILE LABEL", "USER PROFILE" podrá ajustarse pero no se podrá visualizar.

Nota:

- El ajuste de "* POSI" de "USER PROFILE ID" sólo está disponible cuando se ha seleccionado "* OFF" para "USER PROFILE LABEL". Cuando seleccione "* ON" para "USER PROFILE LABEL", se dará más prioridad al ajuste de "* POSI" de "USER PROFILE LABEL".
- Como ajuste predeterminado, se establece "FLUORESCENCE3" para "PROFILE 5" y se establece "FLUORESCENCE1" para "PROFILE 6".

Paso 2

Mueva el cursor al carácter deseado empleando los botones [Δ], [▽], [◀] o [▶] y presione el botón [SEL].

→ Los caracteres introducidos se visualizarán en el área de edición.

<Introducción de caracteres>

- Para revisar un carácter, mueva el cursor a “←” o “→” y presione el botón [SEL]. Mueva el cursor al carácter que desee revisar en el margen de entrada y vuelva a introducir el carácter correcto.
- Para introducir un espacio en blanco, mueva el cursor a “SPACE” y presione el botón [SEL].
- Para borrar todos los caracteres introducidos, mueva el cursor a “RESET” y presione el botón [SEL].

Paso 3

Después de introducir el título, mueva el cursor a “*POSI” y presione el botón [SEL].

→ Se visualiza la pantalla de situación de la visualización y parpadea el título de cámara introducido.

Paso 4

Emplee los botones [Δ], [▽], [◀] y [▶] para ajustar la posición del título y presione el botón [MENU].

→ Se determina la posición de la visualización y se repone la pantalla de creación de títulos.

24 Efectúe el ajuste adicional para cada modo de captura de imagen fluorescente [FLUORESCENCE MODE]

Efectúe el ajuste adicional para cada modo de captura de imagen fluorescente.

El ajuste adicional puede seleccionarse entre los siguientes:

- OFF (ajuste predeterminado) : No efectúa el ajuste adicional para el modo de captura de imagen fluorescente.
- MODE1 : Efectúa el ajuste adicional para FLUORESCENCE1.
- MODE2 : Efectúa el ajuste adicional para FLUORESCENCE2.
- MODE3 : Efectúa el ajuste adicional para FLUORESCENCE3.

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF

FLUORESCENCE MODE OFF

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
  
```

```

** MODE1 **
MONOCHROME MODE ON
  
```

Importante:

- El ajuste para imágenes fluorescentes está preajustado en PROFILE 5 y 6.
- Cuando se utiliza el modo de captura de imagen fluorescente, se requieren dispositivos periféricos tales como una fuente de luz, un filtro, etc.
- Si está pensando en usarlos, póngase en contacto con su distribuidor.

Nota:

- Cuando se haya seleccionado “MODE1”, ajuste “MONOCHROME MODE” en “ON” (modo de blanco y negro: ajuste predeterminado) o en “OFF” (modo de color).
- Cuando se ajuste una opción distinta a “OFF”, podrá ajustarse “GAIN” hasta a 18 dB. (Hasta a 12 dB cuando se haya ajustado “OFF”).

Configuración de FUNC

25 Ajuste de la función de desplazamiento vertical y horizontal [FLIP AND MIRROR]

Para la función de desplazamiento vertical y horizontal dispondrá de lo siguiente:

- OFF (ajuste predeterminado) : Visualización normal
- FLIP : Verticalmente desplazada
- MIRROR : Horizontalmente desplazada
- FLIP+MIRROR : Verticalmente y horizontalmente desplazada. Para cambiar el ajuste, presione el botón [Δ] o [▽].

```

FLIP AND MIRROR OFF
F+M STATUS DISPLAY OFF
COLOR BAR *ON
FOOTSH CONTROL CH1 PROFILE1→2
FOOTSH CONTROL CH2 FREEZE
USER PROFILE SAVE/LOAD *USB-CAMERA(ALL)
SAVE/LOAD MODE(USB) AUTO
DIGITAL ZOOM ON
DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY OFF

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
  
```

Nota:

- La función de congelación puede efectuarse al mismo tiempo.

26 Ajuste de la visualización del estado de desplazamiento vertical y horizontal [F+M STATUS DISPLAY]

Seleccione "ON" u "OFF" (ajuste predeterminado) para ajustar si se debe visualizar "⬆" (desplazamiento vertical), "⬅" (desplazamiento horizontal), "⬆⬅" (desplazamiento vertical y horizontal) en la pantalla cuando se presiona el botón [Δ] o [▽].

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1↔2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

27 Visualización de la barra de colores [COLOR BAR]

Visualice la barra de colores.

Al presionar el botón [MENU] se repondrá la página inicial.

Nota:

- Cuando no se haya conectado el cabezal de la cámara a la CCU, se visualizará la barra de colores.

28 Ajuste de los interruptores de pedal [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]

Las funciones siguientes pueden asignarse al CH1 o CH2:

| | |
|----------------|---|
| NONE | : Se inhabilita el interruptor. |
| FREEZE | : Ajusta el estado de ON/OFF de congelación de pantalla. |
| FLIP+MIRROR | : Ajusta el estado de ON/OFF del desplazamiento vertical y horizontal de la imagen. |
| FLIP | : Ajusta el estado de ON/OFF del desplazamiento vertical de la imagen. |
| MIRROR | : Ajusta el estado de ON/OFF del desplazamiento horizontal de la imagen. |
| PROFILE 1↔2 | : Cambia entre los perfiles 1 y 2. |
| PROFILE 1↔5 | : Cambia entre los perfiles 1 y 5. |
| PROFILE 1↔6 | : Cambia entre los perfiles 1 y 6. |
| PROFILE 3↔4 | : Cambia entre los perfiles 3 y 4. |
| PROFILE ALL | : Cambia entre todos los perfiles, del 1 al 6, de forma ordenada. |
| ZOOM IN | : Acerca la imagen con zoom cuando se selecciona "ON(ENABLE)" para "DIGITAL ZOOM". |
| ZOOM OUT | : Aleja la imagen con zoom cuando se selecciona "ON(ENABLE)" para "DIGITAL ZOOM". |
| ZOOM 1.0x↔2.0x | : Cambia entre 1,0x y 2,0x cuando se selecciona "ON(ENABLE)" para "DIGITAL ZOOM". |

Nota:

- La operación del interruptor de pedal se desactivará mientras se visualice el menú SETUP.

29 Almacenamiento/Carga de perfiles [USER PROFILE SAVE/LOAD]

Pueden efectuarse las acciones de SAVE (CAMERA→USB) o LOAD (USB→CAMERA) del perfil insertando la memoria USB.

Seleccione "ALL" para guardar o leer los seis perfiles y seleccione "SINGLE" para guardar o leer un archivo.

No cambie el nombre de la carpeta y del archivo que se creará en la memoria USB. Si se cambian los nombres, no podrá efectuarse la carga del perfil. Después del almacenamiento o carga, la memoria USB será automáticamente desmontada. Para operar la memoria USB de forma continua, desconéctela y vuelva a insertarla.

Importante:

- No edite la configuración de archivos y carpetas creada al presionar el botón [SAVE]. Podría provocar un error de carga.

③① Ajuste del método de almacenamiento/carga desde la memoria USB [SAVE/LOAD MODE (USB)]

Los modos de operación siguientes estarán disponibles cuando se haya insertado una memoria USB:

- AUTO : Se mostrará automáticamente un mensaje de solicitud para preguntar sobre la operación deseada (lectura/carga/sin acción).
- MANUAL : No se lleva a cabo ninguna acción cuando se inserta una memoria USB. Opere en la página [USER PROFILE SAVE/LOAD].

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1--2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE (USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Nota:

- Se guardará o cargará el contenido de todos los elementos de QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST" y "PROFILE" del menú ADVANCED MENU. (Excepto "HEAD GAIN" de "EXPOSURE")

③② Active y desactive el zoom [DIGITAL ZOOM]

Active/desactive (ON/OFF) la función del zoom.

El factor de zoom se puede ajustar entre 1x y 2,5x en pasos de 0,1x. Para cambiar el ajuste, presione el botón [◀] o [▶].

③③ Ajuste la visualización de la relación de zoom [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]

Establezca si debe visualizarse en la pantalla la relación de zoom actual (ajuste predeterminado: OFF).

Nota:

- Cuando se seleccione 1x, la relación de zoom no se visualizará en la pantalla.

Configuración de SYSTEM

③④ Ajuste la posición de OSD de la salida de vídeo [OSD POSITION]

Seleccione una de las siguientes posiciones de OSD de la salida de vídeo:

- UPPER LEFT : Muestra la OSD en el área superior izquierda del ángulo de visión de salida de vídeo.
- UPPER RIGHT : Muestra la OSD en el área superior derecha del ángulo de visión de salida de vídeo.
- LOWER LEFT : Muestra la OSD en el área inferior izquierda del ángulo de visión de salida de vídeo.
- LOWER RIGHT : Muestra la OSD en el área inferior derecha del ángulo de visión de salida de vídeo.

③⑤ Ajuste de la señal de salida HDMI [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]

Ajusta las señales de salida para el conector de salida HDMI.

Cuando seleccione 1080p o 1080i para la salida HDMI dispondrá de lo siguiente:

YPbPr (422), YPbPr (444), RGB (LIMITED), RGB (FULL)

Cuando se cambie el ajuste de la señal de salida HDMI o el formato de vídeo, el vídeo de salida HDMI puede interrumpirse durante algunos segundos.

③⑥ Ajuste el conector de entrada/salida de la señal de sincronización [G/L SYNC TERMINAL SETTING]



Seleccione "IN" u "OUT" (ajuste predeterminado)".

Importante:

- La función de sincronización externa puede utilizarse entre unidades de control de esta serie. Conecte la GP-UH332C o GP-UH532C al conector de entrada/salida de señal de sincronización. Luego, ajuste "OUT" para la principal e "IN" para la subordinada y aplique el mismo formato de salida de vídeo.

36 Estado de sincronización de la visualización [G/L SYNC STATUS INFO]

Se mostrará el estado de sincronización interna "INTERNAL" o el estado de sincronización externa "**EXTERNAL**". Cuando seleccione "**EXTERNAL**", podrá ajustar la fase horizontal.

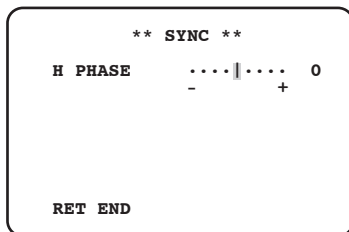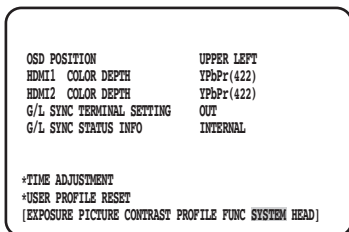

Ajuste la fase horizontal.

Paso 1

Mueva el cursor a "**EXTERNAL**" y presione el botón [SEL].

Paso 2

Ajuste la fase "H PHASE".

Nota:

- Se visualizará "**EXTERNAL**" cuando se haya seleccionado "IN" para "G/L SYNC TERMINAL SETTING" y se introduzcan las señales de sincronización externa. En otras ocasiones se visualizará "INTERNAL".
- Cuando se cierra la pantalla de ajuste de "H PHASE" (fase horizontal en el modo de sincronización externa), la salida de vídeo HDMI puede quedar perturbada durante aproximadamente 5 segundos.

37 Ajuste del reloj [TIME ADJUSTMENT]

Ajuste la hora actual de "mes/día/año" y "horas/minutos".

Para determinar el ajuste, mueva el cursor a "SET" y presione el botón [SEL].

Cuando utilice la función de almacenamiento de datos en la memoria USB para los perfiles, asegúrese de ajustar la hora.

38 Reposición del ajuste predeterminado del perfil [USER PROFILE RESET]

Los ajustes predeterminados se reponen para todos los elementos del menú QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST" y "PROFILE" del menú ADVANCED MENU.

Paso 1

Mueva el cursor a "USER PROFILE RESET" y presione el botón [SEL].

Paso 2

Se visualizará la ventana de confirmación de "USER PROFILE RESET? YES/NO".

Si selecciona "YES", se repondrá el ajuste predeterminado del perfil.

Nota:


- "HEAD GAIN" de "EXPOSURE" no se inicializará.

Configuración de HEAD

39 Ajuste del sombreado del blanco [WHITE SHADING]

Ajuste "AUTO(SET)" o "MANUAL" para el sombreado del blanco.

Quando se ajusta "AUTO(SET)" para el sombreado del blanco

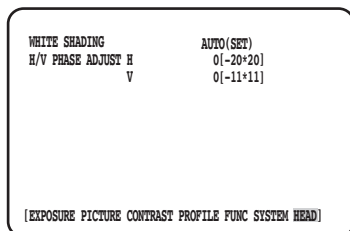

Paso 1

Oriente la cámara a un objeto blanco.

Paso 2

Seleccione "AUTO(SET)", y presione el botón [SEL].

→ La función de sombreado del blanco se iniciará y la indicación de "AUTO(SET)" se invertirá y parpadeará repetidamente.

El ajuste automático finalizará cuando aparezca "WHITE SHADING OK" en la parte inferior del MENU.

Nota:

- El sombreado del blanco puede ajustarse para cada cabezal de cámara.
- Si aparece "WHITE SHADING NG", vuelva a intentarlo repitiendo los pasos 1 y 2.

Quando se ajusta "MANUAL" para el sombreado del blanco

Paso 1

Seleccione "MANU", y presione el botón [SEL].

→ Se visualizará la pantalla de configuración manual para el sombreado del blanco.

Ajuste cada dirección del componente rojo/azul del sombreado del blanco.

40 Ajuste de la posición horizontal/vertical de la pantalla [H/V PHASE ADJUST]

Ajuste la fase de la pantalla en las direcciones horizontal (derecha/izquierda) o vertical (arriba/abajo).

Nota:

- "H/V PHASE ADJUST" puede ajustarse para cada cabezal de cámara.

Solución de problemas

Antes de solicitar reparaciones, compruebe los síntomas en la tabla siguiente.

Si no puede resolver el problema después de comprobar y probar las soluciones de la tabla, o si el problema no está descrito a continuación, póngase en contacto con su proveedor.

| Síntoma | Causa/solución | Páginas de referencia |
|---|--|-----------------------|
| No se visualiza la imagen | <ul style="list-style-type: none"> ¿Está el cable conectado correctamente al conector de salida HDMI o al conector de salida SDI? Compruebe si la conexión está correctamente establecida. | 156 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ¿Es compatible el formato de la señal de salida de vídeo de cada conector con el formato de vídeo que puede visualizarse en el monitor? Compruebe si el formato de la señal de salida de vídeo es compatible con el formato de vídeo. | 156, 182 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha ajustado correctamente el brillo del monitor, o se ha ajustado correctamente el contraste? Compruebe si los ajustes del monitor son adecuados. | – |
| | <ul style="list-style-type: none"> Verifique el monitor después de haber repuesto los ajustes predeterminados (1:ON/ 2:ON/ 3:ON/ 4:OFF/ 5:OFF/ 6:OFF). | 156 |
| El estado de lámparas no cambiar después de haber presionado el botón [PROFILE]. | <ul style="list-style-type: none"> Presione una vez para visualizar el estado. Presione repetidamente el botón [PROFILE] hasta que se encienda el indicador deseado. | 154 |
| El estado de la lámpara [AE] no cambia. | <ul style="list-style-type: none"> Presione una vez para visualizar el estado. Presione repetidamente el botón [AE] hasta que se encienda el indicador deseado. | 154 |
| El estado de la lámpara [IE] no cambia. | <ul style="list-style-type: none"> Presione una vez para visualizar el estado. Presione repetidamente el botón [IE] hasta que se encienda el indicador deseado. | 154 |
| Sólo se visualiza la barra de colores | <ul style="list-style-type: none"> ¿Está la cámara correctamente conectada al conector de la CCU y al conector del cabezal de la cámara? Compruebe si la conexión está correctamente establecida. | 153, 156 |
| No puede ajustarse el matiz [COLOR MATRIX] en el menú | <ul style="list-style-type: none"> ¿Está la cámara correctamente conectada al conector de la CCU y al conector del cabezal de la cámara? Es necesario efectuar la conexión entre el cabezal de la cámara y el cable de la cámara para poder ajustar la calidad de la imagen. Compruebe si la conexión está correctamente establecida. | 153, 156 |
| Toda la pantalla se ve borrosa | <ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha ajustado correctamente la apertura del objetivo? Compruebe si la apertura está correctamente ajustada. Emplee objetivos del número F recomendado o superior y objetivos 3CCD específicos. | 161 |
| Pueden verse varios bordes | <ul style="list-style-type: none"> Intente cambiar el ajuste de "DETAIL BAND". | 172 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Cambie el cable del monitor. | – |
| No se visualiza "AWC OK" | <ul style="list-style-type: none"> Cuando la pantalla es demasiado clara, cierre la apertura del objetivo o ajuste "AE" a "AUTO". | 161, 168 |
| Hay barras negras a la derecha e izquierda de la imagen | <ul style="list-style-type: none"> Este fenómeno depende de las especificaciones del monitor. Seleccione la visualización de pantalla ancha y completa en el lado del monitor. | – |
| La imagen es verticalmente más larga | <ul style="list-style-type: none"> Esta unidad proporciona salidas al asumir que la pantalla es de 16:9. Seleccione la visualización de pantalla ancha en el lado del monitor. | – |
| No hay sonido del monitor | <ul style="list-style-type: none"> Esta unidad no es aplicable para la salida de sonido. | – |
| Aparece el mensaje "FAN STOPPED" | <ul style="list-style-type: none"> Se ha parado el ventilador. Desconecte inmediatamente la alimentación y póngase en contacto con su distribuidor o con el operador para la sustitución del ventilador. | – |
| Se visualizará "Unsupported Camera Head". | <ul style="list-style-type: none"> Se ha conectado un cabezal de cámara incompatible. Póngase en contacto con su distribuidor. | 183 |

Especificaciones

| | |
|---|--|
| Alimentación: | 12 V CC \pm 10 % |
| Consumo de energía: | 12 V 3,4 A (incluyendo el cabezal de cámara) |
| Sistema captor: | Sistema microprismático |
| Sensor de imagen: | 3MOS del tipo 1/3 |
| Salida de vídeo: | Salida de HDMI: Conector HDMI x2 Salida de SDI: Conector BNC x5 |
| Formato de vídeo: | Salida de HDMI: 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i Salida de SDI: 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i |
| Iluminación necesaria: | 2000 lx (3200 K, F16, cuando "BINNIG" es "LINE MIX".) |
| Señal/ruido: | 54 dB (en la salida empleando 1080i) |
| Definición horizontal: | 1000 líneas de TV en el centro (cuando la salida es de 1080p) |
| Barra de colores: | Barra de colores de SMPTE (0 % de configuración, a 59,94 Hz)/Barra de colores completa (a 50 Hz) |
| Función: | AE, Ganancia, Obturador electrónico, Exposición larga, Ganancia del cabezal, Adición de píxeles, Equilibrio del blanco, Knee, Detalles, Conmutación de gamma, Ajuste de DNR, Funciones de IE (WDR, Expansión de negro adaptable, Corrección de la exposición, Corrección de humo, Mejora del color), Ajuste del pedestal, Compensación de reflejos, Ajuste del nivel del color, Ajuste del matiz, Perfil de captura de imagen fluorescente, Congelación, Desplazamiento, Espejo, Visualización del estado, Barra de colores, Zoom digital, Ajuste del interruptor de pedal, Ajuste del perfil, Conmutación de salida HDMI, Sincronización externa, Reloj, Corrección del sombreado del blanco, Ajuste de la fase H/V |
| Interruptor de pedal: | Minitoma estéreo de 3,5 de diámetro |
| Control externo: | Minitoma estéreo de 3,5 de diámetro (cumple con el nivel de señal RS232C de serie de 3 electrodos) |
| Temperatura ambiental de funcionamiento: | 0 °C a 40 °C |
| Humedad ambiental de funcionamiento: | 30 % a 90 % |
| Presión ambiental de funcionamiento: | 700 hPa a 1060 hPa |
| Temperatura para el transporte y el almacenaje: | -10 °C a +60 °C |
| Humedad para el transporte y el almacenaje: | 10% al 90% |
| Presión para el transporte y el almacenaje: | 700 hPa a 1060 hPa |
| Dimensiones: | GP-UH332C: 185 mm (An) x 57 mm (Al) x 270 mm (Prf) (excluyendo las patas de goma y los salientes) GP-UH332H: 27 mm (An) x 30 mm (Al) x 42,5 mm (Prf) (excluyendo la base de montaje de trípode y los salientes) |
| Masa: | GP-UH332C: Aprox. 2 kg GP-UH332H: Aprox. 65 g |
| Acabado: | Revestimiento blanco vela |

Accesorios estándar

Manual de instrucciones (este documento) 1 ejemplar
Tarjeta de garantía para EE.UU. 1 ejemplar

Accesorios opcionales

Cabezal de cámara 3MOS HD..... GP-UH332H
Cable de la cámara GP-UC532G03 (3 m)
GP-UC532G06 (6 m)
GP-UC532G15 (15 m)
GP-UC532G03A (3 m)
(Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)
GP-UC532G06A (6 m)
(Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)
GP-UC532G15A (15 m)
(Programado su pronta salida al mercado / En agosto de 2017)

Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías Solamente para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado



Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acompañen significan que los productos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben mezclarse con los residuos domésticos.

Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional.



En España, los usuarios están obligados a entregar las pilas en los correspondientes puntos de recogida. En cualquier caso, la entrega por los usuarios será sin coste alguno para éstos. El coste de la gestión medioambiental de los residuos de pilas, acumuladores y baterías está incluido en el precio de venta.

Si los elimina correctamente ayudará a preservar valuosos recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente.

Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento.

Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo, de acuerdo con la legislación nacional.



Nota para el símbolo de pilas y baterías (símbolo debajo)


Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo químico. En este caso, cumple con los requisitos de la Directiva del producto químico indicado.

Panasonic®

Manuale di istruzioni

Unità di controllo della telecamera HD

N. modello **GP-UH332C**

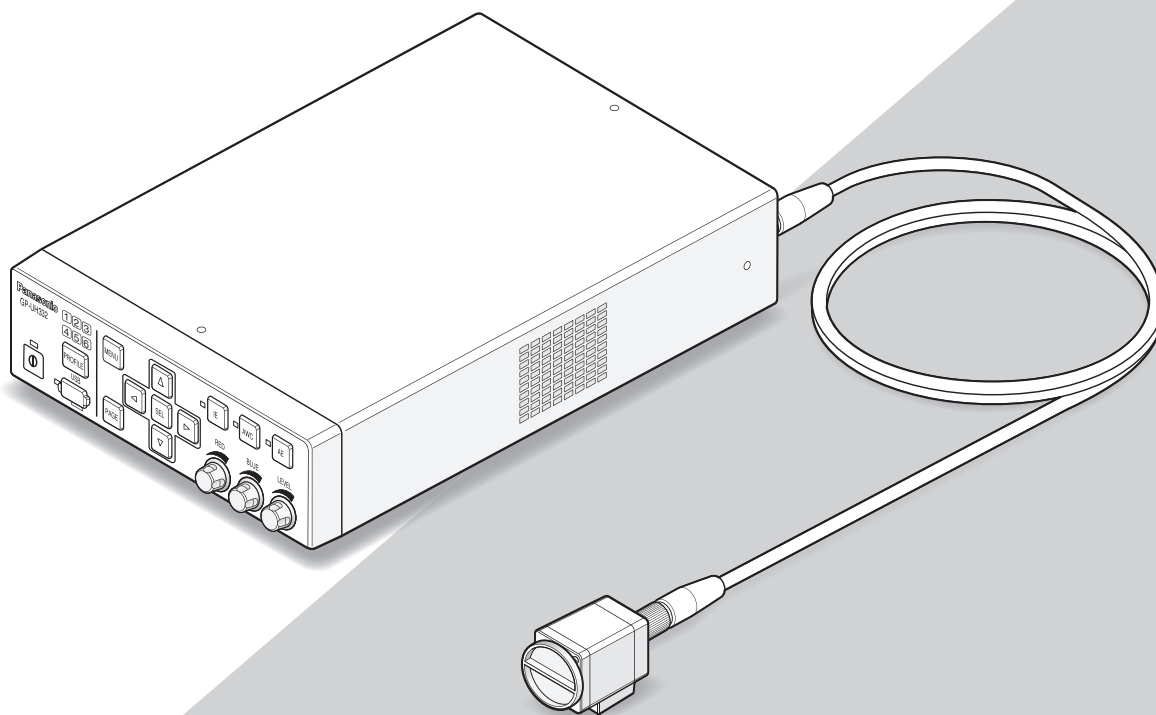

(La testa della telecamera e il cavo della telecamera sono opzionali.)

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

ITALIANO

VERSIONE ITALIANA

(ITALIAN VERSION)

AVVERTENZA:

- Per prevenire il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre questa apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- L'apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto riempito di liquidi, come ad esempio un vaso, deve essere messo sull'apparecchiatura.
- L'installazione deve essere eseguita conformemente a tutte le norme di installazione pertinenti.
- Questo è un prodotto classe A. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenza radio, nel qual caso può essere necessario che l'utente adotti misure adeguate.
- Questa apparecchiatura è conforme alla Classe A della norma CISPR 32.
In un ambiente residenziale questa apparecchiatura può causare interferenza radio.
- Tutte le procedure relative all'installazione di questo prodotto devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato o installatori di sistema.

PRECAUZIONE:

- Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

Per l'Europa

Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che il prodotto a cui si riferisce la presente dichiarazione risulta conforme al seguente standard o altro documento normativo conforme alle disposizioni della direttiva 2004/108/CE.

Scollegamento dell'alimentazione. In un'unità con o senza interruttori ON-OFF l'energia elettrica è sempre fornita all'unità quando il cavo di alimentazione è inserito nell'alimentatore; tuttavia, l'unità è funzionante soltanto quando l'interruttore ON-OFF è nella posizione ON. Togliere il cavo di alimentazione dalla spina per scollegare l'alimentazione principale di tutte le unità.

EMC (direttiva compatibilità elettromagnetica) per l'utilizzo di questo prodotto in ambiente medico

- La descrizione della GP-UH332 rappresenta il sistema telecamera con l'utilizzo di GP-UH332C e GP-UH332H.

AVVERTENZA

- L'utilizzo di accessori o cavi non specificati in questo documento potrebbe aumentare la radiazione elettromagnetica emessa dalla GP-UH332 o deteriorare l'immunità all'interferenza elettromagnetica.
- In caso di utilizzo della GP-UH332 installata accanto o impilata su altri dispositivi, assicurarsi che la CCU funzioni normalmente nel sistema.

PRECAUZIONE

- Per lo smaltimento di questo prodotto, è necessario rispettare la legislazione locale o nazionale e le relative politiche ospedaliere.

| Politica e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche | | |
|--|-----------------------|--|
| La GP-UH332 è destinata all'utilizzo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Assicurarsi che questo prodotto venga utilizzato nell'ambiente seguente. | | |
| Test delle emissioni | Livello di conformità | Ambiente elettromagnetico - Politica |
| Emissioni condotte a radiofrequenza CSPR 11 | Gruppo 1 | La GP-UH332 utilizza energia a radiofrequenza per funzioni interne. Pertanto, l'emissione a radiofrequenza è considerevolmente bassa e non interferirà con dispositivi elettronici posti nelle vicinanze. |
| Emissioni condotte a radiofrequenza CSPR 11 | Classe A | Grazie alle sue caratteristiche di emissione, la GP-UH332 è adatta per l'impiego in aree industriali e ospedali. Se questo prodotto deve essere utilizzato in quartieri residenziali, può essere necessario adottare alcune misure, ad esempio il ricollocamento del prodotto, poiché la protezione per il dispositivo di comunicazione a radiofrequenza fornita nel quartiere residenziale potrebbe non essere sufficiente. |
| Emissioni di corrente armonica IEC 61000-3-2 | Classe A | |
| Emissioni di variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e flicker IEC 61000-3-3 | Clausola 5 | |

Utilizzare il seguente adattatore CA:

Produttore: Sinpro Electronics Co., Ltd.
No. della parte: MPU60A-105-P49L10*

Politica e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche


La GP-UH332 è destinata all'utilizzo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Assicurarsi che questo prodotto venga utilizzato nell'ambiente seguente.

| Test di immunità | IEC 60601 Livello del test | Livello di conformità | Ambiente elettromagnetico - Politica |
|--|---|---|--|
| Immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2 | ±6 kV, a contatto ±8 kV, in aria | ±6 kV, a contatto ±8 kV, in aria | Il materiale del pavimento dovrebbe essere legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se il materiale del pavimento è ricoperto da una sostanza sintetica, si prevede che l'umidità relativa sia del 30 % o superiore. |
| Transitori veloci cavo di alimentazione/cavo del segnale Immunità burst IEC 61000-4-4 | ±2 kV per alimentazione CA ±1 kV per linea del segnale | ±2 kV per alimentazione CA ±1 kV per linea del segnale | Utilizzare alimentazione elettrica standard per uso commerciale o dedicata per ambiente ospedaliero. |
| Immunità surge IEC 61000-4-5 | ±1 kV, da linea a linea ±2 kV, da linea a terra | ±1 kV, da linea a linea ±2 kV, da linea a terra | Utilizzare alimentazione elettrica standard per uso commerciale o dedicata per ambiente ospedaliero. |
| Immunità a cali di tensione/ brevi interruzioni/ fluttuazione di tensione IEC 61000-4-11 | < 5 % U_T (Calo > 95 %, in U_T) Per 0,5 cicli 40 % U_T (Calo 60 %, in U_T) Per 5 cicli 70 % U_T (Calo 30 %, in U_T) Per 25 cicli < 5 % U_T (Calo > 95 %, in U_T) 5 secondi | < 5 % U_T (Calo > 95 %, in U_T) Per 0,5 cicli 40 % U_T (Calo 60 %, in U_T) Per 5 cicli 70 % U_T (Calo 30 %, in U_T) Per 25 cicli < 5 % U_T (Calo > 95 %, in U_T) 5 secondi | Utilizzare alimentazione elettrica standard per uso commerciale o dedicata per ambiente ospedaliero. In caso di utilizzo della GP-UH332 mentre si verificano interruzioni di corrente, si consiglia di utilizzare un gruppo di continuità (UPS) o delle batterie per fornire alimentazione alla GP-UH332. |
| Immunità a campi magnetici a frequenza di rete IEC 61000-4-8 | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | 3 A/m (r.m.s.) (50/60 Hz) | Il campo magnetico a frequenza di rete deve mantenere il livello caratteristico misurato in un ambiente standard adibito ad uso commerciale o ospedaliero. |

Nota: U_T rappresenta la tensione di alimentazione CA prima dell'applicazione del livello di test.

Politica e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche

La GP-UH332 è destinata all'utilizzo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Assicurarsi che questo prodotto venga utilizzato nell'ambiente seguente.

| Test di immunità | IEC 60601 Livello del test | Livello di conformità | Ambiente elettromagnetico - Politica |
|--|--|-------------------------------|---|
| Immunità a disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) Da 150 kHz a 80 MHz | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) | Non utilizzare un dispositivo di comunicazione wireless mobile o portatile in condizioni dove non è garantita la distanza di separazione raccomandata da ciascun componente della GP-UH332 compresi i cavi. La distanza deve essere calcolata in base alla formula corrispondente a ciascuna frequenza del dispositivo. Distanza di separazione raccomandata $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ da 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ da 800 MHz a 2,5 GHz |
| Immunità a campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) Da 80 MHz a 2,5 GHz | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) | P rappresenta l'uscita massima nominale del dispositivo di trasmissione e vengono utilizzati i watt (W) come unità. Per la distanza di separazione d vengono utilizzati i metri (m). L'intensità del campo elettromagnetico del dispositivo a radiofrequenza fisso deve essere determinata mediante ispezione sul posto*1. Tuttavia, dovrebbe scendere al di sotto del livello di conformità per ciascuna gamma di radiofrequenza*2. Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi con il simbolo seguente.  |

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, verrà applicata la gamma di frequenza più alta.

Nota 2: La precedente politica può non risultare applicabile in tutte le situazioni.

Assorbimento o riflessione da parte di edifici, oggetti e persone influiscono sulla propagazione dell'energia elettromagnetica.

*1 L'intensità del campo elettromagnetico del trasmettitore radio fisso, come stazioni base di telefoni senza filo, stazioni mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM/FM e trasmissioni TV, non può essere presunta correttamente. Per poter valutare l'ambiente elettromagnetico in relazione al trasmettitore radio fisso, è necessario condurre un'ispezione sul posto. Se l'intensità elettromagnetica misurata per la GP-UH332 supera il livello di conformità descritto sopra, verificare il funzionamento regolare della GP-UH332. Se si riscontra qualsiasi comportamento anomalo, è necessario ricollocare la GP-UH332 o adottare altre misure di alleggerimento.

*2 Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità di campo deve essere inferiore a 3 V/m.

Specifiche riguardanti la sicurezza in ambiente medico

- La modalità operativa è “Funzionamento continuo”.
- Tenere presente che questo prodotto è classificato in CLASSE I quando utilizzato con l’adattatore CA.
- Per evitare il pericolo di scosse elettriche, collegare questo prodotto soltanto a una fonte di alimentazione (commerciale) dotata di messa a terra di protezione.
- Poiché tutti i dispositivi periferici collegati alla parte di ingresso del segnale o alla parte di uscita del segnale costituiscono un sistema medicale, ne derivano la responsabilità e l’obbligo di fare in modo che l’intero sistema soddisfi gli standard richiesti dalla normativa IEC60601-1 Clausola 16.
Non toccare contemporaneamente uno qualsiasi di questi connettori e un paziente.
- Rivolgersi al proprio rivenditore, installatore o al supporto clienti riportato nel Manuale di istruzioni per l’installazione.
- Non installare questo prodotto in una posizione in cui è difficile estrarre il cavo di alimentazione.
- Utilizzare spina di alimentazione principale e CAVO DI ALIMENTAZIONE di “Grado Ospedaliero” in conformità alle norme ANSI/AAMI ES60601-1 (per gli Stati Uniti)/CAN/CSA-C22.2 No.60601-1 (per il Canada).
- In alcune CONDIZIONI DI SINGOLO GUASTO, la temperatura del lato destro dell’involucro della CCU potrebbe surriscaldarsi e vi è un possibile RISCHIO di ustione se toccato.
- Qualora questo prodotto sia stato utilizzato per molti anni, è possibile che alcune parti possano essere deteriorate, il che può causare un malfunzionamento o provocare un incidente a seconda dell’ambiente di utilizzo, anche se in apparenza non c’è alcuna parte difettosa. Controllare quotidianamente la presenza di quanto segue.

Si riscontra uno qualsiasi di questi fenomeni?

- Emissione di fumo, odore di bruciato o suono anomalo.
- Il cavo di alimentazione, la spina di alimentazione o l’adattatore CA sono caldi in modo inusuale. C’è una crepa o una rottura.
- Si riceve una serie di scosse elettriche quando si tocca il prodotto.
- Non viene visualizzata alcuna immagine quando il prodotto è acceso.
- Viene emesso un suono anomalo dalla ventola. Oppure la ventola non gira.
- Si verifica un altro errore o danno insolito.

Interrompere immediatamente l’utilizzo di questo prodotto

Per prevenire danni a questo prodotto o un incidente, togliere l’alimentazione e chiedere l’ispezione o la rimozione di questo prodotto al proprio rivenditore o installatore.

Descrizione dei simboli grafici



Questo simbolo indica lo stato di accensione/spegnimento dell’alimentazione (ON/OFF). Lo stato ON/OFF è fisso.



Questo simbolo indica il terminale equipotenziale da utilizzare per rendere ciascuna parte del sistema equipotenziale.



Questo simbolo indica la corrente alternata (CA).



Questo simbolo indica la corrente continua (CC).



Questo simbolo rappresenta un avvertimento per la possibilità di surriscaldamento e un possibile RISCHIO di ustione se toccato.



Questo simbolo rappresenta un marchio di certificazione UL negli Stati Uniti.



Questo simbolo rappresenta una marcatura di conformità obbligatoria nello Spazio Economico Europeo (SEE).



Questo simbolo rappresenta una marcatura per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nello Spazio Economico Europeo (SEE).

- Parti opzionali
 - Testa della telecamera HD 3MOS : GP-UH332H
 - Cavo della telecamera UHD : GP-UC532G03 (3 m)
 - GP-UC532G06 (6 m)
 - GP-UC532G15 (15 m)
 - GP-UC532G03A (3 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)
 - GP-UC532G06A (6 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)
 - GP-UC532G15A (15 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)
- Adattatore CA : MPU60A-105-P49L10*
(Sinpro Electronics Co., Ltd.)

Indice

| | |
|--|-----|
| EMC (direttiva compatibilità elettromagnetica) per l'utilizzo di questo prodotto in ambiente medico..... | 187 |
| Specifiche riguardanti la sicurezza in ambiente medico | 190 |
| Istruzioni per la sicurezza importanti..... | 194 |
| Limitazione di responsabilità..... | 195 |
| Esonero dalla garanzia | 195 |
| Prefazione..... | 196 |
| Uso previsto | 196 |
| Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati..... | 196 |
| Precauzioni..... | 197 |
| Principali controlli operativi e loro funzioni..... | 199 |
| Testa della telecamera (optional)..... | 199 |
| Unità di controllo della telecamera (CCU)..... | 200 |
| Configurazione del sistema..... | 204 |
| Precauzioni per l'installazione | 205 |
| Metodo di installazione | 206 |
| Metodo di montaggio dell'obiettivo | 207 |
| Configurazione mediante il menu SETUP | 208 |
| Menu SETUP..... | 208 |
| Metodo di visualizzazione del menu | 210 |
| Operazioni di base | 211 |
| Ripristino delle impostazioni predefinite..... | 212 |
| MAINTENANCE MENU | 213 |
| Configurazione del profilo..... | 214 |
| EXPOSURE | 214 |
| ① Configurazione di AE [AE] | 214 |
| ② Impostazione dell'otturatore elettronico [SHUTTER] | 214 |
| ③ Configurazione della somma dei pixel [BINNING]..... | 215 |
| ④ Regolazione del guadagno [GAIN] | 215 |
| ⑤ Impostazione dell'esposizione lunga [LONG EXPOSURE] | 215 |
| ⑥ Impostazione dell'area di rilevamento della luminosità [AREA SELECTION]..... | 215 |
| ⑦ Impostazione della ponderazione del rilevamento della luminosità [PEAK/AVE LEVEL] | 217 |
| ⑧ Impostazione del guadagno della testa [HEAD GAIN] | 217 |
| PICTURE..... | 217 |
| ⑨ Impostazione del bilanciamento del bianco [WHITE BAL MODE] | 217 |
| ⑩ Impostazione dei dettagli [DETAIL BAND]..... | 218 |
| ⑪ Impostazione della funzione di riduzione del rumore digitale [DNR LEVEL] | 218 |
| ⑫ Regolazione del livello di spegnimento [PEDESTAL LEVEL] | 218 |
| ⑬ Impostazione della compensazione del flare [FLARE COMP]..... | 218 |
| ⑭ Regolazione del livello di colore [COLOR LEVEL] | 218 |
| ⑮ Regolazione della tinta [COLOR MATRIX] | 218 |
| CONTRAST | 220 |
| ⑯ Impostazione della modalità di correzione di gamma [GAMMA SELECT]..... | 220 |
| ⑰ Impostazione del livello della correzione di gamma [GAMMA VALUE] | 220 |
| ⑱ Impostazione della modalità knee [KNEE MODE] | 220 |
| ⑲ Impostazione del punto knee [KNEE POINT] | 220 |
| ⑳ Impostazione dell'inclinazione knee [KNEE SLOPE] | 220 |
| ㉑ Impostazione del tasto [IE] [IE FUNCTION SELECT] | 220 |
| ㉒ Impostazione del livello di correzione assegnato al tasto [IE] [IE FUNCTION LEVEL] | 221 |
| PROFILE | 221 |
| ㉓ Impostazione di ID ed etichetta del profilo utente [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]..... | 221 |
| ㉔ Configurazione dell'impostazione aggiuntiva per ciascuna modalità di cattura di immagini fluorescenti [FLUORESCENCE MODE]..... | 222 |

| | |
|--|-----|
| FUNC | 222 |
| ②5 Impostazione della funzione di capovolgimento verticale e orizzontale [FLIP AND MIRROR] | 222 |
| ②6 Impostazione della visualizzazione dello stato di capovolgimento verticale e orizzontale [F+M STATUS DISPLAY] ... | 223 |
| ②7 Visualizzazione delle barre colore [COLOR BAR] | 223 |
| ②8 Impostazione degli interruttori a pedale [FOOTSW CONTROL CH1/CH2] | 223 |
| ②9 Salvataggio/caricamento dei profili [USER PROFILE SAVE/LOAD] | 223 |
| ③0 Impostazione del metodo di salvataggio/caricamento per la memoria USB [SAVE/LOAD MODE (USB)] | 224 |
| ③1 Attivazione e disattivazione dello zoom [DIGITAL ZOOM] | 224 |
| ③2 Impostazione della visualizzazione del rapporto di zoom [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]..... | 224 |
| SYSTEM..... | 224 |
| ③3 Impostazione della posizione OSD dell'uscita video [OSD POSITION] | 224 |
| ③4 Impostazione del segnale di uscita HDMI [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH] | 224 |
| ③5 Impostazione del connettore di ingresso/uscita del segnale di sincronizzazione [G/L SYNC TERMINAL SETTING]... | 224 |
| ③6 Visualizzazione dello stato di sincronizzazione [G/L SYNC STATUS INFO] | 225 |
| ③7 Regolazione dell'orologio [TIME ADJUSTMENT] | 225 |
| ③8 Ripristino dell'impostazione predefinita del profilo [USER PROFILE RESET] | 225 |
| HEAD | 226 |
| ③9 Impostazione dell'ombreggiatura del bianco [WHITE SHADING] | 226 |
| ④0 Regolazione della posizione orizzontale/verticale dello schermo -[H/V PHASE ADJUST] | 226 |
| Correzione dei difetti di funzionamento..... | 227 |
| Dati tecnici..... | 228 |
| Accessori standard..... | 229 |
| Accessori opzionali | 229 |

Istruzioni per la sicurezza importanti

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Tener conto di tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare questa apparecchiatura vicino all'acqua.
- 6) Pulire soltanto con un panno asciutto.
- 7) Non bloccare alcuna fessura per la ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
- 8) Non installare vicino a qualsiasi fonte di calore come radiatori, valvole di regolazione del calore, stufe o altre apparecchiature (inclusi amplificatori) che producono calore.
- 9) Non vanificare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo per la messa a terra. La lama più larga o il terzo polo sono forniti per la sicurezza. Se la spina fornita non è adatta alla propria presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione in modo che non venga calpestato o pizzicato particolarmente presso le spine, le prese di corrente e nel punto dove fuoriesce dall'apparecchiatura.
- 11) Utilizzare soltanto accessori specificati dal produttore.
- 12) Utilizzare soltanto con il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o il piano specificati dal produttore o venduti con l'apparecchiatura. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione di carrello/apparecchiatura per evitare ferite causate da rovesciamenti.



- 13) Disinserire la spina di questa apparecchiatura durante i temporali con fulmini o quando non la si utilizza per lunghi periodi di tempo.
- 14) Per la manutenzione rivolgersi a personale di assistenza qualificato. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchiatura è stata danneggiata in qualsiasi modo, come ad esempio quando il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, è stato rovesciato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchiatura, l'apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è stata fatta cadere.

Limitazione di responsabilità

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI NESSUN GENERE, SIANO ESSE ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER QUALSIASI FINE PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI.

QUESTA PUBBLICAZIONE POTREBBE CONTENERE INESATTEZZE TECNICHE O ERRORI TIPOGRAFICI. MODIFICHE VENGONO AGGIUNTE ALLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE, IN QUALSIASI MOMENTO, PER IL MIGLIORAMENTO DI QUESTA PUBBLICAZIONE E/O DEL(-I) PRODOTTO(-I) CORRISPONDENTE(-I).

Esonero dalla garanzia

IN NESSUN CASO Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. DOVRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI ALCUNA PARTE O PERSONA, FATTA ECCEZIONE PER LA SOSTITUZIONE O LA MANUTENZIONE RAGIONEVOLE DEL PRODOTTO, NEI CASI, INCLUSI MA NON LIMITATI AI SEGUENTI:

- (1) QUALSIASI PERDITA O DANNO, INCLUSI SENZA LIMITAZIONE, QUELLI DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI, CONSEGUENTI O ESEMPLARI, DERIVATI O RELATIVI AL PRODOTTO;
- (2) QUALSIASI INCONVENIENTE, PERDITA O DANNO CAUSATO DALL'UTILIZZO SCORRETTO O DALL'ESECUZIONE NEGLIGENTE DI OPERAZIONI DA PARTE DELL'UTENTE;
- (3) SMONTAGGIO, RIPARAZIONE O MODIFICA NON AUTORIZZATI DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE;
- (4) INCONVENIENTI O QUALSIASI PERDITA DERIVATI DALLA MANCATA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI, DOVUTI A QUALSIASI MOTIVO O CAUSA INCLUSI QUALSIASI GUASTO O PROBLEMA DEL PRODOTTO;
- (5) QUALSIASI PROBLEMA, CONSEGUENTE INCONVENIENTE, PERDITA O DANNO DERIVATO DAL SISTEMA COMBINATO CON DISPOSITIVI DI TERZI;
- (6) QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O AZIONE LEGALE PER DANNI, AVVIATA DA QUALSIASI PERSONA O ORGANIZZAZIONE IN QUANTO SOGGETTO FOTOGENICO, A CAUSA DELLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY RISULTATA DAL FATTO CHE UNA CERTA IMMAGINE DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA, INCLUSI I DATI SALVATI, PER QUALCHE MOTIVO, VENGA RESA PUBBLICA O VENGA UTILIZZATA PER QUALSIASI SCOPO.

Prefazione

Questo sistema è un'unità di controllo per telecamera HD di tipo compatto e leggero (d'ora in poi chiamata CCU), in cui la testa della telecamera è montata separatamente ed è dotato di elevata qualità dell'immagine e molteplici funzioni grazie all'introduzione dell'elaborazione del segnale digitale.

- GP-UH332C Unità di controllo della telecamera HD

Questo prodotto viene utilizzato in combinazione con la testa della telecamera HD 3MOS opzionale (d'ora in poi chiamata testa della telecamera).

- GP-UH332H Testa della telecamera HD 3MOS
- È disponibile l'uscita multiformato con il supporto di 1080p e 1080i.
- Grazie ai connettori di uscita HDMI o SDI è stata ottenuta una trasmissione del segnale senza degradazione del segnale.
- La funzione WDR (gamma dinamica ampia) consente agli utenti di riprendere anche immagini con un'ampia gamma di contrasto della luminosità e facilitarne la visibilità.

Le descrizioni contenute in questo manuale sono basate su un sistema con la testa della telecamera.

Uso previsto

La telecamera con testa HD separata serie GP-UH332 di Panasonic ha raggiunto l'elevata risoluzione del Full HD (1920 x 1080), immagini in movimento fluide che supportano 60P e la riproduzione fedele del colore, destinati ad essere utilizzati per microscopi chirurgici o lampade a fessura. Questo prodotto non è progettato per l'utilizzo per il sistema endoscopico che potrebbe venire a contatto con i pazienti. Non è nemmeno progettato per essere utilizzato per prodotti medicali il cui guasto può provocare lesioni all'uomo o la perdita della vita o gravi danni alla proprietà.

Questo prodotto è compatibile con gli standard per le apparecchiature elettromedicali IEC60601-1 e IEC60601-1-2.

Per informazioni sulla registrazione di dispositivi medici locale, rivolgersi al proprio fornitore Panasonic locale.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica citati in questo testo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Precauzioni

Rivolgersi al rivenditore per i lavori di installazione.

I lavori di installazione richiedono tecnica ed esperienza. La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi, scosse elettriche, ferite o danni al prodotto. Non esitare a rivolgersi al rivenditore.

Eeguire correttamente il cablaggio.

Un cortocircuito o un cablaggio non corretto possono causare incendi o scosse elettriche.

Selezionare un'area di installazione che possa supportare il peso totale.

La selezione di una superficie di installazione non appropriata può causare la caduta o il rovesciamento del prodotto, procurando ferite.

Il lavoro di installazione deve essere iniziato dopo aver eseguito un sufficiente rinforzo.

Si devono compiere ispezioni periodiche.

La ruggine sulle parti metalliche o sulle viti può causare la caduta del prodotto e provocare ferite o incidenti. Rivolgersi al rivenditore per le ispezioni.

Spegnere questo prodotto quando lo si pulisce.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Interrompere immediatamente l'utilizzo se si verifica qualcosa di anomalo con questo prodotto.

Se fuoriesce fumo dal prodotto, proviene odore di fumo dal prodotto o si nota un deterioramento della parte esterna del prodotto, continuare ad utilizzarlo provocherà incendi, ferite o danni al prodotto.

Spegnere immediatamente il prodotto, quindi rivolgersi al proprio rivenditore.

Non intraprendere lavori di installazione e cablaggio mentre il prodotto è acceso.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche.

Non utilizzare questo prodotto in un ambiente infiammabile.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare un'esplosione e provocare ferite.

Evitare di installare questo prodotto in posizioni dove si verificano danni da sale o viene prodotto gas corrosivo.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare il deterioramento delle parti di montaggio e potrebbero verificarsi incidenti come la caduta di questo prodotto.

Non colpire o scuotere con forza questo prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi o ferite.

Non inserire nessun oggetto estraneo.

Non consentire la penetrazione di alcun oggetto estraneo o liquido, come acqua, una parte metallica, etc., in quanto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Se questo dovesse accadere, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa di corrente e rivolgersi al proprio rivenditore.

Non smontare o modificare questo prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche.

Rivolgersi al proprio rivenditore per ispezioni e riparazioni.

Durante le tempeste di fulmini (o durante i lavori di costruzione), non toccare questo prodotto, il cavo di alimentazione o i cavi collegati.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Evitare di collocare contenitori che contengono liquidi come acqua vicino a questo prodotto.

Se il liquido dovesse rovesciarsi su questo prodotto, si potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.

Se questo dovesse accadere, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa di corrente e rivolgersi al proprio rivenditore.

Non sfregare i bordi delle parti metalliche con le mani.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

[Precauzioni per l'utilizzo]

Per un utilizzo continuo con prestazioni stabili

Le parti di questo prodotto possono deteriorarsi e si può accorciare la durata della vita di questo prodotto quando lo si utilizza in posizioni soggette ad alte temperature e forte umidità.


Utilizzare questo prodotto a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe influire negativamente sui componenti interni o causare un cattivo funzionamento di questo prodotto. Si consiglia l'utilizzo di questo prodotto a temperature di 30 °C o inferiori, senza calore diretto da riscaldatori, tenendo in considerazione il rilascio di calore nella posizione del prodotto.

Maneggiare questo prodotto con cura.

Non far cadere questo prodotto e non procurare colpi o vibrazioni al prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare inconvenienti.

Non orientare questo prodotto verso fonti di luce forte.

Una fonte di luce, come un riflettore, potrebbe causare bagliori (dispersione di luce).

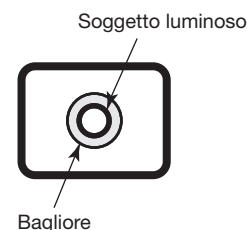

Batterie integrate

Le batterie sono installate in questo prodotto.
Non lasciare le batterie in ambienti dove può essere generato calore eccessivo dalla luce solare o in caso di incendio.

Allarme della ventola di raffreddamento

Quando viene visualizzato il messaggio di allarme della ventola di raffreddamento, togliere immediatamente l'alimentazione e contattare il proprio rivenditore.

Pulitura

- Spegnerne questo prodotto, quindi utilizzare un panno morbido per pulirlo.
Se la polvere è difficile da rimuovere, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente diluito e ben strizzato per strofinarlo.
Pulire poi il detergente rimasto con un panno asciutto.
- Non utilizzare detergenti forti o abrasivi quando si pulisce il corpo. È possibile utilizzare etanolo o alcool isopropilico per la testa della telecamera e la CCU. Tuttavia, non possono essere utilizzati per il cavo della telecamera.
- Quando si utilizza un panno chimico per la pulitura, leggere le precauzioni fornite con il panno chimico.

Etichetta di indicazione


Far riferimento all'etichetta di indicazione sulla parte inferiore o superiore di questo prodotto per la classificazione e l'alimentazione dell'apparecchiatura, etc.

Memoria USB

- Utilizzare una memoria USB compatibile con USB2.0.
- Per mantenere lettura/scrittura ad alta velocità, eseguire "ScanDisk" o "CheckDisk" con un PC con sistema operativo Microsoft® Windows®.
- FAT32 è supportato. Utilizzare una memoria USB con una capacità di 32 GB o inferiore. Una USB in un formato crittografato non è supportata.
- La memoria USB non può essere formattata con la CCU.

Questo prodotto è progettato per utilizzi normali come una generale apparecchiatura elettronica.
L'utilizzo del prodotto per scopi particolari (quali traffico, trasporto e trattamenti medici) senza adottare le necessarie procedure secondo le normative relative al proprio paese o al proprio campo sotto la propria responsabilità potrebbe essere vietato.

Testa della telecamera (optional)

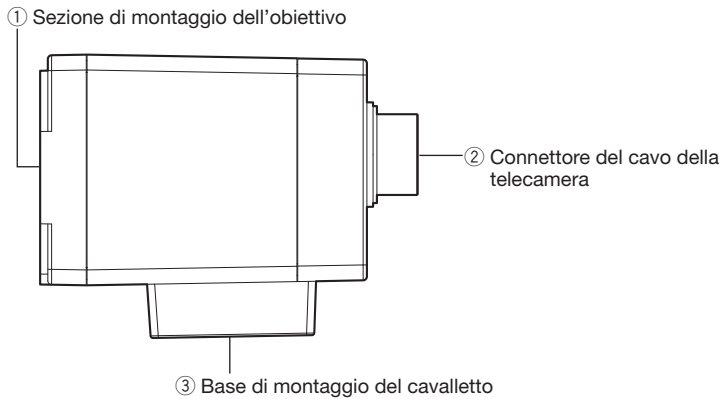

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di aver spento la CCU prima di collegare o scollegare il cavo della telecamera.
- Evitare di piegare eccessivamente o rompere il cavo della telecamera.
- Utilizzare soltanto la testa della telecamera specifica.

① Sezione di montaggio dell'obiettivo

Su questa sezione viene montato un obiettivo con attacco C. (☞ Pagina 207)

② Connettore del cavo della telecamera

Connettore per il cavo della telecamera (optional)

<Cavo della telecamera>

GP-UC532G03 (3 m)

GP-UC532G06 (6 m)

GP-UC532G15 (15 m)

GP-UC532G03A (3 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)

GP-UC532G06A (6 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)

GP-UC532G15A (15 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)


③ Base di montaggio del cavalletto

Il foro dell'attacco del cavalletto viene utilizzato quando si fissa la testa della telecamera sul cavalletto.

Foro dell'attacco del cavalletto: 1/4-20 UNC

Unità di controllo della telecamera (CCU)


<Parte anteriore>

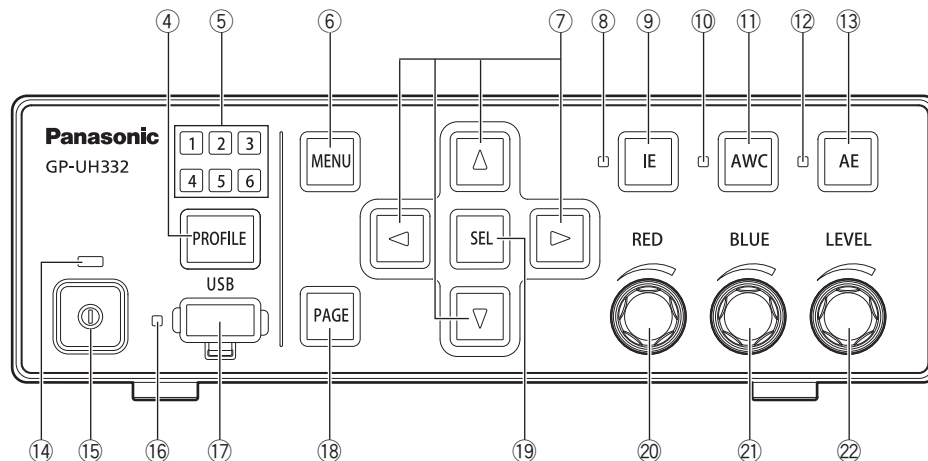

- ④ **Tasto di selezione del profilo [PROFILE]**
 Selezione un profilo da 1 a 6. Ciascun profilo deve essere impostato anticipatamente utilizzando il menu SETUP (☞ pagina 214).
- ⑤ **Lampadina di selezione del profilo [1/2/3/4/5/6] (Verde)**
 Il numero del profilo selezionato si accenderà di colore verde.
- ⑥ **Tasto del menu [MENU]**
 Quando si preme il tasto per più di 1 secondo, verrà visualizzato il menu SETUP (ADVANCED MENU). Quando si preme il tasto mentre è visualizzato il menu SETUP, verrà visualizzato un livello superiore del MENU. Il menu SETUP può essere nascosto premendo il pulsante per più di 1 secondo.
 Premendo questo tasto in casi diversi da quando è visualizzato il menu SETUP, verrà attivata la funzione di fermo immagine.
- ⑦ **Tasti Su/Giù/Sinistra/Destra [Δ/∇/◀/▶]**
- **Tasto Su [Δ]/Tasto Giù [∇]**
 Cambia l'elemento di impostazione selezionato mentre è visualizzato il menu SETUP.
 Quando si preme mentre è visualizzato qualcosa di diverso dal menu SETUP, verrà commutata l'impostazione di "FLIP AND MIRROR". (☞ pagina 222)
 - **Tasto Destra [▶]/Tasto Sinistra [◀]**
 Sposta il cursore oppure cambia il contenuto dell'elemento di impostazione mentre è visualizzato il menu SETUP.
 Quando si preme mentre è visualizzato qualcosa di diverso dal menu SETUP, verrà commutato il rapporto di zoom di "DIGITAL ZOOM". (☞ pagina 224)
- ⑧ **Lampadina di stato di IE (Verde)**
 Indica lo stato On/Off della funzione IE (IMAGE ENHANCEMENT).
 On: La funzione IE è attivata.
 Off: La funzione IE è disattivata.
- ⑨ **Tasto IE [IE]**
 Attiva/disattiva la funzione IE.
- ⑩ **Lampadina di stato di AWC (Arancione)**
 Indica lo stato della funzione AWC (Controllo automatico del bilanciamento del bianco).
 Off: AWC è disattivato.
 Lampeggiante: AWC è attivato o in esecuzione.
 Lampeggiante → Off: Successo di AWC
 On: Errore di AWC
- ⑪ **Tasto AWC [AWC]**
 Se "WHITE BAL MODE" nel menu SETUP è impostato su "AWC", AWC verrà avviato quando si preme il tasto mentre sono visualizzate le immagini della telecamera.
-
- IMPORTANTE:**
- Quando la testa della telecamera non è collegata, il tasto [AWC] non funziona.
-
- ⑫ **Lampadina di stato di AE (Verde)**
 Indica lo stato della modalità automatica/manuale di AE (Esposizione automatica).
 On: Esposizione automatica
 Off: Esposizione manuale
- ⑬ **Tasto AE [AE]**
 Alterna la modalità automatica/manuale della funzione AE.
- ⑭ **Lampadina di stato dell'alimentazione (Verde)**
 Indica lo stato On/Off dell'alimentazione.
 On: Acceso
 Off: Spento
- ⑮ **Interruttore di alimentazione [Simbolo dell'interruttore]**
 Accende e spegne la CCU e la testa della telecamera.
- ⑯ **Lampadina di stato della USB (Verde)**
 Indica lo stato della USB.
 Lampeggiante: Accesso ai dati
 On: Installazione
 Off: Rimozione
- ⑰ **Connettore USB [USB]**
 Inserendo la memoria USB, si può eseguire SAVE/LOAD (salvataggio/caricamento) del profilo.

- ⑱ **Tasto di pagina [PAGE]**
Cambia pagina mentre è visualizzato il menu SETUP.
Quando si preme il tasto mentre è visualizzato qualcosa di diverso dal menu SETUP, verrà visualizzato il QUICK MENU.
- ⑲ **Tasto di selezione [SEL]**
Determina le impostazioni mentre è visualizzato il menu SETUP.
Quando si preme il tasto mentre è visualizzato qualcosa di diverso dal menu SETUP, verrà visualizzata la finestra "SETTING INFORMATION". Se lo si preme ancora una volta, verranno ripristinate le immagini della telecamera. Nella finestra "SETTING INFORMATION" sono visualizzate le impostazioni di "IE FUNCTION SELECT", "FOOTSW CONTROL CH1/CH2", "SAVE/LOAD MODE (USB)" e "VIDEO FORMAT (HDMI1/HDMI2/SDI1/SDI5)".
- ⑳ **Regolatore del rosso [RED]**
Regola l'offset sul guadagno del rosso del bilanciamento del bianco.
L'elemento selezionato verrà cambiato se la quantità viene modificata mentre è visualizzato il menu SETUP.
- ㉑ **Regolatore del blu [BLUE]**
Regola l'offset sul guadagno del blu del bilanciamento del bianco.
- ㉒ **Regolatore del livello [LEVEL]**
Regola il livello di luminosità.
Sposta il cursore oppure cambia il contenuto dell'elemento selezionato mentre è visualizzato il menu SETUP.

<Pannello posteriore>

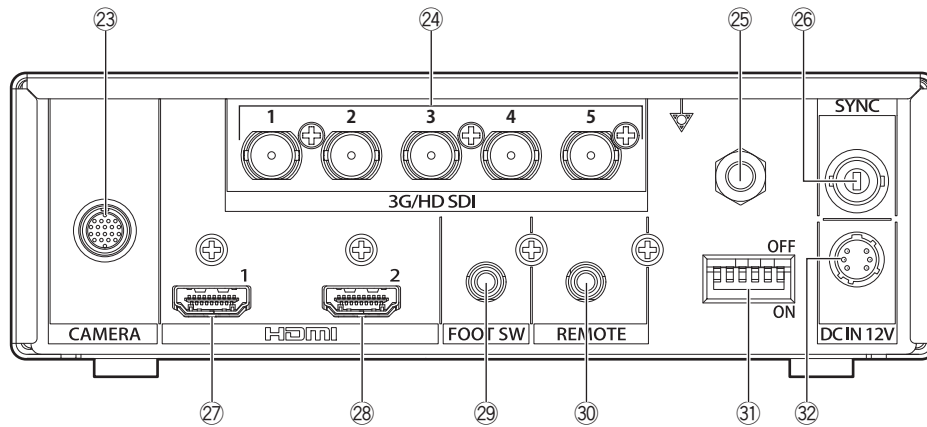

23 Connettore del cavo della telecamera [CAMERA]

Connettore per il cavo della telecamera (optional).
(☞ Pagina 229)

24 Connettori di uscita SDI [3G/HD SDI 1/2/3/4/5]

Connettore per l'uscita del segnale 3G-SDI o HD-SDI.

IMPORTANTE:

- Utilizzare un cavo di alta qualità compatibile con 3G-SDI o HD-SDI.

25 Connettore di equalizzazione del potenziale [Simbolo del potenziale]

Connettore per la messa a terra dell'equalizzazione del potenziale.

26 Connettore di ingresso/uscita del segnale di sincronizzazione [SYNC]

Connettore per l'ingresso o l'uscita del segnale di sincronizzazione esterna.

27 Connettore di uscita HDMI [HDMI 1]

Utilizzato per collegare un monitor dotato della funzione HDMI.

31 Commutatori di configurazione delle funzioni

Ognuno configura le funzioni di uscita video.
Il commutatore 1 seleziona la frequenza dei fotogrammi a 59,94 Hz/50 Hz.

| Commutatore | | | | | | Uscita SDI | Uscita HDMI |
|-------------|---|---|---|---|---|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ON | - | - | - | - | - | 59,94 Hz | 59,94 Hz |
| OFF | - | - | - | - | - | 50 Hz | 50 Hz |

I commutatori da 2 a 6 selezionano un formato video per il connettore di uscita SDI e il connettore di uscita HDMI.

| Commutatore | | | | | | Uscita SDI | Uscita HDMI |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| *1 | - | ON | ON | OFF | OFF | 1080p | 1080p |
| | - | OFF | OFF | OFF | OFF | 1080i | 1080i |

Se la selezione effettuata differisce da quanto sopra, verrà prodotto il formato indicato con *1.

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di commutare il commutatore di configurazione delle funzioni mentre non viene fornita alimentazione.

28 Connettore di uscita HDMI [HDMI 2]

Utilizzato per collegare un monitor dotato della funzione HDMI.

IMPORTANTE:

- Si consiglia di utilizzare cavi HDMI di Panasonic (optional).
- Utilizzare un monitor sul quale è visualizzato il logo HDMI.


29 Connettore dell'interruttore a pedale [FOOT SW]

Connettore per un interruttore a pedale.
(Minijack stereo ø3,5)




30 Connettore controllo remoto [REMOTE]

Connettore per il controllo esterno.
(Minijack stereo ø3,5)

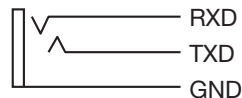


- ③ **Connettore di alimentazione 12 V CC [DC IN 12V]**
Connettore per alimentazione CC esterna superiore a
12 V CC (4 A o più).
Connettore compatibile (All'agosto 2017)
: HR10A-7P-6S(73)
prodotto da HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

**Disposizione dei pin del
connettore compatibile**

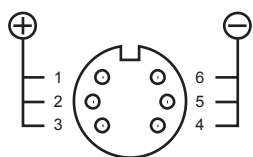

(Connettore del cavo)

Configurazione del sistema

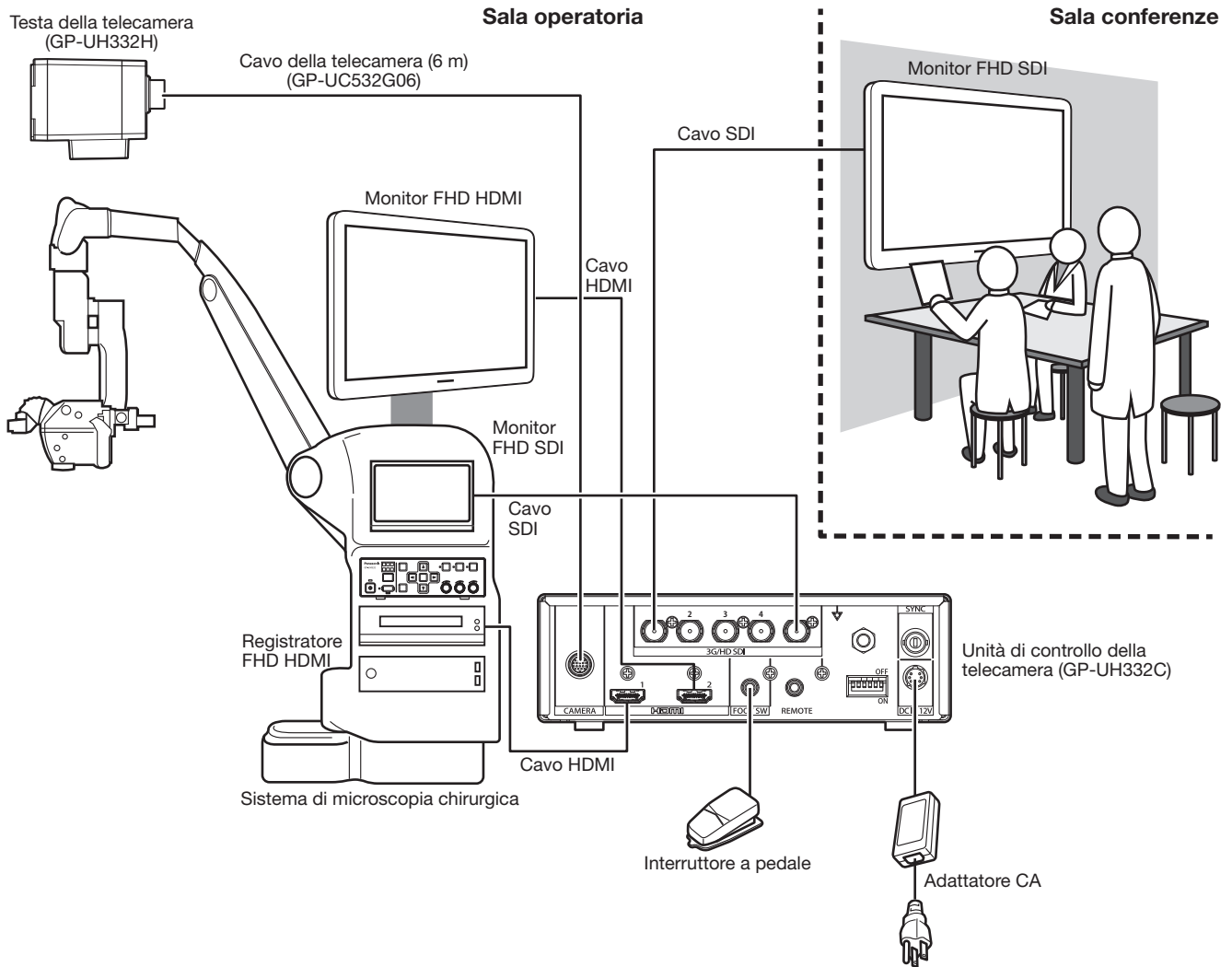

Cavo HDMI:
Utilizzare un cavo HDMI sul quale è apposto il logo HDMI. (Si consiglia un cavo HDMI di Panasonic.)

Cavo SDI:
Utilizzare un cavo SDI che supporta 3G-SDI e HD-SDI.

Precauzioni per l'installazione

Precauzioni:

- COLLEGARE ESCLUSIVAMENTE AD UN ALIMENTATORE CLASSE 2 A 12 V CC (UL 1310/CSA 223) o A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE LIMITATA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

L'installazione deve essere conforme alla normativa elettrica locale.

Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato all'interno.

Questo prodotto non è utilizzabile all'esterno.

Non esporre questo prodotto alla luce solare diretta per ore e non installare il prodotto vicino ad un riscaldatore o ad un condizionatore d'aria. Si potrebbe causare una caduta o un cattivo funzionamento. Tenere questo prodotto lontano da acqua e umidità.

Procurarsi separatamente un cavalletto.

Il cavalletto per il montaggio della testa della telecamera non è fornito. Predisporlo a seconda dell'area dove si deve installare la telecamera.

Tenere la CCU ad almeno 10 cm di distanza dalla parete circostante.

Se la CCU viene installata a contatto con la parete, il rilascio di calore viene bloccato e questo può provocare un malfunzionamento.

Evitare posizioni umide o polverose per l'installazione di questo sistema.

In caso contrario, si può accorciare la durata della vita delle parti interne.

Evitare l'installazione o l'utilizzo di questo sistema nelle seguenti posizioni:

- Posizioni dove si può bagnare a causa di pioggia o schizzi d'acqua
- Posizioni dove viene utilizzato un agente chimico quali una piscina
- Posizioni soggette a umidità, polvere, vapore e fumi oleosi
- Posizioni dove vengono generate radiazioni, raggi X, forti onde radio o un forte campo magnetico
- Posizioni dove vengono prodotti gas corrosivi
- Posizioni dove la temperatura non è compresa tra 0 °C e 40 °C
- Posizioni soggette a vibrazioni (Questo prodotto non è progettato per l'utilizzo su veicoli.)
- Posizioni dove la temperatura può variare rapidamente, quali aree in prossimità delle bocchette di uscita dell'aria dei condizionatori o porte che danno all'esterno

Interferenza radio


Le immagini possono essere distorte vicino ad antenne trasmettenti per segnali di trasmissione televisiva o radiofonica, oppure campi elettrici o magnetici (causati ad esempio da un motore e un trasformatore).

Accertarsi di rimuovere questo prodotto se non lo si sta utilizzando.

Metodo di installazione

Quanto segue illustra come montare la telecamera sul cavalletto (procuratosi localmente).

<Esempio di montaggio della telecamera su cavalletto>

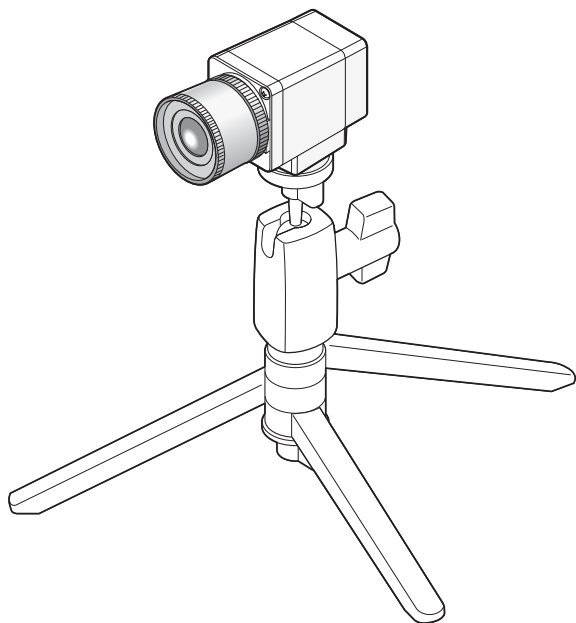


IMPORTANTE:

- Il cavalletto e la CCU devono essere posizionati orizzontalmente.
 - La CCU deve essere posizionata orizzontalmente. Non posizionare l'unità in posizione verticale o inclinata.
-

Metodo di montaggio dell'obiettivo


IMPORTANTE:

- Si deve utilizzare un obiettivo la cui sporgenza della sezione di attacco dell'obiettivo è di 4 mm o inferiore.
- L'apertura dell'obiettivo consigliata va da F4.0 a F16. La selezione di un'apertura dell'obiettivo inferiore a F4.0 può avere come risultato la sfocatura dell'immagine.
- Quando si utilizza un obiettivo zoom, il metodo di regolazione della messa a fuoco varia a seconda dell'obiettivo. Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni dell'obiettivo da utilizzare.
- Quando si rimuove l'obiettivo, assicurarsi di mettere il coperchietto sulla sezione dell'attacco dell'obiettivo della testa della telecamera.

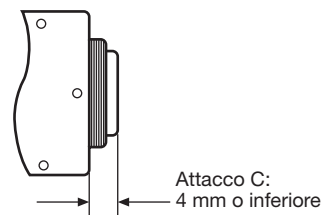


Passaggio 1

Rimuovere il coperchietto dalla sezione dell'attacco dell'obiettivo della testa della telecamera.

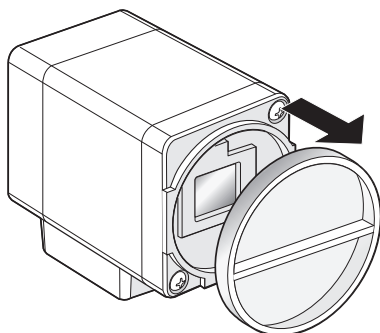

Passaggio 2

Ruotare in senso orario un obiettivo con attacco C per innestare l'obiettivo sulla sezione dell'attacco dell'obiettivo.

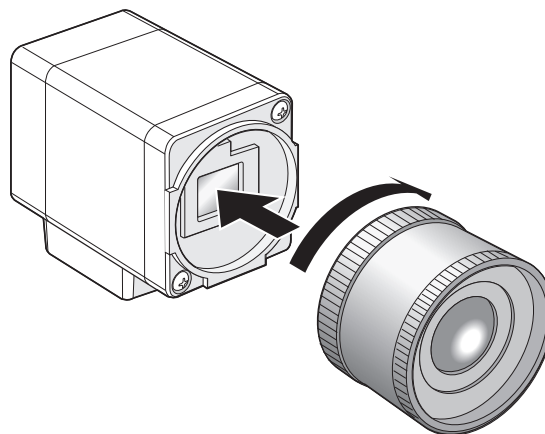

IMPORTANTE:

- Controllare per vedere se la superficie del filtro ottico è pulita prima di montare un obiettivo. Se la superficie fosse sporca, utilizzare una pompetta ad aria con pennello generica per macchine fotografiche per rimuovere la polvere.

Obiettivi consigliati (riferimento/all'agosto 2017)

| Produttore | Nome del prodotto | Modello |
|------------|--|--|
| FUJIFILM | Obiettivo per telecamere con 3CCD/CMOS | TF2.8DA-8 TF4DA-8 TF8DA-8B TF15DA-8 |

Configurazione mediante il menu SETUP


Configurare ciascun elemento nel menu SETUP prima dell'utilizzo di questa unità. Eseguire le impostazioni conformemente alle condizioni dell'area di ripresa della telecamera.

Nota:

- In aggiunta al menu SETUP, questo sistema ha un menu semplificato (menu QUICK) che viene visualizzato utilizzando il tasto [PAGE] sulla parte anteriore della CCU. Far riferimento a pagina 211 per ulteriori informazioni circa il menu QUICK.

Menu SETUP

I menu di configurazione consistono di tre menu, "QUICK MENU", "ADVANCED MENU" e "MAINTENANCE MENU".

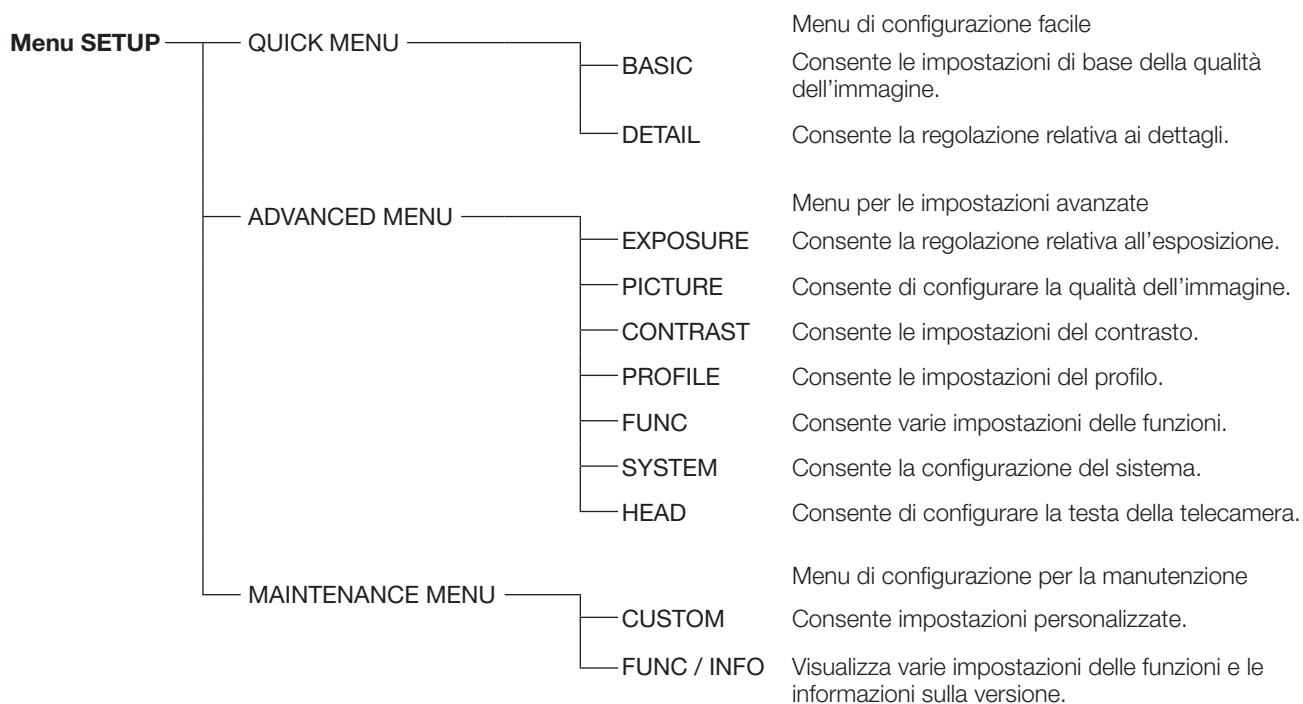

Gli elementi seguenti possono essere impostati nell'ADVANCED MENU.

| Elemento di configurazione | Descrizione | Pagina |
|----------------------------|--|--------|
| EXPOSURE | | |
| ① AE | Configura AE (Esposizione automatica). | 214 |
| ② SHUTTER | Imposta la velocità dell'otturatore elettronico. | 214 |
| ③ BINNING | Imposta la modalità di somma dei pixel. | 215 |
| ④ GAIN | Imposta il guadagno. | 215 |
| ⑤ LONG EXPOSURE | Imposta l'esposizione lunga. | 215 |
| ⑥ AREA SELECTION | Imposta l'area di rilevamento della luminosità di "AE", "GAIN" e "SHUTTER". | 215 |
| ⑦ PEAK/AVE LEVEL | Imposta la ponderazione per picco e media per l'elaborazione del rilevamento della luminosità. | 217 |
| ⑧ HEAD GAIN | Imposta il guadagno della testa. | 217 |
| PICTURE | | |
| ⑨ WHITE BAL MODE | Imposta il bilanciamento del bianco. | 217 |
| ⑩ DETAIL BAND | Imposta i dettagli. | 218 |
| ⑪ DNR LEVEL | Imposta il livello di riduzione del rumore digitale. | 218 |
| ⑫ PEDESTAL LEVEL | Regola il livello di spegnimento. | 218 |
| ⑬ FLARE COMP | Imposta la compensazione del flare. | 218 |

| Elemento di configurazione | Descrizione | Pagina |
|--|--|--------|
| ⑭ COLOR LEVEL | Imposta il livello di colore complessivo. | 218 |
| ⑮ COLOR MATRIX | Imposta varie tinte. | 218 |
| CONTRAST | | |
| ⑯ GAMMA SELECT | Imposta la modalità di correzione di gamma. | 220 |
| ⑰ GAMMA VALUE | Imposta il livello di correzione di gamma. | 220 |
| ⑱ KNEE MODE | Imposta la modalità knee. | 220 |
| ⑲ KNEE POINT | Imposta il punto knee. | 220 |
| ⑳ KNEE SLOPE | Imposta l'inclinazione knee. | 220 |
| ㉑ IE FUNCTION SELECT | Assegna una funzione al tasto [IE] (IMAGE ENHANCEMENT). | 220 |
| ㉒ IE FUNCTION LEVEL | Imposta il livello di correzione selezionato con IE. | 221 |
| PROFILE | | |
| ㉓ USER PROFILE ID USER PROFILE LABEL | Imposta il titolo identificativo della telecamera. Imposta i titoli delle etichette dei profili da 1 a 6 da visualizzare. | 221 |
| ㉔ FLUORESCENCE MODE | Configurazione dell'impostazione aggiuntiva per ciascuna modalità di cattura di immagini fluorescenti. | 222 |
| FUNC | | |
| ㉕ FLIP AND MIRROR | Imposta il capovolgimento verticale o orizzontale dell'immagine. | 222 |
| ㉖ F+M STATUS DISPLAY | Imposta la visualizzazione dello stato di capovolgimento verticale e orizzontale dell'immagine. | 223 |
| ㉗ COLOR BAR | Imposta la visualizzazione delle barre colore. | 223 |
| ㉘ FOOTSW CONTROL CH1 FOOTSW CONTROL CH2 | Assegna una funzione all'interruttore a pedale 1. Assegna una funzione all'interruttore a pedale 2. | 223 |
| ㉙ USER PROFILE SAVE / LOAD | Salva i profili sulla memoria USB / Carica i profili dalla memoria USB | 223 |
| ㉚ SAVE / LOAD MODE (USB) | Imposta il metodo di salvataggio/caricamento per la memoria USB. | 224 |
| ㉛ DIGITAL ZOOM | Imposta l'attivazione dello zoom elettronico. | 224 |
| ㉜ DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | Imposta la visualizzazione del rapporto di zoom elettronico. | 224 |
| SYSTEM | | |
| ㉝ OSD POSITION | Imposta la posizione OSD dell'uscita video. | 224 |
| ㉞ HDMI1 COLOR DEPTH HDMI2 COLOR DEPTH | Imposta l'intensità di colore di HDMI1. Imposta l'intensità di colore di HDMI2. | 224 |
| ㉟ G/L SYNC TERMINAL SETTING | Imposta il connettore di ingresso/uscita del segnale di sincronizzazione. | 224 |
| ㊱ G/L SYNC STATUS INFO | Visualizza lo stato del connettore di sincronizzazione esterna. | 225 |
| ㊲ TIME ADJUSTMENT | Regola l'orologio. | 225 |
| ㊳ USER PROFILE RESET | Ripristina le impostazioni predefinite del profilo. | 225 |
| HEAD | | |
| ㊴ WHITE SHADING | Imposta l'ombreggiatura del bianco. | 226 |
| ㊵ H/V PHASE ADJUST | Imposta le fasi orizzontale/verticale. | 226 |

Metodo di visualizzazione del menu

La descrizione seguente spiega come visualizzare ciascun menu SETUP sul monitor collegato.

QUICK MENU

Ruotare i regolatori [RED], [BLUE], [LEVEL]. Se si preme il tasto [PAGE] per più di 2 secondi, verrà visualizzata la pagina principale dell'QUICK MENU.

Il QUICK MENU ha due pagine. Per cambiare pagina, premere il tasto [PAGE].

Per cambiare profilo tra i sei disponibili, premere il tasto [PROFILE].

ADVANCED MENU

Se si preme il tasto [MENU] per più di 1 secondo, verrà visualizzata la pagina principale dell'ADVANCED MENU.

L'ADVANCED MENU ha sette pagine. Per cambiare pagina, premere il tasto [PAGE] o spostare il cursore sulla linguetta nella parte inferiore della pagina e premere il tasto [◀] o [▶].

Per cambiare profilo tra i sei disponibili, premere il tasto [PROFILE].

MAINTENANCE MENU

La pagina principale del MAINTENANCE MENU verrà visualizzata se si accende il sistema mentre si tengono premuti simultaneamente i tasti [MENU] e [SEL].

Il MAINTENANCE MENU ha due pagine. Per cambiare pagina, premere il tasto [PAGE] o spostare il cursore sulla linguetta nella parte inferiore del menu e premere il tasto [◀] o [▶].

Operazioni di base


IMPORTANTE:

- Le seguenti funzioni non sono disponibili quando non è collegata la testa della telecamera:
 - Avvio AWC per WHITE BAL MODE
 - FLIP AND MIRROR
 - WHITE SHADING
 - COLOR MATRIX
 - FREEZE
 - H/V PHASE ADJUST
 - DIGITAL ZOOM
- Per gli elementi del MAINTENANCE MENU, rivolgersi al proprio rivenditore.


La descrizione seguente spiega essenzialmente come utilizzare il QUICK MENU.

Pagina principale del QUICK MENU


Pagina BASIC (WB RED GAIN)

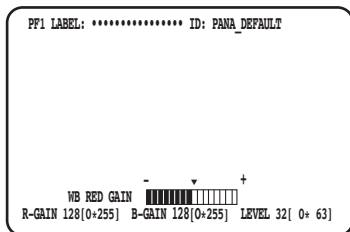


Pagina BASIC (WB BLUE GAIN)

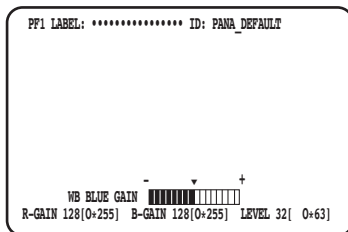

Pagina BASIC (AE LEVEL)

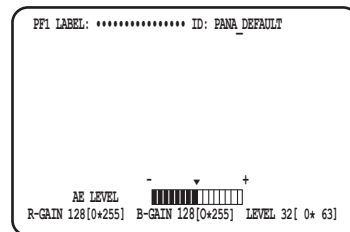

Pagina DETAIL

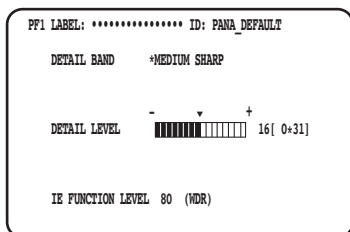

Passaggio 1

Pagina BASIC

Configurare ciascun elemento.

- WB RED GAIN**
Ruotare il regolatore [RED] per regolare il livello del rosso.
- WB BLUE GAIN**
Ruotare il regolatore [BLUE] per regolare il livello del blu.
- AE LEVEL**
Ruotare il regolatore [LEVEL] per regolare la luminosità.

Pagina DETAIL

Si passerà alla pagina DETAIL quando si preme il tasto [PAGE] mentre è visualizzata la pagina BASIC.

- DETAIL BAND**
Ruotare il regolatore [RED] per regolare la banda di correzione dei contorni.
- DETAIL LEVEL**
Ruotare il regolatore [BLUE] per regolare il livello di correzione dei contorni.
- IE FUNCTION LEVEL**
Ruotare il regolatore [LEVEL] per regolare il livello della funzione IE selezionata.

Passaggio 2

Se si interrompe l'operazione per 4 secondi, il contenuto della configurazione verrà salvato e verrà ripristinata l'immagine della telecamera.

La descrizione seguente spiega essenzialmente come utilizzare l'ADVANCED MENU.

Pagina principale dell'ADVANCED MENU

Pagina EXPOSURE

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| AE | *AUTO LEVEL 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Pagina PICTURE

| | |
|--|--------------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| WHITE BAL MODE | *AMC R-GAIN 128[0*255] |
| | B-GAIN 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP LEVEL 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] |
| FLARE COMP | OFF |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] |
| COLOR MATRIX | *USER |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Pagina CONTRAST

| | |
|--|-----------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35*0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0*15] |
| KNEE SLOPE | 3[0*7] |
| IE FUNCTION SELECT | WDR |
| | LEVEL 80[0*255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Pagina PROFILE

| | |
|--|------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| USER PROFILE | |
| USER PROFILE ID | *OFF |
| USER PROFILE LABEL | *OFF |
| FLUORESCENCE MODE | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Pagina FUNC

| | |
|--|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+H STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1→2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Pagina SYSTEM

| | |
|--|-------------|
| OSD POSITION | UPPER LEFT |
| HDMI1 COLOR DEPTH | YpCbPr(422) |
| HDMI2 COLOR DEPTH | YpCbPr(422) |
| G/L SYNC TERMINAL SETTING | OUT |
| G/L SYNC STATUS INFO | INTERNAL |
| *TIME ADJUSTMENT | |
| *USER PROFILE RESET | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Pagina HEAD

| | |
|--|-----------|
| WHITE SHADING | AUTO(SET) |
| H/V PHASE ADJUST H | 0[-20*20] |
| V | 0[-11*11] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Passaggio 1

Configurare ciascun elemento.

- Selezione dell'elemento da impostare
Spostare il cursore ruotando il regolatore [RED] o premendo il tasto [Δ] o [▽].
- Modifica dell'elemento impostato
Ruotare il regolatore [LEVEL] o premere il tasto [◀] o [▶].
- Visualizzazione della pagina di configurazione avanzata
Premere il tasto [SEL] per l'elemento con l'indicazione “*”.
- Ritorno alla pagina di configurazione di livello superiore
Premere il tasto [MENU].

Nota:

- Il cursore è una parte lampeggiante.
In questo documento è indicato con “Ombreggiato”.

Passaggio 2

Premere il tasto [MENU] per 1 o più secondi dopo aver salvato il contenuto della configurazione per chiudere la pagina di configurazione e ritornare all'immagine della telecamera. Il contenuto della configurazione verrà conservato anche dopo lo spegnimento della CCU.

Ripristino delle impostazioni predefinite

- Per ripristinare ciascuna impostazione nel menu SETUP alla regolazione predefinita, spostare il cursore sull'elemento da modificare e tenere premuti simultaneamente i tasti [◀] e [▶] per 1 o più secondi.
- Per ripristinare l'impostazione iniziale di tutti i profili, utilizzare [USER PROFILE RESET], (☞ pagina 225)
- Per ripristinare l'impostazione iniziale solo del profilo selezionato, premere il tasto [PROFILE] per più di 1 secondo.
- Per ripristinare l'impostazione iniziale di tutti gli elementi su ciascuna pagina del “ADVANCED MENU”, spostare il cursore sulla linguetta nella parte inferiore della pagina e tenere premuti simultaneamente i tasti [◀] e [▶] per 1 o più secondi.

MAINTENANCE MENU

Per dettagli e per come utilizzare il MAINTENANCE MENU, rivolgersi al proprio rivenditore.

| Elementi di configurazione | Linee generali |
|-------------------------------|---|
| CUSTOM | |
| OSD OUTPUT SEL (HDMI) | Imposta la visualizzazione OSD dell'uscita HDMI. |
| OSD OUTPUT SEL (SDI) | Imposta la visualizzazione OSD dell'uscita SDI. |
| OSD CHARACTER MODE | Specifica il formato dei caratteri dell'OSD. |
| KEY BIND (MENU) | Assegna una funzione al tasto [MENU]. |
| KEY BIND (↑↓) | Assegna una funzione ai tasti [Δ] e [∇]. |
| KEY BIND (←→) | Assegna una funzione al tasto [◀][▶]. |
| FUNC / INFO | |
| BLEMISH COMP | Imposta la compensazione delle imperfezioni. |
| BLACK BAL | Imposta il bilanciamento del nero. |
| CABLE DIAG MODE | Diagnostica la qualità del cavo della telecamera. |
| DIPSW STATUS | Indica lo stato di impostazione di DIPSW. |
| FPGA STATUS | Visualizza la temperatura di FPGA. |
| ALL RESET | Ripristina tutte le impostazioni predefinite. |
| CPU VER. (MAIN / SUB) | Visualizza la versione della CPU. |
| FPGA VER. (FRONT/REAR) | Visualizza la versione di FPGA (CCU). |
| HEAD VER. | Visualizza la versione di FPGA (TESTA) e il tipo di telecamera. |

Nota:

- [ALL RESET] non inizierà quanto segue:
[HEAD GAIN], [WHITE SHADING], [H/V PHASE ADJUST] nell'ADVANCED MENU e [BLEMISH COMP] nel MAINTENANCE MENU.

Configurazione del profilo

Se dettagli, gamma, tinta, etc. vengono registrati come profilo in base a un sito di installazione, l'utente può richiamare i contenuti registrati premendo semplicemente il tasto [PROFILE] sul pannello anteriore della CCU.

Si possono registrare fino a 6 profili. L'impostazione appropriata per la cattura di immagini fluorescenti è preimpostata in PROFILE 5 e PROFILE 6.

La registrazione può essere effettuata sulla pagina principale dell'ADVANCED MENU. La pagina del profilo consiste di quattro pagine. Il numero del profilo verrà visualizzato sulla parte superiore sinistra della pagina del profilo corrispondente.

I caratteri specificati in "USER PROFILE LABEL" verranno visualizzati in "LABEL" (☞ pagina 221). La configurazione iniziale di PROFILE da 1 a 4 è vuota.

Pagina EXPOSURE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO    LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO    LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Pagina PICTURE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE *AWC    R-GAIN 128[ 0*255]
              B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND   *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL     5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP    OFF
COLOR LEVEL   160[ 0*255]
COLOR MATRIX  *USER
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Pagina CONTRAST

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT  S-CURVE
GAMMA VALUE   0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE     MANUAL
KNEE POINT    8[0*15]
KNEE SLOPE    3[0*7]

IE FUNCTION SELECT VDR
                LEVEL 80[0*255]
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Pagina PROFILE

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF

FLUORESCENCE MODE OFF
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Configurazione di EXPOSURE

① Configurazione di AE [AE]

La luminosità dell'immagine verrà regolata automaticamente se viene selezionato "AUTO" per AE (Esposizione automatica). Se si seleziona "MANUAL", la luminosità dell'immagine può essere regolata manualmente. Il livello di AE può essere impostato sulla pagina delle impostazioni avanzate.

La funzione AE regola la luminosità dell'immagine mediante il controllo di "GAIN" e "SHUTTER".

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO    LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO    LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

② Impostazione dell'otturatore elettronico [SHUTTER]

Selezionare la velocità dell'otturatore elettronico dalle seguenti: "AUTO", "MANUAL(FIX)", "MANUAL(VAL)"

Se si seleziona "MANUAL(FIX)", è possibile specificare la velocità dell'otturatore elettronico. Sono disponibili le seguenti velocità:

Quando la frequenza dei fotogrammi è 59,94 Hz: 1/60 (regolazione predefinita), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, * MANU

Quando la frequenza dei fotogrammi è 50 Hz: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, * MANU

Se si preme il tasto [SEL] dopo aver selezionato "* MANU", verrà visualizzata la pagina "SHUTTER" e sarà possibile eseguire la regolazione precisa della velocità dell'otturatore.

La gamma regolabile è da 10/1125 a 1124/1125.

Quando è selezionato "MANUAL" per "AE", la velocità dell'otturatore elettronico può essere regolata con precisione con il regolatore [LEVEL] selezionando [MANUAL(VAL)].

```

PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO    LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO      ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO    LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
    
```

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

```

** SHUTTER **

SHUTTER      MANU
MANU SET     1124/1125
    
```

Nota:

- Per configurare "SHUTTER", selezionare "MANUAL" per "AE". (☞ Pagina 214)
- Se si osserva sfarfallio sotto illuminazione fluorescente a 50 Hz, selezionando "1/100" per la velocità è possibile ridurre lo sfarfallio.

③ Configurazione della somma dei pixel [BINNING]

La sensibilità può essere migliorata sommando i pixel.

La modalità di somma dei pixel è selezionabile dalle seguenti:

- OFF : Disattiva la somma dei pixel.
- LINE MIX (regolazione predefinita) : Somma i pixel in direzione verticale. (La risoluzione verticale verrà deteriorata.)
- PIX MIX : Somma i pixel in direzione orizzontale. (La risoluzione orizzontale verrà deteriorata.)
- P/L MIX : Somma i pixel in direzione verticale e orizzontale.
(La risoluzione orizzontale e quella verticale verranno deteriorate.)

④ Regolazione del guadagno [GAIN]

Selezionare un'impostazione del controllo del guadagno dalle seguenti:

- OFF : Nessuna regolazione del guadagno
- AUTO (regolazione predefinita) : Regolazione automatica del guadagno
Verrà applicato il valore massimo consentito per la regolazione automatica.
- MANUAL(FIX) : Regolazione manuale del guadagno
Il guadagno sarà fissato sul valore dell'impostazione.
- MANUAL(VAL) : Regolare il guadagno manualmente con il regolatore [LEVEL] quando è selezionato "MANUAL" per "AE". Consente una regolazione più precisa di "MANUAL(FIX)".

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| AE | +AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | --- | --- |
| BINNING | LINE MIX | --- | --- |
| GAIN | +AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | --- | --- |
| AREA SELECTION | ALL | --- | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | --- | --- |
| HEAD GAIN | -6dB | --- | --- |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

⑤ Impostazione dell'esposizione lunga [LONG EXPOSURE]

Selezionare l'esposizione lunga tra "OFF", "AUTO", "MANUAL(FIX)", FIX(x1).

- OFF (regolazione predefinita) : Disattiva l'esposizione lunga.
- AUTO : Controlla automaticamente l'esposizione lunga.
Il valore massimo del controllo automatico verrà impostato come il tempo di memorizzazione.
- MANUAL(FIX) : Abilita la regolazione manuale dell'esposizione lunga.
Il tempo sarà fissato sul tempo di memorizzazione impostato.
- FIX(x1) : Disabilita l'esposizione lunga.
Il tempo di memorizzazione può essere selezionato tra "OFF", "x2", "x4" o "x8".
È disponibile quando è selezionato "MANUAL" per AE.

⑥ Impostazione dell'area di rilevamento della luminosità [AREA SELECTION]

Se sullo sfondo dietro ad un soggetto è presente una luce forte come un riflettore, il soggetto può apparire scuro. Per eliminare questo fenomeno, la mascheratura delle aree luminose consente agli utenti di eseguire la compensazione del controllo per nascondere le aree luminose.


Spostare il cursore su "AREA SELECTION" e utilizzare i tasti [<] o [>] per selezionare un'area.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| AE | +AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | --- | --- |
| BINNING | LINE MIX | --- | --- |
| GAIN | +AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | --- | --- |
| AREA SELECTION | ALL | --- | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | --- | --- |
| HEAD GAIN | -6dB | --- | --- |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |


L'area è selezionabile dalle seguenti:

* Le aree di rilevamento indicate nei disegni seguenti non vengono visualizzate.


ALL (regolazione predefinita): L'oggetto del rilevamento è l'intera area sullo schermo.

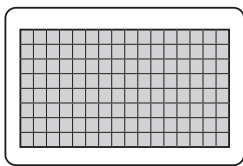


S CIRCLE: L'oggetto del rilevamento è l'area nel cerchio piccolo al centro dello schermo.

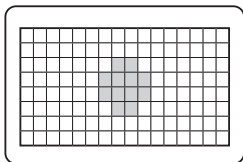

M CIRCLE: L'oggetto del rilevamento è l'area nel cerchio medio al centro dello schermo.

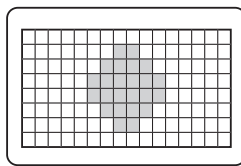

L CIRCLE: L'oggetto del rilevamento è l'area nel cerchio grande al centro dello schermo.

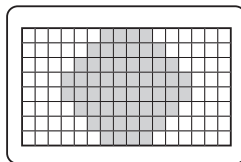


MANU: L'oggetto del rilevamento viene specificato manualmente. (☞ Pagina 216)

AUTO: Le aree scure vengono mascherate automaticamente e vengono rilevate soltanto le aree luminose.

Impostazione manuale dell'area di rilevamento

Impostare manualmente l'area di rilevamento.

Schermata di impostazione dell'area di rilevamento

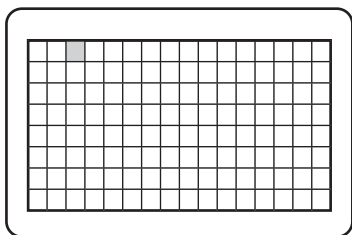

Passaggio 1

Selezionare "MANU" per "AREA SELECTION" e premere il tasto [SEL].

→ Appare la schermata di impostazione della maschera.

Passaggio 2

Spostare il cursore sull'area nella quale non è eseguito il rilevamento utilizzando i tasti [Δ], [▽], [<], o [▷] e premere il tasto [SEL].

→ L'area mascherata viene visualizzata di colore grigio.

Nota:

- Il rilevamento viene eseguito soltanto nelle aree mascherate.
- Per cancellare un'area mascherata, spostare il cursore sull'area da cancellare e premere il tasto [SEL]. Per cancellare tutte le aree di mascheratura, tenere premuti simultaneamente i tasti [<] e [▷] per 1 o più secondi.

Passaggio 3

Premere il tasto [MENU] dopo aver completato l'impostazione dell'area.

→ Verrà ripristinata la pagina MENU.

⑦ Impostazione della ponderazione del rilevamento della luminosità [PEAK/AVE LEVEL]

Spostare il cursore su "PEAK/AVE" e utilizzare i tasti [◀] o [▶] per regolare il livello di rilevamento. Quando il valore viene spostato nella direzione "0", verrà rilevato il valore di picco (valore massimo). Quando il valore viene spostato nella direzione "8", verrà rilevato il valore medio.

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| AE | +AUTO LEVEL 32[0+ 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | +AUTO LEVEL 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0+8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

⑧ Impostazione del guadagno della testa [HEAD GAIN]

Il guadagno della testa è selezionabile tra -9dB, -6dB, -3dB, OFF(0dB), +3dB, +6dB o +9dB.

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| AE | +AUTO LEVEL 32[0+ 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | +AUTO LEVEL 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0+8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Configurazione di PICTURE

⑨ Impostazione del bilanciamento del bianco [WHITE BAL MODE]

Il metodo di regolazione del bilanciamento del bianco è selezionabile dai seguenti:

AWC (regolazione predefinita) : Viene impostata la modalità di controllo del bilanciamento del bianco. È adatta ad una posizione dove la fonte di luce è stabile.
Quando si seleziona "AWC", è necessaria l'operazione di regolazione del bilanciamento del bianco.

MANUAL : Il bilanciamento del bianco può essere regolato manualmente.

| | |
|--|--------------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| WHITE BAL MODE | +AWC R-GAIN 128[0+255] |
| | B-GAIN 128[0+255] |
| DETAIL BAND | +MEDIUM SHARP LEVEL 16[0+ 31] |
| DNR LEVEL | 5[0+ 10] |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68+ 95] |
| FLARE COMP | OFF |
| COLOR LEVEL | 160[0+255] |
| COLOR MATRIX | +USER |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Quando si seleziona "AWC", seguire i passaggi seguenti per regolare il bilanciamento del bianco.

Passaggio 1

Orientare la telecamera verso un soggetto bianco. Acquisire un'immagine del soggetto bianco sotto la sorgente di luce da utilizzare.

Passaggio 2

Premere il tasto [AWC] nella schermata precedente.
→ AWC verrà avviato e la spia di stato di AWC lampeggerà. La regolazione è completata quando viene visualizzato "AWC OK" la lampadina si spegne.

Nota:

- La regolazione è disponibile per ciascun profilo. (☞ Pagina 214)
- Se la lampadina rimane accesa dopo la visualizzazione di "AWC NG", oppure se la lampadina si accende dopo aver cambiato il profilo, riprovare i passaggi 1 e 2.
- Se si esegue AWC mentre l'impostazione di "R-GAIN" o "B-GAIN" di "MANUAL" è diversa da quella predefinita (128), il bilanciamento del bianco potrebbe non essere impostato correttamente.

Quando si seleziona "MANUAL", spostare il cursore su "R-GAIN" o "B-GAIN" e regolare il bilanciamento del bianco con il tasto [◀] o [▶].

10 Impostazione dei dettagli [DETAIL BAND]

Vengono specificati la banda ed il livello della correzione dei contorni.

```
PP1 LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT
WHITE BAL MODE  *AWC      R-GAIN 128[ 0*255]
                  B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND      *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL        5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL   76[68* 95]
FLARE COMP       OFF
COLOR LEVEL      160[ 0*255]
COLOR MATRIX     *USER

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

Passaggio 1

Spostare il cursore su “DETAIL BAND” e selezionare la configurazione della banda dalle seguenti: “OFF”, “SOFT”, “MEDIUM SHARP”, “SHARP” o “SHARPEST”.

Il contorno diventa più spesso (banda bassa) quando il cursore viene spostato in direzione di “SHARPEST”, mentre diventa più sottile (banda alta) in direzione di “SOFT”.

Passaggio 2

Spostare il cursore su “DETAIL LEVEL” per regolare il livello di intensità.

Quando il valore viene incrementato, l'immagine diventa più nitida, e quando viene decrementato, l'immagine si ammorbidisce.

Nota:

- Possono comparire frastagliature sui contorni di un soggetto fotografico, tuttavia questo fenomeno non rappresenta un'anomalia. Se questo fenomeno risultasse sgradito, diminuire “DETAIL BAND” o “DETAIL LEVEL” e regolare la qualità dell'immagine.

11 Impostazione della funzione di riduzione del rumore digitale [DNR LEVEL]

La funzione di riduzione del rumore digitale riduce il rumore. Utilizzare i tasti [◀] o [▶] per regolare il livello di riduzione del rumore.

12 Regolazione del livello di spegnimento [PEDESTAL LEVEL]

Regolare il livello di spegnimento (livello del segnale del nero) utilizzando i tasti [◀] o [▶] mentre si osserva un monitor della forma d'onda o un monitor video a colori.

Quando il valore viene incrementato, l'immagine diventa più luminosa, e quando viene decrementato, l'immagine si scurisce.

13 Impostazione della compensazione del flare [FLARE COMP]

Selezionare “ON” o “OFF” (regolazione predefinita) per determinare se eseguire o meno la compensazione del flare.

Quando si seleziona “ON”, il flare viene ridotto.

14 Regolazione del livello di colore [COLOR LEVEL]

Regolare il livello di colore utilizzando i tasti [◀] o [▶] mentre si osserva un vettorscopio o un monitor video a colori.

Quando il valore viene incrementato, il colore diventa più profondo, e quando viene decrementato, il colore si schiarisce.

15 Regolazione della tinta [COLOR MATRIX]

Regolare la tinta monitorando un vettorscopio o un monitor video a colori.

```
PP1 LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT
WHITE BAL MODE  *AWC      R-GAIN 128[ 0*255]
                  B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND      *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL        5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL   76[68* 95]
FLARE COMP       OFF
COLOR LEVEL      160[ 0*255]
COLOR MATRIX     *USER

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

```
** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B PHASE  ....|.... 0 ( 0 )

B GAIN   ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET (NEW SETTING)
```

```
** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B/B-Mg PHASE ....|.... 0 ( 0 )
B PHASE      ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg PHASE   ....|.... 0 ( 0 )
B/B-Mg GAIN  ....|.... 0 ( 0 )
B GAIN       ....|.... 0 ( 0 )
B-Mg GAIN    ....|.... 0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET (NEW SETTING)
```

Passaggio 1

Visualizzare il colore da regolare al centro dello schermo il più grande possibile.

Passaggio 2

Selezionare l'asse vicino al colore desiderato. L'asse è selezionabile dai seguenti:

USER (regolazione predefinita), B-Mg, Mg, Mg-R, R, R-Ye, Ye, Ye-G, G, G-Cy, Cy, Cy-B, B

Passaggio 3

Premere il tasto [SEL] dopo aver selezionato l'asse.
→ Verrà visualizzata la schermata "MATRIX".

Passaggio 4

Per eseguire una regolazione precisa, regolare "PHASE" (tinta) e "GAIN" (croma) utilizzando i tasti [◀] o [▶].

Passaggio 5

Selezionare "BEFORE" o "AFTER" con "EFFECT SELECT" e verificare se l'effetto è stato applicato. Per confermare l'impostazione, selezionare "SET(NEW SETTING)", quindi premere il tasto [SEL].

Per ripristinare l'impostazione precedente, selezionare "CANCEL" quindi premere il tasto [SEL].


Quando non è chiaro l'asse dei colori

Quando si seleziona "USER AREA" sulla schermata "MATRIX", l'asse viene visualizzato automaticamente selezionando un colore sullo schermo.

La selezione del colore viene eseguita sulla schermata di rilevamento del colore.

Il cursore rettangolare nero lampeggia per selezionare il colore desiderato sulla schermata di rilevamento del colore.


Schermata di rilevamento del colore

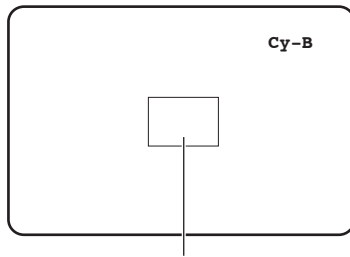

□ Cursore (lampeggiante)

<Diagramma della suddivisione della matrice dei colori>

* Questo diagramma serve da guida per la visualizzazione dell'asse più vicino durante la regolazione.

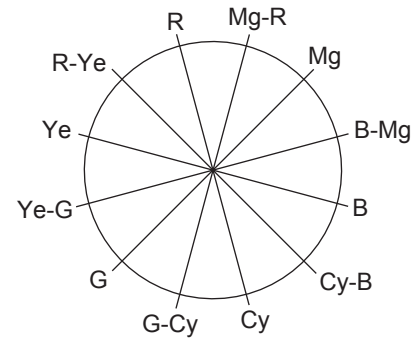

Passaggio 1

Rivolgere la telecamera al centro del soggetto con il quale viene rilevato il colore.

Se la telecamera è fissa, spostare il cursore rettangolare sull'area con il colore desiderato premendo i tasti [Δ], [∇], [◀] e [▶].

Nota:

- Ogni volta che si ruota il regolatore del blu in senso antiorario, la dimensione del cursore rettangolare cambia nell'ordine grande → medio → piccolo. Selezionare una dimensione che corrisponda alla dimensione del soggetto.

Passaggio 2


Premere il tasto [SEL] o il tasto [MENU].

→ Appare nuovamente la schermata "MATRIX".

Passaggio 3

Per eseguire una regolazione precisa, regolare "PHASE" (tinta) e "GAIN" (croma).

Ad esempio, la regolazione di "PHASE" o "GAIN" di "Cy/Cy-B" sulla schermata seguente produce la regolazione simultanea di "PHASE" o "GAIN" degli assi adiacenti "Cy" e "Cy-B" nel precedente diagramma di suddivisione della matrice dei colori.

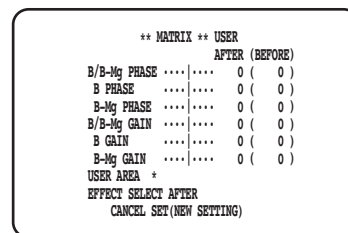

Nota:

- Quando viene rilevato il colore sull'asse nel diagramma di suddivisione della matrice dei colori, gli assi adiacenti non vengono visualizzati.

Configurazione di CONTRAST

16 Impostazione della modalità di correzione di gamma [GAMMA SELECT]

La modalità di gamma è selezionabile dalle seguenti:

S-CURVE (regolazione predefinita) : Migliorando la gamma, è possibile ridurre il rumore mantenendo il contrasto.
NORMAL : Gamma caratteristico standard

| | |
|--|-----------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35+0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0+15] |
| KNEE SLOPE | 3[0+7] |
| | |
| IE FUNCTION SELECT | WDR |
| LEVEL | 80[0+255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

17 Impostazione del livello della correzione di gamma [GAMMA VALUE]

Osservare un monitor della forma d'onda o un monitor video a colori per impostare il livello della correzione di gamma.

Impostare il livello di correzione di gamma tra 0,35 e 0,55 (regolazione predefinita: 0,45).

Il livello di correzione di gamma verrà disattivato (gamma = 1) se il tasto [<] viene premuto quando il livello di correzione di gamma è "0,55".

18 Impostazione della modalità knee [KNEE MODE]

A causa dell'illuminazione o della riflessione del soggetto, può verificarsi la "sovrapposizione delle zone luminose" in cui la parte luminosa dell'immagine può apparire appiattita. Questo fenomeno si verifica quando il segnale di luminanza supera la gamma dinamica della telecamera. Per impostare i segnali di ingresso di elevata luminosità entro la gamma dinamica della telecamera, comprimere la gradazione utilizzando la funzione knee.

Selezionare il metodo di regolazione dai seguenti:

MANUAL (regolazione predefinita) : Abilita la regolazione manuale di knee point e knee slope.
AUTO : Regola automaticamente knee point e knee slope.

19 Impostazione del punto knee [KNEE POINT]

Assicurarsi di osservare un monitor della forma d'onda o un monitor video a colori quando si esegue la regolazione del punto knee.

Imposta il punto di compressione per i segnali di ingresso di elevata luminosità.

20 Impostazione dell'inclinazione knee [KNEE SLOPE]

Assicurarsi di osservare un monitor della forma d'onda o un monitor video a colori quando si esegue la regolazione dell'inclinazione knee.

Impostare il livello di compressione per i segnali di ingresso di elevata luminosità regolando l'inclinazione knee.

21 Impostazione del tasto [IE] [IE FUNCTION SELECT]

Selezionare una funzione da assegnare al tasto [IE] [IMAGE ENHANCEMENT] dalle seguenti:

WDR : La funzione di espansione della gamma dinamica corregge la zona scura schiarendola mentre controlla la sovrapposizione.
DARK AREA CORRECTION : La funzione di adaptive black stretch corregge la zona scura schiarendola.
OVER EXPOSURE REDUCTION : La funzione di correzione dell'esposizione controlla la sovrapposizione.
SMOKE CORRECTION : La funzione di correzione della fumosità elimina la sfocatura bianca.
COLOR ENHANCEMENT : La funzione di miglioramento del colore esalta il colore selezionato.


| | |
|--|-----------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35+0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0+15] |
| KNEE SLOPE | 3[0+7] |
| | |
| IE FUNCTION SELECT | WDR |
| LEVEL | 80[0+255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

22 Impostazione del livello di correzione assegnato al tasto [IE] [IE FUNCTION LEVEL]

Regolare il livello di correzione della funzione selezionata con [IE FUNCTION SELECT] utilizzando i tasti [◀] o [▶] mentre si osserva un vettorscopio o un monitor video a colori.

Quando il valore viene incrementato l'entità della correzione aumenta, mentre quando viene decrementato l'entità della correzione diminuisce.

Quando si seleziona "COLOR ENHANCEMENT", è possibile selezionare il colore RED, RED&YELLOW o YELLOW in aggiunta al livello di correzione.

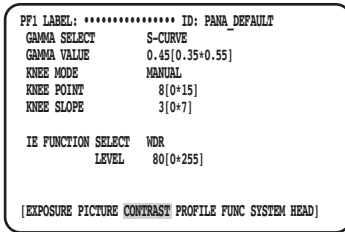


Configurazione di PROFILE


23 Impostazione di ID ed etichetta del profilo utente [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]

Impostare ID ed etichetta del profilo utente. È possibile creare l'ID e l'etichetta che indicano la posizione della telecamera o il contenuto dell'immagine utilizzando caratteri alfanumerici e simboli e visualizzarli sullo schermo. Si può utilizzare un massimo di 16 caratteri per ID ed etichetta.

Seguire la procedura seguente per specificare ID ed etichetta.

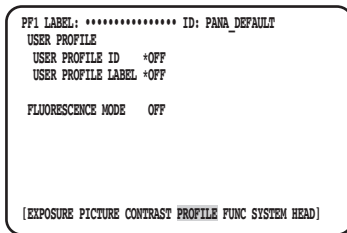


Schermata di creazione dell'etichetta (Quando la frequenza dei fotogrammi è 59,94 Hz)

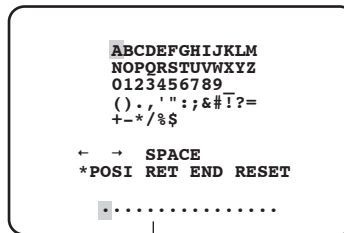


Area di modifica

Schermata di creazione dell'etichetta (Quando la frequenza dei fotogrammi è 50 Hz)

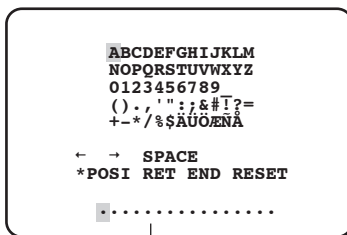

Area di modifica

Schermata di posizionamento della visualizzazione

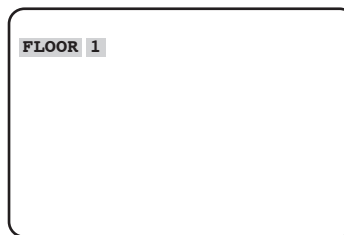

Passaggio 1

Impostare "USER PROFILE ID" o "USER PROFILE LABEL" su "* ON" e premere il tasto [SEL].

→ Verrà visualizzata la schermata di creazione del titolo.

IMPORTANTE:

- Quando è selezionato "* OFF" per "USER PROFILE ID" o "USER PROFILE LABEL", "USER PROFILE" può essere impostato ma non visualizzato.

Nota:

- L'impostazione "* POSI" di "USER PROFILE ID" è disponibile soltanto quando è selezionato "* OFF" per "USER PROFILE LABEL". Quando è selezionato "* ON" per "USER PROFILE LABEL", verrà data una priorità maggiore all'impostazione "* POSI" di "USER PROFILE LABEL".
- Come regolazione predefinita, "FLUORESCENCE3" è impostato per "PROFILE 5"; "FLUORESCENCE1" è impostato per "PROFILE 6".

Passaggio 2

Spostare il cursore sul carattere desiderato utilizzando i tasti [Δ], [▽], [◀] o [▶] e premere il tasto [SEL].

→ I caratteri inseriti verranno visualizzati nell'area di modifica.

<Inserimento dei caratteri>

- Per correggere un carattere, spostare il cursore su “←” o “→” e premere il tasto [SEL]. Spostare il cursore sul carattere da correggere nel campo di inserimento e reinserire il carattere corretto.
- Per inserire uno spazio, spostare il cursore su “SPACE” e premere il tasto [SEL].
- Per cancellare tutti i caratteri inseriti, spostare il cursore su “RESET” e premere il tasto [SEL].

Passaggio 3

Dopo aver inserito il titolo, spostare il cursore su “* POSI” e premere il tasto [SEL].

→ Verrà visualizzata la schermata di posizionamento della visualizzazione e il titolo della telecamera inserito lampeggerà.

Passaggio 4

Utilizzare i tasti [Δ], [▽], [◀] e [▶] per impostare la posizione del titolo e premere il tasto [MENU].



→ La posizione di visualizzazione viene confermata e verrà ripristinata la schermata di creazione del titolo.

24 Configurazione dell'impostazione aggiuntiva per ciascuna modalità di cattura di immagini fluorescenti [FLUORESCENCE MODE]

Configurare l'impostazione aggiuntiva per ciascuna modalità di cattura di immagini fluorescenti.

L'impostazione aggiuntiva è selezionabile dalle seguenti:

- OFF (regolazione predefinita) : Non viene eseguita l'impostazione aggiuntiva per la cattura di immagini fluorescenti.
- MODE1 : Viene eseguita l'impostazione aggiuntiva per FLUORESCENCE1.
- MODE2 : Viene eseguita l'impostazione aggiuntiva per FLUORESCENCE2.
- MODE3 : Viene eseguita l'impostazione aggiuntiva per FLUORESCENCE3.

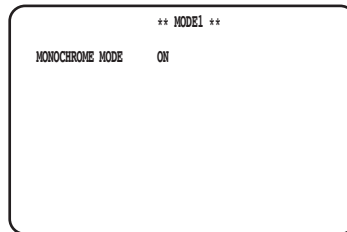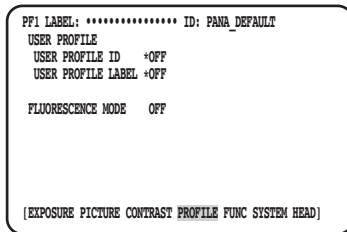

IMPORTANTE:

- L'impostazione per l'acquisizione di immagini fluorescenti è preimpostata in PROFILE 5 e 6.
- Quando si utilizza la modalità di cattura di immagini fluorescenti, sono necessari dispositivi periferici, come una sorgente di luce o un filtro, etc.
- Se ne si prende in considerazione l'utilizzo, rivolgersi al proprio rivenditore.

Nota:


- Quando si seleziona “MODE1”, impostare “MONOCHROME MODE” su “ON” (modalità bianco e nero: regolazione predefinita) o “OFF” (modalità colore).
- Quando si imposta qualcosa di diverso da “OFF”, “GAIN” può essere impostato fino a 18 dB. (Fino a 12 dB quando è impostato “OFF”).

Configurazione di FUNC

25 Impostazione della funzione di capovolgimento verticale e orizzontale [FLIP AND MIRROR]

Per la funzione di capovolgimento verticale e orizzontale è disponibile quanto segue:

- OFF (regolazione predefinita) : Visualizzazione normale
- FLIP : Capovolgimento verticale
- MIRROR : Capovolgimento orizzontale
- FLIP+MIRROR : Capovolgimento verticale e orizzontale. Per cambiare impostazione, premere il tasto [Δ] o [▽].

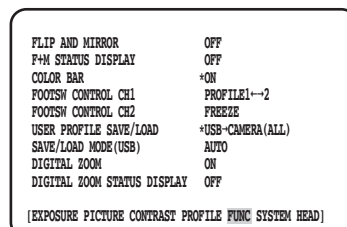

Nota:

- È possibile eseguire contemporaneamente la funzione di fermo immagine.

26 Impostazione della visualizzazione dello stato di capovolgimento verticale e orizzontale [F+M STATUS DISPLAY]

Selezionare "ON" o "OFF" (regolazione predefinita) per impostare se visualizzare sullo schermo "B" (capovolgimento verticale), "R" (capovolgimento orizzontale), "B" (capovolgimento verticale e orizzontale) quando viene premuto il tasto [Δ] o [∇].

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1 \leftrightarrow 2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE (USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

27 Visualizzazione delle barre colore [COLOR BAR]

Visualizzare le barre colore.

La pagina principale verrà ripristinata una volta premuto il tasto [MENU].

Nota:

- Quando la testa della telecamera non è collegata alla CCU, le barre colore verranno visualizzate.

28 Impostazione degli interruttori a pedale [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]

Le seguenti funzioni possono essere assegnate a CH1 o CH2:

| | |
|----------------------------------|--|
| NONE | : L'interruttore è disattivato. |
| FREEZE | : Attiva/disattiva il fermo immagine. |
| FLIP+MIRROR | : Attiva/disattiva il capovolgimento verticale e orizzontale dell'immagine. |
| FLIP | : Attiva/disattiva il capovolgimento verticale dell'immagine. |
| MIRROR | : Attiva/disattiva il capovolgimento orizzontale dell'immagine. |
| PROFILE 1 \leftrightarrow 2 | : Commuta tra il profilo 1 e 2. |
| PROFILE 1 \leftrightarrow 5 | : Commuta tra il profilo 1 e 5. |
| PROFILE 1 \leftrightarrow 6 | : Commuta tra il profilo 1 e 6. |
| PROFILE 3 \leftrightarrow 4 | : Commuta tra il profilo 3 e 4. |
| PROFILE ALL | : Commuta tra tutti i profili da 1 a 6 in ordine. |
| ZOOM IN | : Avvicina con lo zoom l'immagine quando è selezionato "ON(ENABLE)" per "DIGITAL ZOOM". |
| ZOOM OUT | : Allontana con lo zoom l'immagine quando è selezionato "ON(ENABLE)" per "DIGITAL ZOOM". |
| ZOOM 1.0x \leftrightarrow 2.0x | : Alterna tra 1.0x e 2.0x quando è selezionato "ON(ENABLE)" per "DIGITAL ZOOM". |

Nota:

- L'azionamento dell'interruttore a pedale sarà disabilitato mentre è visualizzato il menu SETUP.

29 Salvataggio/caricamento dei profili [USER PROFILE SAVE/LOAD]

Inserendo la memoria USB, si può eseguire SAVE (CAMERA \rightarrow USB) o LOAD (USB \rightarrow CAMERA) del profilo.

Selezionare "ALL" per salvare o leggere tutti i sei profili e selezionare "SINGLE" per salvare o leggere un file.

Non cambiare la cartella e il nome del file da creare sulla memoria USB. Se si cambiano i nomi, il caricamento del profilo non riuscirà. In seguito al salvataggio o caricamento, la memoria USB verrà rimossa automaticamente. Per continuare a utilizzare la memoria USB, scollegarla ed inserirla nuovamente.

IMPORTANTE:

- Non modificare la configurazione del file e della cartella creati premendo il pulsante [SAVE]. Il caricamento potrebbe non riuscire.

30 Impostazione del metodo di salvataggio/caricamento per la memoria USB [SAVE/LOAD MODE (USB)]

Sono disponibili le seguenti modalità di funzionamento quando viene inserita una memoria USB:

- AUTO : Verrà visualizzato automaticamente un messaggio con la richiesta di eseguire un'operazione (lettura/caricamento/nessuna azione).
- MANUAL : Non viene eseguita nessuna azione quando si inserisce una memoria USB. Eseguire un'operazione sulla pagina [USER PROFILE SAVE/LOAD].

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+H STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | +ON |
| FOOTSN CONTROL CH1 | PROFILE1--2 |
| FOOTSN CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | +USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE (USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Nota:

- Verrà salvato o caricato il contenuto di tutti gli elementi nel QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST" e "PROFILE" nell'ADVANCED MENU. (Tranne "HEAD GAIN" di "EXPOSURE")

31 Attivazione e disattivazione dello zoom [DIGITAL ZOOM]

Attivare/disattivare la funzione di zoom.

Il fattore di zoom può essere impostato tra 1x e 2,5x in intervalli di 0,1x. Per cambiare impostazione, premere il tasto [◀] o [▶].

32 Impostazione della visualizzazione del rapporto di zoom [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]

Impostare se visualizzare l'attuale rapporto di zoom sullo schermo (regolazione predefinita: OFF).

Nota:

- Quando è selezionato 1x, il rapporto non verrà visualizzato sullo schermo.

Configurazione di SYSTEM

33 Impostazione della posizione OSD dell'uscita video [OSD POSITION]

Selezionare una posizione OSD dell'uscita video dalle seguenti:

- UPPER LEFT : Visualizza l'OSD nell'area superiore sinistra dell'angolo visuale dell'uscita video.
- UPPER RIGHT : Visualizza l'OSD nell'area superiore destra dell'angolo visuale dell'uscita video.
- LOWER LEFT : Visualizza l'OSD nell'area inferiore sinistra dell'angolo visuale dell'uscita video.
- LOWER RIGHT : Visualizza l'OSD nell'area inferiore destra dell'angolo visuale dell'uscita video.

34 Impostazione del segnale di uscita HDMI [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]

Impostare i segnali di uscita per il connettore di uscita HDMI.

Quanto segue è disponibile quando è selezionato 1080p o 1080i per l'uscita HDMI:

YPbPr (422), YPbPr (444), RGB (LIMITED), RGB (FULL)

Quando si modifica l'impostazione per il segnale di uscita HDMI o il formato video, il video dell'uscita HDMI potrebbe essere interrotto per alcuni secondi.

35 Impostazione del connettore di ingresso/uscita del segnale di sincronizzazione [G/L SYNC TERMINAL SETTING]



Selezionare "IN" o "OUT (regolazione predefinita)".

IMPORTANTE:

- La funzione di sincronizzazione esterna può essere utilizzata tra unità di controllo di questa serie. Collegare la GP-UH332C o la GP-UH532C al connettore di ingresso/uscita del segnale di sincronizzazione. Quindi, impostare "OUT" per la master e "IN" per la slave ed applicare lo stesso formato di uscita video.

36 Visualizzazione dello stato di sincronizzazione [G/L SYNC STATUS INFO]

Verrà visualizzato lo stato di sincronizzazione interna "INTERNAL" o lo stato di sincronizzazione esterna "EXTERNAL". Quando è selezionato "EXTERNAL", è possibile regolare la fase orizzontale.

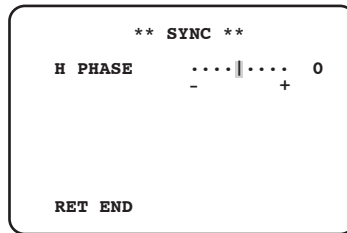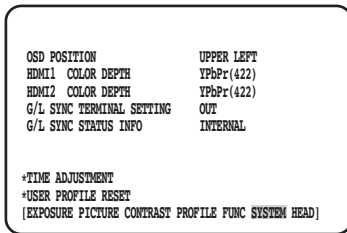

Regolazione della fase orizzontale

Passaggio 1

Spostare il cursore su "EXTERNAL" e premere il tasto [SEL].

Passaggio 2

Regolare "H PHASE".

Nota:

- Verrà visualizzato "EXTERNAL" quando è selezionato "IN" per "G/L SYNC TERMINAL SETTING" e vengono immessi i segnali di sincronizzazione esterni. Negli altri casi viene visualizzato "INTERNAL".
- Quando si chiude la schermata di regolazione di "H PHASE" (fase orizzontale in modalità di sincronizzazione esterna), l'uscita video HDMI può essere disturbata per circa 5 secondi.

37 Regolazione dell'orologio [TIME ADJUSTMENT]

Impostare l'orario attuale "mese/giorno/anno" e "ora/minuti".

Per confermare l'impostazione, spostare il cursore su "SET" e premere il tasto [SEL].

Quando si utilizza la funzione di salvataggio dei dati sulla memoria USB per i profili, assicurarsi di impostare l'orario.

38 Ripristino dell'impostazione predefinita del profilo [USER PROFILE RESET]

Vengono ripristinate le impostazioni predefinite per tutti gli elementi nel QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST" e "PROFILE" nell'ADVANCED MENU.

Passaggio 1

Spostare il cursore su "USER PROFILE RESET" e premere il tasto [SEL].

Passaggio 2

Verrà visualizzata la finestra di conferma "USER PROFILE RESET? YES/NO".

Se si seleziona "YES", verranno ripristinate le impostazioni predefinite del profilo.

Nota:


- "HEAD GAIN" di "EXPOSURE" non verrà ripristinato.

Configurazione di HEAD

③⑨ Impostazione dell'ombreggiatura del bianco [WHITE SHADING]

Impostare "AUTO(SET)" o "MANUAL" per l'ombreggiatura del bianco.

Quando si imposta "AUTO(SET)" per l'ombreggiatura del bianco

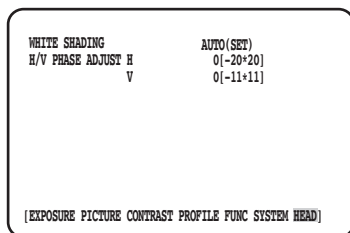

Passaggio 1

Orientare la telecamera verso un soggetto bianco.

Passaggio 2

Selezionare "AUTO(SET)" e premere il tasto [SEL].

→ Verrà avviata la funzione di ombreggiatura del bianco e l'indicazione "AUTO(SET)" verrà ripetutamente visualizzata in negativo e lampeggiante.

La regolazione automatica sarà completata quando viene visualizzato "WHITE SHADING OK" nella parte inferiore del MENU.

Nota:

- Si può impostare l'ombreggiatura del bianco per ciascuna testa della telecamera.
 - Se viene visualizzato "WHITE SHADING NG" riprovare i passaggi 1 e 2.
-

Quando si imposta "MANUAL" per l'ombreggiatura del bianco

Passaggio 1

Selezionare "MANU" e premere il tasto [SEL].

→ Verrà visualizzata la schermata di configurazione manuale per l'ombreggiatura del bianco.

Regolare ciascuna direzione della componente rosso/blu dell'ombreggiatura del bianco.

④⑩ Regolazione della posizione orizzontale/verticale dello schermo [H/V PHASE ADJUST]

Regolare la fase dello schermo in direzione orizzontale (destra/sinistra) o verticale (su/giù).

Nota:

- Si può impostare "H/V PHASE ADJUST" per ciascuna testa della telecamera.
-

Correzione dei difetti di funzionamento

Prima di richiedere la riparazione, controllare i sintomi con la tabella seguente.

Rivolgersi al proprio rivenditore se un problema non può essere risolto anche dopo aver controllato e provato la soluzione nella tabella, oppure se il problema non è descritto sotto.

| Sintomo | Causa/soluzione | Pagine di riferimento |
|--|--|-----------------------|
| Nessuna immagine visualizzata | <ul style="list-style-type: none"> Il cavo è collegato correttamente al connettore di uscita HDMI o al connettore di uscita SDI? Controllare se il collegamento è stato stabilito correttamente. | 202 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Il formato del segnale di uscita video di ciascun connettore di uscita è compatibile con il formato video visualizzabile sul monitor? Controllare se il formato del segnale di uscita video è compatibile con il formato video. | 202, 228 |
| | <ul style="list-style-type: none"> La luminosità del monitor è regolata correttamente, oppure il contrasto è regolato correttamente? Controllare se le impostazioni del monitor sono corrette. | – |
| | <ul style="list-style-type: none"> Controllare il monitor dopo aver ripristinato le regolazioni predefinite (1:ON/ 2:ON/ 3:ON/ 4:OFF/ 5:OFF/ 6:OFF). | 202 |
| Lo stato della lampadina non viene modificato dopo che viene premuto il tasto [PROFILE] | <ul style="list-style-type: none"> Premendo una volta si visualizza lo stato. Premere ripetutamente il tasto [PROFILE] finché non si accende l'indicatore desiderato. | 200 |
| Lo stato della lampadina [AE] non viene modificato | <ul style="list-style-type: none"> Premendo una volta si visualizza lo stato. Premere ripetutamente il tasto [AE] finché non si accende l'indicatore desiderato. | 200 |
| Lo stato della lampadina [IE] non viene modificato | <ul style="list-style-type: none"> Premendo una volta si visualizza lo stato. Premere ripetutamente il tasto [IE] finché non si accende l'indicatore desiderato. | 200 |
| Vengono visualizzate solo le barre colore | <ul style="list-style-type: none"> Il cavo della telecamera è collegato correttamente sia al connettore della CCU sia al connettore della testa della telecamera? Controllare se il collegamento è stato stabilito correttamente. | 199, 202 |
| La tinta [COLOR MATRIX] non è regolabile nel menu | <ul style="list-style-type: none"> Il cavo della telecamera è collegato correttamente sia al connettore della CCU sia al connettore della testa della telecamera? È necessario il collegamento tra la testa della telecamera ed il cavo della telecamera per regolare la qualità dell'immagine. Controllare se il collegamento è stato stabilito correttamente. | 199, 202 |
| L'intero schermo è sfocato | <ul style="list-style-type: none"> L'apertura dell'obiettivo è regolata correttamente? Controllare se l'apertura è regolata correttamente. Utilizzare obiettivi con il numero F consigliato o superiore e obiettivi specifici per 3 CCD. | 207 |
| Sono visibili contorni multipli | <ul style="list-style-type: none"> Provare a modificare l'impostazione di "DETAIL BAND". | 218 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Cambiare il cavo del monitor. | – |
| "AWC OK" non viene visualizzato | <ul style="list-style-type: none"> Quando lo schermo è troppo luminoso, ridurre l'apertura dell'obiettivo o impostare "AE" su "AUTO". | 207, 214 |
| Barre nere sulla destra e sulla sinistra dell'immagine | <ul style="list-style-type: none"> Questo fenomeno dipende dalle specifiche del monitor. Selezionare la visualizzazione wide-screen e a schermo intero sul monitor. | – |
| Immagine allungata verticalmente | <ul style="list-style-type: none"> Questa unità fornisce uscite basandosi sul presupposto che lo schermo sia 16:9. Selezionare la visualizzazione wide-screen sul monitor. | – |
| Nessun suono dal monitor | <ul style="list-style-type: none"> Questa unità non è predisposta per l'uscita dell'audio. | – |
| Viene visualizzato il messaggio "FAN STOPPED" | <ul style="list-style-type: none"> La ventola si è fermata. Togliere immediatamente l'alimentazione e contattare il proprio rivenditore o l'addetto per la sostituzione della ventola. | – |
| Viene visualizzato "Unsupported Camera Head". | <ul style="list-style-type: none"> È stata collegata una testa della telecamera non supportata. Rivolgersi al proprio rivenditore. | 229 |

Dati tecnici

| | | |
|--|--|---|
| Alimentazione: | 12 V CC \pm 10 % | |
| Consumo di corrente: | 12 V 3,4 A (inclusa la testa della telecamera) | |
| Sistema di pick-up: | Sistema con micro prisma | |
| Sensore di immagine: | 3MOS di tipo 1/3 | |
| Uscita video: | Uscita HDMI: | Connettore HDMI x2 |
| | Uscita SDI: | Connettore BNC x5 |
| Formato video: | Uscita HDMI: | 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i |
| | Uscita SDI: | 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/50p, 1080/50i |
| Illuminazione necessaria: | 2000 lx (3200 K, F16, quando "BINNIG" è "LINE MIX".) | |
| S/R: | 54 dB (in uscita a 1080i) | |
| Risoluzione orizzontale: | 1000 linee TV al centro (tipica con uscita 1080p) | |
| Barre colore: | Barre colore SMPTE (set-up 0 %, a 59,94 Hz) / Barre colore pieno (a 50 Hz) | |
| Funzione: | AE, Guadagno, Otturatore elettronico, Esposizione lunga, Guadagno della testa, Somma dei pixel, Bilanciamento del bianco, Knee, Dettagli, Commutazione della gamma, Impostazione di DNR, Funzioni IE (WDR, Adaptive black stretch, Correzione dell'esposizione, Correzione della foschia, Miglioramento del colore), Impostazione del livello di spegnimento, Compensazione del flare, Regolazione del livello del colore, Regolazione della tinta, Profilo di cattura delle immagini fluorescenti, Fermo immagine, Capovolgimento verticale, Capovolgimentoorizzontale, Visualizzazione dello stato, Barre colore, Zoom digitale, Impostazione dell'interruttore a pedale, Impostazione del profilo, Commutazione uscita HDMI, Sincronizzazione esterna, Orologio, Correzione dell'ombreggiatura del bianco, Regolazione fase H/V | |
| Interruttore a pedale: | Minijack stereo \varnothing 3,5 | |
| Controllo esterno: | Minijack stereo \varnothing 3,5 (conforme al livello del segnale seriale RS232C a 3 elettrodi) | |
| Temperatura ambiente di funzionamento: | Da 0 °C a 40 °C | |
| Umidità ambiente di funzionamento: | Dal 30 % al 90 % | |
| Pressione ambiente di funzionamento: | Da 700 hPa a 1060 hPa | |
| Temperatura di trasporto e stoccaggio: | Da -10 °C a +60 °C | |
| Umidità di trasporto e stoccaggio: | Dal 10 % al 90 % | |
| Pressione di trasporto e stoccaggio: | Da 700 hPa a 1060 hPa | |
| Dimensioni: | GP-UH332C: | 185 mm (L) x 57 mm (A) x 270 mm (P) (esclusi piedini di gomma e sporgenze) |
| | GP-UH332H: | 27 mm (L) x 30 mm (A) x 42,5 mm (P) (escluse base di montaggio del cavalletto e sporgenze) |
| Massa: | GP-UH332C: | Circa 2 kg |
| | GP-UH332H: | Circa 65 g |
| Finitura: | Rivestimento bianco vela | |

Accessori standard

Manuale di istruzioni (questo documento) 1 pz.
Cartolina di garanzia per il mercato statunitense 1 pz.

Accessori opzionali

Testa della telecamera HD 3MOS GP-UH332H
Cavo della telecamera GP-UC532G03 (3 m)
GP-UC532G06 (6 m)
GP-UC532G15 (15 m)
GP-UC532G03A (3 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)
GP-UC532G06A (6 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)
GP-UC532G15A (15 m) (Rilascio pianificato a breve / All'agosto 2017)

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate
Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese.



Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.

Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.



Note per il simbolo batterie (simbolo sotto)


Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Panasonic®

Инструкция по эксплуатации Блок управления камерой HD

Модель № GP-UH332C

(ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

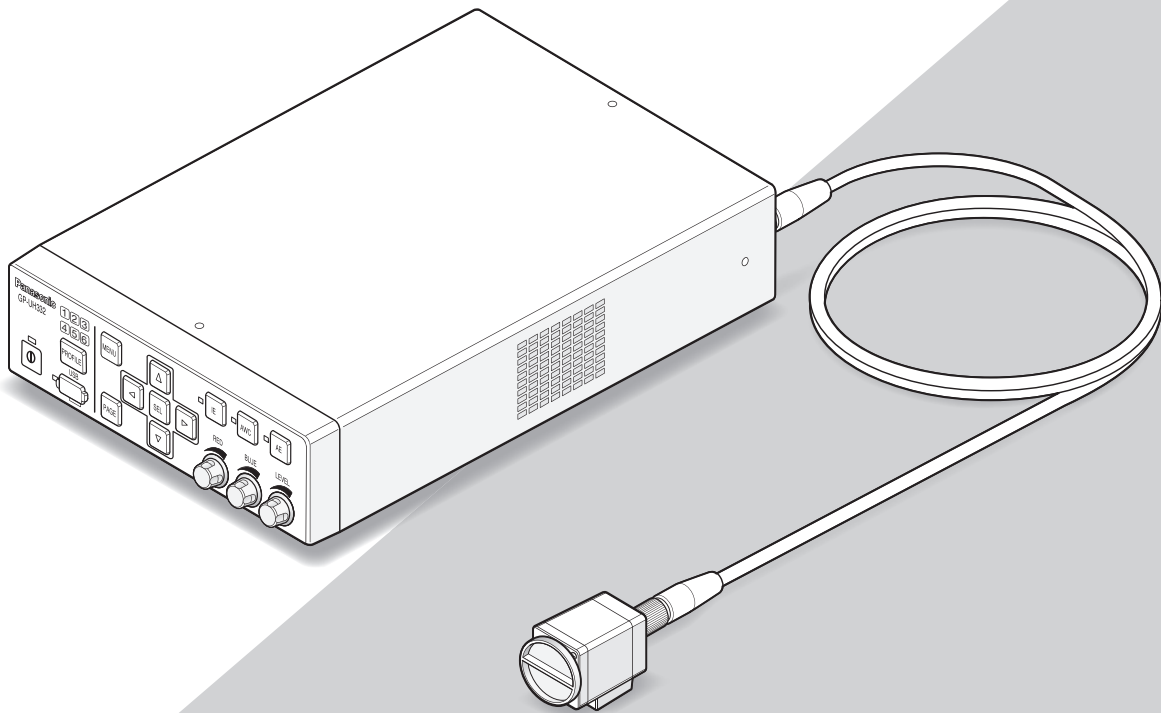

(Головка и кабель камеры являются дополнительными принадлежностями).

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

РУССКИЙ

Прежде чем приступить к подсоединению или управлению настоящим изделием, следует тщательно изучить настоящую инструкцию и сохранить ее для будущего использования.

В некоторых описаниях в данной инструкции номер модели приведен в сокращенной форме.

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

(RUSSIAN VERSION)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Во избежание пожара или поражения электрическим током не следует подвергать настоящий прибор воздействию атмосферных осадков или влаги.
- Устройство не должно подвергаться воздействию влаги, и на него запрещается ставить емкости, например, вазы, наполненные различными жидкостями.
- Установка должна быть выполнена в соответствии со всеми применимыми к данной процедуре нормами.
- Это изделие класса А. В жилых помещениях это изделие может вызывать радиопомехи. В этом случае пользователь должен принять соответствующие меры.
- Данное оборудование соответствует классу А CISPR 32.
В жилых районах данное оборудование может стать причиной возникновения радиопомех.
- Все работы по монтажу настоящего прибора должны выполняться квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту или монтажниками систем.

ВНИМАНИЕ:

- Любое изменение или модификация, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение правил, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного устройства.

Отключение питания. На изделие с переключателями включения/выключения или без них подается питание при подключении силового кабеля к источнику питания; однако изделие работает, только когда переключатель включения/выключения находится в положении включения. Выньте шнур питания, чтобы отключить основное питание для всех устройств.

EMC для использования данного изделия в медицине

- Описание GP-UH332 представляет собой систему камеры, использующую GP-UH332C и GP-UH332H.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использование принадлежностей или кабелей, которые не указаны в этом документе, может стать причиной увеличения электромагнитного излучения от GP-UH332 или ухудшить устойчивость к электромагнитным помехам.
- Если Вы используете блок GP-UH332, установив его рядом с другим устройством или уложив его на другое устройство, убедитесь, что CCU в системе работает нормально.

ВНИМАНИЕ

- Необходимо соблюдать местное или национальное законодательство и соответствующую политику больниц при утилизации данного изделия.


| Политика и декларация производителя - электромагнитное излучение | | |
|---|---------------------|--|
| Блок GP-UH332 предназначен для использования в указанной ниже электромагнитной среде. Убедитесь, что это изделие используется в следующих условиях. | | |
| Испытание на предмет излучения | Совместимый уровень | Электромагнитная среда - политика |
| Проводящее излучение радиочастот CSPR 11 | Группа 1 | В GP-UH332 используется радиочастотная энергия для внутренних функций. Поэтому уровень радиочастотного излучения значительно низкий, и оно не будет создавать помехи расположенным поблизости электронным устройствам. |
| Проводящее излучение радиочастот CSPR 11 | Класс А | Согласно характеристике излучения блок GP-UH332 подходит для использования в промышленной зоне и больницах. Если это изделие будет использоваться в жилом районе, возможно, потребуются принять некоторые меры, например, перемещение изделия, поскольку в жилом районе защита устройства радиочастотной связи может быть обеспечена недостаточно. |
| Излучения гармонических токов IEC 61000-3-2 | Класс А | |
| Изменение напряжения, колебания напряжения и излучение мерцания IEC 61000-3-3 | Пункт 5 | |

Используйте следующий адаптер переменного тока:
Производитель: Sinpro Electronics Co., Ltd.
Номер детали: MPU60A-105-P49L10*

| Политика и декларация производителя - электромагнитное излучение | | | |
|---|---|---|--|
| Блок GP-УН332 предназначен для использования в указанной ниже электромагнитной среде. Убедитесь, что это изделие используется в следующих условиях. | | | |
| Испытание на устойчивость | IEC 60601 Уровень тестирования | Совместимый уровень | Электромагнитная среда - политика |
| Устойчивость к электростатическому разряду (ЭСР) IEC 61000-4-2 | ± 6 kV, контакт ± 8 kV, воздух | ± 6 kV, контакт ± 8 kV, воздух | Пол должен быть деревянным, бетонным или отделан плиткой. Если пол закрывается синтетическим веществом, считается, что в таком случае относительная влажность равна 30 % или более. |
| Быстрый переходный режим кабеля питания/сигнального кабеля Устойчивость к разрыву IEC 61000-4-4 | ± 2 kV для питания переменного тока ± 1 kV для сигнальной линии | ± 2 kV для питания переменного тока ± 1 kV для сигнальной линии | Используйте обычное предоставляемое питание или питание, предназначенное для использования в больницах. |
| Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания IEC 61000-4-5 | ± 1 kV, от линии к линии ± 2 kV, от линии к земле | ± 1 kV, от линии к линии ± 2 kV, от линии к земле | Используйте обычное предоставляемое питание или питание, предназначенное для использования в больницах. |
| Устойчивость к падению напряжения/коротким прерываниям/колебанию напряжения IEC 61000-4-11 | $< 5\% U_T$ ($>$ падение на 95 %, в U_T) В пределах 0,5 цикла $40\% U_T$ (падение на 60 %, в U_T) В пределах 5 циклов $70\% U_T$ (падение на 30 %, в U_T) В пределах 25 циклов $< 5\% U_T$ ($>$ падение на 95 %, в U_T) 5 секунд | $< 5\% U_T$ ($>$ падение на 95 %, в U_T) В пределах 0,5 цикла $40\% U_T$ (падение на 60 %, в U_T) В пределах 5 циклов $70\% U_T$ (падение на 30 %, в U_T) В пределах 25 циклов $< 5\% U_T$ ($>$ падение на 95 %, в U_T) 5 секунд | Используйте обычное предоставляемое питание или питание, предназначенное для использования в больницах. При использовании GP-УН332 во время сбоя питания рекомендуется использовать систему бесперебойного энергоснабжения или батареи для подачи питания на GP-УН332. |
| Устойчивость к магнитному полю с частотой питающей сети IEC 61000-4-8 | 3 A/m (среднеквадратичное значение) (50/60 Hz) | 3 A/m (среднеквадратичное значение) (50/60 Hz) | Магнитное поле с частотой питающей сети должно поддерживать характерный уровень, измеренный в типичной, коммерчески доступной или больничной среде. |
| Замечание: U_T обозначает напряжения источника питания переменного тока перед применением уровня тестирования. | | | |

Политика и декларация производителя - электромагнитное излучение

Блок GP-УН332 предназначен для использования в указанной ниже электромагнитной среде. Убедитесь, что это изделие используется в следующих условиях.

| Испытание на устойчивость | IEC 60601 Уровень тестирования | Совместимый уровень | Электромагнитная среда - политика |
|--|---|-------------------------------|--|
| Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным радиочастотными полями IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) От 150 kHz до 80 MHz | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) | Не используйте переносное или мобильное устройство беспроводной связи в условиях, когда рекомендуемый пространственный разнос между любым компонентом GP-УН332, включая кабели, не обеспечивается. Расстояние должно рассчитываться на основе формулы, соответствующей каждой частоте устройства. Рекомендуемый пространственный разнос $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ от 80 MHz до 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ от 800 MHz до 2,5 GHz |
| Устойчивость к излучаемому, радиочастотному, электромагнитному полю IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) От 80 MHz до 2,5 GHz | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) | P обозначает номинальную максимальную выходную мощность передающего устройства. В качестве единицы измерения используется ватт (Вт). Для пространственного разноса используется d метр (м). Сила электромагнитного поля фиксированного радиочастотного устройства определяется местным контролем*1. Однако это должно попадать в зону совместимости в каждом диапазоне радиочастоты*2. Вблизи устройства со следующим символом могут возникать помехи.  |

Примечание 1: При значениях 80 MHz и 800 MHz применяется более высокий частотный диапазон.

Примечание 2: Принципы вышеупомянутой политики могут не применяться во всех случаях.

Поглощение зданиями, объектами и человеческим телом или отражение влияют на распространение электромагнитной энергии.

*1 Силу электромагнитного поля фиксированного радиопередатчика, включая поля станции беспроводных телефонных баз, наземной мобильной станции, любительского радио, радиовещания AM/FM и телевизионного вещания, сложно правильно предположить. Чтобы оценить электромагнитную среду относительно фиксированного радиопередатчика, необходимо провести локальный осмотр. Проверьте GP-УН332 на предмет нормального функционирования, если измеренная электромагнитная мощность GP-УН332 превышает описанный выше уровень совместимости. В случае обнаружения некорректной работы необходима передислокация GP-УН332 или необходимо принять другие меры по устранению неисправности.

*2 В диапазоне частот от 150 kHz до 80 MHz мощность поля должна быть менее 3 V/m.

Технические характеристики, касающиеся безопасности в медицинских условиях

- Рабочий режим - "Непрерывная работа".
- Обратите внимание, что это изделие относится к КЛАССУ I при использовании с адаптером переменного тока.
- Во избежание поражения электрическим током подключайте данное изделие только к источнику питания (коммерческому), оснащеному защитным заземлением.
- Поскольку все периферийные устройства, подключенные к сигнальному входу или сигнальному выходу, представляют собой медицинскую систему, для соответствия всей системы стандартам пункта 16 IEC60601-1 необходимо обеспечить надежность и ответственность.
Не касайтесь одновременно любого из данных разъемов и пациента.
- Обратитесь к дилеру, установщику или в службу поддержки, как описано в инструкции по эксплуатации, для установки.
- Не устанавливайте данное изделие в местах, где трудно вынуть шнур питания.
- Используйте сетевой штекер "Hospital Grad" и ШНУР ПИТАНИЯ для совместимости с ANSI/AAMI ES60601-1 (для США)/CAN/CSA-C22.2 № 60601-1 (для Канады).
- В случае ОДНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ температура в правой стороне корпуса CCU может повыситься. В таком случае существует ОПАСНОСТЬ получения ожогов при его касании.
- Если данное изделие использовалось в течение многих лет, существует вероятность того, что некоторые детали повреждены, что может стать причиной неисправности или несчастного случая в зависимости от среды использования, даже в случае отсутствия видимых неисправных деталей. Ежедневно проверяйте на предмет наличия следующих признаков.

Обнаружили какой-либо из этих признаков?

- Дым, запах гари или нехарактерный звук.
- Кабель питания, сетевой шнур или адаптер переменного тока чрезмерно горячие. Наличие трещины или обрыва.
- При касании данного изделия следует череда электрических ударов.
- При включении питания изображение не отображается.
- Нехарактерный звук вентилятора. Вентилятор не вращается.
- Другая необычная ошибка или повреждение.

Немедленно прекратите использование этого изделия

Во избежание повреждения данного изделия или несчастного случая отключите питание и обратитесь к дилеру или установщику относительно осмотра или демонтажа данного изделия.

Описания графических символов



Этот символ обозначает включение/выключение питания. Состояние включения/выключения зафиксировано.



Этот символ обозначает эквипотенциальный терминал, который будет использоваться для обеспечения эквипотенциала каждой части системы.



Этот символ обозначает переменный ток (AC).



Этот символ обозначает постоянный ток (DC).



Этим символом обозначено предупреждение, что существует опасность нагревания и получения ожогов при касании.



Этот символ является знаком сертификации UL в США.



Этим символом обозначена обязательная маркировка соответствия в европейской экономической зоне (EEA).



Этим символом обозначена маркировка отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE) в Европейской экономической зоне (EEA).

- Опции
 - Головка камеры 3MOS HD : GP-UH332H
 - Кабель камеры UHD : GP-UC532G03 (3 m)
 - GP-UC532G06 (6 m)
 - GP-UC532G15 (15 m)
 - GP-UC532G03A (3 m)
 - (выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)
 - GP-UC532G06A (6 m)
 - (выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)
 - GP-UC532G15A (15 m)
 - (выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)
 - Адаптер переменного тока : MPU60A-105-P49L10*
 - (Sinpro Electronics Co., Ltd.)

Содержание

| | |
|--|-----|
| EMC для использования данного изделия в медицине..... | 233 |
| Технические характеристики, касающиеся безопасности в медицинских условиях..... | 236 |
| Важные правила техники безопасности..... | 240 |
| Ограничение ответственности..... | 241 |
| Отказ от гарантии..... | 241 |
| Предисловие..... | 242 |
| Предполагаемое использование..... | 242 |
| Торговые знаки и зарегистрированные торговые марки..... | 242 |
| Меры предосторожности..... | 243 |
| Главные элементы управления и их функции..... | 245 |
| Головка камеры (опция)..... | 245 |
| Блок управления камерой (CCU)..... | 246 |
| Конфигурация системы..... | 250 |
| Меры предосторожности при монтаже..... | 251 |
| Как установить..... | 252 |
| Как установить объектив..... | 253 |
| Настройка с помощью меню SETUP..... | 254 |
| Меню SETUP..... | 254 |
| Как отобразить меню..... | 256 |
| Основные операции..... | 257 |
| Восстановление настроек по умолчанию..... | 258 |
| MAINTENANCE MENU..... | 259 |
| Настроить профиль..... | 260 |
| EXPOSURE..... | 260 |
| ① Настройте AE [AE]..... | 260 |
| ② Установите электронный затвор [SHUTTER]..... | 260 |
| ③ Настройте добавление пикселей [BINNING]..... | 261 |
| ④ Отрегулируйте усиление [GAIN]..... | 261 |
| ⑤ Установите длительную экспозицию [LONG EXPOSURE]..... | 261 |
| ⑥ Задайте область обнаружения яркости [AREA SELECTION]..... | 262 |
| ⑦ Установите степень определения яркости [PEAK/AVE LEVEL]..... | 263 |
| ⑧ Задайте усиление головки [HEAD GAIN]..... | 263 |
| PICTURE..... | 263 |
| ⑨ Установите баланс белого [WHITE BAL MODE]..... | 263 |
| ⑩ Установите подробные данные [DETAIL BAND]..... | 264 |
| ⑪ Задайте функцию цифрового шумоподавления [DNR LEVEL]..... | 264 |
| ⑫ Отрегулируйте уровень гашения [PEDESTAL LEVEL]..... | 264 |
| ⑬ Установите коррекцию вспышки [FLARE COMP]..... | 264 |
| ⑭ Отрегулируйте уровень цвета [COLOR LEVEL]..... | 264 |
| ⑮ Настройте оттенок [COLOR MATRIX]..... | 264 |
| CONTRAST..... | 266 |
| ⑯ Задайте режим гамма-коррекции [GAMMA SELECT]..... | 266 |
| ⑰ Задайте уровень гамма-коррекции [GAMMA VALUE]..... | 266 |
| ⑱ Установите режим колена [KNEE MODE]..... | 266 |
| ⑲ Задайте точку колена [KNEE POINT]..... | 266 |
| ⑳ Установите наклон колена [KNEE SLOPE]..... | 266 |
| ㉑ Задайте кнопку [IE] [IE FUNCTION SELECT]..... | 266 |
| ㉒ Установить уровень коррекции, назначенный кнопке [IE] [IE FUNCTION LEVEL]..... | 267 |
| PROFILE..... | 267 |
| ㉓ Установите ID профиля пользователя ID и отметьте [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]..... | 267 |
| ㉔ Установите дополнительную настройку для каждого режима съемки флуоресцентного изображения [FLUORESCENCE MODE]..... | 268 |

| | |
|---|-----|
| FUNC..... | 268 |
| 25 Задайте функцию вертикального и горизонтального переворота [FLIP AND MIRROR]..... | 268 |
| 26 Задайте отображение состояния вертикального и горизонтального переворота [F+M STATUS DISPLAY]..... | 269 |
| 27 Отобразить цветовую полосу [COLOR BAR]..... | 269 |
| 28 Установите ножные переключатели [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]..... | 269 |
| 29 Сохранение/загрузка профилей [USER PROFILE SAVE/LOAD]..... | 269 |
| 30 Задайте метод сохранения в USB-накопитель/загрузки с него [SAVE/LOAD MODE (USB)]..... | 270 |
| 31 Установите включение/выключение масштабирования [DIGITAL ZOOM]..... | 270 |
| 32 Установите отображение коэффициента масштабирования [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]..... | 270 |
| SYSTEM..... | 270 |
| 33 Задайте положение OSD вывода видеосигнала [OSD POSITION]..... | 270 |
| 34 Задайте сигнал вывода HDMI [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]..... | 270 |
| 35 Задайте разъем ввода/вывода синхронизирующего сигнала [G/L SYNC TERMINAL SETTING]..... | 270 |
| 36 Отображение состояния синхронизации [G/L SYNC STATUS INFO]..... | 271 |
| 37 Настройте часы [TIME ADJUSTMENT]..... | 271 |
| 38 Восстановите настройку профиля по умолчанию [USER PROFILE RESET]..... | 271 |
| HEAD..... | 272 |
| 39 Задайте затенение белого [WHITE SHADING]..... | 272 |
| 40 Отрегулируйте горизонтальное/вертикальное положение экрана [H/V PHASE ADJUST]..... | 272 |
| Дефектовка..... | 273 |
| Технические характеристики..... | 274 |
| Стандартные аксессуары..... | 275 |
| Опционные принадлежности..... | 275 |

Важные правила техники безопасности

- 1) Следует изучить настоящую инструкцию.
- 2) Следует сохранить настоящую инструкцию.
- 3) Следует обратить внимание на все предупреждения.
- 4) Надо соблюсти все правила.
- 5) Нельзя использовать этого прибора вблизи воды.
- 6) Следует очистить только сухими концами.
- 7) Нельзя закрывать всех вентиляционных отверстий и проемов. Монтируют в соответствии с инструкцией изготовителя.
- 8) Нельзя монтировать прибора вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительный регистры, печки или прочие устройства (включая усилители), выделяющие теплоту.
- 9) Штекер поляризованного или заземляющего типа следует использовать надлежащим образом. Поляризованный штекер имеет два штыря, один из которых шире другого. Штекер заземляющего типа имеет два штекера и заземляющий контакт. Широкий штекер или третий контакт предназначены для обеспечения Вашей безопасности. Если штекер не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Защитите шнур питания от повреждения при наступлении или зажатии, особенно в месте нахождения вилок, розеток и в местах выхода из изделия.
- 11) Следует применять только приспособления/принадлежности, назначенные изготовителем.
- 12) Следует использовать только тележку, подставку, треножник, кронштейн или стол, оговоренные изготовителем, или поставленные с аппаратурой. При использовании тележки надо внимательно переместить комбинацию тележки и аппаратуры во избежание ранения из-за опрокидывания.



- 13) Во время грозы или при оставлении аппаратуры в бездействии в течение длительного периода надо отключить ее от сети питания.
- 14) Следует обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту за всеми работами по техобслуживанию и ремонту. Техобслуживание и ремонт требуются во всех случаях, когда аппаратура повреждена, когда силовой кабель или вилка повреждены, когда жидкость пролита, когда какие-либо объекты упали в аппаратуру, когда аппаратура подверглась воздействию атмосферных осадков или влаги, либо же когда аппаратура не работает правильно, либо упала с высоты.

Ограничение ответственности

НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

ЭТО ИЗДАНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ. В ИНФОРМАЦИЮ, ПРИВЕДЕННУЮ В ДАННОМ ИЗДАНИИ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ В ИЗДАНИЕ И/ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ(ИЕ) ПРОДУКТ(Ы).

Отказ от гарантии

НИ В КАКИХ СЛУЧАЯХ, КРОМЕ ЗАМЕНЫ ИЛИ ОБОСНОВАННОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКТА, «Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ ИЛИ ЛИЦОМ ЗА СЛУЧАИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИВАЯСЬ ЭТИМ:

- (1) ВСЯКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ТИПОВЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ;
- (2) ВСЯКОЕ НЕУДОБСТВО, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ НЕБРЕЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;
- (3) НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ РАЗБОРКУ, РЕМОНТ ИЛИ МОДИФИКАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ;
- (4) НЕУДОБСТВО ИЛИ ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НЕПРЕДСТАВЛЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ОТКАЗ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ;

- (5) ЛЮБУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ, КОСВЕННОЕ НЕУДОБСТВО ИЛИ ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ СИСТЕМЫ, КОМБИНИРОВАННОЙ С УСТРОЙСТВАМИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ;
- (6) ЛЮБУЮ РЕКЛАМАЦИЮ ИЛИ ИСК О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА, ВОЗБУЖДЕННЫЕ ЛЮБЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОКАЗАВШИМИСЯ ОБЪЕКТОМ СЪЕМКИ, ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО, ЧТО ИЗОБРАЖЕНИЕ С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОХРАНЕННЫЕ ДАННЫЕ, ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ СТАНОВИТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИНЫХ ЦЕЛЕЙ.

Предисловие

Эта система представляет собой компактный и легкий блок управления камерой HD (далее ССУ), в котором головка камеры устанавливается отдельно, который оснащен функцией высокого качества изображений и множеством функций, с помощью которых можно осуществлять обработку цифрового сигнала.

- GP-UH332C Блок управления камерой HD

Это изделие используется в сочетании с головкой камеры 3MOS HD (далее именуемой головкой камеры).

- GP-UH332H Головка камеры 3MOS HD
- Доступен многоформатный выход, поддерживающий 1080p, и 1080i.
- Передача сигнала без ухудшения сигнала осуществлена благодаря выходным разъемам HDMI или SDI.
- Функция WDR (расширенный динамический диапазон) позволяет пользователям снимать даже изображения с широким диапазоном контраста яркости, что облегчает их просмотр.

Описания в этой книге основаны на системе с головкой камеры.

Предполагаемое использование

Камера с отдельной HD-головкой серии GP-UH332 компании Panasonic имеет высокое разрешение Full HD (1920×1080), плавное движущееся изображение, поддерживающее 60P, и высокую цветопередачу, предназначенную для использования в качестве хирургических микроскопов или целевых ламп. Это изделие не предназначено для использования в эндоскопической системе, с помощью которой осуществляется обследование пациентов. Изделие также не предназначено для использования в медицинских изделиях, поскольку неисправное изделие может травмировать человека или стать причиной летального исхода, или причинить серьезный материальный ущерб.

Данное изделие соответствует стандартам медицинского электрооборудования IEC60601-1 и IEC60601-1-2.

Для получения информации о местной медицинской регистрации обратитесь к местному поставщику Panasonic.

Торговые знаки и зарегистрированные торговые марки

- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Все другие названные здесь торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Меры предосторожности

Монтажные работы следует поручить дилеру.

Монтажные работы требуют технических навыков и опыта. Несоблюдение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению изделия.

Нужно обязательно обращаться к дилеру.

Проложите провода надлежащим образом.

Короткое замыкание или неправильное прокладывание проводов может привести к пожару или поражению электрическим током.

Необходимо выбрать место монтажа, которое может выдержать общую массу.

Выбор неподходящей монтажной поверхности может вызвать падение или опрокидывание изделия и, как следствие, травмирование.

К монтажным работам следует приступить после тщательного проведения технических мероприятий по усилению и укреплению.

Следует выполнять периодические проверки.

Ржавчина металлических деталей или винтов может вызвать падение прибора, ведущее к травмированию или авариям.

За проверками следует обращаться к дилеру.

При очистке данного продукта отключите его от сети питания.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

В случае возникновения проблем с настоящим продуктом следует немедленно прекратить его использование.

При появлении дыма из изделия, запаха гари или при разрушении внешней части данного изделия последующее использование приведет к возгоранию, травме или повреждению изделия.

Немедленно отключите питание устройства и обратитесь к дилеру.

При включенном питании запрещается проводить работы, связанные с установкой и проводкой.

Несоблюдение данного требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

Нельзя эксплуатировать данный продукт в огнеопасной среде.

Несоблюдение данного требования может привести к взрыву, ведущему к травмированию.

Следует избегать установки данного продукта в местах, где может возникнуть солевое повреждение, либо выделяется агрессивный газ.

Несоблюдение этого правила может привести к разрушению монтажных частей и стать причиной несчастных случаев, таких как падение данного изделия.

Нельзя наносить сильных ударов или толчков по данному продукту.

Несоблюдение этого требования может привести к пожару или травме.

Нельзя вставлять посторонние предметы в изделие.

Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости, например, воды, металлических деталей и т.д., поскольку это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Если это произошло, немедленно отсоедините шнур питания от электрической розетки и обратитесь к дилеру.

Не разбирайте и не изменяйте данное изделие.

Несоблюдение данного требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

Обратитесь к дилеру для проведения осмотра и ремонта.

В случае удара молнии (или во время строительных работ) не прикасайтесь к этому изделию, шнуру питания или подключенным кабелям.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Не размещайте емкости, содержащие жидкость, например, воду, вблизи данного изделия.

В случае попадания жидкости на данное изделие может возникнуть пожар или опасность поражения электрическим током.

Если это произошло, немедленно отсоедините шнур питания от электрической розетки и обратитесь к дилеру.

Не следует вытирать края металлических деталей рукой.

Несоблюдение этого требования может привести к травме.

[Меры предосторожности при эксплуатации прибора]

Для поддержания устойчивых характеристик работы прибора

Части этого изделия могут разрушаться и из-за этого может сократиться срок службы этого изделия при его использовании в местах с высокой температурой и влажностью.


Используйте это изделие при температуре от 0 °C до 40 °C. Несоблюдение этого требования может отрицательно повлиять на компоненты внутри устройства или стать причиной его неисправности. Использование этого изделия при температуре 30 °C или ниже рекомендуется без прямого нагрева обогревателями с учетом тепловыделения в месте расположения изделия.

Нужно обращаться с настоящим прибором осторожно.

Нельзя ронять данный прибор и подвергать его воздействию ударных или вибрационных нагрузок. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности.

Не направляйте это изделие на сильные источники света.

Источник света, такой как прожектор, может вызвать выцветание (световое выделение).

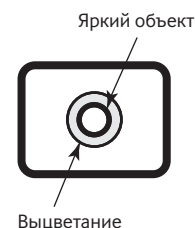

Встроенные батареи

В это изделие установлены батареи.

Не оставляйте батареи в местах, где при солнечном свете или возгорании может возникать чрезмерное тепло.

Аварийный сигнал охлаждающего вентилятора

Когда отображается сообщение о тревоге охлаждающего вентилятора, немедленно отключите питание и обратитесь к дилеру.

Очистка

- Выключите питание и используйте мягкую ткань для очистки этого изделия.
Если пыль трудно удалить, используйте мягкую ткань, смоченную в разбавленном моющем средстве, отожмите ее и вытрите пыль.
Затем вытрите остатки моющего средства сухой тканью.
- Не следует использовать сильнодействующие или абразивные моющие средства для очистки корпуса. Этиловый или изопропиловый спирт можно использовать для очистки головки камеры и ССУ. Однако для очистки кабеля камеры их использовать нельзя.
- При использовании химических салфеток для чистки, ознакомьтесь с прилагаемыми предупреждениями относительно их использования.

Идентифицирующая этикетка


См. идентифицирующую этикетку на нижней или верхней стороне данного устройства для получения информации о классификации устройства, источнике питания и т.д.

USB-накопитель

- Используйте USB-накопитель, совместимый с USB2.0.
- Чтобы поддерживать высокоскоростное чтение/высокоскоростную запись, выполните "ScanDisk" или "CheckDisk" с ПК с ОС Microsoft® Windows®.
- Поддерживается FAT32. Используйте USB-накопитель объемом не более 32 GB. USB с зашифрованным форматом не поддерживается.
- USB-накопитель нельзя отформатировать с помощью ССУ.

Это изделие предназначено для обычного использования в качестве общего электронного оборудования. Использование изделия для особых целей (например, для обеспечения движения, транспорта и лечения) без принятия необходимых мер в соответствии с государственными правилами под собственную ответственность может быть запрещено.

Головка камеры (опция)

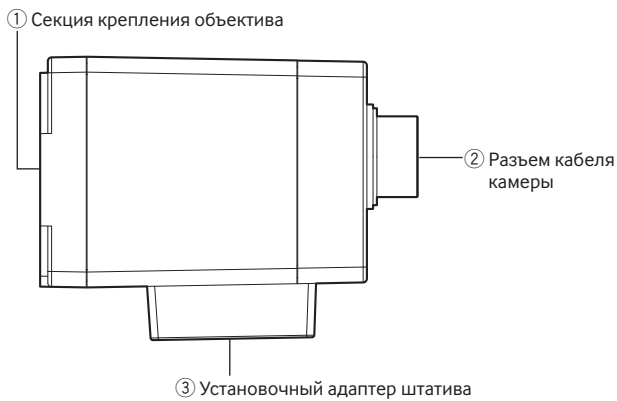

ВНИМАНИЕ:

- Перед подключением или отключением кабеля камеры обязательно выключите питание ССУ.
- Не сгибайте кабель камеры, прилагая чрезмерные усилия, и не ломайте его.
- Используйте головку, предназначенную только для конкретной камеры.

① Секция крепления объектива

В этой секции установлена объектив с креплением C-mount.
(см. стр. 253)

② Разъем кабеля камеры

Разъем для кабеля камеры (опция)

<Кабель для камеры>

GP-UC532G03 (3 m)

GP-UC532G06 (6 m)

GP-UC532G15 (15 m)

GP-UC532G03A (3 m) (выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)

GP-UC532G06A (6 m) (выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)

GP-UC532G15A (15 m) (выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)


③ Установочный адаптер штатива

Отверстие для гнезда штатива используется, когда головка камеры прикрепляется к штативу.

Отверстие гнезда для штатива: 1/4-20 UNC

Блок управления камерой (CCU)

<Вид спереди>

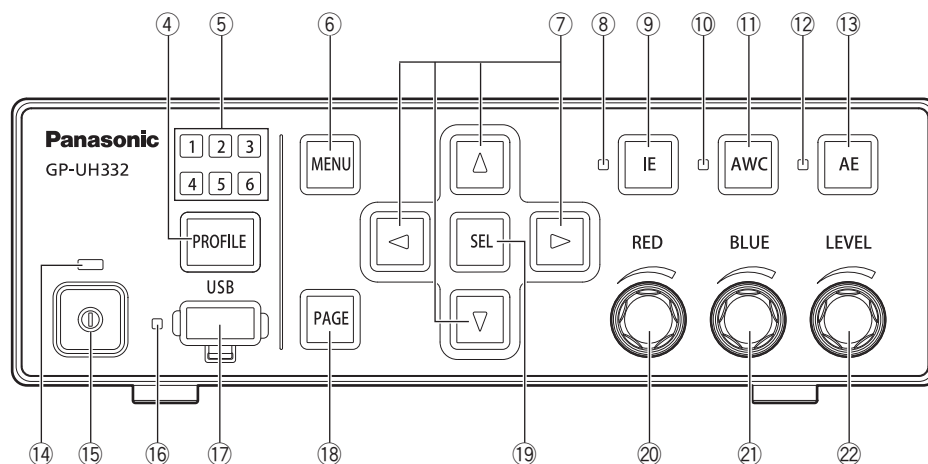

- ④ **Кнопка выбора профиля [PROFILE]**
Выбирает профиль от 1 до 6. Каждый профиль должен быть предварительно настроен с помощью меню SETUP (☞ стр. 260).
- ⑤ **Индикатор выбора профиля [1/2/3/4/5/6] (зеленый)**
Номер выбранного профиля будет гореть зеленым.
- ⑥ **Кнопка меню [MENU]**
Если кнопка удерживается нажатой в течение более 1 секунды, отобразится меню SETUP (ADVANCED MENU). Верхний уровень MENU будет отображаться при нажатии кнопки при отображении меню SETUP. Меню SETUP может быть скрыто нажатием кнопки в течение более 1 секунды.
При нажатии этой кнопки, за исключением отображения меню SETUP, активируется функция блокировки экрана.
- ⑦ **Кнопки вверх/вниз/вправо/влево [Δ / ∇ / \triangleleft / \triangleright]**
• **Кнопка вверх [Δ]/кнопка вниз [∇]**
Изменяет элемент настройки цели, когда отображается меню SETUP.
Если она нажата, когда отображается меню, отличное от меню SETUP, переключится настройка "FLIP AND MIRROR". (☞ стр. 268)
• **Кнопка вправо [\triangleright]/Кнопка влево [\triangleleft]**
Перемещает курсор или изменяет содержимое элемента настройки, когда отображается меню SETUP.
Если она нажата, когда отображается меню, отличное от меню SETUP, коэффициент масштабирования параметра "DIGITAL ZOOM" будет переключен. (☞ стр. 270)
- ⑧ **Индикатор состояния IE (зеленый)**
Указывает состояние включения/выключения функции IE (IMAGE ENHANCEMENT).
Вкл.: Функция IE включена.
Откл.: Функция IE отключена.
- ⑨ **Кнопка IE [IE]**
Включает/выключает функцию IE.
- ⑩ **Индикатор состояния AWC (оранжевый)**
Указывает состояние функции AWC (автоматический контроль баланса белого).
Откл.: AWC деактивирован.
Мигает: AWC активирован или запущен.
Мигает → Выкл.: AWC успешно работает
Вкл.: Ошибка AWC
- ⑪ **Кнопка AWC [AWC]**
Если параметр "WHITE BAL MODE" в меню SETUP установлен на "AWC", AWC будет запущен при нажатии кнопки при отображении изображений камеры.
-
- ВНИМАНИЕ:**
- Если головка камеры не подключена, кнопка [AWC] не работает.
-
- ⑫ **Индикатор состояния AE (зеленый)**
Указывает состояние автоматического/ручного режима функции AE (автоматическая экспозиция).
Вкл.: Автоматическая экспозиция
Откл.: Ручная экспозиция
- ⑬ **Кнопка AE [AE]**
Переключает автоматический/ручной режим функции AE.
- ⑭ **Индикатор состояния питания (зеленый)**
Указывает состояние включения/выключения питания.
Вкл.: Питание включено
Откл.: Питание выключено
- ⑮ **Выключатель питания [Switch mark]**
Включает и выключает питание CCU и головки камеры.
- ⑯ **Индикатор состояния USB (зеленый)**
Указывает состояние USB.
Мигает: Доступ к данным
Вкл.: Монтаж
Откл.: Демонтаж

- ⑰ **USB-разъем [USB]**
Вставив USB-накопитель, можно выполнить сохранение/загрузку профиля.

- ⑱ **Кнопка страницы [PAGE]**
Переключает страницу во время отображения меню SETUP.
QUICK MENU будет отображаться, когда нажата кнопка и отображается меню, отличное от меню SETUP.


- ⑲ **Кнопка выбора [SEL]**
Определяет настройки, когда отображается меню SETUP.
Если нажата кнопка, когда отображается меню, отличное от меню SETUP, отобразится окно "SETTING INFORMATION". При повторном нажатии выполняется восстановление изображений камеры.
В окне "SETTING INFORMATION" отображаются настройки "IE FUNCTION SELECT", "FOOTSW CONTROL CH1/CH2", "SAVE/LOAD MODE (USB)" и "VIDEO FORMAT (HDMI1/HDMI2/SDI1/SDI5)".

- ⑳ **Красный регулятор [RED]**
Регулирует смещение по RED усилению баланса белого.
Выбранный элемент будет изменен, если громкость увеличивается при отображении меню SETUP.

- ㉑ **Синий регулятор [BLUE]**
Регулирует смещение по RED усилению баланса белого.

- ㉒ **Регулятор громкости [LEVEL]**
Регулирует уровень яркости.
Перемещает курсор или изменяет содержимое выбранного элемента во время отображения меню SETUP.

<Задняя панель>

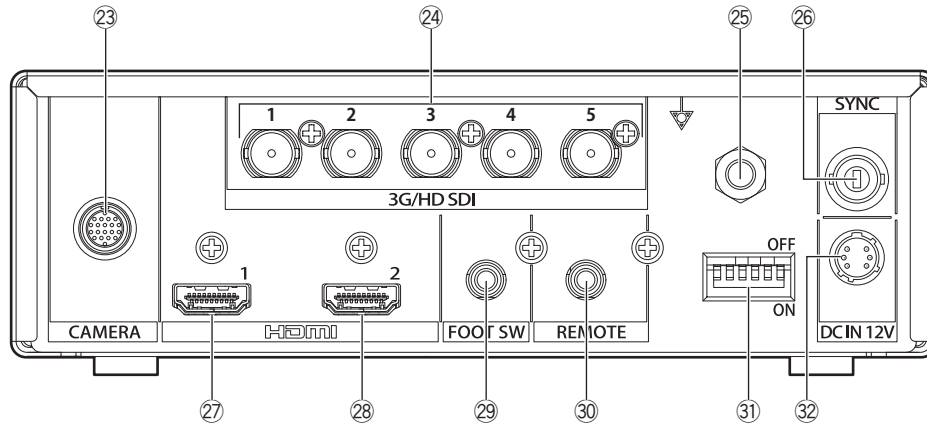

23 **Разъем для кабеля камеры [CAMERA]**
Разъем для кабеля камеры (опция). (см. стр. 275)

24 **Выходные разъемы SDI [3G/HD SDI 1/2/3/4/5]**
Разъем для вывода сигнала 3G-SDI или HD-SDI.

ВНИМАНИЕ:

- Используйте высококачественный кабель, совместимый с 3G-SDI или HD-SDI.

25 **Разъем для выравнивания потенциалов [Potential mark]**
Разъем для заземления выравнивания потенциалов.

26 **Входной/выходной разъем синхронизирующего сигнала [SYNC]**
Разъем для входа или выхода внешнего синхронизирующего сигнала.


27 **Выходной разъем HDMI [HDMI 1]**
Используется для подключения монитора, оснащенного функцией HDMI.

28 **Выходной разъем HDMI [HDMI 2]**
Используется для подключения монитора, оснащенного функцией HDMI.


ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуется использовать кабели HDMI от Panasonic (опция).
- Используйте монитор, на котором отображается значок логотипа HDMI.

29 **Разъем ножного переключателя [FOOT SW]**
Разъем для ножного переключателя.
(Сtereo мини-разъем \varnothing 3,5)

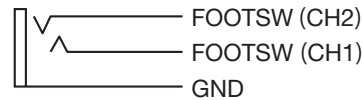

30 **Удаленный разъем [REMOTE]**
Разъем для внешнего управления.
(Сtereo мини-разъем \varnothing 3,5)

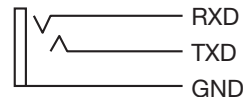

31 **Переключатели настройки функции**
Каждый из них устанавливает функции вывода видео.
Переключатель 1 выбирает частоту кадров 59,94 Hz/50 Hz.

| Переключатель | | | | | | Выход SDI | Выход HDMI |
|---------------|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ON | – | – | – | – | – | 59,94 Hz | 59,94 Hz |
| OFF | – | – | – | – | – | 50 Hz | 50 Hz |

Переключатели со 2 по 6 выбирают формат видеосигнала для выходного разъема SDI и выходного разъема HDMI.

| *1 | Переключатель | | | | | | Выход SDI | Выход HDMI |
|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| – | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 1080p | 1080p | |
| – | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1080i | 1080i | |


Если выбран параметр, отличный от приведенного выше, будет выведен формат, обозначенный *1.

ВНИМАНИЕ:

- Обязательно переключите переключатель настройки функции, когда питание отключено.


- 32 **Разъем питания 12 V постоянного тока [DC IN 12V]**
Разъем для внешнего источника постоянного тока более 12 V постоянного тока (4 А и более).
Совместимый разъем (По состоянию на август 2017 г.)
: HR10A-7P-6S(73)
производства HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

Корпус со штырьковыми выводами совместимого разъема

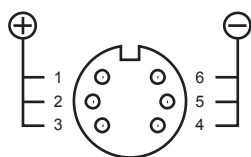

(Разъем кабеля)

Конфигурация системы

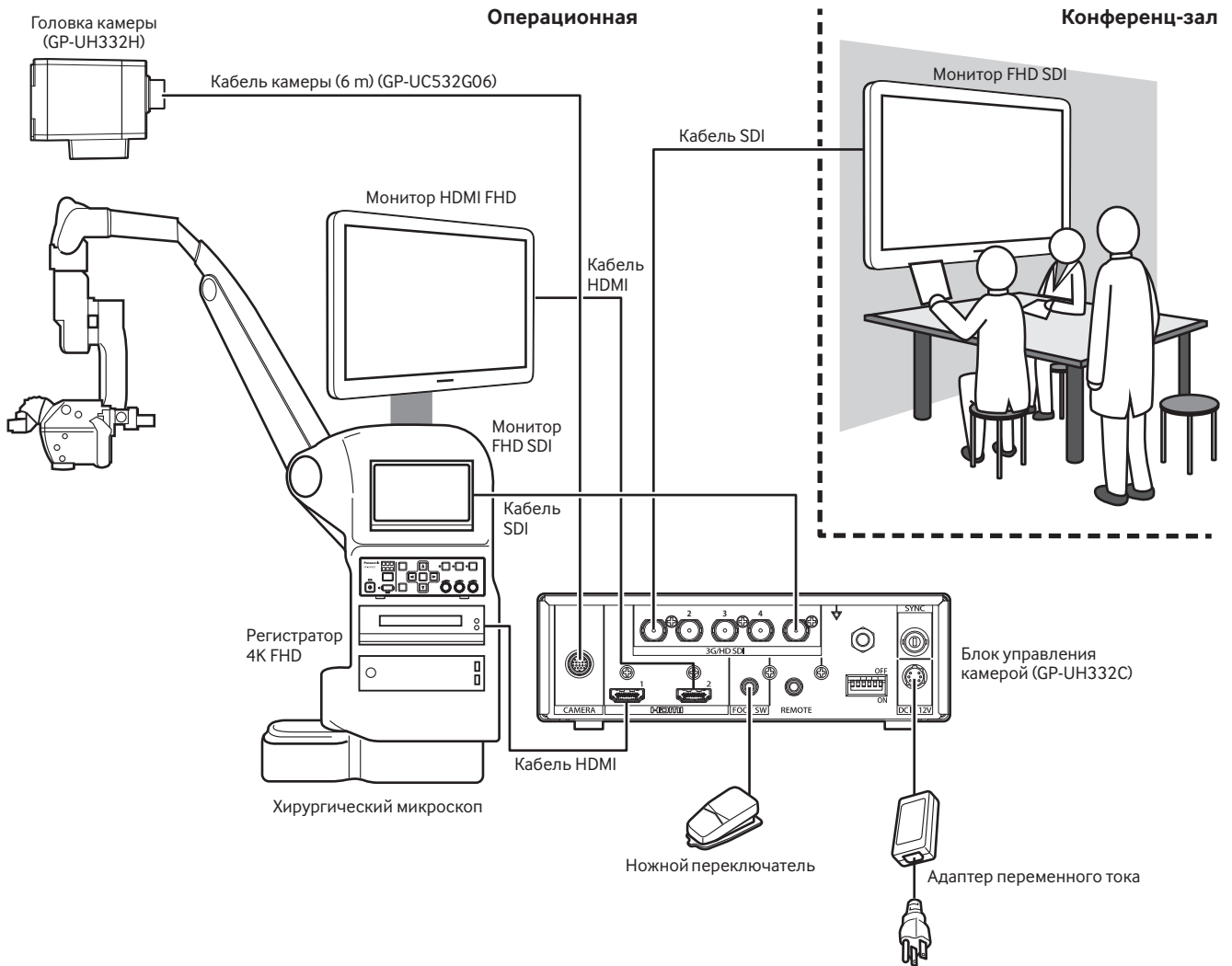

Кабель HDMI:

Используйте кабель HDMI, на котором есть логотип HDMI. (Рекомендуется использовать кабель HDMI от Panasonic).

Кабель SDI:

Используйте кабель SDI, который поддерживает 3G-SDI и HD-SDI.

Меры предосторожности при монтаже

Предостережения:

- ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТТ. 12 V КЛАССА 2 (UL 1310/CSA 223) или ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Установка должна выполняться в соответствии с местными электротехническими правилами и нормами.

Данное изделие предназначено для эксплуатации в помещении.

Данный продукт не может эксплуатироваться под открытым небом.

Не следует подвергать данное изделие воздействию прямого солнечного света в течение длительного времени и не следует устанавливать изделие в непосредственной близости от отопителя или кондиционера воздуха. Это может привести к падению или неисправности. Следует защищать данное изделие от воздействия воды и влаги.

Приобретите штатив отдельно.

Штатив для крепления головки камеры не входит в комплект поставки. Подготовьте его с учетом особенностей места установки камеры.

Расстояние от CCU до стены не должно быть менее 10 см.

Если CCU установлен вплотную к стене, тепловыделение блокируется, что может стать причиной неисправности.

Не устанавливайте данную систему во влажных или пыльных местах.

В противном случае срок службы внутренних деталей может быть сокращен.

Не устанавливайте и не используйте данную систему в следующих местах:

- Места, в которых возможно воздействие влаги от дождя или брызг воды
- Места, где использован химикат, как плавательный бассейн
- Места, подверженные воздействию влаги, пыли, пара и маслянистого дыма
- Места, где возникает радиация, рентгеновское излучение, сильные радиоволны или сильное магнитное поле
- Места, в которых образуется агрессивный газ
- Места, где температура выходит за пределы 0 °C – 40 °C
- Места, подверженные воздействию вибраций (данное изделие не предназначено для применения в автомобилях).
- Места, где температура может быстро изменяться, например, периферийные области выпускных отверстий кондиционеров или двери, выходящие наружу

Радиопомехи


Изображения могут быть искажены вблизи передающей антенны для телевизионных или радиовещательных сигналов или электрических или магнитных полей (например, вызванных двигателем и трансформатором).

Обязательно снимайте данное изделие, если оно не используется.

Как установить

Ниже показано, как установить камеру на штатив (приобретается на месте).

<Пример установки камеры на штатив>

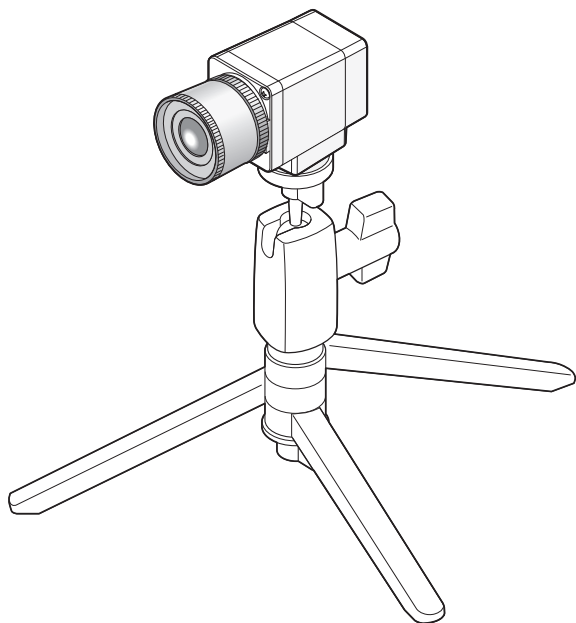


ВНИМАНИЕ:

- Штатив и ССУ должны быть расположены горизонтально.
 - ССУ должен располагаться горизонтально. Не устанавливайте устройство в вертикальном или наклонном положении.
-

Как установить объектив


ВНИМАНИЕ:

- Следует использовать объектив, расстояние проецирования секции крепления объектива которого составляет не более 4 мм.
- Рекомендуемый диапазон диафрагмы объектива составляет от F4.0 до F16. Если выбрать диафрагму объектива, которая менее F4.0, это может стать причиной размытости изображения.
- Когда используется зум-объектив, метод настройки фокуса зависит от объектива. Подробнее об этом см. инструкцию по эксплуатации применяемого объектива.
- Когда объектив снят, обязательно установите крышку на секцию крепления объектива головки камеры.

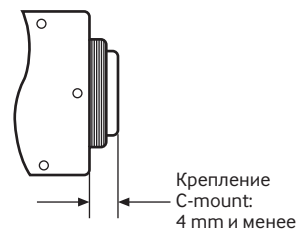


Шаг 1

Снимите колпачок с секции крепления объектива головки камеры.

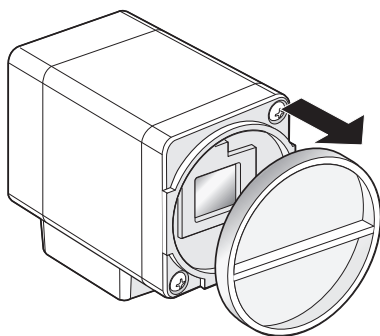

Шаг 2

Поверните объектив с креплением C-mount по часовой стрелке, чтобы задействовать объектив с секцией крепления объектива.

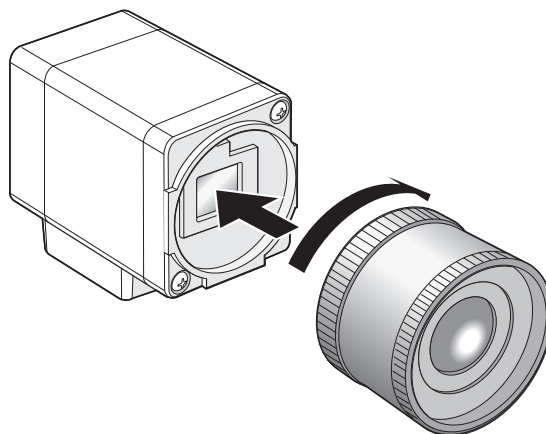

ВНИМАНИЕ:

- Убедитесь, что поверхность оптического фильтра очищена перед установкой объектива. Если поверхность загрязнена, используйте грушу со щеткой для удаления пыли со всей поверхности камеры.

Поддерживаемые объективы (справка/по состоянию на август 2017 г.)

| Производитель | Наименование изделия | Модель |
|---------------|---------------------------|--|
| FUJIFILM | Объектив камеры 3CCD/CMOS | TF2.8DA-8 TF4DA-8 TF8DA-8B TF15DA-8 |

Настройка с помощью меню SETUP

Настройте каждый элемент в меню SETUP заранее, чтобы использовать это изделие. Выполните настройки в соответствии с условиями области съемки с помощью камеры.

Замечание:

- В дополнение к меню SETUP эта система имеет упрощенное меню (QUICK меню), которое отображается с помощью кнопки [PAGE] на передней панели ССУ. Дополнительную информацию о QUICK меню см. на странице 257.

Меню SETUP

Меню настройки состоит из трех меню: "QUICK MENU", "ADVANCED MENU" и "MAINTENANCE MENU".



В ADVANCED MENU можно установить следующие пункты.

| Пункт настройки | Описание | Стр. |
|------------------|---|------|
| EXPOSURE | | |
| ① AE | Устанавливает AE (автоматическую экспозицию). | 260 |
| ② SHUTTER | Устанавливает скорость электронного затвора. | 260 |
| ③ BINNING | Устанавливает режим добавления пикселей. | 261 |
| ④ GAIN | Устанавливает усиление. | 261 |
| ⑤ LONG EXPOSURE | Устанавливает длительную экспозицию. | 261 |
| ⑥ AREA SELECTION | Устанавливает область определения яркости "AE", "GAIN" и "SHUTTER". | 262 |
| ⑦ PEAK/AVE LEVEL | Устанавливает пиковое и среднее значение для обработки определения яркости. | 263 |
| ⑧ HEAD GAIN | Устанавливает усиление головки. | 263 |
| PICTURE | | |
| ⑨ WHITE BAL MODE | Устанавливает баланс белого. | 263 |
| ⑩ DETAIL BAND | Устанавливает детали. | 264 |
| ⑪ DNR LEVEL | Устанавливает уровень цифрового шумоподавления. | 264 |
| ⑫ PEDESTAL LEVEL | Регулирует уровень гашения. | 264 |
| ⑬ FLARE COMP | Устанавливает коррекцию вспышки. | 264 |

| Пункт настройки | Описание | Стр. |
|--|--|------|
| ⑭ COLOR LEVEL | Устанавливает весь уровень цвета. | 264 |
| ⑮ COLOR MATRIX | Устанавливает различные оттенки. | 264 |
| CONTRAST | | |
| ⑯ GAMMA SELECT | Устанавливает режим гамма-коррекции. | 266 |
| ⑰ GAMMA VALUE | Устанавливает уровень гамма-коррекции. | 266 |
| ⑱ KNEE MODE | Устанавливает режим колена. | 266 |
| ⑲ KNEE POINT | Устанавливает точку колена. | 266 |
| ⑳ KNEE SLOPE | Устанавливает наклон колена. | 266 |
| ㉑ IE FUNCTION SELECT | Назначает функцию кнопке [IE] (IMAGE ENHANCEMENT). | 266 |
| ㉒ IE FUNCTION LEVEL | Устанавливает уровень коррекции, выбранный с помощью IE. | 267 |
| PROFILE | | |
| ㉓ USER PROFILE ID USER PROFILE LABEL | Устанавливает заголовок идентификатора камеры. Устанавливает элементы этикеток профилей (с 1 по 6) для отображения. | 267 |
| ㉔ FLUORESCENCE MODE | Установите дополнительную настройку для каждого режима съемки флуоресцентного изображения. | 268 |
| FUNC | | |
| ㉕ FLIP AND MIRROR | Устанавливает вертикальный и горизонтальный переворот изображения. | 268 |
| ㉖ F+M STATUS DISPLAY | Устанавливает отображение состояния вертикального и горизонтального переворота изображения. | 269 |
| ㉗ COLOR BAR | Устанавливает отображение цветной панели. | 269 |
| ㉘ FOOTSW CONTROL CH1 FOOTSW CONTROL CH2 | Назначает функцию ножному переключателю 1. Назначает функцию ножному переключателю 2. | 269 |
| ㉙ USER PROFILE SAVE / LOAD | Сохраняет профили на USB-накопителе/загружает профили с USB-накопителя | 269 |
| ㉚ SAVE / LOAD MODE (USB) | Устанавливает способ сохранения в USB-накопителе/загрузки с него. | 270 |
| ㉛ DIGITAL ZOOM | Устанавливает утверждение электронного масштабирования. | 270 |
| ㉜ DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | Устанавливает отображение коэффициента электронного масштабирования. | 270 |
| SYSTEM | | |
| ㉝ OSD POSITION | Устанавливает положение OSD вывода видео. | 270 |
| ㉞ HDMI1 COLOR DEPTH HDMI2 COLOR DEPTH | Устанавливает глубину цвета HDMI1. Устанавливает глубину цвета HDMI2. | 270 |
| ㉟ G/L SYNC TERMINAL SETTING | Устанавливает входной/выходной разъем синхронизирующего сигнала. | 270 |
| ㊱ G/L SYNC STATUS INFO | Отображает состояние внешнего разъема синхронизации. | 271 |
| ㊲ TIME ADJUSTMENT | Регулирует часы. | 271 |
| ㊳ USER PROFILE RESET | Восстанавливает настройки профиля по умолчанию. | 271 |
| HEAD | | |
| ㊴ WHITE SHADING | Устанавливает белое затенение. | 272 |
| ㊵ H/V PHASE ADJUST | Устанавливает горизонтальную/вертикальную фазы. | 272 |

Как отобразить меню

В приведенном ниже описании объясняется, как отображать каждое меню SETUP на подключенном мониторе.

QUICK MENU

Поверните регуляторы [RED], [BLUE], [LEVEL]. Если кнопка [PAGE] нажимается в течение более 2 секунд, отобразится верхняя страница QUICK MENU.

В QUICK MENU есть две страницы. Чтобы переключить страницу, нажмите кнопку [PAGE].

Для переключения между шестью профилями нажмите кнопку [PROFILE].

ADVANCED MENU

Если кнопка [MENU] удерживается нажатой в течение более 1 секунды, отобразится главная страница ADVANCED MENU.

В ADVANCED MENU семь страниц. Чтобы переключить страницу, нажмите кнопку [PAGE] или переместите курсор на вкладку внизу страницы и нажмите кнопку [◀] или [▶].

Для переключения между шестью профилями нажмите кнопку [PROFILE].

MAINTENANCE MENU

Главная страница MAINTENANCE MENU будет отображаться, если питание включено при одновременном нажатии кнопок [MENU] и [SEL].

В MAINTENANCE MENU две страницы. Чтобы переключить страницу, нажмите кнопку [PAGE] или переместите курсор на вкладку в нижней части меню и нажмите кнопку [◀] или [▶].

Основные операции


ВНИМАНИЕ:

- Следующие функции недоступны, если головка камеры не подключена:
 - Запуск AWC для параметров WHITE BAL MODE
 - FLIP AND MIRROR
 - WHITE SHADING
 - COLOR MATRIX
 - FREEZE
 - H/V PHASE ADJUST
 - DIGITAL ZOOM
- Для получения информации о пунктах MAINTENANCE MENU обратитесь к дилеру.


В приведенном ниже описании объясняется, как в принципе использовать QUICK MENU.

Главная страница QUICK MENU


Стр. BASIC (WB RED GAIN)

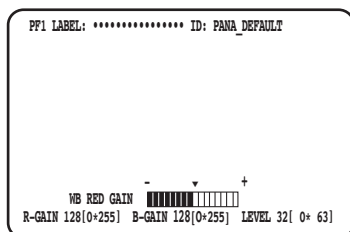


Стр. BASIC (WB BLUE GAIN)

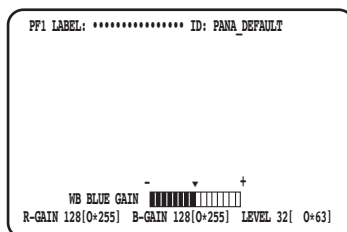

Стр. BASIC (AE LEVEL)

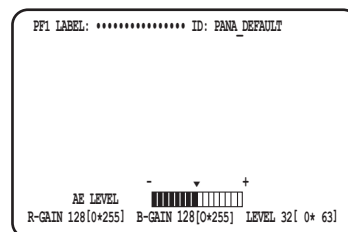

Стр. DETAIL

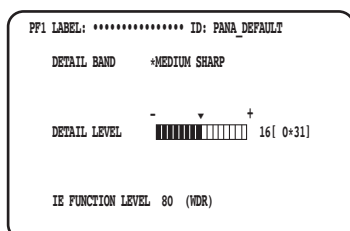

Шаг 1

Страница BASIC

Настройте каждый элемент.

- WB RED GAIN
Поверните регулятор [RED] для регулировки красного уровня.
- WB BLUE GAIN
Поверните регулятор [BLUE], чтобы отрегулировать синий уровень.
- AE LEVEL
Поверните регулятор [LEVEL] для регулировки яркости.

Стр. DETAIL

Страница будет переключена на страницу DETAIL при нажатии кнопки [PAGE] и отображении страницы BASIC.

- DETAIL BAND
Поверните регулятор [RED], чтобы отрегулировать полосу коррекции края.
- DETAIL LEVEL
Поверните регулятор [BLUE], чтобы отрегулировать уровень коррекции края.
- IE FUNCTION LEVEL
Поверните регулятор [LEVEL], чтобы отрегулировать выбранный уровень функции IE.

Шаг 2

Если работа остановлена на 4 секунды, настройка будет сохранена, а изображение камеры будет восстановлено.

В приведенном ниже описании объясняется, как в принципе использовать ADVANCED MENU.

Главная страница ADVANCED MENU

Страница EXPOSURE

| | |
|--|--------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| AE | *AUTO LEVEL 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO --- |
| BINNING | LINE MIX |
| GAIN | *AUTO LEVEL 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF --- |
| AREA SELECTION | ALL |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] |
| HEAD GAIN | -6dB |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Страница PICTURE

| | |
|--|--------------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| WHITE BAL MODE | *AWC R-GAIN 128[0*255] |
| | B-GAIN 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP LEVEL 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] |
| FLARE COMP | OFF |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] |
| COLOR MATRIX | *USER |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Страница CONTRAST

| | |
|--|-----------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35*0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0*15] |
| KNEE SLOPE | 3[0*7] |
| IF FUNCTION SELECT | WDR |
| | LEVEL 80[0*255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Страница PROFILE

| | |
|--|------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| USER PROFILE | |
| USER PROFILE ID | *OFF |
| USER PROFILE LABEL | *OFF |
| FLUORESCENCE MODE | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Страница FUNC

| | |
|--|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSM CONTROL CH1 | PROFILE1←2 |
| FOOTSM CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Страница SYSTEM

| | |
|--|------------|
| OSD POSITION | UPPER LEFT |
| HDMI1 COLOR DEPTH | YbPr(422) |
| HDMI2 COLOR DEPTH | YbPr(422) |
| G/L SYNC TERMINAL SETTING | OUT |
| G/L SYNC STATUS INFO | INTERNAL |
| *TIME ADJUSTMENT | |
| *USER PROFILE RESET | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Страница HEAD

| | |
|--|-----------|
| WRITE SHADING | AUTO(SET) |
| H/V PHASE ADJUST H | 0[-20*20] |
| V | 0[-11*11] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Шаг 1

Настройте каждый элемент.

- Выберите элемент, который нужно установить. Переместите курсор, повернув регулятор [RED] или нажав кнопку [Δ] или [∇].
- Измените заданный элемент. Поверните регулятор [LEVEL] или нажмите кнопку [◀] или [▶].
- Показать страницу расширенной настройки. Нажмите кнопку [SEL] для указания пункта "*".
- Вернитесь на страницу настройки верхнего уровня. Нажмите кнопку [MENU].

Замечание:

- Курсор является мигающей частью. В этом документе он обозначен "Затенено".

Шаг 2

Нажимайте кнопку [MENU] в течение 1 секунды или более после сохранения содержимого настройки, чтобы закрыть страницу настройки и вернуться к изображению камеры. Содержимое установки будет поддерживаться даже после выключения питания CCU.

Восстановление настроек по умолчанию

- Чтобы восстановить каждый параметр по умолчанию в SETUP MENU, переместите курсор на элемент, который следует изменить, и одновременно удерживайте кнопки [◀] и [▶] в течение 1 секунды или более.
- Чтобы восстановить начальную настройку всех профилей, используйте "USER PROFILE RESET". (стр. 271)
- Чтобы восстановить начальную настройку только выбранного профиля, нажимайте кнопку [PROFILE] не менее 1 секунды.
- Чтобы восстановить начальную настройку всех элементов на каждой странице "ADVANCED MENU", переместите курсор на вкладку в нижней части страницы и одновременно удерживайте кнопки [◀] и [▶] в течение 1 секунды или более.

MAINTENANCE MENU

Для получения дополнительной информации и информации о методе управления MAINTENANCE MENU, обратитесь к дилеру.

| Пункты настройки | Структура |
|-------------------------------|---|
| CUSTOM | |
| OSD OUTPUT SEL (HDMI) | Устанавливает отображение OSD вывода HDMI. |
| OSD OUTPUT SEL (SDI) | Устанавливает отображение OSD вывода SDI. |
| OSD CHARACTER MODE | Указывает формат символов OSD. |
| KEY BIND (MENU) | Назначает функцию кнопке [MENU]. |
| KEY BIND (↑↓) | Назначает функции кнопкам [Δ] и [▽]. |
| KEY BIND (←→) | Назначает функции кнопкам [◀] и [▶]. |
| FUNC / INFO | |
| BLEMISH COMP | Устанавливает коррекцию дефектов. |
| BLACK BAL | Устанавливает баланс черного. |
| CABLE DIAG MODE | Диагностирует качество кабеля камеры. |
| DIPSW STATUS | Указывает установленный статус DIPSW. |
| FPGA STATUS | Отображает температуру FPGA. |
| ALL RESET | Восстанавливает все настройки по умолчанию. |
| CPU VER. (MAIN / SUB) | Отображает версию CPU. |
| FPGA VER. (FRONT/REAR) | Отображает версию FPGA (CCU). |
| HEAD VER. | Отображает версию FPGA (HEAD) и тип камеры. |

Замечание:

- С помощью параметра [ALL RESET] нельзя инициализировать следующее:
[HEAD GAIN], [WHITE SHADING], [H/V PHASE ADJUST] в ADVANCED MENU, и [BLEMISH COMP] в MAINTENANCE MENU.

Настроить профиль

Если детали, гамма, оттенок и т. д. регистрируются как профиль в соответствии с местом установки, пользователь может вызвать зарегистрированное содержимое только нажатием кнопки [PROFILE] на передней панели ССУ.

Можно зарегистрировать до 6 профилей. Настройка, подходящая для захвата флуоресцентного изображения, задана в PROFILE 5 и PROFILE 6.

Регистрацию можно выполнить на главной странице ADVANCED MENU. В профиле четыре страницы. Номер профиля будет отображаться в верхнем левом углу страницы соответствующего профиля.

Символы, указанные на "USER PROFILE LABEL", будут отображаться в разделе "LABEL" (стр. 267). Начальная настройка в PROFILE с 1 по 4 пуста.

Страница EXPOSURE

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

Страница PICTURE

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| WHITE BAL MODE | *AWC | R-GAIN | 128[0*255] |
| | | B-GAIN | 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP | LEVEL | 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] | | |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] | | |
| FLARE COMP | OFF | | |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] | | |
| COLOR MATRIX | *USER | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

Страница CONTRAST

| | |
|--|-----------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35*0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0*15] |
| KNEE SLOPE | 3[0*7] |
| IE FUNCTION SELECT | WDR |
| LEVEL | 80[0*255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Страница PROFILE

| | |
|--|------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | |
| USER PROFILE | |
| USER PROFILE ID | *OFF |
| USER PROFILE LABEL | *OFF |
| FLUORESCENCE MODE | OFF |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

Настройка EXPOSURE

① Настройте AE [AE]

Яркость изображения будет автоматически отрегулирована, если для параметра AE (автоматическая экспозиция) выбрано "AUTO". Если выбран параметр "MANUAL", яркость изображения можно отрегулировать вручную. Уровень AE можно установить на странице дополнительных настроек.

Функция AE регулирует яркость изображения, управляя параметрами "GAIN" и "SHUTTER".

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

② Установите электронный затвор [SHUTTER]

Выберите скорость электронного затвора из следующих значений: "AUTO", "MANUAL(FIX)", "MANUAL(VAL)"

Если выбран параметр "MANUAL", можно указать скорость электронного затвора. Для значения скорости доступны следующие параметры:

Когда частота кадров составляет 59,94 Hz: 1/60 (по умолчанию), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, * MANU

Когда частота кадров составляет 50 Hz: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, * MANU

При нажатии кнопки [SEL] после выбора "* MANU" будет отображаться страница "SHUTTER", и можно выполнить тонкую настройку выдержки.

Диапазон регулировки составляет от 10/1125 до 1124/1125.

Если для "AE" выбран параметр "MANUAL", скорость электронного затвора можно тонко настроить с помощью [LEVEL], выбрав "MANUAL(VAL)".

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

| | |
|---------------|-----------|
| ** SHUTTER ** | |
| SHUTTER | MANU |
| MANU SET | 1124/1125 |

Замечание:

- Чтобы настроить "SHUTTER", выберите "MANUAL" для "AE". (☞ стр. 260)
 - Если мерцание наблюдается при флуоресцентном освещении 50 Hz, выбор "1/100" в качестве скорости может уменьшить мерцание.
-

③ Настройте добавление пикселей [BINNING]

Чувствительность можно улучшить путем добавления пикселей.

Режим добавления пикселей можно выбрать из следующих:

- OFF : Отключает добавление пикселей.
- LINE MIX (по умолчанию) : Добавляет пиксели в вертикальном направлении. (Вертикальное разрешение будет ухудшаться).
- PIX MIX : Добавляет пиксели в горизонтальном направлении. (Горизонтальное разрешение будет ухудшаться).
- P/L MIX : Добавляет пиксели в вертикальном и горизонтальном направлениях. (Горизонтальные и вертикальные разрешения будут ухудшаться).

④ Отрегулируйте усиление [GAIN]

Выберите настройку управления усилением из следующих опций:

- OFF : Нет регулировки усиления
- AUTO (по умолчанию) : Автоматическая регулировка усиления. Будет применено допустимое максимальное значение для автоматической регулировки.
- MANUAL(FIX) : Ручная регулировка усиления. Усиление будет зафиксировано на заданном значении.
- MANUAL(VAL) : Настройте усиление с помощью параметра [LEVEL] вручную, когда для "AE" выбран параметр "MANUAL". Оно обеспечивает более точную настройку, чем "MANUAL(FIX)".

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

⑤ Установите длительную экспозицию [LONG EXPOSURE]

Выберите длительную экспозицию из следующих значений: "OFF", "AUTO", "MANUAL(FIX)", "FIX(x1)".

- OFF (по умолчанию) : Отключает длительную экспозицию.
- AUTO : Автоматически контролирует длительную экспозицию. Максимальное значение автоматического управления будет установлено в качестве времени хранения.
- MANUAL(FIX) : Позволяет вручную регулировать длительную экспозицию. Время будет установлено на заданное время хранения. Время хранения может быть выбрано из параметров "OFF", "x2", "x4" или "x8".
- FIX(x1) : Отключает длительную экспозицию. Она доступна, если параметр "MANUAL" выбран для AE.

6 Задайте область обнаружения яркости [AREA SELECTION]

Если яркий свет, такой как прожектор, присутствует на фоне объекта, объект может казаться темным. Чтобы устранить это явление, можно выполнить маскировку ярких областей для коррекции фона и скрытия ярких участков.


Переместите курсор к параметру "AREA SELECTION" и используйте кнопку [◀] или [▶], чтобы выбрать область.

| | | |
|--|----------|--------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | |
| AE | *AUTO | LEVEL 32[0+ 63] |
| SHUTTER | AUTO | --- |
| SHOOTING | LINE MIX | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL 12dB[3+ 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | --- |
| AREA SELECTION | ALL | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0+8] | --- |
| HEAD GAIN | -6dB | --- |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | |


Область можно выбрать из следующих вариантов:

* Области обнаружения, показанные на приведенных ниже рисунках, не отображаются.


ALL (по умолчанию): Цель обнаружения - это вся область на экране.

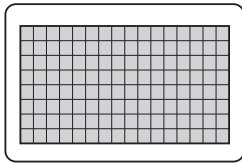


M CIRCLE: Цель обнаружения - это область среднего круга в центре экрана.

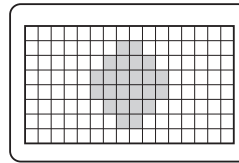

S CIRCLE: Цель обнаружения - это небольшая область круга в центре экрана.

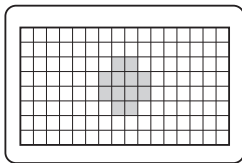

L CIRCLE: Цель обнаружения - это большая область круга в центре экрана.

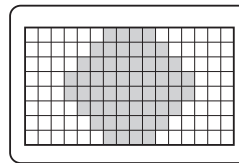


MANU: Цель обнаружения указана вручную.
(☞ стр. 262)

AUTO: Темные области автоматически маскируются, а обнаруживаются только яркие области.

Установите область обнаружения вручную

Установите область обнаружения вручную.

Экран настройки области обнаружения

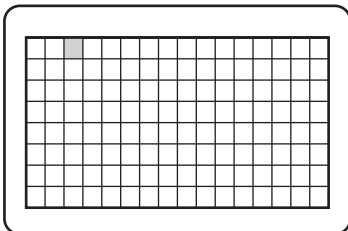

Шаг 1

Выберите "MANU" для "AREA SELECTION" и нажмите кнопку [SEL].

→ Появится экран настройки маски.

Шаг 2

Переместите курсор в зону отсутствия обнаружения с помощью кнопки [Δ], [▽], [◀] или [▶] и нажмите кнопку [SEL].

→ Маскированная область отображается серым цветом.

Замечание:

- Обнаружение выполняется только в замаскированных областях.
- Чтобы отменить скрытую область, переместите курсор в область, подлежащую отмене, и нажмите кнопку [SEL]. Для отмены всех замаскированных зон нажмите и удерживайте кнопки [◀] и [▶] одновременно в течение 1 секунды или более.

Шаг 3

Нажмите кнопку [MENU] после завершения настройки области.

→ Страница MENU будет восстановлена.

⑦ Установите степень определения яркости [PEAK/AVE LEVEL]

Переместите курсор на "PEAK/AVE" и используйте кнопку [\leftarrow] или [\rightarrow], чтобы отрегулировать уровень обнаружения. Когда значение перемещается в направлении "0", будет обнаружено пиковое значение (максимальное значение). Когда значение перемещается в направлении "8", будет обнаружено среднее значение.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BUNNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

⑧ Задайте усиление головки [HEAD GAIN]

Коэффициент усиления головки можно выбрать из -9 dB, -6 dB, -3 dB, OFF (0 dB), +3 dB, +6 dB или +9 dB.

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BUNNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

Настройте PICTURE

⑨ Установите баланс белого [WHITE BAL MODE]

Метод регулировки баланса белого можно выбрать из следующих:

AWC (по умолчанию) : Установлен режим баланса белого. Он подходит для места со стабильным источником света. Когда выбран параметр "AWC", требуется настройка баланса белого.

MANUAL : Баланс белого можно отрегулировать вручную.

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| WHITE BAL MODE | *AWC | R-GAIN | 128[0*255] |
| | | B-GAIN | 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP | LEVEL | 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] | | |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] | | |
| FLARE COMP | OFF | | |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] | | |
| COLOR MATRIX | *USER | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

Когда выбран параметр "AWC", выполните указанные ниже шаги, чтобы настроить баланс белого.

Шаг 1

Направьте камеру на белый объект. Сделайте снимок белого объекта при текущем освещении.

Шаг 2

Нажмите кнопку [AWC] на предыдущем экране.
→ AWC будет запущен, а индикатор состояния AWC начнет мигать. Настройка завершена, когда отобразится "AWC OK" и погаснет индикатор.

Замечание:

- Для каждого профиля доступна настройка. (стр. 260)
- Если индикатор горит после появления "AWC NG" или он загорается после изменения профиля, повторите шаги 1 и 2.
- Если AWC выполняется, когда настройка "R-GAIN" или "B-GAIN" параметра "MANUAL" задается на опцию, отличную от опции по умолчанию (128), возможно, баланс белого нельзя задать надлежащим образом.

Если выбран параметр "MANUAL", переместите курсор "R-GAIN" или "B-GAIN" и отрегулируйте баланс белого с помощью кнопки [\leftarrow] или [\rightarrow].

10 Установите подробные данные [DETAIL BAND]

Определены полоса и уровень коррекции края.

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE  *ANC      R-GAIN 128[ 0*255]
                B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND     *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL      5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP     OFF
COLOR LEVEL    160[ 0*255]
COLOR MATRIX   *USER

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

Шаг 1

Переместите курсор на "DETAIL_BAND" и выберите шаблон полосы из следующего: "OFF", "SOFT", "MEDIUM_SHARP", "SHARP" или "SHARPEST".

Контур становится толще (низкий диапазон), когда курсор перемещается в направлении "SHARPEST", контур становится тоньше (высокий диапазон) в направлении "SOFT".

Шаг 2

Переместите курсор на "DETAIL_LEVEL", чтобы отрегулировать уровень интенсивности.

Когда значение увеличивается, изображение становится более резким, а при уменьшении изображение становится более мягким.

Замечание:

- Контур объекта фотосъемки может быть неровным, но это нормально. Если это явление нежелательно, уменьшите "DETAIL_BAND" или "DETAIL_LEVEL" и отрегулируйте качество изображения.

11 Задайте функцию цифрового шумоподавления [DNR LEVEL]

Функция цифрового шумоподавления снижает уровень шума. Воспользуйтесь кнопкой [◀] или [▶], чтобы отрегулировать уровень подавления шума.

12 Отрегулируйте уровень гашения [PEDESTAL LEVEL]

Отрегулируйте уровень гашения (уровень черного сигнала) кнопкой [◀] или [▶], просматривая монитор осциллографа или монитор цветного видео.

Когда значение увеличивается, изображение становится ярче, а при уменьшении изображение становится темнее.

13 Установите коррекцию вспышки [FLARE COMP]

Выберите "ON" или "OFF" (по умолчанию), чтобы определить, выполнять ли коррекцию вспышки.

Когда выбрано значение "ON", уровень вспышки уменьшается.

14 Отрегулируйте уровень цвета [COLOR LEVEL]

Отрегулируйте уровень цвета кнопкой [◀] или [▶], просматривая монитор вектроскопа или цветного видео.

Когда значение увеличивается, цвет становится сочнее, а при уменьшении цвет становится бледнее.

15 Настройте оттенок [COLOR MATRIX]

Отрегулируйте оттенок, просматривая монитор вектроскопа или цветного видео.

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE  *ANC      R-GAIN 128[ 0*255]
                B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND     *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL      5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP     OFF
COLOR LEVEL    160[ 0*255]
COLOR MATRIX   *USER

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

```
      ** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B PHASE  ....|....  0 ( 0 )

B GAIN   ....|....  0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET (NEW SETTING)
```

```
      ** MATRIX ** USER
                AFTER (BEFORE)
B/B-Mg PHASE ....|....  0 ( 0 )
B PHASE      ....|....  0 ( 0 )
B-Mg PHASE   ....|....  0 ( 0 )
B/B-Mg GAIN  ....|....  0 ( 0 )
B GAIN       ....|....  0 ( 0 )
B-Mg GAIN    ....|....  0 ( 0 )

USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET (NEW SETTING)
```


Шаг 1

Максимально отобразите цвет, который нужно настроить в центре экрана.

Шаг 2

Выберите ось, которая находится ближе всего к целевому цвету. Ось можно выбрать из следующих вариантов:

USER (по умолчанию), B-Mg, Mg, Mg-R, R, R-Ye, Ye, Ye-G, G, G-Cy, Cy, Cy-B, B

Шаг 3

После выбора оси нажмите кнопку [SEL].
→ Отобразится экран "MATRIX".

Шаг 4

Для выполнения тонкой настройки отрегулируйте "PHASE" (оттенок) и "GAIN" (цветность) с помощью кнопки [◀] или [▶].

Шаг 5

Выберите "BEFORE" или "AFTER" с помощью "EFFECT SELECT" и проверьте, применяется ли эффект. Чтобы определить настройку, выберите "SET(NEW SETTING)", а затем нажмите кнопку [SEL].


Чтобы восстановить предыдущую настройку, выберите "CANCEL", а затем нажмите кнопку [SEL].

Когда цветная ось нечеткая

Когда на экране "MATRIX" выбрана "USER AREA", ось автоматически отображается путем выбора цвета на экране. Выбор цвета выполняется на экране определения цвета.

Черный курсор в виде прямоугольник мигает для выбора целевого цвета на экране определения цвета.


Экран обнаружения цвета

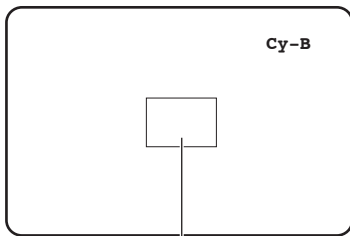

□ Курсор (мигает)

<Таблица разбивки цветовой матрицы>

* Эта таблица является ориентиром для отображения ближайшей оси при настройке.

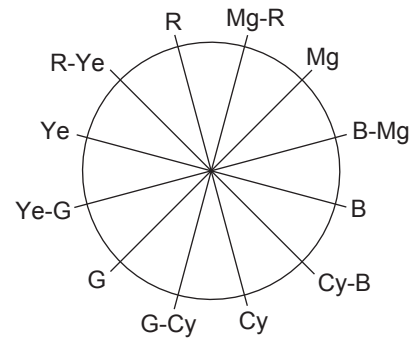

Шаг 1

Направьте камеру в центр объекта, с помощью которого обнаружен цвет.

Если камера неподвижна, переместите прямоугольный курсор в область с целевым цветом нажатием кнопок [Δ], [▽], [◀] и [▶].

Замечание:

- Когда синий регулятор повернут против часовой стрелки, размер прямоугольного курсора изменяется в следующем порядке: большой → средний → маленький. Выберите размер, соответствующий размеру объекта.

Шаг 2


Нажмите кнопку [SEL] или кнопку [MENU].

→ Снова появится экран "MATRIX".

Шаг 3

Чтобы выполнить точную настройку, отрегулируйте "PHASE" (оттенок) и "GAIN" (цветность).

Например, настройка "PHASE" или "GAIN" для "Cy/Cy-B" на следующем экране обеспечивает одновременную настройку "PHASE" или "GAIN" смежных осей "Cy" и "Cy-B" в таблице разделения цветных матриц.

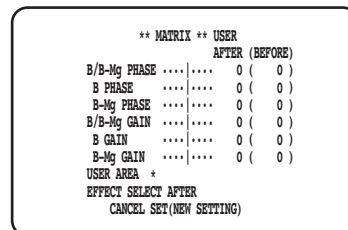

Замечание:


- При обнаружении цвета на оси в таблице разделения цветных матриц смежные оси не отображаются.

Задайте CONTRAST

16 Задайте режим гамма-коррекции [GAMMA SELECT]

Режим гамма-коррекции можно выбрать из следующих:

S-CURVE (по умолчанию) : Увеличивая гамму, можно уменьшить шум при сохранении контраста.
NORMAL : Стандартная гамма-характеристика

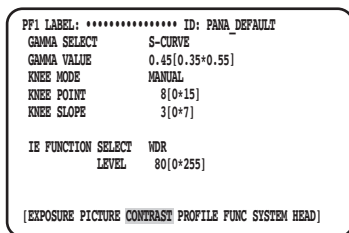

17 Задайте уровень гамма-коррекции [GAMMA VALUE]

Просмотрите монитор осциллографа или цветной видеомонитор, чтобы установить уровень гамма-коррекции.

Установите уровень гамма-коррекции в диапазоне от 0,35 до 0,55 (по умолчанию: 0,45).

Уровень гамма-коррекции будет выключен (гамма= 1), если нажать кнопку [\leq], когда уровень гамма-коррекции равен "0,55".

18 Установите режим колена [KNEE MODE]

Из-за освещения или отражения объекта могут возникнуть "выпуклые блики", в которых яркая часть изображения может выглядеть плоской. Это явление возникает, когда сигнал яркости превышает динамический диапазон камеры. Чтобы установить входные сигналы высокой яркости в динамическом диапазоне камеры, сжимайте градацию с помощью функции колена.

Выберите способ настройки из следующего:

MANUAL (по умолчанию) : Позволяет регулировать точку и наклон колена вручную.
AUTO : Автоматически настраивает точку и наклон колена.

19 Задайте точку колена [KNEE POINT]

Обязательно просмотрите монитор осциллографа или цветной видеомонитор, регулируя точку колена.

Он устанавливает точку сжатия для входных сигналов высокой яркости.

20 Установите наклон колена [KNEE SLOPE]


Обязательно просмотрите монитор осциллографа или цветной видеомонитор, регулируя наклон колена.

Установите уровень сжатия для входных сигналов высокой яркости, регулируя наклон колена.

21 Задайте кнопку [IE] [IE FUNCTION SELECT]

Выберите функцию, которая будет назначена кнопке [IE] (IMAGE ENHANCEMENT) из следующего:

WDR : Функция расширения динамического диапазона осветляет темную область, контролируя чрезмерную экспозицию.
DARK AREA CORRECTION : Адаптивная функция растяжения черного осветляет темную область.
OVER EXPOSURE REDUCTION : Функция коррекции экспозиции контролирует чрезмерную экспозицию.
SMOKE CORRECTION : Функция коррекции дыма убирает белое пятно.
COLOR ENHANCEMENT : Функция улучшения цвета улучшает выбранный цвет.

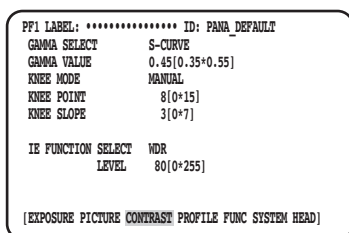

Шаг 2

Переместите курсор на целевой символ с помощью кнопки [Δ], [∇], [◀] или [▶] и нажмите кнопку [SEL].

→ Введенные символы будут отображаться в области редактирования.

<Ввод символов>

- Чтобы пересмотреть символ, переместите курсор на “←” или “→” и нажмите кнопку [SEL]. Переместите курсор на символ, который нужно пересмотреть в диапазоне ввода, и введите правильный символ повторно.
- Чтобы поставить пробел, переместите курсор на “SPACE” и нажмите кнопку [SEL].
- Чтобы удалить все введенные символы, переместите курсор на “RESET” и нажмите кнопку [SEL].

Шаг 3

После ввода названия переместите курсор на “* POSI” и нажмите кнопку [SEL].

→ Отобразится экран позиционирования дисплея и начнет мигать введенное название камеры.

Шаг 4

Используйте кнопки [Δ], [∇], [◀] и [▶], чтобы задать положение названия, и нажмите кнопку [MENU].



→ Позиция отображения будет определена, и экран создания названия будет восстановлен.

24 Установите дополнительную настройку для каждого режима съемки флуоресцентного изображения [FLUORESCENCE MODE]

Установите дополнительную настройку для каждого режима съемки флуоресцентного изображения.

Дополнительную настройку можно выбрать из следующих:

- OFF (по умолчанию) : Не выполняет дополнительную настройку для захвата флуоресцентного изображения.
- MODE1 : Выполняет дополнительную настройку для FLUORESCENCE1.
- MODE2 : Выполняет дополнительную настройку для FLUORESCENCE2.
- MODE3 : Выполняет дополнительную настройку для FLUORESCENCE3.

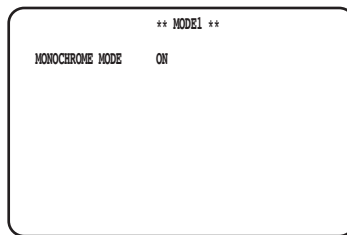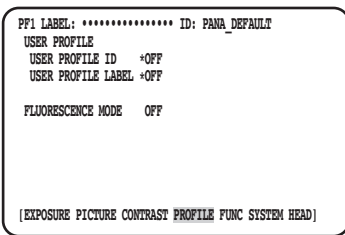

ВНИМАНИЕ:

- Настройка для флуоресцентного изображения предварительно задана в PROFILE 5 и 6.
- При использовании режима захвата флуоресцентного изображения необходимы периферийные устройства, такие как источник света или фильтр и т. д.
- Если Вы намереваетесь их использовать, обратитесь к дилеру.

Замечание:


- Когда выбрано “MODE1”, установите либо значение “ON” (черно-белый режим: по умолчанию), либо “OFF” (цветной режим) для “MONOCHROME MODE”.
- Если установлено значение, отличное от “OFF”, “GAIN” можно задать до 18 dB. (До 12 dB при установке “OFF”).

Задайте FUNC

25 Задайте функцию вертикального и горизонтального переворота [FLIP AND MIRROR]

В качестве функции вертикального и горизонтального переворота доступно следующее:

- OFF (по умолчанию) : Обычный дисплей
- FLIP : Вертикально перевернутый
- MIRROR : Горизонтально перевернутый
- FLIP+MIRROR : Вертикально и горизонтально перевернутый. Чтобы переключить настройку, нажмите кнопку [Δ] или [∇].

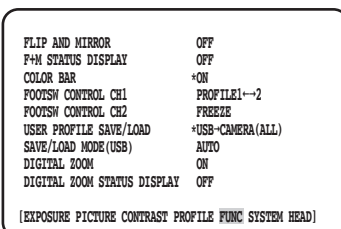

Замечание:

- Функцию стоп-кадра можно выполнить одновременно.

26 Задайте отображение состояния вертикального и горизонтального переворота [F+M STATUS DISPLAY]

Выберите "ON" или "OFF" (по умолчанию), чтобы установить, отображать ли "В" (вертикальный переворот), "Я" (горизонтальный переворот), "У" (вертикальный и горизонтальный переворот) на экране при нажатии кнопки [Δ] или [∇].

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1↔2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

27 Отобразить цветовую полосу [COLOR BAR]

Отобразить цветовую полосу.

Главная страница будет восстановлена при нажатии кнопки [MENU].

Замечание:

- Когда головка камеры не подключена к ССУ, отобразится цветовая полоса.

28 Установите ножные переключатели [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]

Каналу CH1 или CH2 могут быть назначены следующие функции:

| | |
|----------------|--|
| NONE | : Отключите переключатель. |
| FREEZE | : Включает/выключает блокировку экрана. |
| FLIP+MIRROR | : Включает/выключает вертикальный и горизонтальный переворот изображения. |
| FLIP | : Включает/выключает вертикальный переворот изображения. |
| MIRROR | : Включает/выключает горизонтальный переворот изображения. |
| PROFILE 1↔2 | : Переключается между профилями 1 и 2. |
| PROFILE 1↔5 | : Переключается между профилями 1 и 5. |
| PROFILE 1↔6 | : Переключается между профилями 1 и 6. |
| PROFILE 3↔4 | : Переключается между профилями 3 и 4. |
| PROFILE ALL | : Переключается между всеми профилями от 1 до 6 по порядку. |
| ZOOM IN | : Увеличивает изображение, когда для "DIGITAL ZOOM" выбрано значение "ON(ENABLE)". |
| ZOOM OUT | : Уменьшает изображение, когда для "DIGITAL ZOOM" выбрано значение "ON(ENABLE)". |
| ZOOM 1.0x↔2.0x | : Переключается между 1.0x и 2.0x, когда для "DIGITAL ZOOM" выбрано значение "ON(ENABLE)". |

Замечание:

- Управление ножным переключателем будет отключено, когда отобразится меню SETUP.

29 Сохранение/загрузка профилей [USER PROFILE SAVE/LOAD]

Вставив USB-накопитель, можно выполнить SAVE (CAMERA→USB) или LOAD (USB→CAMERA) профиля.

Выберите "ALL", чтобы сохранить или просмотреть все шесть профилей, и выберите "SINGLE", чтобы сохранить или просмотреть один файл.

Не изменяйте имя папки и файла, которые будут созданы в USB-накопителе. Если названия будут изменены, загрузка профиля выполнена не будет. Выполнив сохранение или загрузку, USB-накопитель будет автоматически извлечен. Чтобы постоянно управлять USB-накопителем, выньте и снова вставьте его.

ВНИМАНИЕ:

- Не изменяйте конфигурацию файлов и папок, созданных нажатием кнопки [SAVE]. Это может привести к ошибке загрузки.

30 Задайте метод сохранения в USB-накопитель/загрузки с него [SAVE/LOAD MODE (USB)]

В качестве режима работы при вставке USB-накопителя доступно следующее:

- AUTO : Автоматически отобразится сообщение с запросом действия (чтение/загрузка/ничего).
MANUAL : При установке USB-накопителя никакие действия не выполняются. Работайте на странице [USER PROFILE SAVE/LOAD].

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+H STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | +ON |
| FOOTSH CONTROL CH1 | PROFILE1→2 |
| FOOTSH CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | +USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

Замечание:

- Содержание всех пунктов в QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST", и "PROFILE" в ADVANCED MENU будет сохранено или загружено. (кроме "HEAD GAIN" в "EXPOSURE")

31 Установите включение/выключение масштабирования [DIGITAL ZOOM]

Включите/выключите функцию масштабирования.

Коэффициент масштабирования можно задать в диапазоне от 1x до 2,5x с шагом 0,1x. Чтобы переключить настройку, нажмите кнопку [◀] или [▶].

32 Установите отображение коэффициента масштабирования [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]

Установите, отображать ли текущий коэффициент масштабирования на экране (по умолчанию: OFF).

Замечание:

- Когда выбрано значение 1x, этот коэффициент не будет отображаться на экране.

Задайте SYSTEM

33 Задайте положение OSD вывода видеосигнала [OSD POSITION]

Выберите положение OSD вывода видеосигнала из следующих значений:

- UPPER LEFT : Отображает OSD в верхней левой области угла обзора вывода видеосигнала.
UPPER RIGHT : Отображает OSD в верхней правой области угла обзора вывода видеосигнала.
LOWER LEFT : Отображает OSD в нижней левой области угла обзора вывода видеосигнала.
LOWER RIGHT : Отображает OSD в нижней правой области угла обзора вывода видеосигнала.

34 Задайте сигнал вывода HDMI [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]

Установите выходные сигналы для выходного разъема HDMI.

Когда 1080p или 1080i выбрано для вывода HDMI, доступно следующее:

YPbPr (422), YPbPr (444), RGB (LIMITED), RGB (FULL)

Когда настройка выходного сигнала HDMI или формата видео изменяется, вывод видеосигнала HDMI может быть прерван на несколько секунд.

35 Задайте разъем ввода/вывода синхронизирующего сигнала [G/L SYNC TERMINAL SETTING]



Выберите "IN" или "OUT (default)".

ВНИМАНИЕ:

- Функцию внешней синхронизации можно использовать в блоках управления этой серии. Подключите GP-UH332C или GP-UH532C к разъему ввода/вывода синхронизирующего сигнала. Затем установите "OUT" для ведущего, а "IN" для ведомого устройства, и примените тот же формат вывода видеосигнала.

36 Отображение состояния синхронизации [G/L SYNC STATUS INFO]

Отобразится состояние внутренней ("INTERNAL") или внешней ("EXTERNAL") синхронизации. Когда выбрано "EXTERNAL", горизонтальную фазу можно настраивать.

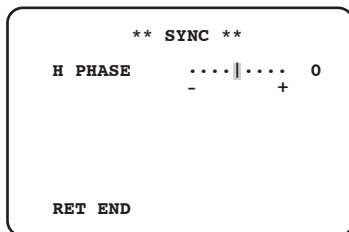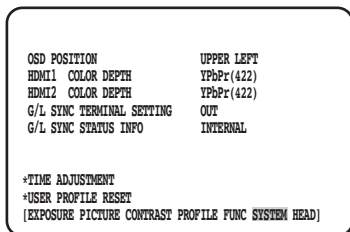

Отрегулируйте горизонтальную фазу

Шаг 1

Переместите курсор на "EXTERNAL" и нажмите кнопку [SEL].

Шаг 2

Отрегулируйте "H PHASE".

Замечание:

- "EXTERNAL" отобразится, когда "IN" выбрано для "G/L SYNC TERMINAL SETTING" и вводятся внешние синхронизирующие сигналы. В другой раз отобразится "INTERNAL".
- При закрытии экрана настройки "H PHASE" (горизонтальная фаза в режиме внешней синхронизации) выход видеосигнала HDMI может быть нарушен примерно на 5 секунд.

37 Настройте часы [TIME ADJUSTMENT]

Установите текущее время "месяц/день/год" и "час/минута".

Чтобы определить настройку, переместите курсор на "SET" и нажмите кнопку [SEL].

При использовании функции сохранения данных USB-накопителя для профилей не забудьте установить время.

38 Восстановите настройку профиля по умолчанию [USER PROFILE RESET]

Настройки по умолчанию восстанавливаются для всех пунктов в QUICK MENU, "EXPOSURE", "PICTURE", "CONTRAST", и "PROFILE" в ADVANCED MENU.

Шаг 1

Переместите курсор на "USER PROFILE RESET" и нажмите кнопку [SEL].

Шаг 2

Отобразится окно подтверждения "USER PROFILE RESET? YES/NO"?

Если выбрано "YES", настройка профиля по умолчанию будет восстановлена.

Замечание:


- Значение "HEAD GAIN" для "EXPOSURE" не будет инициализировано.

Задать HEAD

39 Задайте затенение белого [WHITE SHADING]

Установите "AUTO(SET)" или "MANUAL" для затенения белого.

При установке "AUTO (SET)" для затенения белого

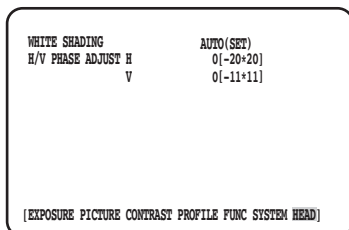

Шаг 1

Направьте камеру на белый объект.

Шаг 2

Выберите "AUTO (SET)" и нажмите кнопку [SEL].

→ Запустится функция затенения белого, и индикация "AUTO (SET)" повторит инвертирование и будет мигать. Автоматическая настройка будет завершена, когда в нижней части MENU отобразится "WHITE SHADING OK".

Замечание:

- Для каждой головки камеры можно установить затенение белого.
- Если отображается "WHITE SHADING NG", повторите шаги 1 и 2.

При установке "MANUAL" для затенения белого

Шаг 1

Выберите "MANU" и нажмите кнопку [SEL].

→ Отобразится экран ручной настройки затенения белого. Отрегулируйте каждое направление красного/синего компонента затенения белого.

40 Отрегулируйте горизонтальное/вертикальное положение экрана [H/V PHASE ADJUST]

Отрегулируйте фазу экрана в горизонтальном (вправо/влево) или вертикальном (вверх/вниз) направлении.

Замечание:

- Для каждой головки камеры можно установить "H/V PHASE ADJUST".

Прежде чем обратиться к дилеру по поводу ремонта, проверьте признаки возможной неисправности в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Если проблема не может быть разрешена даже после проверки и попытки решить проблему, с использованием приведенной таблицы, или если проблема не описана в таблице, то следует обратиться к дилеру.

| Ненормальный признак | Возможная причина/метод решения | Справочные страницы |
|---|--|---------------------|
| Изображение отсутствует | <ul style="list-style-type: none"> Подключен ли кабель надлежащим образом к выходному разъему HDMI или выходному разъему SDI? Проверьте, правильно ли выполнено соединение. | 248 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Совместим ли формат выхода видеосигнала каждого выходного разъема с форматом видеосигнала, отображаемым на мониторе? Проверьте, совместим ли формат выходного видеосигнала с форматом видеосигнала. | 248, 274 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Правильно ли отрегулирована яркость монитора, отрегулирован ли контраст должным образом? Проверьте правильность настроек монитора. | – |
| | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте монитор после восстановления настроек по умолчанию (1:ON/ 2:ON/ 3:ON/ 4:OFF/ 5:OFF/ 6:OFF) | 248 |
| Состояние индикатора не изменяется после нажатия кнопки [PROFILE] | <ul style="list-style-type: none"> При однократном нажатии отобразится состояние. Нажимайте кнопку [PROFILE] до тех пор, пока не загорится индикатор цели. | 246 |
| Состояние индикатора [AE] не изменяется | <ul style="list-style-type: none"> При однократном нажатии отобразится состояние. Нажимайте кнопку [AE] до тех пор, пока не загорится индикатор цели. | 246 |
| Состояние индикатора [IE] не изменяется | <ul style="list-style-type: none"> При однократном нажатии отобразится состояние. Нажимайте кнопку [IE] до тех пор, пока не загорится индикатор цели. | 246 |
| Отображается только цветовая панель | <ul style="list-style-type: none"> Правильно ли подключен кабель камеры как к разъему CCU, так и к разъему головки камеры? Проверить, правильно выполнены ли соединения. | 245, 248 |
| Оттенок [COLOR MATRIX] нельзя отрегулировать в меню | <ul style="list-style-type: none"> Правильно ли подключен кабель камеры как к разъему CCU, так и к разъему головки камеры? Для настройки качества изображения необходимо соединить головку камеры с кабелем камеры. Проверить, правильно выполнены ли соединения. | 245, 248 |
| Весь экран размыт | <ul style="list-style-type: none"> Правильно ли отрегулирована диафрагма объектива? Проверьте правильность регулировки диафрагмы. Используйте линзы с рекомендуемым числом F или выше специальные линзы ZCCD. | 253 |
| Видно много краев | <ul style="list-style-type: none"> Попробуйте изменить настройку "DETAIL BAND". | 264 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Замените кабель монитора. | – |
| "АВС ОК" не отображается | <ul style="list-style-type: none"> Когда экран слишком яркий, сузьте диафрагму объектива или установите "AE" в положение "AUTO". | 253, 260 |
| Черные полосы в правой и левой части изображения | <ul style="list-style-type: none"> Это явление зависит от характеристик монитора. Выберите режим широкого и полноэкранный отображения со стороны монитора. | – |
| Более длинное изображение по вертикали | <ul style="list-style-type: none"> Этот блок обеспечивает вывод на основании предположения, что экран равен 16:9. Выберите режим широкого отображения со стороны монитора. | – |
| Звук монитора отсутствует | <ul style="list-style-type: none"> Данное устройство не может выводить звук. | – |
| Отображается сообщение "FAN STOPPED" | <ul style="list-style-type: none"> Вентилятор остановлен. Немедленно выключите питание и обратитесь к дилеру или оператору для замены вентилятора. | – |
| Отображается сообщение "Unsupported Camera Head". | <ul style="list-style-type: none"> Подключена неподдерживаемая головка камеры. Обратитесь к дилеру. | 275 |

Технические характеристики

| | | |
|---|---|--|
| Питание: | Пост.т. 12 V \pm 10 % | |
| Потребляемая мощность: | 12 V 3,4 A (включая головку камеры) | |
| Приемное устройство: | Малая призмная система | |
| Сенсор изображения: | 1/3 тип 3MOS | |
| Видеовыход: | Выход HDMI: | Разъем HDMI x2 |
| | Выход SDI: | Разъем BNC x5 |
| Формат видео: | Выход HDMI: | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50p, 1080/50i |
| | Выход SDI: | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50p, 1080/50i |
| Требуемое освещение: | 2000 lx (3200 K, F16, Когда "BINNING" - "LINE MIX") | |
| S/N: | 54 dB (при выходе с использованием 1080i) | |
| Горизонтальное разрешение: | 1000 ТВ-линий в центре (тип. при выходе 1080p) | |
| Цветовая полоса: | Цветовая полоса SMPTE (настройка 0%, 59,94 Hz)/полноцветная полоса (при 50 Hz) | |
| Функция: | AE, Усиление, Электронный затвор, Длительная экспозиция, Головка, Добавление пикселей, Баланс белого, Колено, Подробнее, Переключение гаммы, Настройка DNR, Функции IE (WDR, Адаптивное расширение черного, Коррекция экспозиции, Коррекция дыма, Улучшение цвета), Настройка гашения, Коррекция вспышки, Регулировка цветного уровня, Регулировка оттенка, Профиль захвата флуоресцентного изображения, Стоп-кадр, Переворот, Зеркало, Отображение состояния, Цветовая полоса, Цифровое масштабирование, Настройка ножного переключателя, Настройка профиля, Переключение вывода HDMI, Внешняя синхронизация, Часы, Коррекция белого затенения, Регулировка Г/В фазы | |
| Ножной переключатель: | Сtereo мини-разъем \varnothing 3,5 | |
| Внешний контроль: | стерео мини-гнездо \varnothing 3,5 (соответствует уровню сигнала RS232C 3-электродного последовательного порта) | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации: | 0 °C до 40 °C | |
| Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации: | от 30 % до 90 % | |
| Рабочее давление окружающей среды: | От 700 hPa до 1060 hPa | |
| Температура транспортировки и хранения: | -10 °C до +60 °C | |
| Транспортировка и влажность при хранении: | от 10 % до 90 % | |
| Транспортировка и давление хранения: | От 700 hPa до 1060 hPa | |
| Габаритные размеры: | GP-UH332C: | 185 mm (Ш) x 57 mm (В) x 270 mm (Г) (без резиновых ножек и выступов) 27 mm (Ш) x 30 mm (В) x 42,5 mm (Г) |
| | GP-UH332H: | (без монтажного основания штатива и выступов) |
| Масса: | GP-UH332C: | Прим. 2 kg |
| | GP-UH332H: | Около 65 g |
| Отделка: | Белое покрытие уплотнения | |

Стандартные аксессуары

Инструкция по эксплуатации (настоящий документ)..... 1 шт.
Гарантийный формуляр для США 1 шт.

Оptionные принадлежности

Головка камеры 3MOS HD.....GP-UH332H
Кабель камеры.....GP-UC532G03 (3 m)
GP-UC532G06 (6 m)
GP-UC532G15 (15 m)
GP-UC532G03A (3 m)
(выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)
GP-UC532G06A (6 m)
(выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)
GP-UC532G15A (15 m)
(выпуск запланирован на ближайшее время / По состоянию на август 2017 г.)

[Русский язык]

Декларация о Соответствии Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr⁶⁺) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (PBВ) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

[Українська мова]

Декларація про Відповідність Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Віріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОБВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОБВНР, :

1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr⁶⁺) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBВ) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз




Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.



HDカメラコントロールユニット

品番 **GP-UH332C**

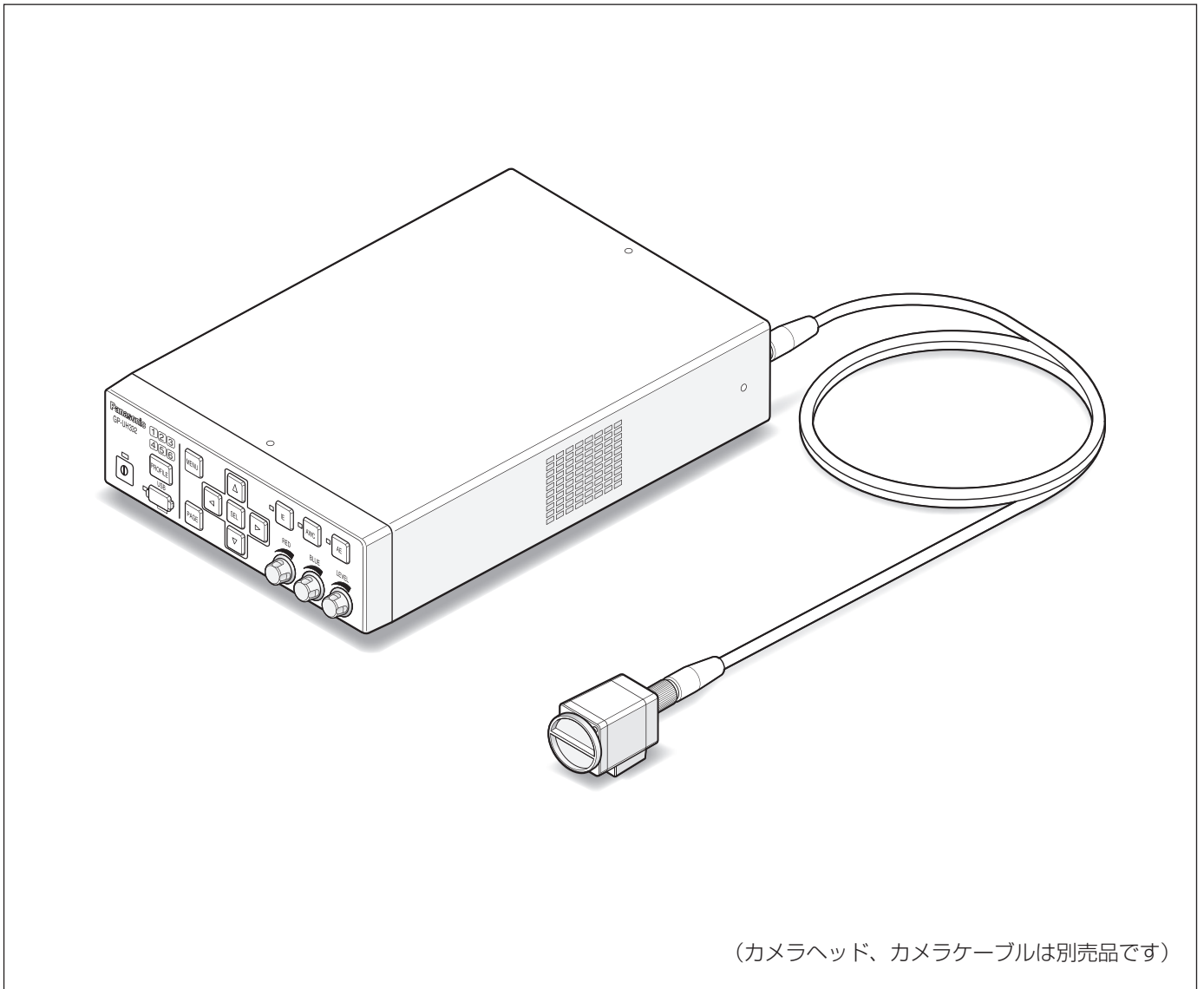

(カメラヘッド、カメラケーブルは別売品です)

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(288～289ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

はじめに

商品概要

本機は、デジタル信号処理を採用し、高画質・多機能ながら小型・軽量化を図った、カメラヘッド分離型HDカメラのコントロールユニット（以下、CCU）です。

・GP-UH332C HDカメラコントロールユニット

別売りの3MOS HDカメラヘッド（以下、カメラヘッド）とのシステムで使用します。

・GP-UH332H 3MOS HDカメラヘッド

●1080p、1080iに対応したマルチフォーマット出力が可能です。

●HDMI出力端子またはSDI出力端子により、劣化のない信号伝送を実現しています。

●WDR（Wide Dynamic Range）機能により、明暗差のある映像も見やすく撮影することができます。

本書は、カメラヘッドとのシステムで説明しています。

使用目的

パナソニック HDヘッド分離型カメラGP-UH332シリーズは、Full HD（1920×1080）の解像度で、滑らかな映像表現が可能な60P対応、高い色再現性によって、手術用顕微鏡やスリットランプでの使用を意図しています。本製品は、患者と接触する医療機器、たとえば内視鏡システムでの使用は意図していません。また、人体の損傷、生命の危機、重大な物的損傷につながる可能性のある医療製品、生命維持／支援する機器への使用を意図していません。

本製品は、医用電気機器安全規格（IEC60601-1）および医用電気機器EMC規格（IEC60601-1-2）に準拠しています。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）.....1冊 保証書.....1式

免責について

- 弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
 - ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
 - ④本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示などできないことで被る不便・損害・被害
 - ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
 - ⑥お客様による撮影映像（記録を含む）が何らかの理由により公となりまたは使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど

個人情報保護について

本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。*

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

※個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。

商標および登録商標について

- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI ロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

医療環境におけるEMCについて

- GP-UH332は、GP-UH332CとGP-UH332Hの組み合わせによるカメラシステムのことを示します。

警告

- 取扱説明書中で指定されたもの以外のアクセサリやケーブルを使用すると、GP-UH332のエミッション（電磁妨害の放射）増加やイミュニティ（電磁妨害の耐性）低下を招くことがあります。
- GP-UH332を他の機器と隣接または積み重ねて使用する場合には、その使用構成で正常に動作していることを確認する必要があります。

注意

- 本製品を廃棄するときは、関連した地域または国の法律、および関連した病院の規則にしたがって実施してください。

指針および製造業者の宣言－電磁エミッション

GP-UH332は、下記に規定した電磁環境での使用を意図しています。
お客様または使用者は、それが下記の環境で使用されることを確認してください。

| エミッション試験 | 適合性 | 電磁環境－指針 |
|--|--------|--|
| 伝導放射性RFエミッション CISPR 11 | グループ 1 | GP-UH332は、内部機能のために無線周波エネルギーを使用しています。そのため、無線周波エミッションは非常に低く、近傍の電子機器を妨害することはありません。 |
| 伝導放射性RFエミッション CISPR 11 | クラス A | GP-UH332のエミッション特性により、工業領域及び病院での使用に適しています。住居環境で使用されている場合は、無線周波通信サービスに対して十分な保護を提供しないこともあるため、使用者は機器の再配置など、緩和手段をとる必要があります。 |
| 高調波電流エミッション IEC 61000-3-2 | クラス A | |
| 電圧変化、電圧変動及びフリッカエミッション IEC 61000-3-3 | 5項 | |

ACアダプターは下記の製品をお使いください。

メーカー：Sinpro Electronics Co., Ltd.

品番：MPU60A-105-P49L10*

指針および製造業者の宣言－電磁エミッション


GP-UH332は、下記の電磁環境での使用を意図しています。お客様またはGP-UH332の使用者は、それが下記の環境で使用されることを確認してください。

| イミュニティ試験 | IEC 60601 試験レベル | 適合性レベル | 電磁環境－指針 |
|-------------------------------|--|--|--|
| 静電気放電 (ESD) イミュニティ | ±6 kV 接触 | ±6 kV 接触 | 床材は木材、コンクリートまたは陶製タイルとしてください。床材が合成物質で覆われている場合、相対湿度が、少なくとも30%以上であることを条件とします。 |
| IEC 61000-4-2 | ±8 kV 気中 | ±8 kV 気中 | |
| 電源線／信号線のファストトランジェントバーストイミュニティ | ±2 kV 対電源線 | ±2 kV 対電源線 | 電源の品質は、典型的な商用または病院環境のものを利用してください。 |
| IEC 61000-4-4 | ±1 kV 対信号線 | ±1 kV 対信号線 | |
| サージイミュニティ | ±1 kV 線間 | ±1 kV 線間 | 電源の品質は、典型的な商用または病院環境のものを利用してください。 |
| IEC 61000-4-5 | ±2 kV 線-アース間 | ±2 kV 線-アース間 | |
| 電圧ディップ／瞬停／及び電圧変動イミュニティ | < 5% U_T (> 95%ディップ、 U_T 時) 0.5 サイクルの間 | < 5% U_T (> 95%ディップ、 U_T 時) 0.5 サイクルの間 | 電源の品質は、典型的な商用または病院環境のものを利用してください。 GP-UH332の使用者が、停電中も継続して運用することが必要な場合は、無停電電源装置またはバッテリーからGP-UH332に電源供給することを推奨します。 |
| IEC 61000-4-11 | 40% U_T (60%ディップ、 U_T 時) 5 サイクルの間 | 40% U_T (60%ディップ、 U_T 時) 5 サイクルの間 | |
| | 70% U_T (30%ディップ、 U_T 時) 25 サイクルの間 | 70% U_T (30%ディップ、 U_T 時) 25 サイクルの間 | |
| | < 5% U_T (> 95%ディップ、 U_T 時) 5 秒間 | < 5% U_T (> 95%ディップ、 U_T 時) 5 秒間 | |
| 電源周波数磁界イミュニティ | 3 A/m (r.m.s.) (50/60Hz) | 3 A/m (r.m.s.) (50/60Hz) | 電源周波数磁界は、典型的な商用または病院環境内の典型的な場所での特性レベルである必要があります。 |
| IEC 61000-4-8 | | | |

備考： U_T は、試験レベルを加える前の交流電源電圧です。

指針および製造業者の宣言－電磁エミッション

GP-UH332は、下記の電磁環境での使用を意図しています。お客様またはGP-UH332の使用者は、それが下記の環境で使用されることを確認してください。

| イミュニティ試験 | IEC 60601 試験レベル | 適合性レベル | 電磁環境－指針 |
|---|---|-------------------------------|---|
| 電源線／信号線のRF電磁界誘導の伝導妨害イミュニティ IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) 150 kHz ~ 80 MHz | 3 Vrms 80 % AM (1 KHz) | 携帯型および移動型の無線通信機器は、ケーブルを含むGP-UH332のどの部分に対しても、無線通信機器の周波数に対応した式から計算された推奨分離距離以下に近づけて使用しないでください。 推奨分離距離 $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz ~ 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz ~ 2.5 GHz |
| 放射RF電磁界イミュニティ IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) 80 MHz ~ 2.5 GHz | 3 V/m 80 % AM (1 KHz) | ここで P は送信機器メーカーによる送信機の最大出力定格を表し単位はワット(W)、 d は推奨分離距離で単位はメートル(m)です。 固定の無線送信機からの電磁界強度は電磁気の現地調査 ^a によって決定されますが、これは各周波数範囲 ^b において適合レベル未満である必要があります。 次の記号が表示された機器の近くでは、干渉が生じる可能性があります。  |

備考 1：80 MHzおよび800 MHzにおいては、高い方の周波数範囲を適用します。

備考 2：これらの指針は、すべての状況に適用するとは限りません。

電磁気の伝搬は、建物、物体および人体による吸収や反射の影響を受けます。

a 固定の無線送信機、例えば、無線（携帯/コードレス）電話基地局および陸上移動局、アマチュア無線、AMおよびFMラジオ放送およびTV放送からの電磁界強度は、正確に予測することはできません。固定の無線送信機に起因する電磁環境を評価するために、現地調査をする必要があります。GP-UH332が使用される測定電磁界強度が適用される上記の適合性レベルを超える場合、GP-UH332が正常に動作していることを確認してください。もし異常な動作が見られる場合、GP-UH332の再配置など、緩和手段をとる必要があります。

b 周波数範囲が150 kHz ~ 80 MHzにおいて、電界強度は3 V/m未満である必要があります。

医療環境における安全に関する仕様

- 動作モードは連続です。
- ACアダプター使用時は、本機はCLASS I 機器です。
- 電撃の危険を回避するために、本機は保護接地を備えた電源（商用）だけに接続してください。
- 信号入力部分あるいは信号出力部分に接続する全ての周辺機器が医療用のシステムとして構成されるため、システム全体としてIEC60601-1 Clause 16の規格要求に適合する責任があります。
これらの端子と患者を同時に触れないでください。
- 設置に関しては、販売店または施工業者、または取扱説明書に記載のあるお客様相談センターにお問合せください。
- 単一故障状態において、CCU筐体の右側面が熱くなり、触るとやけどする危険性があります。
- 電源コードを抜く妨げになる場所に本機を設置しないでください。
- 本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

このような状態ではありませんか？

- 煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- 電源コード・電源プラグ・ACアダプターが異常に熱い。または割れやキズがある。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても、映像が出てこない。
- ファンから異常な回転音がする。または、ファンの回転が停止している。
- その他の異常・故障がある。

直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り**、必ず販売店または施工業者に**点検**や**撤去**を依頼してください。

グラフィックシンボルの説明



電源の入/切を示します。入/切状態は固定されます。



このシンボルは、システムの各部分と同じ電位にするための、等電位化端子を示します。



交流を示します。



直流を示します。



表面が熱くなり、やけどする恐れのある箇所を示します。



アメリカ地域における安全認証認定品であることを表すUL認証マークを示します。



欧州地域において必須である認証マークを示します。



欧州地域における廃電気・電子製品に関するWEEE指令の適用表示マークを示します。

●別売品

3MOS HD カメラヘッド
UHDカメラケーブル

: GP-UH332H

: GP-UC532G03 (3 m)

GP-UC532G06 (6 m)

GP-UC532G15 (15 m)

GP-UC532G03A (3 m) (近日発売 (2017年8月現在))

GP-UC532G06A (6 m) (近日発売 (2017年8月現在))

GP-UC532G15A (15 m) (近日発売 (2017年8月現在))

ACアダプター

: MPU60A-105-P49L10* (Sinpro Electronics Co., Ltd.)

もくじ

はじめに

| | |
|---------------------------|-----|
| 商品概要 | 278 |
| 使用目的 | 278 |
| 付属品をご確認ください | 278 |
| 免責について | 279 |
| 個人情報の保護について | 279 |
| 商標および登録商標について | 279 |
| 医療環境におけるEMCについて | 280 |
| 医療環境における安全に関する仕様 | 283 |
| 安全上のご注意 | 288 |
| 使用上のお願い | 290 |
| 各部の名前とはたらき | 291 |
| カメラヘッド (別売品) | 291 |
| CCU (カメラコントロールユニット) | 292 |
| システム構成図 | 295 |

設置

| | |
|------------------|-----|
| 設置上のお願い | 296 |
| 設置のしかた | 297 |
| レンズの取り付けかた | 298 |

設定

| | |
|-----------------------------------|-----|
| SETUPメニューから設定する | 299 |
| SETUPメニューについて | 299 |
| メニューを表示する方法 | 301 |
| 基本的な操作のしかた | 302 |
| 初期設定に戻す | 303 |
| MAINTENANCE MENUについて | 304 |
| プロファイルを設定する | 305 |
| EXPOSURE | 305 |
| ① AEを設定する [AE] | 305 |
| ② 電子シャッターを設定する [SHUTTER] | 306 |
| ③ 画素加算を設定する [BINNING] | 306 |
| ④ ゲインを設定する [GAIN] | 307 |
| ⑤ 長秒露光を設定する [LONG EXPOSURE] | 307 |

設定

| | |
|--|-----|
| ⑥輝度検出エリアを設定する [AREA SELECTION] | 307 |
| ⑦輝度検出重み付けを設定する [PEAK/AVE LEVEL] ... | 309 |
| ⑧ヘッドゲインを設定する [HEAD GAIN] | 309 |
| PICTURE..... | 309 |
| ⑨ホワイトバランスを設定する [WHITE BAL MODE] | 309 |
| ⑩ディテールを設定する [DETAIL BAND] | 310 |
| ⑪デジタルノイズリダクション機能を設定する [DNR LEVEL] ... | 311 |
| ⑫ペDESTALレベルを調整する [PEDESTAL LEVEL] | 311 |
| ⑬フレア補正を設定する [FLARE COMP] | 311 |
| ⑭色のレベルを調整する [COLOR LEVEL] | 311 |
| ⑮色合いを調整する [COLOR MATRIX] | 311 |
| CONTRAST | 313 |
| ⑯ガンマ補正モードを設定する [GAMMA SELECT] | 313 |
| ⑰ガンマ補正レベルを設定する [GAMMA VALUE] | 313 |
| ⑱ニーモードを設定する [KNEE MODE] | 313 |
| ⑲ニーポイントを設定する [KNEE POINT] | 313 |
| ⑳ニー_slopeを設定する [KNEE SLOPE] | 313 |
| ㉑ [IE] ボタンを設定する [IE FUNCTION SELECT] | 314 |
| ㉒ [IE] ボタンに割り当てた機能の補正レベルを設定する [IE FUNCTION LEVEL] | 314 |
| PROFILE..... | 315 |
| ㉓ USER PROFILE IDとLABELを設定する [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL] ... | 315 |
| ㉔ 蛍光撮像モード時の補助設定を行う [FLUORESCENCE MODE] | 316 |
| FUNC | 316 |
| ㉕ 上下左右反転機能を設定する [FLIP AND MIRROR] | 316 |
| ㉖ 上下左右反転状態の表示機能を設定する [F+M STATUS DISPLAY] | 317 |
| ㉗ カラーバーを表示する [COLOR BAR] | 317 |
| ㉘ フットスイッチを設定する [FOOTSW CONTROL CH1/CH2] ... | 317 |
| ㉙ プロファイルの保存/読み出しを実行する [USER PROFILE SAVE/LOAD] | 318 |
| ㉚ USBメモリーの保存/読み出し方法を設定する [SAVE/LOAD MODE (USB)] | 318 |
| ㉛ ズームを設定する [DIGITAL ZOOM] | 318 |
| ㉜ ズーム倍率表示を設定する [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY] ... | 319 |

設定

| | |
|--|-----|
| SYSTEM..... | 319 |
| ③③映像出力のOSD表示位置を設定する [OSD POSITION] ... | 319 |
| ③④HDMI出力信号を設定する [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH] | 319 |
| ③⑤同期信号入出力端子の入出力を設定する [G/L SYNC TERMINAL SETTING] | 319 |
| ③⑥同期状態を表示する [G/L SYNC STATUS INFO] ... | 320 |
| ③⑦時計を合わせる [TIME ADJUSTMENT] | 320 |
| ③⑧プロファイル設定を初期設定に戻す [USER PROFILE RESET] ... | 321 |
| HEAD | 321 |
| ③⑨ホワイトシェーディングを設定する [WHITE SHADING] ... | 321 |
| ④⑩画面の水平垂直位置を調整する [H/V PHASE ADJUST] ... | 322 |

その他

| | |
|-------------------|-----|
| 故障かな!? | 323 |
| 仕様..... | 324 |
| 保証とアフターサービス | 326 |

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



■工事は販売店に依頼する

(工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。)
⇒必ず販売店に依頼してください。

■配線は正しく行う

(ショートや誤配線により、火災や感電の原因となります。)

■総質量に耐える場所に取り付ける

(落下や転倒によるけがや事故の原因となります。)
⇒十分な強度に補強してから取り付けてください。

■定期的に点検する

(金具やねじがさびると、落下によるけがや事故の原因となります。)
⇒点検は、販売店に依頼してください。





■お手入れのときは電源を切る

(感電の原因となります。)


■異常があるときは、すぐ使用をやめる

(煙が出る、においがする、外部が劣化するなど、そのまま使用すると火災・落下によるけが、器物損壊の原因となります。)
⇒放置せずに、直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。

警告

| | |
|--|--|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">■電源を入れたまま工事、配線をしない (火災や感電の原因となります。)■可燃性ガスの雰囲気の中で使用しない (爆発によるけがの原因となります。)■塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない (取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。)■落とさない、強い衝撃を与えない (けがや火災の原因となります。)■異物を入れない (水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。) ⇒直ちに電源プラグを抜いて、販売店に連絡してください。 |
|  分解禁止 | <ul style="list-style-type: none">■分解しない、改造しない (火災や感電の原因となります。) ⇒修理や点検は、販売店に依頼してください。 |
|  接触禁止 | <ul style="list-style-type: none">■雷が鳴り出したら、本機や電源コード、接続したケーブルに触れない(工事時を含む) (感電の原因となります。) |
|  水ぬれ禁止 | <ul style="list-style-type: none">■機器の上や周囲に水などの入った容器を置かない (水などが中に入った場合、火災や感電の原因となります。) ⇒直ちに電源プラグを抜いて、販売店に連絡してください。 |

注意

| | |
|---|---|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">■金属のエッジで手をこすらない (強くこするとけがの原因となります。) |
|---|---|

使用上のお願い

⚠ 警告 ⚠ 注意 に記載されている内容とともに、以下の事項をお守りください。

長時間安定した性能でお使いいただくために


高温・多湿の場所で長時間使用すると、部品の劣化により寿命が短くなります。
使用温度範囲は0℃～40℃です。この温度範囲外で使用すると内部の部品に悪影響を与えたり、誤動作の原因になることがあります。設置場所の放熱や暖房などの熱が直接当たらないようにし、30℃以下で使用されることをおすすめします。

取り扱いはていねいに

落としたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因になります。

強い光にカメラを向けないでください

画面の一部にスポット光のような強い光があると、ブルーミング（強い光の周りがにじむ現象）を生じることがあります。

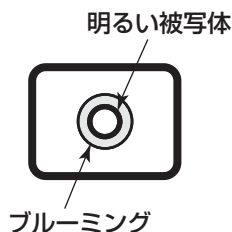

内蔵電池について

本機は内部に電池が組み込まれています。
電池は、日光、火などにより過度の熱にさらされる環境に放置しないでください。

冷却ファンアラーム

冷却ファンアラームが表示された場合は、すみやかに電源を切り販売店に連絡してください。

お手入れについて

- 電源を切り、乾いた柔らかい布でふいてください。ほこりが取れにくいときは、水で薄めた台所用洗剤（中性）を柔らかい布にしみこませ、固く絞ってから軽くふいてください。そのあと、乾いた柔らかい布で、洗剤成分を完全にふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど、揮発性のものは使用しないでください。カメラヘッド・CCUに関しては、エタノール・イソプロピルアルコールが使用可能です。ただし、カメラケーブルには使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

表示について

本機の識別および電源、その他の表示は機器後面、上面および底面をお読みください。


USBメモリーについて

- USB2.0規格に適合したUSBメモリーを使用してください。
- 高速で安定した読み書きを保つために、定期的にMicrosoft®Windows®搭載PCで「スキャンディスク」か「チェックディスク」を実行してください。
- FAT32に対応しています。32GB以下の容量のUSBメモリーを使用してください。また、暗号機能付フォーマットのUSBメモリーは使用できません。
- USBメモリーはCCU本体ではフォーマットできません

この機器は、一般的な電子機器として使用されることを意図しています。
ご利用者の責任において、各国、各分野の法令などにしたがひ、必要な手続きをとらなければ、特定用途（交通用機器、輸送用機器、医療用機器など）には使用できないことがあります。

各部の名前とはたらき

カメラヘッド (別売品)

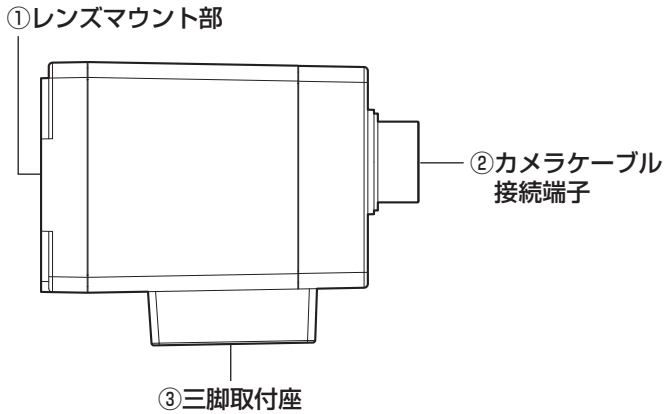

重要

- カメラケーブルの接続、取り外しを行うときは、CCUの電源をOFFにしてから行ってください。
- カメラケーブルは無理に曲げたり、つぶしたりしないでください。
- 専用のカメラヘッド以外は使用しないでください。

① レンズマウント部

Cマウントレンズを取り付けます。(P.298ページ)

② カメラケーブル接続端子

カメラケーブル (別売品) を接続します。

<UHDカメラケーブル>

GP-UC532G03 (3 m)

GP-UC532G06 (6 m)

GP-UC532G15 (15 m)

GP-UC532G03A (3 m) (近日発売 (2017年8月現在))

GP-UC532G06A (6 m) (近日発売 (2017年8月現在))

GP-UC532G15A (15 m) (近日発売 (2017年8月現在))


③ 三脚取付座

カメラヘッドを三脚などに固定するときは、三脚取付座のねじ穴を使って固定します。

ねじ穴：1/4-20 UNC

CCU (カメラコントロールユニット)

<前面>

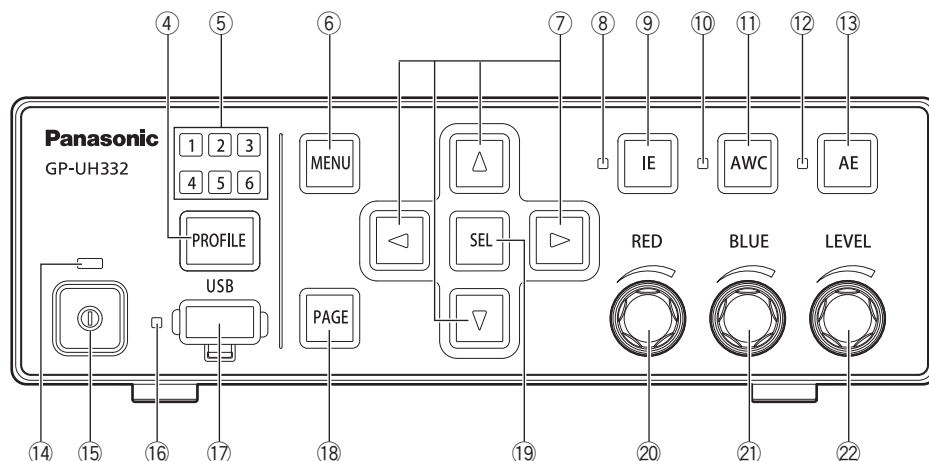

④プロフィール選択ボタン [PROFILE]

1～6のプロファイルを選択します。あらかじめSETUPメニューで各プロファイルを設定しておきます (P.305ページ)

⑤プロフィール選択ランプ [1/2/3/4/5/6] (緑)

選択されているプロファイル番号が緑色に点灯します。

⑥メニューボタン [MENU]

1秒以上押すとSETUPメニュー (ADVANCED MENU) が表示されます。SETUPメニュー表示中に押すと、メニュー階層が上へ遷移します。また、1秒以上押すとSETUPメニューを非表示にします。SETUPメニュー表示中以外に押すと、画面フリーズ機能が働きます。

⑦上下左右ボタン [△/▽/◀/▶]

●上ボタン [△] / 下ボタン [▽]

SETUPメニュー表示中にカーソルを動かして、設定項目を切り換えます。

SETUPメニュー表示中以外に押すと、「FLIP AND MIRROR」の反転切り換えを行います。(P.316ページ)

●左ボタン [◀] / 右ボタン [▶]

SETUPメニュー表示中にカーソルを動かしたり、設定内容を切り換えたりします。

SETUPメニュー表示中以外に押すと、「DIGITAL ZOOM」の倍率切り換えを行います。(P.318ページ)

⑧IE 状態ランプ (緑)

IE (IMAGE ENHANCEMENT) のON/OFF設定状態を表示します。

点灯：IE機能ON
消灯：IE機能OFF

⑨IEボタン [IE]

IEのON/OFF設定を切り換えます。

⑩AWC 状態ランプ (橙)

AWC (Automatic White balance Control) の状態を表示します。

消灯：AWC停止
点滅：AWC起動・動作中
点滅→消灯：AWC成功
点灯：AWCエラー

⑪AWCボタン [AWC]

SETUPメニュー「WHITE BAL MODE」が「AWC」に設定されている場合、カメラ映像表示中に押すと、AWCが起動します。

重要

- カメラヘッドが接続されていない場合は、AWCボタンは動作しません。

⑫AE 状態ランプ (緑)

AE (Automatic Exposure) のAuto/Manual設定状態を表示します。

点灯：Auto Exposure
消灯：Manual Exposure

⑬AEボタン [AE]

AEのAuto/Manual設定を切り換えます。

⑭電源状態ランプ (緑)

電源のON/OFF状態を表示します。

- 点灯：電源ON
- 消灯：電源OFF

⑮電源スイッチ [スイッチマーク]

CCUとカメラヘッドの電源をON / OFFします。

⑯USB状態ランプ (緑)

USBの状態を表示します。

- 点滅：データアクセス
- 点灯：マウント
- 消灯：アンマウント

⑰USBコネクター [USB]

USBメモリーを挿入して、プロファイルのSAVE/LOADを行います。

⑱ページボタン [PAGE]

SETUPメニュー表示中に押すと、ページを移動します。SETUPメニュー表示中以外に押すと、QUICK MENUが表示されます。

⑲セレクトボタン [SEL]

SETUPメニュー表示中に押すと、設定した内容を確定します。

SETUPメニュー表示中以外に押すと、「SETTING INFORMATION」画面を表示します。もう1度押すとカメラ映像に戻ります。

「SETTING INFORMATION」では、「IE FUNCTION SELECT」、「FOOTSW CONTROL CH1/CH2」、「SAVE/LOAD MODE (USB)」、「VIDEO FORMAT (HDMI1/HDMI2/SDI1/SDI5)」の設定内容を表示します。

⑳レッドボリューム [RED]

ホワイトバランスのREDゲインに対して、オフセットの増減調整を行います。

SETUPメニュー表示中に回すと、選択項目を変更します。

㉑ブルーボリューム [BLUE]


ホワイトバランスのBLUEゲインに対して、オフセットの増減調整を行います。

㉒レベルボリューム [LEVEL]

輝度レベルの増減調整を行います。

SETUPメニュー表示中に回すと、カーソルを動かしたり、選択項目の設定内容を変更したりします。

<後面>

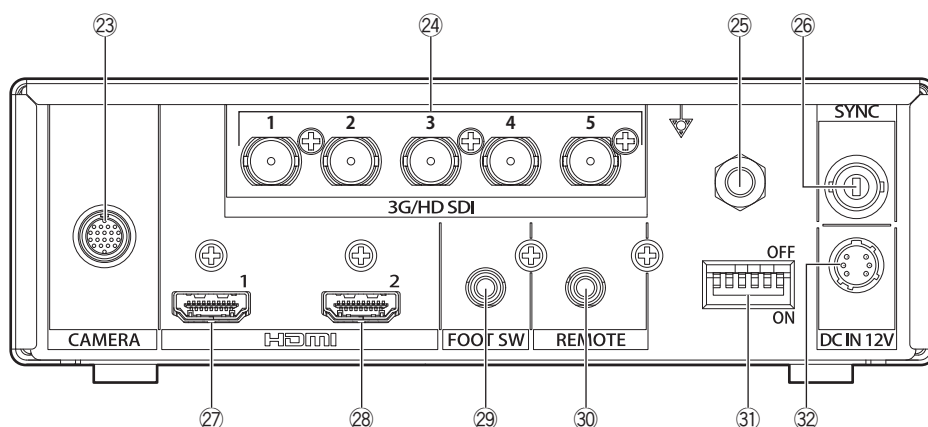

㉓カメラケーブル接続端子 [CAMERA]

カメラケーブル (別売品) を接続します。(P.325ページ)

㉔SDI出力端子 [3G/HD SDI 1/2/3/4/5]

3G-SDIまたはHD-SDI信号を出力します。

重要

- 3G-SDI、HD-SDIに対応している高品質ケーブルを接続してください。

㉕等電位化端子 [電位マーク]

等電位接地用の端子です。

各部の名前とはたらき（つづき）

②⑥同期信号入出力端子【SYNC】

外部同期信号を入力または出力します。

②⑦HDMI出力端子【HDMI 1】

HDMI対応のモニターと接続する場合に使用します。

②⑧HDMI出力端子【HDMI 2】

HDMI対応のモニターと接続する場合に使用します。

重要

- HDMIケーブル（別売品）は、Panasonic製ケーブルを推奨します。
- HDMIロゴを表記したモニターを使用してください。


②⑨フットスイッチ端子【FOOT SW】

フットスイッチ接続用の端子です。
（φ3.5ステレオミニジャック）



②⑩リモート端子【REMOTE】

外部制御用の端子です。
（φ3.5ステレオミニジャック）

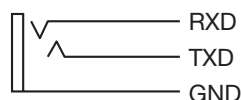

③①機能設定スイッチ

各映像出力の機能を設定するスイッチです。

スイッチ1はフレーム周波数59.94 Hz/50 Hzを選択します。

| スイッチ | | | | | | SDI出力 | HDMI出力 |
|------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ON | — | — | — | — | — | 59.94 Hz | 59.94 Hz |
| OFF | — | — | — | — | — | 50 Hz | 50 Hz |

スイッチ2～6はSDI出力端子および、HDMI出力端子の映像フォーマットを選択します。

| スイッチ | | | | | | SDI出力 | HDMI出力 |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ※1 | — | ON | ON | OFF | OFF | 1080p | 1080p |
| | — | OFF | OFF | OFF | OFF | 1080i | 1080i |

上記以外の設定をした場合は、※1のフォーマットを出力します。

重要


- 機能設定スイッチの切り換えは、電源OFFの状態で行ってください。

③②DC 12 V電源端子【DC IN 12V】


DC 12 V（4 A以上）の外部DC電源を接続します。

適合コネクタ（2017年8月現在）

- ： ヒロセ電機株式会社製
HR10A-7P-6S(73)

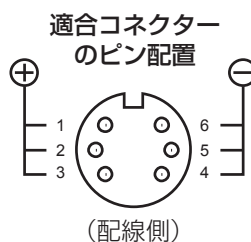

システム構成図

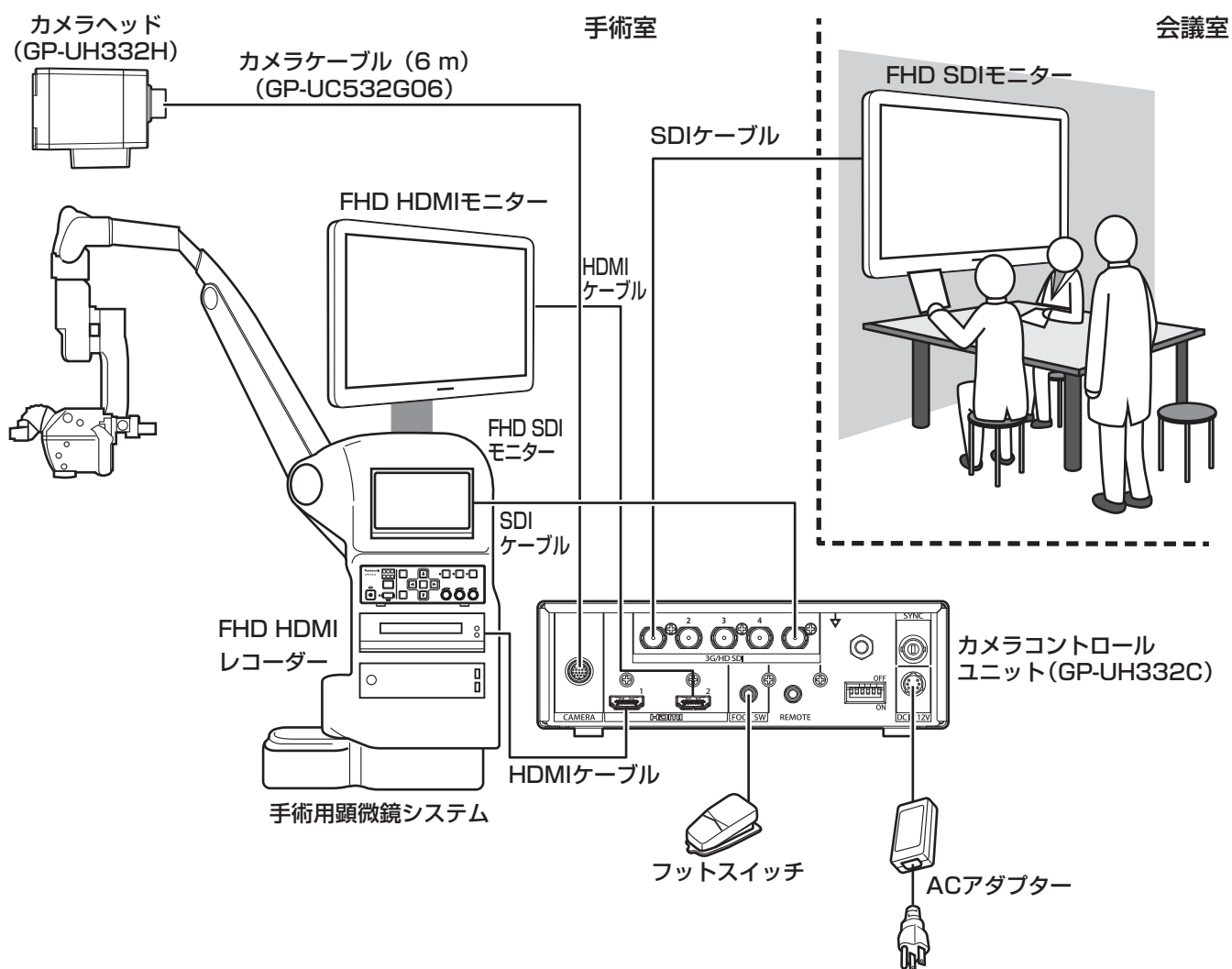

HDMIケーブル：

HDMIロゴが表示されているHDMIケーブルをご使用ください。(当社製のHDMIケーブルを推奨します。)

SDIケーブル：

3G-SDIおよびHD-SDIをサポートするSDIケーブルを使用してください。

設置上のお願い

設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。

本機は屋内専用です。

屋外での使用はできません。

長時間直射日光のあたるところや、冷・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因になります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。

三脚は別途ご用意ください

カメラヘッドを取り付ける三脚は付属されていません。取り付け場所を考慮してご用意ください。

周囲の壁面から10 cm以上離してお使いください。

壁面に密着させると、機器の放熱効果が悪くなり、動作異常を起こす可能性があります。

湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。

内部の部品がいたみやすくなり、故障の原因になります。

次のような場所での設置および使用はできません。

- 雨や水が直接かかる場所
- プールなど、薬剤を使用する場所
- ちゅう房などの蒸気や油分の多い場所、および可燃性ガスの雰囲気中などの特殊環境の場所
- 放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所
- 腐食性ガスが発生する場所
- 使用周囲温度（0℃～40℃）を超える場所
- 車両や船舶などの振動の多い場所（本機は車載用ではありません。）
- エアコンの吹き出し口近くや外気の入り込む扉付近など、急激に温度が変化する場所

電波障害について


テレビやラジオの送信アンテナ、強い電界や磁界（モーターやトランスなど）の近くでは、映像がゆがんだりすることがあります。

使用しない場合は放置せず、必ず撤去してください。

設置のしかた

以下は三脚（別途調達）を使用したカメラの設置例です。

<三脚への取り付け例>

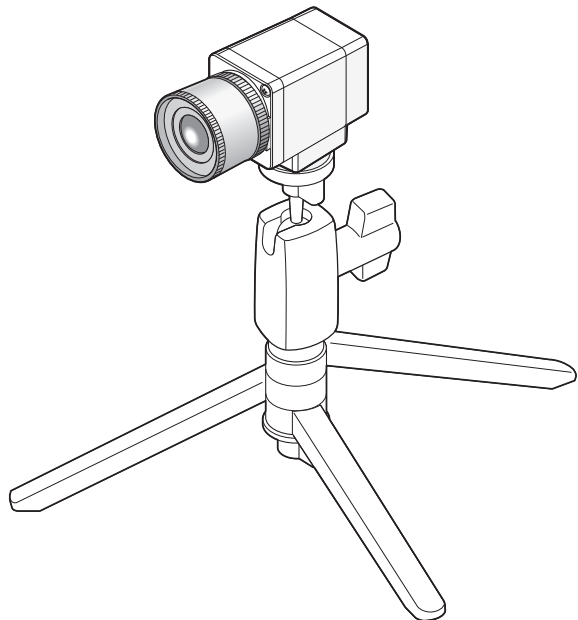


重要

- 三脚、CCUは水平な場所に置いてください。
- CCUは横置き（水平）に設置してください。縦置きや傾けて設置しないでください。

レンズの取り付けかた


重要

- レンズマウント部の突出長さが4 mmを超えるレンズを使用しないでください。
- レンズの絞り値の推奨範囲はF4.0 ~ F16です。レンズの絞り値をF4.0より小さくすると、画像がぼやける場合があります。
- ズームレンズを使用する場合は、レンズによってピントの調整方法が異なります。詳しくは、使用するレンズの取扱説明書をお読みください。
- レンズを取り外す場合は、カメラヘッドのレンズマウント部のキャップを必ず取り付けてください。

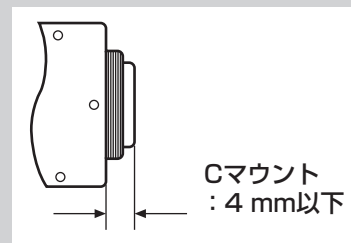


STEP1

カメラヘッドのレンズマウント部のキャップを外します。

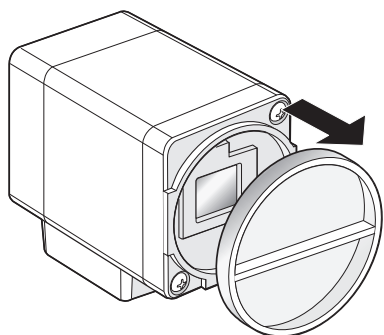

STEP2

Cマウントレンズを時計回りに回してレンズマウント部に取り付けます。

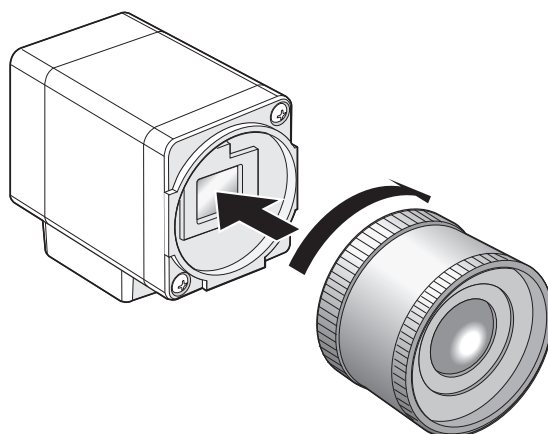

重要

- レンズを取り付けるときは、光学フィルターの表面に汚れがないか確認してください。汚れがある場合は、一般のカメラ用ブローワー・ブラシで取り除いてください。

対応レンズ (2017年8月現在) (参考)

| メーカー | 品名 | 品番 |
|--------|-----------------|--|
| 富士フィルム | 3CCD/CMOSカメラレンズ | TF2.8DA-8 TF4DA-8 TF8DA-8B TF15DA-8 |

SETUPメニューから設定する


本機を使用する場合、あらかじめSETUPメニューで各項目を設定しておく必要があります。撮影場所の条件に合わせて、各項目を設定します。

メモ

- 本機にはSETUPメニューの他に、CCU前面の [PAGE] ボタンを押して表示できる簡易メニュー（QUICKメニュー）があります。QUICKメニューについては、302ページをお読みください。

SETUPメニューについて

SETUPメニューは、「QUICK MENU」と「ADVANCED MENU」と「MAINTENANCE MENU」の3つのMENUから構成されています。

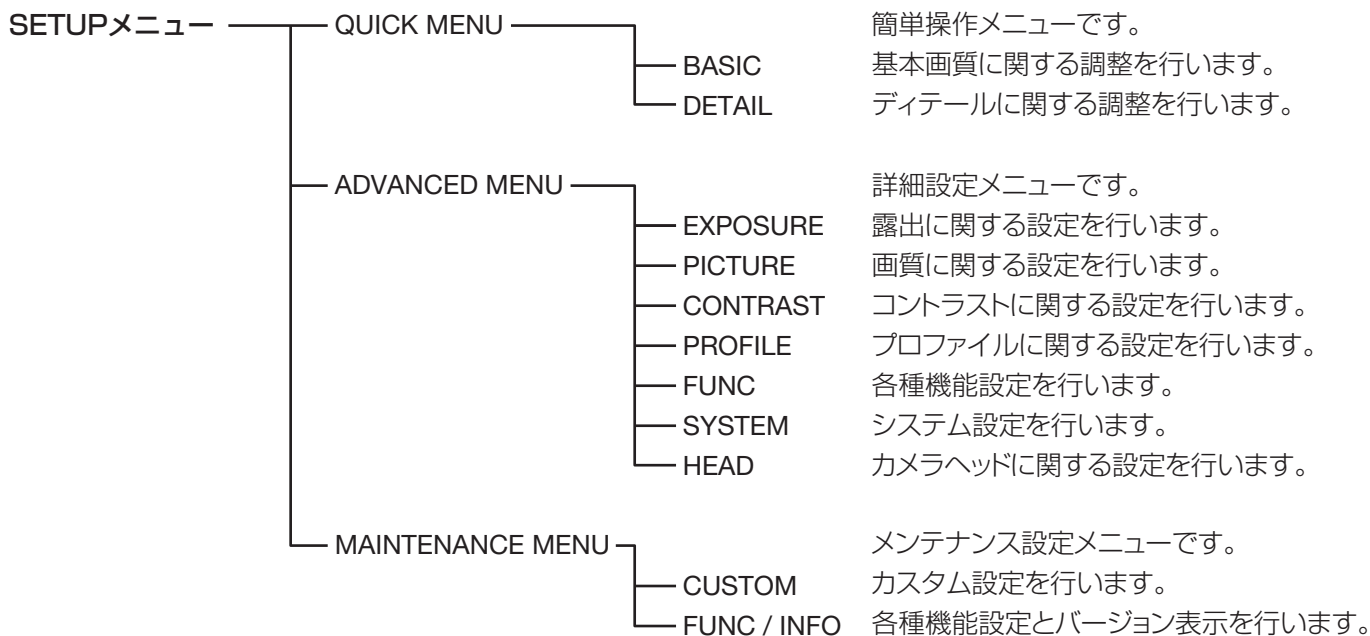

ADVANCED MENUでは、以下の項目を設定できます。

| 設定項目 | 概要 | ページ |
|-----------------|---------------------------------|-----|
| EXPOSURE | | |
| ①AE | AE (Automatic Exposure) を設定します。 | 305 |
| ②SHUTTER | 電子シャッターの速度を設定します。 | 306 |
| ③BINNING | 画素加算モードを設定します。 | 306 |
| ④GAIN | ゲインを設定します。 | 307 |
| ⑤LONG EXPOSURE | 長秒露光を設定します。 | 307 |
| ⑥AREA SELECTION | AE、GAIN、SHUTTERの輝度検出エリアを設定します。 | 307 |
| ⑦PEAK/AVE LEVEL | 輝度検出処理のピーク／平均の重み付けを設定します。 | 309 |
| ⑧HEAD GAIN | ヘッドゲインを設定します。 | 309 |

SETUPメニューから設定する（つづき）

| 設定項目 | 概要 | ページ |
|---|--|-----|
| PICTURE | | |
| ⑨WHITE BAL MODE | ホワイトバランスを設定します。 | 309 |
| ⑩DETAIL BAND | ディテールを設定します。 | 310 |
| ⑪DNR LEVEL | デジタルノイズリダクションを設定します。 | 311 |
| ⑫PEDESTAL LEVEL | ペDESTALレベルを調整します。 | 311 |
| ⑬FLARE COMP | フレア補正を設定します。 | 311 |
| ⑭COLOR LEVEL | 全体の色の強さを設定します。 | 311 |
| ⑮COLOR MATRIX | 各種の色合いを設定します。 | 311 |
| CONTRAST | | |
| ⑯GAMMA SELECT | ガンマ補正モードを設定します。 | 313 |
| ⑰GAMMA VALUE | ガンマ補正レベルを設定します。 | 313 |
| ⑱KNEE MODE | ニーモードを設定します。 | 313 |
| ⑲KNEE POINT | ニーポイントを設定します。 | 313 |
| ⑳KNEE SLOPE | ニーの傾きを設定します。 | 313 |
| ㉑IE FUNCTION SELECT | [IE]ボタン（IMAGE ENHANCEMENT）の機能割り当てを設定します。 | 314 |
| ㉒IE FUNCTION LEVEL | IEで選択した機能の補正レベルを調整します。 | 314 |
| PROFILE | | |
| ㉓USER PROFILE ID USER PROFILE LABEL | 画面上に表示する、カメラのIDタイトルを設定します。 画面上に表示する、1～6のプロファイルのラベルタイトルを設定します。 | 315 |
| ㉔FLUORESCENCE MODE | 蛍光撮像モード時の補助設定を行います。 | 316 |
| FUNC | | |
| ㉕FLIP AND MIRROR | 映像の上下左右反転機能を設定します。 | 316 |
| ㉖F+M STATUS DISPLAY | 映像の上下左右反転機能の表示状態を設定します。 | 317 |
| ㉗COLOR BAR | カラーバー表示を設定します。 | 317 |
| ㉘FOOTSW CONTROL CH1 FOOTSW CONTROL CH2 | フットスイッチ1の機能割り当てを設定します。 フットスイッチ2の機能割り当てを設定します。 | 317 |
| ㉙USER PROFILE SAVE / LOAD | プロファイルのUSBメモリー保存／読み出しを実行します。 | 318 |
| ㉚SAVE / LOAD MODE (USB) | USBメモリーの保存／読み出し方法を設定します。 | 318 |
| ㉛DIGITAL ZOOM | 電子ズームの許可を設定します。 | 318 |
| ㉜DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | 電子ズームの倍率表示を設定します。 | 319 |

| 設定項目 | 概要 | ページ |
|---|--------------------------------------|-----|
| SYSTEM | | |
| ③③ OSD POSITION | 映像出力のOSD表示位置を設定します。 | 319 |
| ③④ HDMI1 COLOR DEPTH HDMI2 COLOR DEPTH | HDMI1の色深度を設定します。 HDMI2の色深度を設定します。 | 319 |
| ③⑤ G/L SYNC TERMINAL SETTING | 同期信号入出力端子の入出力を設定します。 | 319 |
| ③⑥ G/L SYNC STATUS INFO | 外部同期端子の状態を表示します。 | 320 |
| ③⑦ TIME ADJUSTMENT | 時計を合わせます。 | 320 |
| ③⑧ USER PROFILE RESET | プロファイル設定を工場出荷設定に戻します。 | 321 |
| HEAD | | |
| ③⑨ WHITE SHADING | ホワイトシェーディングを設定します。 | 321 |
| ④⑩ H/V PHASE ADJUST | 水平/垂直の位相を設定します。 | 322 |

メニューを表示する方法

ここでは、接続しているモニターに各種メニューを表示する方法を説明します。

QUICK MENU

[RED] ボリューム、[BLUE] ボリューム、[LEVEL] ボリュームを回します。または [PAGE] ボタンを押すと、QUICK MENUのトップ画面が表示されます。

QUICK MENUは2ページあります。ページを切り換えるときは、[PAGE] ボタンを押します。

6つのプロファイルを切り換えるときは、[PROFILE] ボタンを押します。

ADVANCED MENU

[MENU] ボタンを約1秒以上押すと、ADVANCED MENUのトップ画面が表示されます。

ADVANCED MENUは7ページあります。ページを切り換えるときは、[PAGE] ボタンを押すか、メニュー下部のタブにカーソルを合わせ、[◀] / [▶] ボタンを押します。

6つのプロファイルを切り換えるときは、[PROFILE] ボタンを押します。

MAINTENANCE MENU

[MENU] ボタンと [SEL] ボタンを同時に押しながら、電源スイッチを入れると、MAINTENANCE MENUのトップ画面が表示されます。

MAINTENANCE MENUは2ページあります。ページを切り換えるときは、[PAGE] ボタンを押すか、メニュー下部のタブにカーソルを合わせ、[◀] / [▶] ボタンを押します。

基本的な操作のしかた


重要

- カメラヘッドが接続されていない場合、以下の機能が使用できません。
 - WHITE BAL MODEのAWC起動
 - FLIP AND MIRROR
 - WHITE SHADING
 - COLOR MATRIX
 - FREEZE
 - H/V PHASE ADJUST
 - DIGITAL ZOOM
- MAINTENANCE MENUの項目については、お買い求め先へご相談ください。


ここでは、QUICK MENUの基本的な操作のしかたを説明します。

QUICK MENU トップ画面


BASIC (WB RED GAIN) 画面

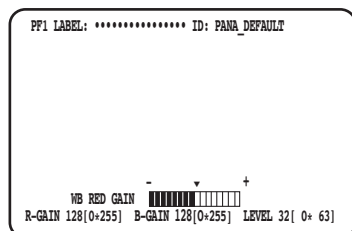


BASIC (WB BLUE GAIN) 画面

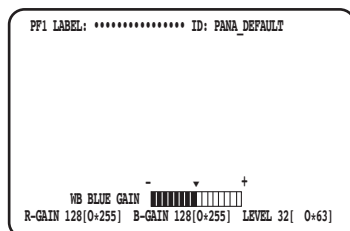

BASIC (AE LEVEL) 画面

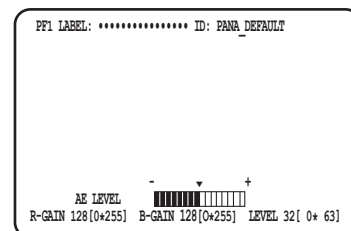

DETAIL画面

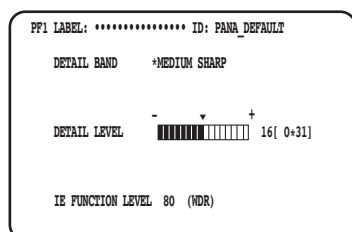

STEP 1

BASIC画面

各設定項目を設定します。

- WB RED GAIN
[RED] ボリュームを回して、赤の色合いを調整します。
- WB BLUE GAIN
[BLUE] ボリュームを回して、青の色合いを調整します。
- AE LEVEL
[LEVEL] ボリュームを回して、明るさを調整します。

DETAIL画面

BASIC画面を表示しているときに、[PAGE] ボタンを押すとDETAIL画面に切り換わります。

- DETAIL BAND
[RED] ボリュームを回して、輪郭補正の帯域を調整します。
- DETAIL LEVEL
[BLUE] ボリュームを回して、輪郭補正のレベルを調整します。

- IE FUNCTION LEVEL

[LEVEL] ボリュームを回して、選択したIE機能のレベルを調整します。

STEP 2

約4秒以上操作しないと、設定内容が保存されカメラ映像に戻ります。

ここでは、ADVANCED MENUの基本的な操作のしかたを説明します。

ADVANCED MENU トップ画面

EXPOSURE画面

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO   LEVEL  32[ 0* 63]
SHUTTER    AUTO    ---
BINNING    LINE MIX
GAIN       *AUTO   LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF    ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

PICTURE画面

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE *AWC   R-GAIN 128[ 0*255]
              B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND   *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL     5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP    OFF
COLOR LEVEL   160[ 0*255]
COLOR MATRIX  *USER
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

CONTRAST画面

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT  S-CURVE
GAMMA VALUE   0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE     MANUAL
KNEE POINT    8[0*15]
KNEE SLOPE    3[0*7]
IE FUNCTION SELECT HDR
              LEVEL  80[0*255]
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

PROFILE画面

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF
FLUORESCENCE MODE OFF
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

FUNC画面

```
FLIP AND MIRROR OFF
P+M STATUS DISPLAY OFF
COLOR BAR *ON
FOOTSW CONTROL CH1 PROFILE1→2
FOOTSW CONTROL CH2 FREEZE
USER PROFILE SAVE/LOAD *USB-CAMERA(ALL)
SAVE/LOAD MODE(USB) AUTO
DIGITAL ZOOM ON
DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY OFF
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

SYSTEM画面

```
OSD POSITION UPPER LEFT
HDMI1 COLOR DEPTH YPbPr(422)
HDMI2 COLOR DEPTH YPbPr(422)
G/L SYNC TERMINAL SETTING OUT
G/L SYNC STATUS INFO INTERNAL
*TIME ADJUSTMENT
*USER PROFILE RESET
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

HEAD画面

```
WHITE SHADING AUTO(SET)
H/V PHASE ADJUST H 0[-20*20]
V 0[-11*11]
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

STEP1

各設定項目を設定します。

- 設定項目の選択
[RED] ボリュームを左右に回す、または [△] ボタンまたは [▽] ボタンを押して、カーソルを移動します。
- 設定内容の切り換え
[LEVEL] ボリュームを左右に回す、または [◀] ボタンまたは [▶] ボタンを押します。
- 設定項目の詳細設定画面を表示
[*] が表示されている項目で、[SEL] ボタンを押します。

- 上の階層の設定画面に戻る
[MENU] ボタンを押します。

メモ

- カーソルとは、点滅表示している部分のことです。本書の画面中では **網かけ** で表しています。

STEP2

設定内容を保存して設定画面を閉じカメラ映像の画面に戻るときは、[MENU] ボタンを約1秒以上押します。設定した内容は、本機の電源を切っても保持されます。

初期設定に戻す

- SETUPメニューの個別の項目の設定内容を初期設定に戻すときは、対象項目にカーソルを合わせて、[◀] ボタンと [▶] ボタンを同時に1秒以上押します。
- すべてのプロファイル設定を初期設定に戻すときは、[USER PROFILE RESET]を使用します。(P.321ページ)
- 選択中の1つのプロファイル設定を初期設定に戻すときは、[PROFILE]ボタンを1秒以上、押します。
- 「ADVANCED MENU」の各画面ごとに画面内のすべての項目を初期設定に戻すときは、そのメニュー下部のタブにカーソルを合わせ、[◀] / [▶] ボタンを同時に1秒以上、押します。

SETUPメニューから設定する（つづき）

MAINTENANCE MENUについて

MAINTENANCE MENUの詳細・操作方法については、お買い求め先へご相談ください。

| 設定項目 | 概要 |
|------------------------|--|
| CUSTOM | |
| OSD OUTPUT SEL (HDMI) | HDMI出力のOSD表示を設定します。 |
| OSD OUTPUT SEL (SDI) | SDI出力のOSD表示を設定します。 |
| OSD CHARACTER MODE | OSDの文字形式を設定します。 |
| KEY BIND (MENU) | [MENU] ボタンの機能割り当てを設定します。 |
| KEY BIND (↑ ↓) | [△] [▽] ボタンの機能割り当てを設定します。 |
| KEY BIND (← →) | [◀] [▶] ボタンの機能割り当てを設定します。 |
| FUNC / INFO | |
| BLEMISH COMP | キズ補正を設定します。 |
| BLACK BAL | ブラックバランスを設定します。 |
| CABLE DIAG MODE | カメラケーブルの品質を診断します。 |
| DIPSW STATUS | DIPSWの設定状態を表示します。 |
| FPGA STATUS | FPGAの温度を表示します。 |
| ALL RESET | すべての設定を工場出荷設定に戻します。 |
| CPU VER. (MAIN / SUB) | CPUのバージョンを表示します。 |
| FPGA VER. (FRONT/REAR) | FPGA (CCU) のバージョンを表示します。 |
| HEAD VER. | FPGA (HEAD) のバージョンおよび、カメラヘッドの種別を表示します。 |

メモ

- 「ALL RESET」は、以下の初期化はできません。
「ADVANCED MENU」の「HEAD GAIN」、「WHITE SHADING」、「H/V PHASE ADJUST」、
「MAINTENANCE MENU」の「BLEMISH COMP」

プロフィールを設定する

設置する場所に合わせて、ディテールやガンマ、色合いなどをプロフィールとして登録しておく、本機の前面にある [PROFILE] ボタンを押すだけで、登録した内容を適用させることができます。

プロフィールは6つまで登録できます。プロフィール5と6には、あらかじめ蛍光撮像に適した設定が初期設定されています。

登録はADVANCED MENUのトップ画面で行います。プロフィール画面は4ページあります。プロフィールに対応したページの画面左上にプロフィールの番号が表示されます。

[LABEL] には「USER PROFILE LABEL」で設定した文字が表示されます (※315ページ)。プロフィール1から4の初期設定は空欄になっています。

EXPOSURE画面

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO      LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO       ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO      LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

PICTURE画面

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
WHITE BAL MODE *AFC      R-GAIN 128[ 0*255]
              B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND   *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL     5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL 76[68* 95]
FLARE COMP    OFF
COLOR LEVEL   160[ 0*255]
COLOR MATRIX  *USER
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

CONTRAST画面

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT  S-CURVE
GAMMA VALUE   0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE     MANUAL
KNEE POINT    8[0*15]
KNEE SLOPE    3[0*7]
IE FUNCTION SELECT WDR
              LEVEL 80[0*255]
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

PROFILE画面

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF
FLUORESCENCE MODE OFF
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

EXPOSUREを設定する

① AEを設定する [AE]

AE (Automatic Exposure) を「AUTO」にすると、映像の明るさを自動調整します。また、「MANUAL」にすると、映像の明るさを手動で調整することができます。AEのレベルは詳細設定画面で設定できます。

AEは「GAIN」と「SHUTTER」を制御することで、映像の明るさを調整しています。

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
AE          *AUTO      LEVEL 32[ 0* 63]
SHUTTER     AUTO       ---
BINNING     LINE MIX
GAIN        *AUTO      LEVEL 12dB[ 3* 12]
LONG EXPOSURE OFF      ---
AREA SELECTION ALL
PEAK/AVE LEVEL 8[0*8]
HEAD GAIN   -6dB
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

SETUPメニューから設定する（つづき）

② 電子シャッターを設定する [SHUTTER]

電子シャッターは「AUTO」、「MANUAL(FIX)」、「MANUAL(VAL)」から選択します。「MANUAL(FIX)」の場合は電子シャッターのスピードを設定します。スピードは以下から設定できます。

フレーム周波数59.94 Hz時：1/60（初期設定）、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、
1/4000、1/10000、*MANU

フレーム周波数50 Hz時：1/50、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、
1/10000、*MANU

「*MANU」を選択して [SEL] ボタンを押すと、「SHUTTER」画面が表示され、シャッタースピードを細かく調整できます。

調整範囲は10/1125～1124/1125です。

「AE」が「MANUAL」に設定されている場合、「MANUAL(VAL)」に設定し、[LEVEL] ボリュームで電子シャッターのスピードを細かく調整することができます。

| | | | |
|--|-------|----------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | | LINE MIX | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | | OFF | --- |
| AREA SELECTION | | ALL | |
| PEAK/AVE LEVEL | | 8[0*8] | |
| HEAD GAIN | | -6dB | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

| | |
|---------------|-----------|
| ** SHUTTER ** | |
| SHUTTER | MANU |
| MANU SET | 1124/1125 |

③ 画素加算を設定する [BINNING]

画素加算により、感度を上げることができます。

画素加算のモードは、以下から設定できます。

- OFF : 画素加算は行いません。
- LINE MIX（初期設定）：垂直方向の画素加算を行います。（垂直解像度が劣化します。）
- PIX MIX : 水平方向の画素加算を行います。（水平解像度が劣化します。）
- P/L MIX : 水平/垂直方向の画素加算を行います。（水平/垂直解像度が劣化します。）

④ゲインを設定する [GAIN]

ゲインの調整方法は以下から設定できます。

- OFF : ゲインの調整は行いません。
- AUTO (初期設定) : ゲインは自動で調整されます。設定するゲインは、自動調整の最大値です。
- MANUAL(FIX) : ゲインを手動で調整します。設定するゲインに固定されます。
- MANUAL(VAL) : 「AE」が「MANUAL」に設定されている場合、[LEVEL] ボリュームでゲインを手動で調整します。
「MANUAL(FIX)」に設定しているときよりも細かく設定することができます。

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

メモ

- 「SHUTTER」を設定する場合、「AE」を「MANUAL」に設定してください。(※305ページ)
- 50 Hzの蛍光灯照明下などでフリッカ(ちらつき)が発生するときには、「1/100」に設定することによってフリッカを軽減できます。

⑤長秒露光を設定する [LONG EXPOSURE]

長秒露光は「OFF」、「AUTO」、「MANUAL(FIX)」、「FIX(×1)」から選択します。

- OFF (初期設定) : 長秒露光を行いません。
- AUTO : 長秒露光を自動制御します。設定する蓄積時間は、自動制御の最大値です。
- MANUAL(FIX) : 長秒露光を手動で調整します。設定する蓄積時間に固定されます。
蓄積時間は、OFF、×2、×4、×8から選択します。
- FIX (×1) : 長秒露光を行いません。AEが「MANUAL」設定時に選択が可能です。

⑥輝度検出エリアを設定する [AREA SELECTION]

被写体の背景にスポットライトのような明るい照明があると、被写体が暗くなることがあります。この現象を解消するために、背景の明るい部分にマスクをかけ、明るい部分を検出しないように補正することができます。

[AREA SELECTION] にカーソルを合わせ、[<] ボタンまたは [▷] ボタンを押してエリアを選択します。

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | | --- |
| BINNING | LINE MIX | | |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | | --- |
| AREA SELECTION | ALL | | |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | | |
| HEAD GAIN | -6dB | | |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |


SETUPメニューから設定する (つづき)

エリアは以下から設定できます。

※下図の検出エリアは表示されません。


ALL (初期設定)

：画面上のすべての領域が検出エリアになります。

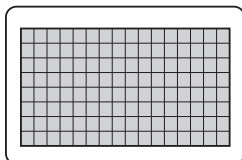


L CIRCLE

：画面中央の大型の円の領域が検出エリアになります。

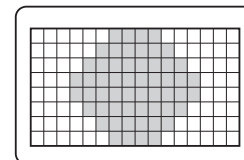

S CIRCLE

：画面中央の小型の円の領域が検出エリアになります。

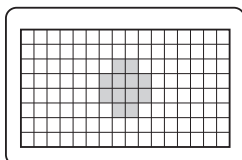

MANU


：検出エリアを手動で設定できます。
([p.308](#)ページ)

AUTO

：暗いエリアは自動的に覆い隠され、明るい部分のみが検出されます。

M CIRCLE


：画面中央の中型の円の領域が検出エリアになります。

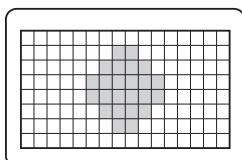

検出エリアを手動で設定する

検出エリアを手動で設定します。

検出エリア設定画面

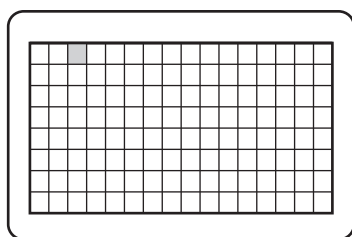

STEP1

「AREA SELECTION」で「MANU」を選択し、[SEL] ボタンを押します。

→検出エリア設定画面が表示されます。

STEP2

[△] / [▽] / [◀] / [▶] ボタンを押して検出を行わないマスクエリアにカーソルを合わせ、[SEL] ボタンを押します。

→設定したエリアは灰色で表示されます。

メモ

- 検出エリア以外では、検出は行いません。
- 設定したエリアを解除する場合は、解除したいエリアにカーソルを合わせて [SEL] ボタンを押します。
検出エリアをすべて解除する場合は、[◀] ボタンと [▶] ボタンを同時に1秒以上押します。

STEP3

必要なエリアの設定が終了したら、[MENU] ボタンを押します。

→メニュー画面に戻ります。

⑦輝度検出重み付けを設定する [PEAK/AVE LEVEL]

カーソルを「PEAK/AVE」に合わせ、[<] ボタンまたは [D] ボタンを押して検出レベルを調整します。値を「0 (PEAK)」側に動かすとピーク値 (最大値) が検出されます。「8 (AVERAGE)」側に動かすと平均値が検出されます。

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PF1 LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | --- | --- |
| BINNING | LINE MIX | --- | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | --- | --- |
| AREA SELECTION | ALL | --- | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | --- | --- |
| HEAD GAIN | -6dB | --- | --- |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

⑧ヘッドゲインを設定する [HEAD GAIN]

ヘッドゲインは-9dB、-6dB、-3dB、OFF (0dB)、+3dB、+6dB、+9dBから選択します。

| | | | |
|--|----------|-------|--------------|
| PF1 LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| AE | *AUTO | LEVEL | 32[0* 63] |
| SHUTTER | AUTO | --- | --- |
| BINNING | LINE MIX | --- | --- |
| GAIN | *AUTO | LEVEL | 12dB[3* 12] |
| LONG EXPOSURE | OFF | --- | --- |
| AREA SELECTION | ALL | --- | --- |
| PEAK/AVE LEVEL | 8[0*8] | --- | --- |
| HEAD GAIN | -6dB | --- | --- |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

PICTUREを設定する

⑨ホワイトバランスを設定する [WHITE BAL MODE]

ホワイトバランスの調整方法は以下から設定できます。

- AWC (初期設定) : 自動ホワイトバランスコントロールに設定します。光源が変化しない場所での撮影に適しています。
「AWC」に設定した場合、ホワイトバランスを調整するための操作を行う必要があります。
- MANUAL : ホワイトバランスを手動で調整します。

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------|
| PF1 LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | | | |
| WHITE BAL MODE | *AWC | R-GAIN | 128[0*255] |
| | | B-GAIN | 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP | LEVEL | 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] | --- | --- |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] | --- | --- |
| FLARE COMP | OFF | --- | --- |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] | --- | --- |
| COLOR MATRIX | *USER | --- | --- |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | | | |

SETUPメニューから設定する（つづき）

「AWC」に設定した場合は、以下の手順に従って、ホワイトバランスを調整します。

STEP1

白い被写体にカメラを向けます。利用する光源環境下で白い被写体を撮像します。

STEP2

前面の「AWC」ボタンを押します。
→AWCが起動し、AWC状態ランプが点滅します。
保存先と「AWC OK」が表示され、ランプが消灯すると調整が完了します。

メモ

- AWCプロファイルごとに設定できます。（[P.305](#)ページ）
- 「AWC NG」と表示され、ランプが点灯したままの場合や、プロファイルを切り換えたときにランプが点灯する場合は、再度、STEP1、2を行ってください。
- 「MANUAL」の「R-GAIN」または「B-GAIN」の設定値を初期値（128）以外に設定した状態で、AWCを行うとホワイトバランスが取れないことがあります。

「MANUAL」に設定した場合は、「R-GAIN」または「B-GAIN」にカーソルを合わせ、[◀] ボタンまたは [▶] ボタンを押してホワイトバランスを調整します。

⑩ディテールを設定する [DETAIL BAND]

輪郭補正の帯域とレベルを設定します。

| | |
|--|--------------------------------|
| PFI LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT | |
| WHITE BAL MODE | *AWC R-GAIN 128[0*255] |
| | B-GAIN 128[0*255] |
| DETAIL BAND | *MEDIUM SHARP LEVEL 16[0* 31] |
| DNR LEVEL | 5[0* 10] |
| PEDESTAL LEVEL | 76[68* 95] |
| FLARE COMP | OFF |
| COLOR LEVEL | 160[0*255] |
| COLOR MATRIX | *USER |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

STEP1

「DETAIL BAND」にカーソルを合わせて、帯域のパターンを「OFF」「SOFT」「MEDIUM SHARP」「SHARP」「SHARPEST」から選択します。
「SHARPEST」方向に動かすと輪郭が太く（帯域が低く）、「SOFT」方向に動かすと輪郭が細く（帯域が高くなる）ります。

STEP2

「DETAIL LEVEL」にカーソルを合わせて、強度レベルを調整します。
値を増加するとシャープな映像に、値を減少するとソフトな映像になります。

メモ

- 被写体輪郭にジャギーが発生する場合がありますが、異常ではありません。気になる場合は、「DETAIL BAND」または「DETAIL LEVEL」を下げるなどして、画質を調整してください。

⑪ デジタルノイズリダクション機能を設定する [DNR LEVEL]

デジタルノイズリダクション機能を設定すると、ノイズを低減します。[◀] または [▶] ボタンでノイズリダクション効果のレベル調整します。

⑫ ペDESTALレベルを調整する [PEDESTAL LEVEL]

ウェーブフォームモニターまたはカラービデオモニターを確認しながら、[◀] ボタンまたは [▶] ボタンを押してペDESTALレベル（黒の信号レベル）を調整します。
値を増加すると明るい映像になり、値を減少すると暗い映像になります。

⑬ フレア補正を設定する [FLARE COMP]

フレア補正を行うかどうかを「ON」または「OFF」（初期設定）で設定します。
「ON」に設定すると、フレアを抑制します。

⑭ 色のレベルを調整する [COLOR LEVEL]

ベクトルスコープまたはカラービデオモニターを確認しながら、[◀] ボタンまたは [▶] ボタンを押して色のレベルを調整します。
値を増加すると彩度が高くなり、値を減少すると彩度が低くなります。

⑮ 色合いを調整する [COLOR MATRIX]

ベクトルスコープまたはカラービデオモニターを確認しながら、色合いを調整します。

```
PF1 LABEL: ***** ID: PANA DEFAULT
WHITE BAL MODE *ANC      R-GAIN 128[ 0*255]
                   B-GAIN 128[ 0*255]
DETAIL BAND     *MEDIUM SHARP LEVEL 16[ 0* 31]
DNR LEVEL       5[ 0* 10]
PEDESTAL LEVEL  76[68* 95]
FLARE COMP      OFF
COLOR LEVEL     160[ 0*255]
COLOR MATRIX    *USER
[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

```
** MATRIX ** USER
                   AFTER (BEFORE)
B PHASE  ....|....  0 ( 0 )
B GAIN   ....|....  0 ( 0 )
USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET(NEW SETTING)
```

```
** MATRIX ** USER
                   AFTER (BEFORE)
B/B-Mg PHASE ....|....  0 ( 0 )
B PHASE       ....|....  0 ( 0 )
B-Mg PHASE    ....|....  0 ( 0 )
B/B-Mg GAIN   ....|....  0 ( 0 )
B GAIN        ....|....  0 ( 0 )
B-Mg GAIN     ....|....  0 ( 0 )
USER AREA *
EFFECT SELECT AFTER
CANCEL SET(NEW SETTING)
```

SETUPメニューから設定する (つづき)

STEP1

調整したい色を画面中心にできるだけ大きく表示します。

STEP2

調整したい色に近い軸を選択します。軸は以下から選択できます。

USER (初期設定)、B-Mg、Mg、Mg-R、R、R-Ye、Ye、Ye-G、G、G-Cy、Cy、Cy-B、B


STEP3

軸を選択したら [SEL] ボタンを押します。
→ 「MATRIX」画面が表示されます。

色の軸がわからないときは

「MATRIX」画面で「USER AREA」を選択した場合は、画面内の色を選択して軸を自動的に表示できます。色の選択は、色の検出画面で行います。色の検出画面では、調整したい色を選択するための黒い□カーソルが点滅表示します。


色の検出画面

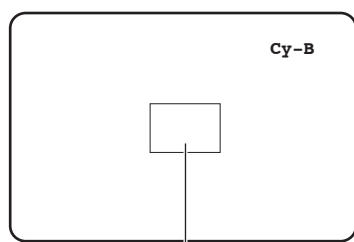

□カーソル(点滅表示)

<色マトリクス分割エリアの図>

※調整時、もっとも近い軸を表示するための目安です。

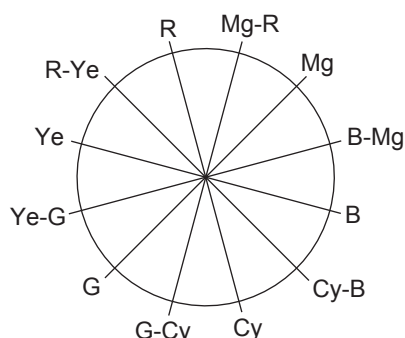

STEP1

色を検出する被写体の中心にカメラを向けます。カメラを動かすことができない場合は、[△] / [▽] / [◀] / [▶] ボタンを押して調整したい色のあるエリアに□カーソルを合わせます。

メモ

- ブルーボリュームを左に回すと□カーソルの大きさが大→中→小の順番で変わります。被写体と同じようなサイズになるように合わせてください。

STEP2

[SEL] ボタンまたは [MENU] ボタンを押します。
→ 「MATRIX」画面に戻ります。

STEP4

微調整を行う場合は、[◀] ボタンまたは [▶] ボタンを押して「PHASE」(色合い) と「GAIN」(彩度) を調整します。

STEP5


「EFFECT SELECT」で「BEFORE」または「AFTER」を選択して、調整前後の効果を確認します。決定する場合は、「SET(NEW SETTING)」を選択して [SEL] ボタンを押します。

調整前に戻す場合は、「CANCEL」を選択して、[SEL] ボタンを押します。

STEP3

微調整を行う場合は、「PHASE」(色合い) と「GAIN」(彩度) を調整します。

右の画面例では、「Cy/Cy-B」の「PHASE」または「GAIN」を調整すると、色マトリクス分割エリアの図上で隣接した軸「Cy」と「Cy-B」の「PHASE」または「GAIN」も同時に調整されます。

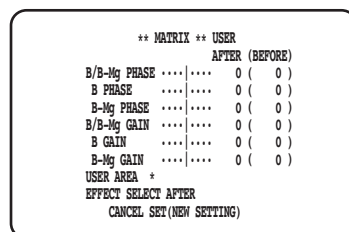

メモ

- 色マトリクスエリアの図に示す軸上の色が検出された場合は、隣接した軸は表示されません。

CONTRASTを設定する

⑯ガンマ補正モードを設定する [GAMMA SELECT]

ガンマのモードは、以下から設定できます。

- S-CURVE（初期設定）：ガンマ特性を強調することで、コントラストを強調しながらノイズを抑えます。
- NORMAL：一般的なガンマ特性です。

| | |
|--|------------------|
| PFI LABEL: ***** | ID: PANA_DEFAULT |
| GAMMA SELECT | S-CURVE |
| GAMMA VALUE | 0.45[0.35*0.55] |
| KNEE MODE | MANUAL |
| KNEE POINT | 8[0*15] |
| KNEE SLOPE | 3[0*7] |
| IE FUNCTION SELECT HDR | |
| LEVEL | 80[0*255] |
| [EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD] | |

⑰ガンマ補正レベルを設定する [GAMMA VALUE]

ウェーブフォームモニターまたはカラービデオモニターを確認しながら、ガンマ補正レベルを設定します。

0.35～0.45（初期設定）～0.55の間で、ガンマ補正レベルを設定します。

ガンマ補正レベルが0.55のとき、さらに [▷] ボタンを押すとガンマ補正がOFF（ガンマ=1）になります。

⑱ニーモードを設定する [KNEE MODE]

照明や被写体の反射などにより、明るい部分がつぶれて見える「白トビ」が発生する場合があります。これは、輝度信号がカメラのダイナミックレンジを越えるために起こる現象です。この高輝度入力信号をカメラのダイナミックレンジの範囲内に収めるために、ニー機能を使用して階調を圧縮します。

調整方法は以下から選択します。

- MANUAL（初期設定）：ニーポイントとニースローブを手動で調整します。
- AUTO：ニーポイントとニースローブは自動的に調整されます。

⑲ニーポイントを設定する [KNEE POINT]

ウェーブフォームモニターまたはカラービデオモニターを確認しながら、ニーポイントの調整を行います。ニーポイントで、高輝度入力信号のどのレベルから圧縮するかを調整します。

⑳ニースローブを設定する [KNEE SLOPE]

ウェーブフォームモニターまたはカラービデオモニターを確認しながら、ニースローブの調整を行います。ニースローブで、高輝度入力信号をどの程度圧縮するかを調整します。

②① [IE] ボタンを設定する [IE FUNCTION SELECT]

[IE] ボタン（IMAGE ENHANCEMENT）に割り当てる機能を以下から1つ選択します。

- | | |
|-------------------------|---|
| WDR | : ダイナミックレンジ拡張機能により、白とびを抑えながら、暗部を明るく補正します。 |
| DARK AREA CORRECTION | : 暗部補正機能により、暗部を明るく補正します。 |
| OVER EXPOSURE REDUCTION | : 露光補正機能により、白とびを抑えます。 |
| SMOKE CORRECTION | : 煙補正機能により、煙による白もやをクリアに補正します。 |
| COLOR ENHANCEMENT | : 色強調機能により、選択した色を強調します。 |

```
PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT      S-CURVE
GAMMA VALUE       0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE         MANUAL
KNEE POINT        8[0*15]
KNEE SLOPE        3[0*7]

IE FUNCTION SELECT  WDR
LEVEL              80[0*255]

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

②② [IE] ボタンに割り当てた機能の補正レベルを設定する [IE FUNCTION LEVEL]

ベクトルスコープまたはカラービデオモニターを確認しながら、[◀] ボタンまたは [▶] ボタンを押して、「IE FUNCTION SELECT」で選択した機能の補正レベルを調整します。

値を増加すると補正量が高くなり、値を減少すると補正量が低くなります。

「COLOR ENHANCEMENT」を選択した場合は、補正レベルの他に、RED、RED&YELLOW、YELLOWから強調する色を選択します。

```
PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
GAMMA SELECT      S-CURVE
GAMMA VALUE       0.45[0.35*0.55]
KNEE MODE         MANUAL
KNEE POINT        8[0*15]
KNEE SLOPE        3[0*7]

IE FUNCTION SELECT  WDR
LEVEL              80[0*255]

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

PROFILEを設定する

②③ USER PROFILE IDとLABELを設定する [USER PROFILE ID] [USER PROFILE LABEL]

USER PROFILE IDとLABELを設定します。カメラの設置場所や撮影内容などを表すIDとLABELを英数字・記号で作成し、画面上に表示します。IDとLABELは最大16文字まで設定できます。

以下の手順に従って、IDとLABELを設定します。



STEP1

[USER PROFILE ID] または [USER PROFILE LABEL] を「*ON」に設定し[SEL] ボタンを押します。
→タイトル作成画面が表示されます。

重要

- [USER PROFILE ID] または [USER PROFILE LABEL] が「*OFF」の場合、「USER PROFILE」を設定できませんが、表示されません。

メモ

- [USER PROFILE ID] の「*POSI」設定は、「USER PROFILE LABEL」が「*OFF」の場合のみ有効になります。
「USER PROFILE LABEL」が「*ON」の場合は、「USER PROFILE LABEL」の「*POSI」設定が優先されます。
- 初期設定は「PROFILE5」は「FLUORESCENCE3」、
「PROFILE6」は「FLUORESCENCE1」です。

STEP2

[△] / [▽] / [◀] / [▶] ボタンを押して表示したい文字にカーソルを合わせ、[SEL] ボタンを押します。
→入力した文字が入力領域に表示されます。

<文字入力について>

- 文字を修正したいときは、「←」または「→」にカーソルを合わせて [SEL] ボタンを押します。カーソルを入力領域の修正したい文字に合わせてから文字を再入力します。
- 空白スペースを挿入したいときは、「SPACE」にカーソルを合わせて [SEL] ボタンを押します。
- 入力した文字をすべて消去したいときは、「RESET」にカーソルを合わせて [SEL] ボタンを押します。

STEP3

タイトルを入力したら「*POSI」にカーソルを合わせて [SEL] ボタンを押します。
→表示位置設定画面が表示され、入力したカメラタイトルが点滅表示されます。

STEP4

[△] / [▽] / [◀] / [▶] ボタンを押してタイトルを表示する位置を決め、[MENU] ボタンを押します。
→表示位置が決定し、タイトル作成画面に戻ります。

②④ 蛍光撮像モード時の補助設定を行う [FLUORESCENCE MODE]

各種蛍光撮像モード時の補助設定ができます。

補助設定は以下から選択できます。

- OFF（初期設定）： 蛍光撮像用の補助設定を行いません。
- MODE1： 蛍光撮像 1 用の補助設定を行います。
- MODE2： 蛍光撮像 2 用の補助設定を行います。
- MODE3： 蛍光撮像 3 用の補助設定を行います。

```
PFI LABEL: ***** ID: PANA_DEFAULT
USER PROFILE
USER PROFILE ID  *OFF
USER PROFILE LABEL *OFF

FLUORESCENCE MODE  OFF

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

```
** MODE1 **
MONOCHROME MODE  ON
```

重要

- 蛍光撮像用の設定は、PROFILE 5および6にプリセットされています。
- 蛍光撮像モードを利用する場合は、光源やフィルタなどの周辺環境が必要です。
- 利用を検討される場合は、お買い求め先へご相談ください。

メモ

- 「MODE1」に設定した場合、「MONOCHROME MODE」で「ON」（白黒モード:初期設定）または「OFF」（カラーモード）を選択します。
- 「OFF」以外を設定した場合、「GAIN」を18dBまで設定することが可能です。（「OFF」の場合は12dBまで。）

FUNCを設定する

②⑤ 上下左右反転機能を設定する [FLIP AND MIRROR]

上下左右反転機能は以下から設定できます。

- OFF（初期設定）： 通常の表示にします。
- FLIP： 上下を反転表示します。
- MIRROR： 左右を反転表示します。
- FLIP+MIRROR： 上下左右を反転表示します。切り換えは [△] [▽] ボタンで行います。

```
FLIP AND MIRROR      OFF
F+M STATUS DISPLAY  OFF
COLOR BAR            *ON
FOOTSM CONTROL CH1  PROFILE1→2
FOOTSM CONTROL CH2  FREEZE
USER PROFILE SAVE/LOAD *USB-CAMERA(ALL)
SAVE/LOAD MODE(USB)  AUTO
DIGITAL ZOOM         ON
DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY  OFF

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]
```

メモ

- FREEZE機能とあわせて使うことができます。

②⑥ 上下左右反転状態の表示機能を設定する [F+M STATUS DISPLAY]

[△] ボタンまたは [▽] ボタンを押したとき、「B」(上下反転)、「R」(左右反転)、「B」(上下左右反転)の文字を画面に表示するかどうかを「ON」または「OFF」(初期設定)で設定します。

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOOTSW CONTROL CH1 | PROFILE1↔2 |
| FOOTSW CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

(EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD)

②⑦ カラーバーを表示する [COLOR BAR]

カラーバーを表示します。

[MENU] ボタンを押すと、トップ画面に戻ります。

メモ

- CCUにカメラヘッドが接続されていない場合は、カラーバーを表示します。

②⑧ フットスイッチを設定する [FOOTSW CONTROL CH1/CH2]

フットスイッチのCH1/CH2に割り当てる機能はそれぞれ以下から設定できます。

| | |
|----------------|---|
| NONE | : スイッチを無効にします。 |
| FREEZE | : 画面フリーズのON/OFFを行います。 |
| FLIP+MIRROR | : 上下左右反転のON/OFFを行います。 |
| FLIP | : 上下反転のON/OFFを行います。 |
| MIRROR | : 左右反転のON/OFFを行います。 |
| PROFILE 1↔2 | : プロファイルの1と2を切り換えます。 |
| PROFILE 1↔5 | : プロファイルの1と5を切り換えます。 |
| PROFILE 1↔6 | : プロファイルの1と6を切り換えます。 |
| PROFILE 3↔4 | : プロファイルの3と4を切り換えます。 |
| PROFILE ALL | : すべてのプロファイルを1～6の順番で切り換えます。 |
| ZOOM IN | : 「DIGITAL ZOOM」が「ON (ENABLE)」の場合、画像を拡大します。 |
| ZOOM OUT | : 「DIGITAL ZOOM」が「ON (ENABLE)」の場合、画像を縮小します。 |
| ZOOM 1.0x↔2.0x | : 「DIGITAL ZOOM」が「ON (ENABLE)」の場合、1倍と2倍で切り換えます。 |

メモ

- SETUPメニュー表示中は、フットスイッチの動作は無効になります。

②⑨ プロファイルの保存/読み出しを実行する [USER PROFILE SAVE/LOAD]

USBメモリーを挿入して、プロファイルの保存（CAMERA→USB）、または、読み出し（USB→CAMERA）を行います。

6つのプロファイルすべてを保存または読み出す場合は「ALL」を、選択中の1つのプロファイルを保存または読み出す場合は「SINGLE」を選択してください。

プロファイルをUSBに保存する際に作成されるフォルダおよびファイルの名前は変更しないでください。名前を変更するとプロファイルを読み出せなくなります。「SAVE」および「LOAD」後は、自動的にUSBをアンマウントします。続けてUSB操作をする場合は、USBメモリーを抜き差ししてマウントしてください。

重要

- 「SAVE」で生成されるファイルおよびフォルダ構成を編集しないでください。正しく読み出せなくなる場合があります。

③⑩ USBメモリーの保存/読み出し方法を設定する [SAVE/LOAD MODE (USB)]

USBメモリーを挿入した時の動作モードは以下から設定できます。

- AUTO : USBメモリーを挿入すると、「保存、読み出し、何もしない」の選択画面が自動的に表示されます。
MANUAL : USBメモリーを挿入しても何も動作しません。「USER PROFILE SAVE/LOAD」から操作します。

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FLIP AND MIRROR | OFF |
| F+M STATUS DISPLAY | OFF |
| COLOR BAR | *ON |
| FOCUS CONTROL CH1 | PROFILE1→2 |
| FOCUS CONTROL CH2 | FREEZE |
| USER PROFILE SAVE/LOAD | *USB-CAMERA(ALL) |
| SAVE/LOAD MODE(USB) | AUTO |
| DIGITAL ZOOM | ON |
| DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY | OFF |

[EXPOSURE PICTURE CONTRAST PROFILE FUNC SYSTEM HEAD]

メモ

- 「QUICK MENU」のすべての項目と「ADVANCE MENU」の「EXPOSURE」、「PICTURE」、「CONTRAST」、「PROFILE」も設定内容をSAVE/LOADします。（「EXPOSURE」の「HEAD GAIN」を除く）

③⑪ ズームを設定する [DIGITAL ZOOM]

ズーム機能のON (ENABLE) / OFF (DISABLE) を設定します。

倍率はx1 ~ x2.5の間でx0.1単位で設定できます。切り換えは [◀] [▶] ボタンで行います。

③②ズーム倍率表示を設定する [DIGITAL ZOOM STATUS DISPLAY]

現状のズーム倍率を画面に表示するかどうかをON / OFF（初期設定）で設定します。

メモ

倍率が1倍の場合、画面に倍率を表示しません。

SYSTEMを設定する

③③映像出力のOSD表示位置を設定する [OSD POSITION]

映像出力のOSD表示位置は以下から設定できます。

- UPPER LEFT : 映像出力画角の左上のエリアにOSDを表示します。
- UPPER RIGHT : 映像出力画角の右上のエリアにOSDを表示します。
- LOWER LEFT : 映像出力画角の左下のエリアにOSDを表示します。
- LOWER RIGHT : 映像出力画角の右下のエリアにOSDを表示します。

③④HDMI出力信号を設定する [HDMI1 COLOR DEPTH] [HDMI2 COLOR DEPTH]

HDMI出力端子の出力信号を設定します。

HDMI出力が1080pまたは1080iのときは、次の設定ができます。

YPbPr (422)、YPbPr (444)、RGB (LIMITED)、RGB (FULL)

HDMI出力信号の設定を変更したり、映像フォーマットを変更すると、HDMI出力の映像が数秒程度途切れます。

③⑤同期信号入出力端子の入出力を設定する [G/L SYNC TERMINAL SETTING]

「IN」、「OUT」（初期設定）から選択します。



重要

- 外部同期機能は本機同士の接続を想定しています。

同期信号入出力端子には、GP-UH332Cまたは、GP-UH532Cを接続して、マスター側を「OUT」、スレーブ側を「IN」に設定の上、同じ映像出力フォーマットに設定して使用してください。

③⑥同期状態を表示する [G/L SYNC STATUS INFO]

内部同期をあらわす「INTERNAL」と、外部同期をあらわす「*EXTERNAL」を表示します。
「*EXTERNAL」時は、水平位相調整が可能です。

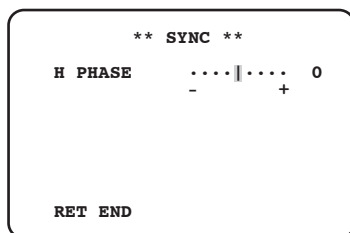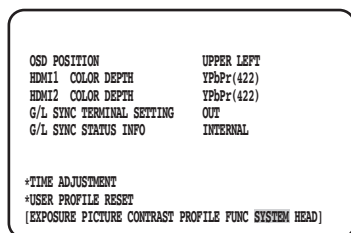

水平位相調整方法

STEP1

「*EXTERNAL」にカーソルを合わせて [SEL] ボタンを押します。

STEP2

[H PHASE] を調整します。

メモ

- 「*EXTERNAL」は、[G/L SYNC TERMINAL SETTING] の設定が [IN] で、外部同期信号が入力されている場合に表示されます。それ以外は、[INTERNAL] が表示されます。
- [H PHASE]（外部同期時の水平位相）の調整画面を閉じる際に、HDMIの出力映像が約5秒間乱れることがあります。

③⑦時計を合わせる [TIME ADJUSTMENT]

現在の「月/日/年 時/分」を設定してください。

設定を反映するには、カーソルを「SET」に移動して、[SEL] ボタンを押してください。

プロファイルのUSBメモリー保存機能を使用する際は、必ず時計を合わせてください。

③⑧ プロファイル設定を初期設定に戻す [USER PROFILE RESET]

「QUICK MENU」のすべての項目と、「ADVANCED MENU」の「EXPOSURE」、「PICTURE」、「CONTRAST」、「PROFILE」の設定内容を初期設定に戻します。

STEP1

「USER PROFILE RESET」にカーソルを合わせて
[SEL] ボタンを押します。

STEP2

「USER PROFILE RESET? YES/NO」の確認メッセージが表示されます。
「YES」を選択すると、プロファイル設定を初期設定に戻します。

メモ


- 「EXPOSURE」の「HEAD GAIN」は初期化されません。

HEADを設定する

③⑨ ホワイトシェーディングを設定する [WHITE SHADING]

ホワイトシェーディングを「AUTO(SET)」、「MANUAL」のいずれかの方法で設定します。

ホワイトシェーディングを「AUTO(SET)」に設定する場合

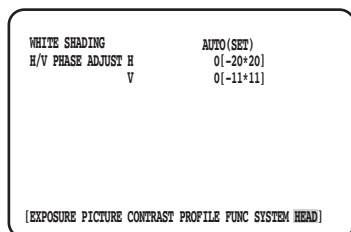

STEP1

白い被写体にカメラを向けます。

STEP2

「AUTO(SET)」を選択して、[SEL] ボタンを押します。
→ ホワイトシェーディングが起動し、「AUTO(SET)」表示が反転と点滅を繰り返します。
MENUの最下部に「WHITE SHADING OK」と表示されたら自動調整は完了です。

メモ

- WHITE SHADINGはカメラヘッドごとに設定します。
- 「WHITE SHADING NG」と表示された場合は、再度、STEP1、2を行ってください。

SETUPメニューから設定する（つづき）

ホワイトシェーディングを「MANUAL」に設定する場合

STEP1

「MANUAL」を選択して、[SEL] ボタンを押します。

→ ホワイトシェーディングの手動設定画面が表示されます。

ホワイトシェーディングの赤／青成分の上／下／左／右方向を調整します。

④0 画面の水平垂直位置を調整する [H/V PHASE ADJUST]

画面位相を水平（左右）および垂直（上下）方向に調整します。

メモ

- 「H/V PHASE ADJUST」はカメラヘッドごとに設定できます。
-

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で現象を確かめてください。

これらの対策をしても直らないときやわからないとき、この表以外の現象が起きたときまたは工事に関係する内容のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

| 現象 | 原因・対策 | 参照ページ |
|--|---|---------|
| 映像が表示されない | ●HDMI出力端子またはSDI出力端子にそれぞれケーブルが正しく接続されていますか？ 正しく接続されているか確認してください。 | 293、294 |
| | ●各出力端子の映像出力信号フォーマットとモニターの表示可能な映像フォーマットは合致していますか？ 映像出力信号フォーマットと映像フォーマットを確認してください。 | 294、324 |
| | ●モニター輝度の調整、コントラスト調整は正しくされていますか？ モニターを確認してください。 | — |
| | ●機能設定スイッチを初期設定（1：ON/2：ON/3：ON/4：OFF/5：OFF/6：OFF）にして確認してください。 | 294 |
| [PROFILE] ボタンを押してもランプ点灯表示が切り換わらない | ●1度目は状態を表示します。 設定したい表示になるまで [PROFILE] ボタンを押してください。 | 292 |
| AE状態ランプ点灯表示が切り換わらない | ●1度目は状態を表示します。 設定したい表示になるまで [AE] ボタンを押してください。 | 293 |
| IE状態ランプ点灯表示が切り換わらない | ●1度目は状態を表示します。 設定したい表示になるまで [IE] ボタンを押してください。 | 292 |
| カラーバーしか表示されない | ●カメラケーブルのCCU側接続端子と、カメラヘッド側接続端子の両方が正しく接続されていますか？ 正しく接続されているか確認してください。 | 291、293 |
| メニューで色合い「COLOR MATRIX」を調整できない | ●カメラケーブルのCCU側接続端子と、カメラヘッド側接続端子の両方が正しく接続されていますか？ 画質調整を行う場合はカメラヘッドとカメラケーブルが接続されている必要があります。 正しく接続されているか確認してください。 | 291、293 |
| 画面全体がぼやける | ●レンズの絞りは正しく調整されていますか？ 調整されているか確認してください。 レンズは推奨のF値以上のレンズおよび3CCD用レンズを使用してください。 | 298 |
| 輪郭が複数見える | ●「DETAIL BAND」の設定を変更してみてください。 | 310 |
| | ●モニターの接続ケーブルを変えてみてください。 | — |
| AWCがOKにならない | ●画面が明るすぎる場合は、レンズの絞りを絞るかまたは「AE」を「AUTO」に設定してください。 | 298、305 |
| 映像の左右に黒帯部分がある | ●モニター側の仕様に依存します。 モニター側で、ワイドでフル画面表示を行う設定にしてください。 | — |
| 映像が縦長に見える | ●本機は16：9の画面を前提として出力しています。 モニター側で、ワイド画面表示を行う設定にしてください。 | — |
| モニターから音が出ない | ●音声には対応していません。 | — |
| 「FAN STOPPED」のメッセージが表示される | ●ファンが停止しています。 直ちに電源を切って使用を中止し、必ず販売店または施行業者にファンの交換を依頼してください。 | 326 |
| 「Unsupported Camera Head」のメッセージが表示される。 | ●サポート外のカメラヘッドが接続されています。 お買い上げの販売店にご相談ください。 | 325 |

仕様

| | | |
|-----------|---|---|
| 電源 | DC12 V±10 % | |
| 消費電力 | 12 V 3.4 A (カメラヘッド含む) | |
| 光学系 | マイクロプリズム光学系 | |
| 撮像素子 | 1 / 3型 MOS 3板式 | |
| 映像出力 | HDMI出力 | HDMI端子×2 |
| | SDI出力 | BNC端子×5 |
| 映像フォーマット | HDMI出力 | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/50p、1080/50i |
| | SDI出力 | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/50p、1080/50i |
| 標準照度 | 2000 lx (3200 K、F16、LINE MIX時) | |
| S / N | 54 dB (1080i出力時) | |
| 水平解像度 | 1000TV本typ. (画面中心、1080p出力時) | |
| カラーバー | SMPTEカラーバー (0 %セットアップ、59.94 Hz時) / フルカラーバー (50 Hz時) | |
| 機能 | AE、ゲイン、電子シャッター、長秒露光、ヘッドゲイン、ビニング、ホワイトバランス、ニー、ディテール、ガンマ切替、DNR設定、IE機能 (WDR、暗部補正、露光補正、煙補正、色強調)、ペDESTAL設定、フレア補正、色レベル調整、色合い調整、蛍光撮像プロファイル、フリーズ、フリップ、ミラー、ステータス表示、カラーバー出力、デジタルズーム、フットスイッチ設定、プロファイル設定、HDMI出力切替、外部同期、時刻設定、ホワイトシェーディング補正、水平垂直位相調整 | |
| フットスイッチ | φ3.5 ステレオミニジャック | |
| 外部制御 | φ3.5 ステレオミニジャック (3極シリアルRS232C信号レベル準拠) | |
| 使用温度範囲 | 0 °C ~ 40 °C | |
| 使用湿度範囲 | 30 % ~ 90 % | |
| 使用大気圧範囲 | 700 hPa ~ 1060 hPa | |
| 保管輸送温度範囲 | -10 °C ~ +60 °C | |
| 保管輸送湿度範囲 | 10 % ~ 90 % | |
| 保管輸送大気圧範囲 | 700 hPa ~ 1060 hPa | |
| 寸法 | | |
| GP-UH332C | 幅 185 mm 高さ 57 mm 奥行き 270 mm (ゴム脚、突起部を除く) | |
| GP-UH332H | 幅 27 mm 高さ 30 mm 奥行き 42.5 mm (三脚取付座、突起部を除く) | |
| 質量 | | |
| GP-UH332C | 約2 kg | |
| GP-UH332H | 約65 g | |
| 仕上げ | セイルホワイト色塗装 | |

●別売品

3MOS HDカメラヘッド

: GP-UH332H

UHDカメラケーブル

: GP-UC532G03 (3 m)

GP-UC532G06 (6 m)

GP-UC532G15 (15 m)

GP-UC532G03A (3 m) (近日発売 (2017年8月現在))

GP-UC532G06A (6 m) (近日発売 (2017年8月現在))

GP-UC532G15A (15 m) (近日発売 (2017年8月現在))

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

| | |
|--------|-------------------|
| 販売店名 | |
| 電 話 | () - |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |

修理を依頼されるときは

「故障かな!？」(323ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切り、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

| | |
|--------|-----------------|
| ●製品名 | HDカメラコントロールユニット |
| ●品番 | GP-UH332C |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。

長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか？

- 煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- 電源コード・電源プラグ・ACアダプターが異常に熱い。または割れやキズがある。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても、映像が出てこない。
- ファンから異常な回転音がする。または、ファンの回転が停止している。
- その他の異常・故障がある。




直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り**、必ず販売店または施工業者に**点検**や**撤去**を依頼してください。

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** バ ナ ハ ヨ イ フ 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

For U.S. and Canada:

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Corporation of America
800 Gessner Rd, Suite 700 Houston, TX 77024
<https://www.security.us.panasonic.com/>

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3 Canada
1-877-495-0580
<https://www.panasonic.com/ca/>

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2019

For Europe and other countries:

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany